


INSTALLATION AND CARE INSTRUCTIONS

Synergy[®] Spectrum Air[™]

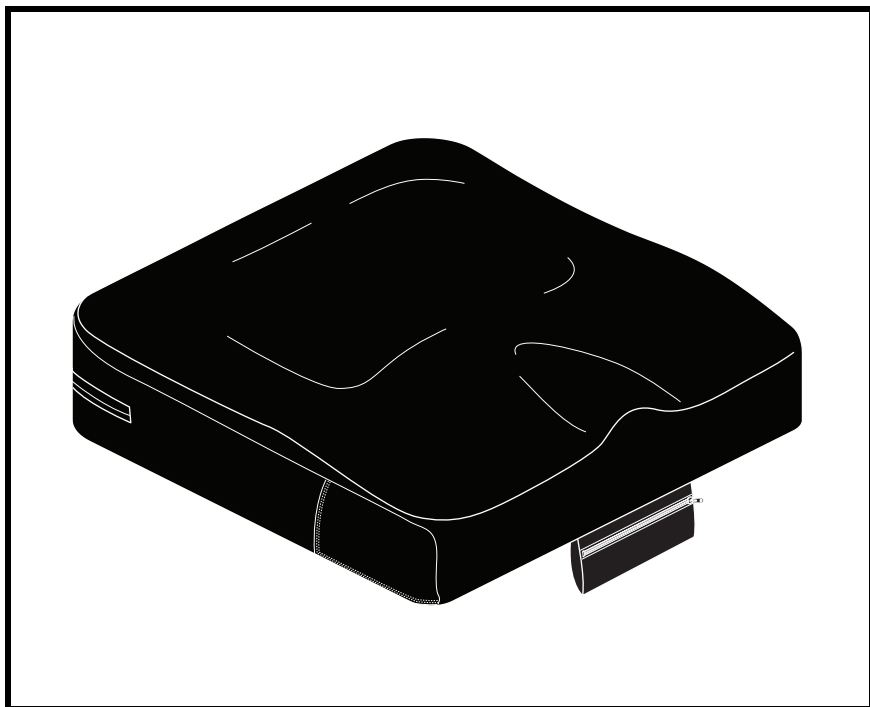

QUANTUM[®]
REHAB

A Division of Pride Mobility Products[®] Corp.



I N F M A N U 3 8 0 5

SAFETY GUIDELINES



WARNING! A Quantum Rehab Provider or a qualified technician must perform the initial setup of this product and must perform all of the instructions in this manual.

The symbols below are used throughout this owner's manual and on the product to identify warnings and important information. It is very important for you to read them and understand them completely.



WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the product, this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.




MANDATORY! These actions should be performed as specified. Failure to perform mandatory actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a white symbol on a blue dot with a white border.



PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle and a red slash.

NOTE: These instructions are compiled from the latest specifications and product information available at the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any changes to our products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product you have purchased. The latest/current version of this manual is available on our website.

NOTE: This product is compliant with WEEE, RoHS, and REACH directives and requirements.

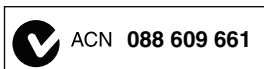

Copyright © 2010
Pride Mobility Products Corporation
INFMANU3805/Rev B/December 2010

TABLE OF CONTENTS

LABEL INFORMATION	4
INTRODUCTION	5
THE SYNERGY SPECTRUM AIR.....	7
INFLATING AND DEFLATING THE AIR INSERT.....	8
CLEANING	9
ASSEMBLING INNER CUSHION COMPONENTS	10
REPOSITIONING THE AIR HOSE.....	13
CARE AND MAINTENANCE	14
WARRANTY.....	15

LABEL INFORMATION

PRODUCT SAFETY SYMBOLS

The symbols below are used on the product to identify warnings, mandatory actions, and prohibited actions. It is very important for you to read and understand them completely.



Read and follow the information in the owner's manual.



Do not expose to heat sources such as open flame or sparks.



No smoking.



Disposal and recycling - Contact your Quantum Rehab Provider for information on proper disposal and recycling of your Pride product and its packaging.



Cover only — Maximum washing temperature 140°F (60°C)



Do not tumble dry.



Do not iron.

INTRODUCTION

WELCOME to Quantum Rehab, a division of Pride Mobility Products (Pride). The product you have purchased combines state-of-the-art components with **safety**, comfort, and styling in mind. We are confident that the design features will provide you with the conveniences you expect during your daily activities. Understanding how to **safely** use and care for this product should bring you years of trouble free operations and service.

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual before attempting to operate your product for the first time. You must also read all instructions, warnings, and notes contained in any supplemental instructional booklets for the controller, front riggings, and/or seating system that accompanied your power chair before initial operation. Your **safety** depends upon you, as well as your provider, caretaker, or healthcare professional in using good judgement.

This manual is to be used in addition to the owner's manual that came with your chair. If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for setup or operation, please contact your Quantum Rehab Provider. **Failure to follow the instructions, warnings, and notes in this manual and those located on your Pride product can result in personal injury and/or product damage and will void Pride's product warranty.**

PURCHASER'S AGREEMENT

By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product or remove or render unusable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; fail, refuse, or neglect to install any retrofit kits from time to time provided by Pride to enhance or preserve the safe use of this product.

INFORMATION EXCHANGE

We want to hear your questions, comments, and suggestions about this manual. We would also like to hear about the safety and reliability of your new Pride product, and about the service you received from your Quantum Rehab Provider. Please notify us of any change of address, so we can keep you apprised of important information about safety, new products, and new options that can increase your ability to use and enjoy your Pride product.

Contact Information

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 Castricum
The Netherlands

NOTE: If you ever lose or misplace your product registration card or your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new one immediately.

THE SYNERGY SPECTRUM AIR

The Synergy Spectrum Air is a cushion system that contains an inflatable air insert and is available in both contour and flat versions. The cushion is labeled to assure proper placement on the chair.



WARNING! Altering the fitting position set by your healthcare professional can lead to pinching, skin abrasions, or bedsores/decupitis ulcers. Maintain the cushion in the prescribed position to ensure safe, comfortable use.

To place the Synergy Spectrum Air on the chair:

1. Locate the “Back Bottom” label on the underside of the cushion.
2. Place the cushion on the seat so that the “Back Bottom” label is located on the back of the seat, label side facing down. The zipper on the cushion will face the rear side of the seat. See figure 1.



WARNING! Extreme temperatures can affect the temperature of your cushion components and may cause skin irritation. Use caution when your power chair has been used or stored in an extremely hot or cold environment.

Do not exceed the weight capacity listed in your mobility product’s owner’s manual or 350 lbs. (158.76 kg), whichever is less.

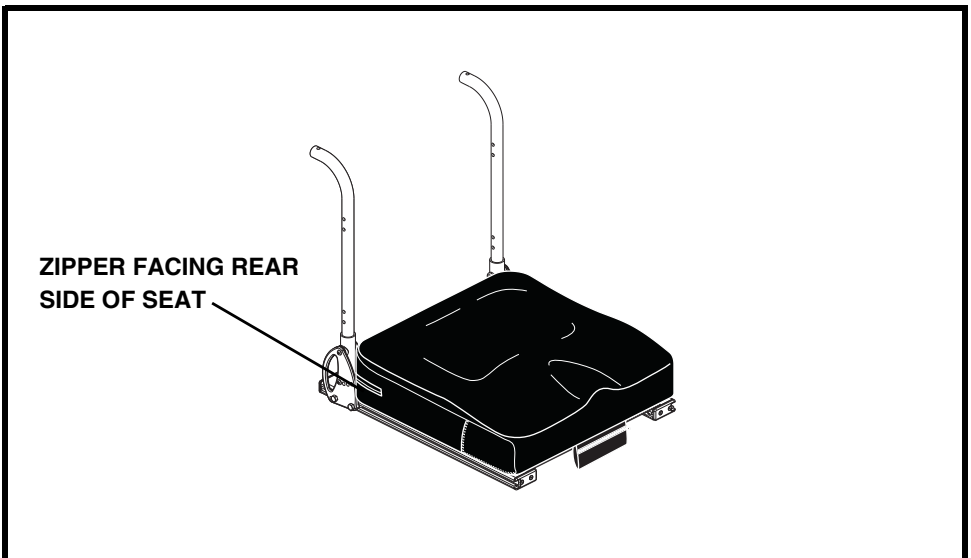


Figure 1. Cushion Placement

INFLATING AND DEFLATING THE AIR INSERT

The Synergy Spectrum Air can be easily inflated and deflated.

To inflate or deflate the cushion:

1. Remove the air pump from the storage bag. See figure 2.
2. Lift the access panel flap to expose the end of the air hose. See figure 2.
3. Press the end of the air pump onto the air hose. See figure 2.

NOTE: *The clear end of the pump is used to inflate the air insert and the black end of the pump is used to deflate the air insert. See figure 2.*

4. Squeeze the air pump until the desired firmness is reached.

NOTE: *If there is no change in inflation after pumping, check to ensure that the pump is completely inserted into the end of the air hose.*

5. Pull the air pump away from the air hose.
6. Cover the air hose by pressing on the access panel flap.
7. Return the air pump to the storage bag.

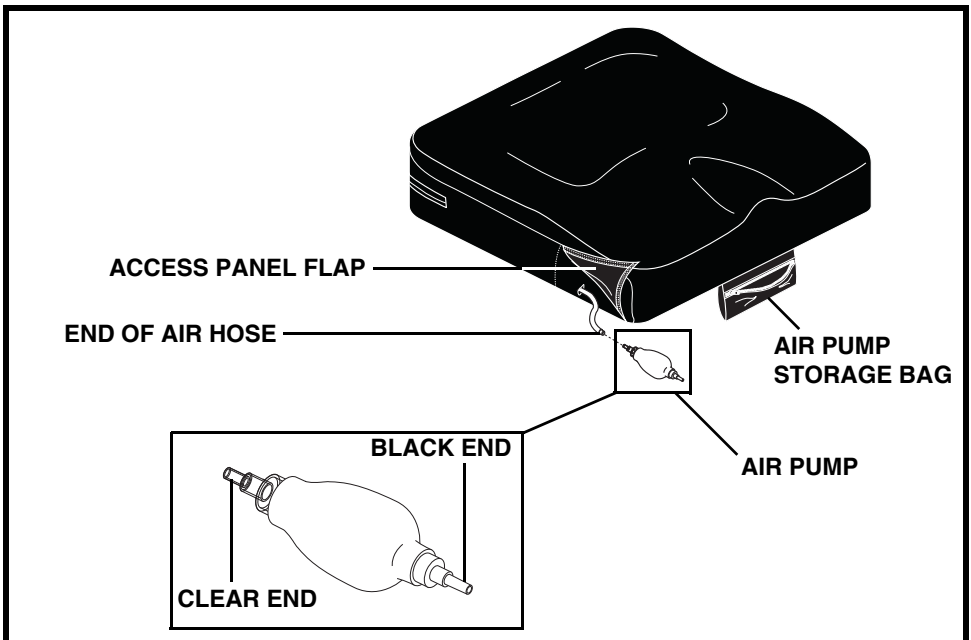


Figure 2. Synergy Spectrum Air

CLEANING

The Synergy Spectrum Air can be easily cleaned.

To clean the Synergy Spectrum Air:

1. Locate the zipper on the rear side of the outer cover.
2. Unzip the outer cover and pull out the assembled inner cushion components. **See figure 3.**
3. Wash the outer cover in a washing machine on the COLD setting.



WARNING! To prevent damage to the seat cover, do not use bleach when cleaning the outer cover.

4. The inner cushion components can be placed in a shower and washed with soap and warm water.
5. Allow the outer cover and inner cushion components to air dry.



WARNING! To prevent shrinking of the outer cover, do not dry it in a clothes dryer.

6. Once the cover and inner cushion components are dry, put the assembled inner cushion components back inside the cover. Zip the cover closed, and place the Synergy Spectrum Air back onto the seat of your chair.

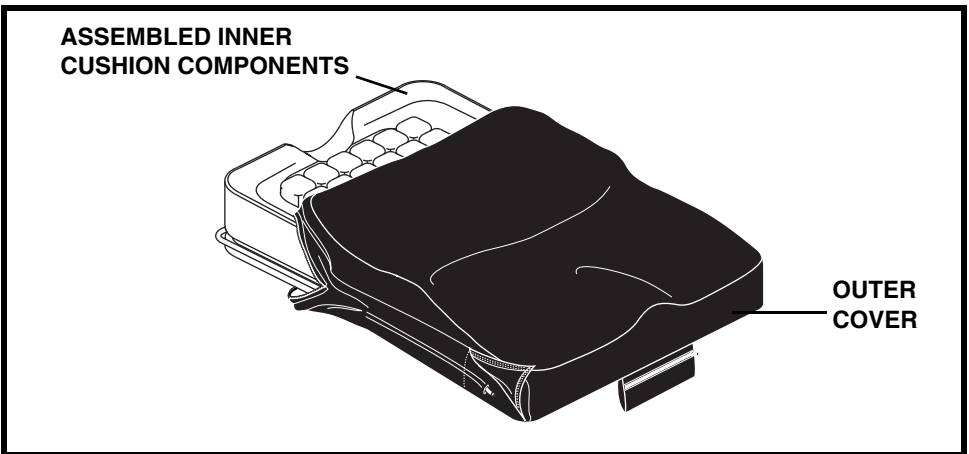


Figure 3. Synergy Spectrum Air

ASSEMBLING INNER CUSHION COMPONENTS

The Synergy Spectrum Air arrives assembled, but will need to be reassembled after cleaning. The contour and flat versions of the cushion are shown in **figures 4 and 5**, respectively.

To assemble the Synergy Spectrum Air:

1. Place the air insert on the seat base taking care to align the hook and loop fasteners on the front of the insert with those on the seat base. **See figure 4 or 5.**
2. Place the Sil-Air foam around the air insert. **See figure 4 or 5.**
3. Route the air hose under the foam and along the cut out in the foam. **See figure 4 or 5.**
4. Lift the access panel flap.
5. Place the assembled cushion into the outer cover with the front of the cushion going into the outer cover first.
6. Insert the air hose through the hole in the outer cover so that the end of the air hose is in the access panel.
7. Close the access panel.
8. Zip the outer cover closed.

NOTE: Pride highly recommends that the Synergy Spectrum Air be assembled and adjusted by your healthcare professional before using your cushion for the first time.

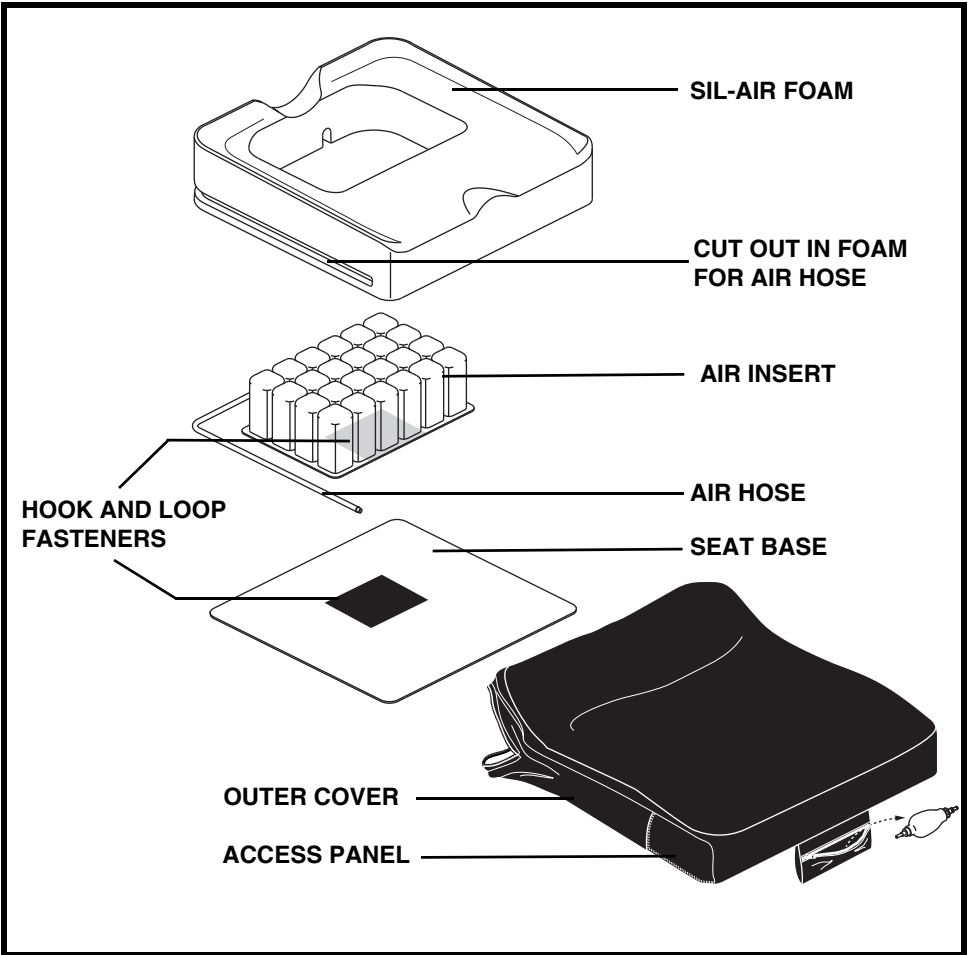


Figure 4. Contour Spectrum Air Cushion Components

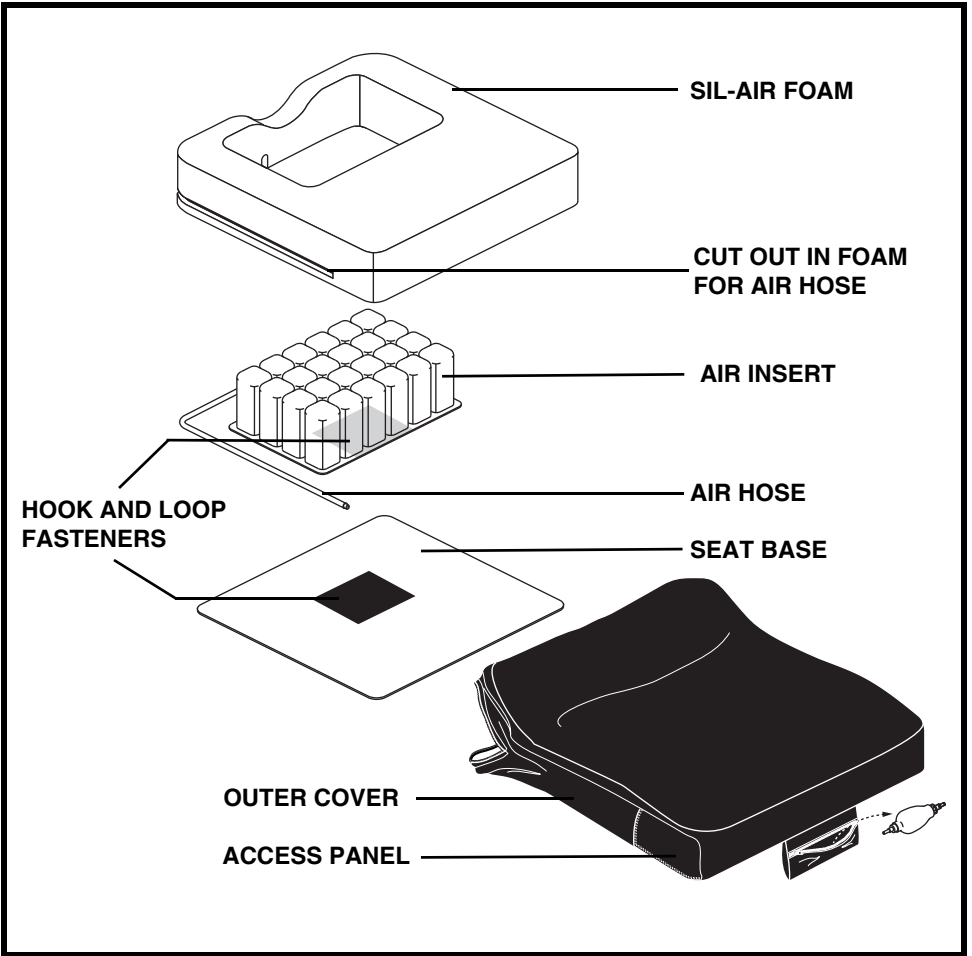


Figure 5. Flat Spectrum Air Cushion Components

REPOSITIONING THE AIR HOSE

The air hose can be placed on either the right or left side of the Synergy Spectrum Air.

To reposition the air hose:

1. Locate the zipper on the rear side of the outer cover.
2. Unzip the outer cover and pull out the assembled inner cushion components. **See figure 3.**
3. Remove the existing air tube and elbow valve.
4. Install the desired air tube on to the elbow valve (**see figure 6**) and route the air hose under the foam along the cut out in the foam. **See figure 4 or 5.**
5. Insert the air hose through the hole in the outer cover so that the end of the air hose is in the access panel. **See figure 4 or 5.**
6. Close the access panel.
7. Zip the outer cover closed.

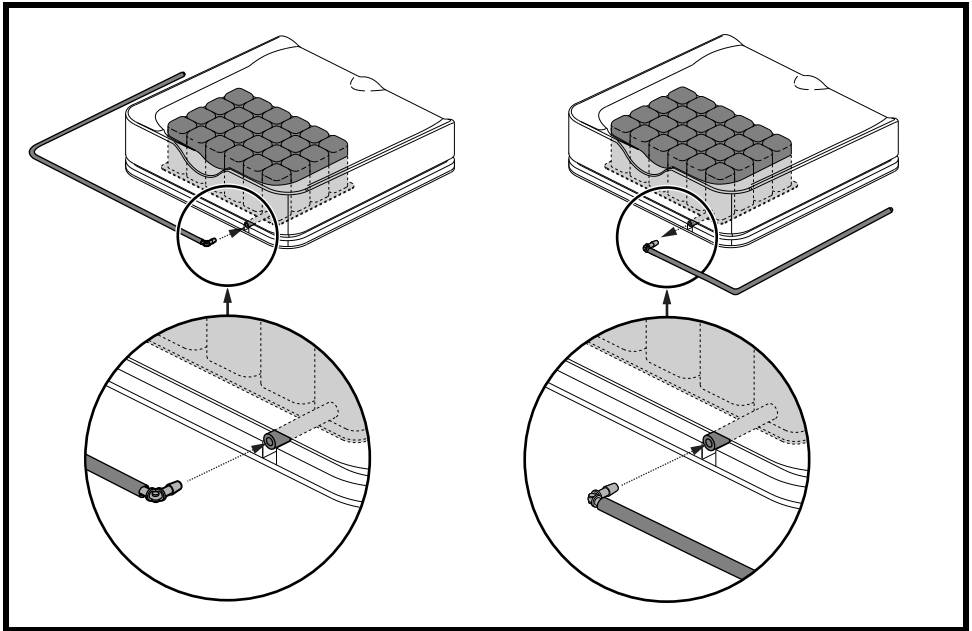


Figure 6. Left and Right Side Placement of Air Hose

CARE AND MAINTENANCE

Your mobility product must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations.



MANDATORY! Contact your local waste disposal agency or authorized Pride Provider for information on proper disposal of mobility product packaging, metal frame components, plastic components, electronics, batteries, neoprene, silicone, and polyurethane materials.

The air pressure in your cushion system should be checked daily. Refer to “Inflating and Deflating the Air Insert” if you need to add or release air from the air insert.

Be aware of safety issues while smoking.

WARNING! Pride strongly recommends that you do not smoke cigarettes while seated on your cushion system although the cushion system has passed the necessary testing requirements for cigarette smoking. You must adhere to the following safety guidelines if you decide to smoke cigarettes while seated on your cushion system.

- Do not leave lit cigarettes unattended.
- Keep ashtrays a safe distance from the cushion system.
- Always make sure cigarettes are completely extinguished before disposal.



WARNING! Even though the plastics used on your mobility product have been tested and have passed flammability standards, Pride recommends that you do not expose your mobility product to open flames.

WARNING! Exercise extreme caution when using oxygen in close proximity to electrical circuits and combustible materials. Contact your oxygen provider for information on using oxygen safely.

WARNING! Replace worn or damaged upholstery immediately to reduce the risk of fire hazard.

WARNING! Be aware that washing of upholstered items may reduce the resistance to flammability of the fabric.

WARRANTY

The Synergy Spectrum Air cushion is designed and produced to the highest of standards. Our Synergy cushion is guaranteed to be free of defects in material and workmanship for a period of 24 months. If any defect in material or workmanship is found, Pride Mobility Products will repair or replace, at our discretion, the Synergy cushion. This warranty does not apply to cushions abused or misused by the user and deemed such by Pride Mobility Products.

Claims and repairs should be processed through the nearest authorized Pride Provider or Quantum Rehab Provider.

NOTES

NOTES

GARANTIE

Le coussin Synergy Spectrum Air est conçu et fabriqué selon les plus hauts standards. Le coussin Synergy est garanti sans défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de 24 mois. Si un défaut de matériaux ou de fabrication est trouvé, Pride Mobility Products réparera ou remplacera, à sa discrétion, le coussin Synergy. Cette garantie ne couvre pas les coussins ayant subis des abus ou ayant été mal utilisés si Pride Mobility Products en décide ainsi.

Les réclamations et réparations doivent être faites par le détaillant Pride ou le détaillant Quantum Rehab le plus proche de chez vous.

SOINS ET ENTRETIEN

Vous devez disposer de votre appareil en respectant les règlements en vigueur dans votre localité.



OBLIGATOIRE! Contactez votre centre de recyclage ou votre détaillant Quantum Rehab pour les informations sur la mise au rebut de l'emballage, des composants métalliques, plastiques, électroniques, batteries, néoprène, silicone, et les matériaux de polyuréthane.

La pression d'air dans votre système de coussin doit être vérifiée quotidiennement. Reportez-vous à « gonfler et dégonfler l'insertion d'air » si vous avez besoin d'ajouter ou d'évacuer de l'air dans l'insertion d'air.

Soyez prudent lorsque vous fumez.

MISE EN GARDE! Nous recommandons fortement de ne pas fumer de cigarettes lorsque vous êtes assis sur le siège de votre fauteuil, même si votre siège a réussi les tests d'exposition à la fumée et à la flamme de cigarette. Si vous décidez de fumer tout de même, vous devez respecter les consignes suivantes:

- Ne laissez pas de cigarette allumée sans surveillance.
- Tenez les cendriers loin du siège.
- Assurez-vous de bien éteindre vos cigarettes avant d'en disposer.

MISE EN GARDE! Même si les plastiques utilisés sur votre produit mobilité ont été testés et ont passé les normes d'inflammabilité, Pride vous recommande de ne pas exposer votre produit mobilité aux flammes nues.



MISE EN GARDE! Soyez très prudent lors de l'utilisation d'oxygène à proximité de circuits électriques et des matériaux combustibles. Contactez votre fournisseur d'oxygène pour les informations sur l'utilisation d'oxygène en toute sécurité.

MISE EN GARDE! Remplacez les pièces usées ou le rembourrage endommagé immédiatement pour réduire le risque d'incendie.

MISE EN GARDE! Soyez conscient que le lavage des articles rembourrés peut réduire la résistance à l'inflammabilité du tissu.

REPOSITIONNEMENT DU TUYAU D'AIR

Le tuyau peut être placé sur le côté droit ou le côté gauche du Synergy Spectrum Air.

Pour repositionner le tuyau d'air :

1. Localisez la fermeture éclair sur l'arrière de la housse externe.
2. Baissez la fermeture de l'extérieur de la housse et sortez les composantes intérieures assemblées du coussin. Voir la figure 3.
3. Retirez le tuyau à air existant et la valve coude.
4. Installez le tube d'air désiré sur la valve coude (voir la figure 6) et passez le tuyau d'air sous la mousse le long de la découpe dans la mousse. Voir la figure 4 ou 5.
5. Insérer le tuyau d'air à travers le trou dans la housse externe de sorte que la fin du tuyau d'air soit dans le panneau d'accès. Voir la figure 4 ou 5.
6. Fermez le panneau d'accès.
7. Fermez la fermeture éclair de la housse externe.

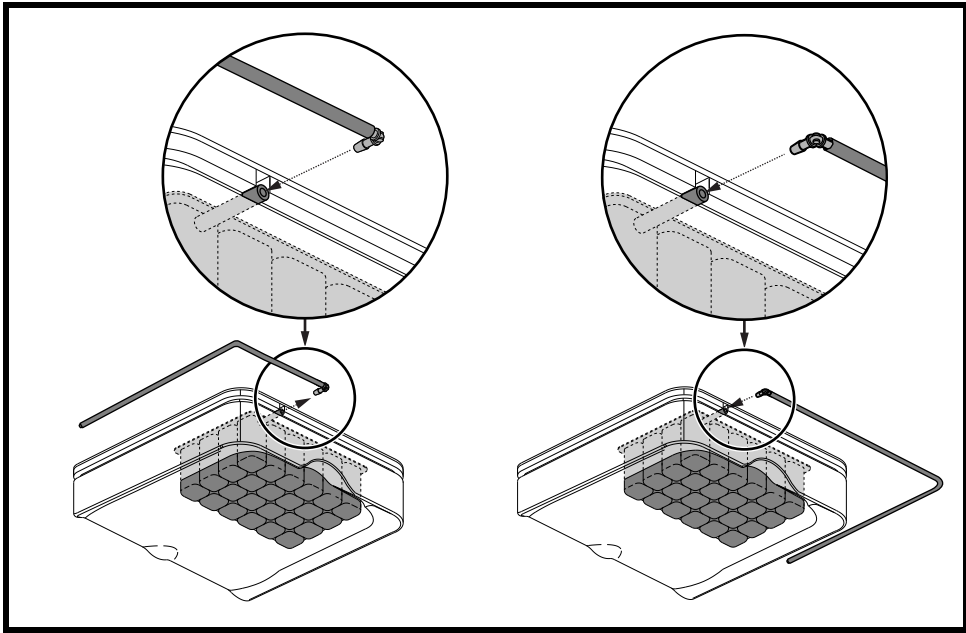
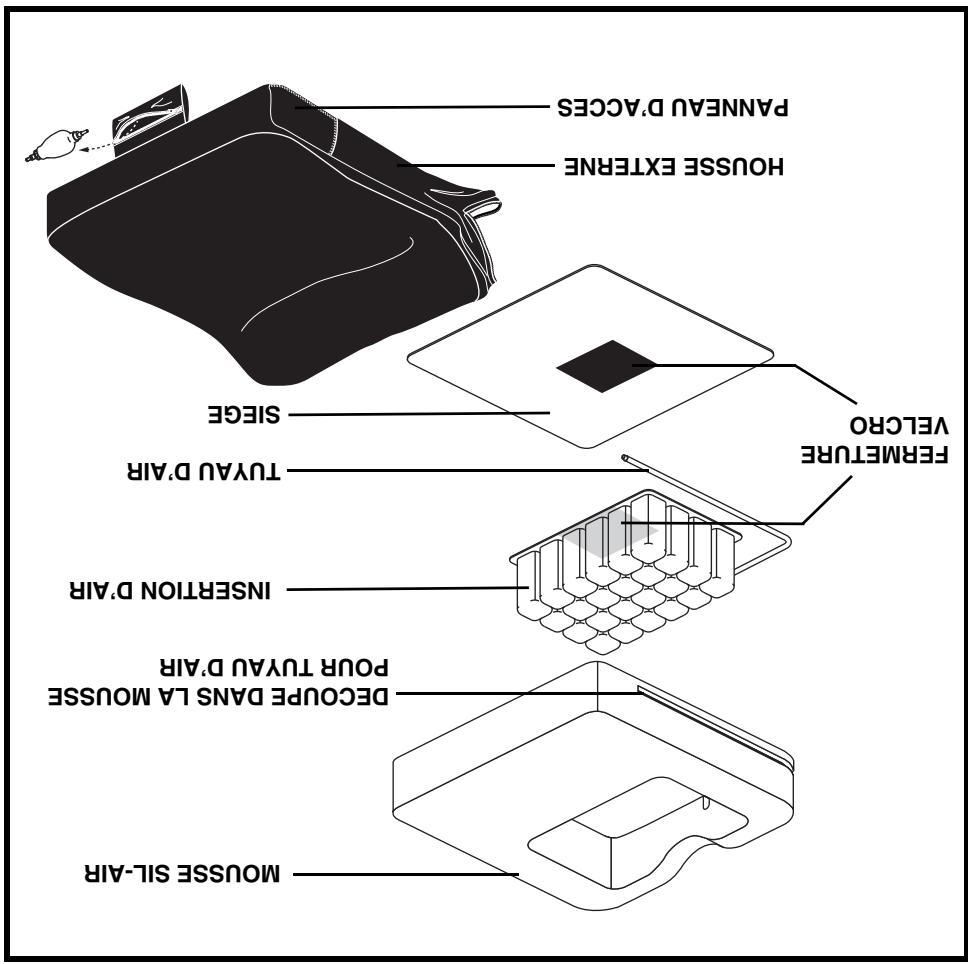


Figure 6. Placement du tuyau d'air sur le côté droit ou gauche

Figure 5. Composantes du coussin Spectrum Air Plat



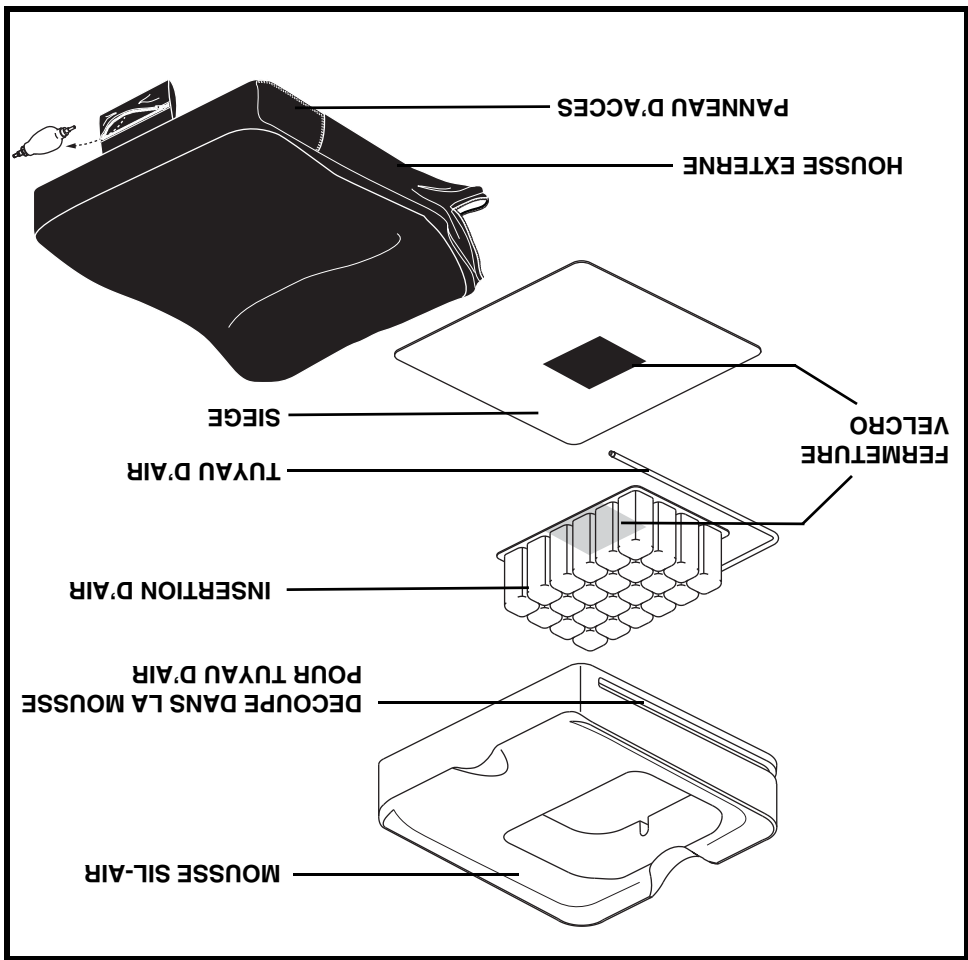


Figure 4. Composantes du coussin Spectrum Air Contour

ASSEMBLAGE DES COMPOSANTES INTERIEURES DU COUSSIN

Le Synergy Spectrum Air arrive assemblé, mais devra être réassemblé après le nettoyage. Les versions contour et plat du coussin sont indiquées dans les **figures 4 et 5**, respectivement.

Pour assembler le Synergy Spectrum Air:

1. Placer l'insertion d'air sur la base du siège en prenant soin d'aligner la bande velcro sur le devant de l'insertion avec celle sur la base du siège.

Voir la figure 4 or 5.

2. Placer la mousse Sil-Air autour de l'insertion. **Voir la figure 4 ou 5.**

3. Acheminer le tuyau d'air sous la mousse et le long de la découpe dans

la mousse. Voir la figure 4 ou 5.

4. Soulevez le volet d'accès.

5. Placez le coussin assemblé dans la housse externe avec l'avant du

coussin entrant dans la housse externe en premier.

6. Insérer le tuyau d'air à travers le trou dans la housse externe de sorte que

la fin du tuyau d'air soit dans le panneau d'accès.

7. Fermez le panneau d'accès.

8. Fermez la fermeture éclair de la housse externe.

NOTE: Prida recommande fortement que le Synergy Spectrum Air soit assemblé et ajusté par votre professionnel de la santé avant d'utiliser votre coussin pour la première fois.

NETTOYAGE

Le Synergy Spectrum Air est conçu pour faciliter le nettoyage.

Pour le nettoyage du Synergy Spectrum Air:

1. Localisez la fermeture éclair à l'arrière de la housse externe.
2. Baissez la fermeture éclair de l'extérieur de la housse et sortez les composants intérieurs assemblés du coussin. Voir la figure 3.
3. Lavez la housse externe dans une machine à laver à l'eau froide.



MISE EN GARDE! Pour éviter d'endommager la housse du siège, ne pas utiliser l'eau de javel pour nettoyer l'extérieur de la housse.

4. Les composants intérieurs du coussin peuvent être placés sous une douche et lavés avec du savon et de l'eau chaude.
5. Laissez la housse externe et les composants intérieurs du coussin sécher à l'air.



MISE EN GARDE! Pour empêcher le raccourcissement de la housse externe, ne pas la faire sécher dans un sèche-linge.

6. Une fois que la housse et les composants intérieurs du coussin sont sèches, placez les composants intérieurs assemblés du coussin à l'intérieur de la housse. Fermez la fermeture éclair de la housse, et placez le Synergy Spectrum Air sur le siège de votre fauteuil.

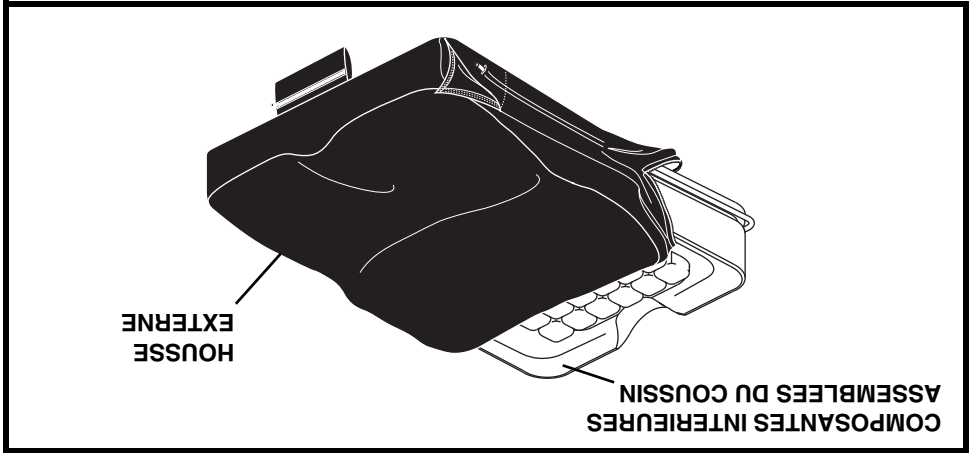


Figure 3. Synergy Spectrum Air

GONFLER ET DEGONFLER L'INSERTION D'AIR

Le Synergy Spectrum Air peut être facilement gonflé ou dégonflé.

Pour gonfler ou dégonfler le coussin:

1. Retirez la pompe à air du sac de stockage. Voir la figure 2.
2. Soulevez le volet d'accès du panneau pour exposer l'extrémité du tuyau d'air.
3. Insérez la fin de la pompe à air dans le tuyau d'air. Voir la figure 2.

NOTE: L'extrémité sans couleur de la pompe est utilisée pour gonfler l'insertion d'air et l'extrémité noire de la pompe est utilisée pour gonfler/dégonfler l'insertion d'air. Voir la figure 2.

4. Pressez la pompe d'air jusqu'à ce que la fermeture désirée soit atteinte.

NOTE: S'il l'insertion d'air ne se gonfle pas après le gonflage, vérifiez que la pompe est complètement insérée dans l'extrémité du tuyau d'air.

5. Placez la pompe à air loin du tuyau d'air.
6. Couvrir le tuyau d'air en appuyant sur le volet d'accès du panneau.
7. Retournez la pompe à air dans le sac de stockage.

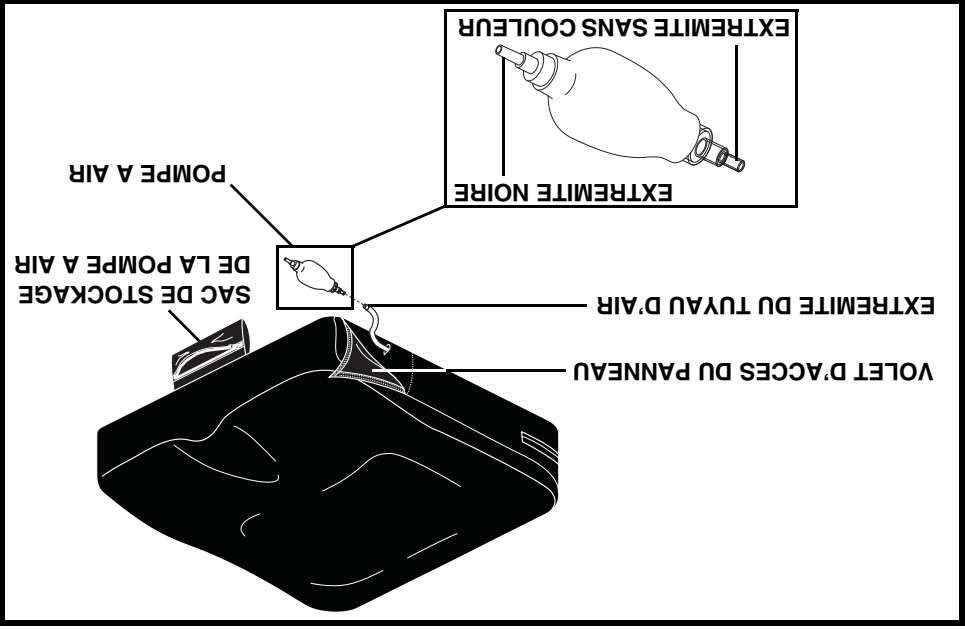


Figure 2. Synergy Spectrum Air

LE SYNERGY SPECTRUM AIR

Le Synergy Spectrum Air est un système de coussin qui contient une insertion d'air gonflable et est disponible en version contour et plat. Le coussin est étiqueté de façon à assurer la bonne position sur la chaise.

MISE EN GARDE! Modifier les positions réglées par votre professionnel de la santé peut conduire à des pincages, abrasions cutanées, ou des escarres de décubitus. Maintenir le coussin dans la position prescrite afin d'assurer la sécurité et une utilisation confortable.



Pour placer le Synergy Spectrum Air sur la chaise:

1. Trouvez l'étiquette sur le dessous du coussin.
2. Placez le coussin sur le siège de façon à ce que l'étiquette soit située à l'arrière du siège, avec le côté qui contient l'étiquette vers le bas. La fermeture éclair sur le coussin fera face à l'arrière du siège. Voir la figure 1.

MISE EN GARDE! Lorsque les composantes de votre coussin sont exposées à des températures extrêmes, celles-ci peuvent causer des irritations cutanées. Soyez vigilant lorsque votre produit est entreposé dans des conditions de températures très chaudes ou très froides.

MISE EN GARDE! N'exécédez pas le poids maximum indiqué dans le manuel ou 158,76 kg (350 lb), en respectant le plus petit des deux.



LA FERMETURE ECLAIR
FAIT FACE A L'ARRIERE
DU SIEGE

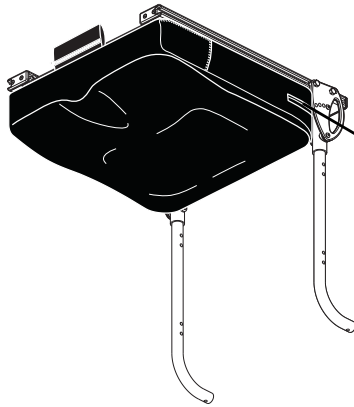


Figure 1. Placement du coussin

Coordonnées

Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Pride Mobility Products Company
380 Vansickle Road Unit 350
St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Canada

Pride Mobility Products Ltd.
32 Wedgwood Road
Bicester, Oxon OX26 4UL
UK

Pride Mobility Products Australia Pty. Ltd.
21 Healey Road
Dandenong, 3175
Victoria, Australia

Pride Mobility Products Italia S.r.l.
Via del Progresso - - ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065-Fiano Romano (RM)

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Wert 26
1901 Castricum
The Netherlands

NOTE: Si vous perdez ou égariez votre carte de garantie ou votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, c'est avec plaisir que nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.

INTRODUCTION

Quantum Rehab, une division de Pride Mobility Products (Pride), vous souhaite la bienvenue. Votre produit est un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une technologie d'avant-garde mais surtout **sécuritaire** et confortable. Nous sommes convaincus que sa fiabilité, ses fonctionnalités et les services qu'il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait. Lorsque vous serez accoutumés avec le fonctionnement **sécuritaire** et l'entretien de votre produit, celui-ci vous fournira plusieurs années de service sans problèmes.

Lisez et suivez toutes les instructions, mises en garde et notes contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser votre appareil pour la première fois. Vous devez de plus lire toutes les instructions supplémentaires du contrôleur, contenues dans les manuels d'instructions supplémentaires du contrôleur, des repose-pieds, et/ou systèmes qui accompagnent votre fauteuil motorisé avant de l'utiliser pour la première fois. Votre **sécurité** dépend de l'attention et du bon jugement que vous, vos proches et vos professionnels y porteront.

Ce manuel doit être consulté en complément du manuel que vous avez reçu avec votre fauteuil motorisé. Si vous ne comprenez pas quelque information contenue dans ce manuel ou si vous avez besoin d'aide pour préparer ou faire fonctionner votre appareil, veuillez contacter votre détaillant Quantum Rehab. **Le non-respect des instructions contenues dans ce manuel et/ou sur les autocollants apposés sur votre appareil peut provoquer des accidents avec blessures, des dommages et entraîner l'annulation de la garantie.**

CONVENTION A L'ACHAT

En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisable les protecteurs et/ou gardes de sécurité, et dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer les troussees de mise à jour au besoin, fournies par Pride afin de maintenir ou améliorer l'aspect sécuritaire de votre appareil.

ECHANGE D'INFORMATIONS

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouveau produit et les services offerts par votre détaillant Quantum Rehab. Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrions vous tenir informés si des mesures venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre produit, ou encore sur les nouveaux produits, nouvelles options qui augmenteraient le plaisir associé à l'utilisation de votre produit.

PICTOGRAMMES D'INFORMATION

PICTOGRAMMES DE SECURITE

Les pictogrammes ci-dessous sont apposés sur le produit pour indiquer les actions obligatoires, mises en garde et actions prohibées. Il est très important de les lire et de bien les comprendre.



Lisez et suivez les consignes et informations contenues dans ce manuel.



Ne pas exposer à une flamme ou à des étincelles.



Ne pas fumer.



Mise au rebut et recyclage — Contactez votre détaillant Quantum Rehab pour connaître la méthode de mise au rebut et/ou de recyclage de votre produit Pride et deson emballage.



La housse seulement — Température maximale de lavage 60°C (140°F)



Ne séchez pas à la machine.



Ne pas repasser.

TABLE DES MATIERES

4	PICTOGRAMMES D'INFORMATION
5	INTRODUCTION
7	LE SYNERGY SPECTRUM AIR
8	GONFLER ET DEGONFLER L'INSERTION D'AIR
9	NETTOYAGE
10	ASSEMBLAGE DES COMPOSANTES INTERIEURES DU COUSSIN
13	REPOSITIONNEMENT DU TUYAU D'AIR
14	SOINS ET ENTRETIEN
15	GARANTIE

CONSIGNES DE SECURITE



MISE EN GARDE! Votre détaillant Quantum Rehab ou un technicien qualifié doit faire le montage initial de ce fauteuil motorisé et suivre toutes les procédures énumérées dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.



MISE EN GARDE! Indique une condition/situation potentiellement dangereuse. Vous devez respecter les consignes sous peine de vous blesser, de causer des dommages et/ou un mauvais fonctionnement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noir sur un triangle jaune avec bordure noire.




OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées selon les consignes sous peine de vous blesser, ou d'endommager l'appareil. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur blanche avec un point bleu et bordure blanche.



INTERDIT! Ces actions sont interdites. Vous ne devez sous aucune considération, entreprendre ces actions. Ces actions peuvent entraîner des blessures et/ou dommages à votre équipement. Ce pictogramme apposé sur le produit est de couleur noir avec un rond rouge et barre rouge.

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d'apporter les changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site internet.

NOTE: Ce produit est conforme aux directives et exigences des normes *WEEE, RoHS et REACH.*

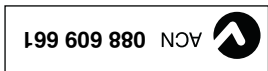


Copyright © 2010

Pride Mobility Products Corporation
INFMANU3805/Rev B/December 2010



A Division of Pride Mobility Products® Corp.

QUANTUM
REHAB

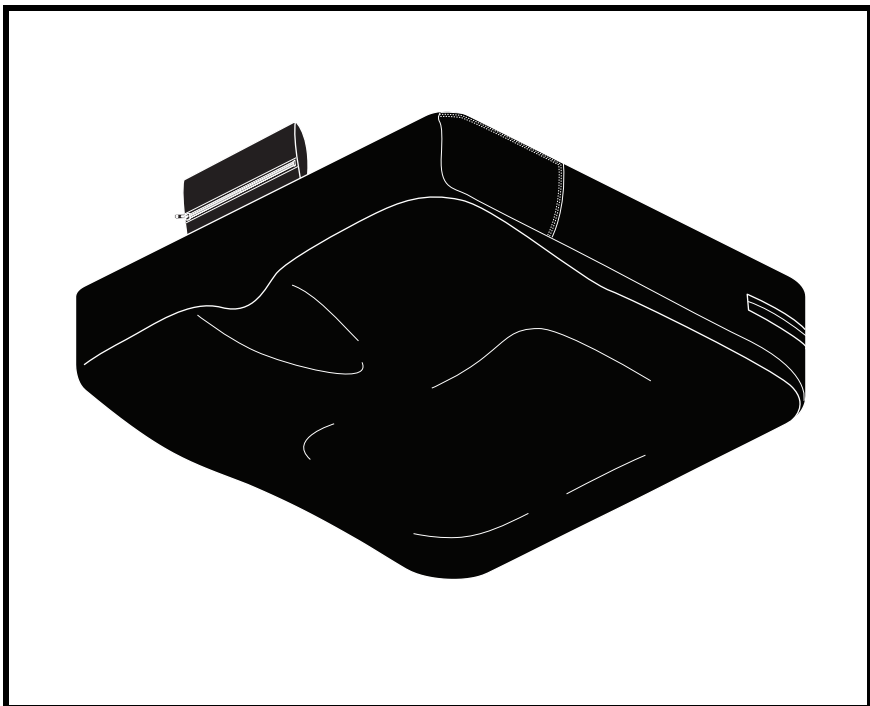

Synergy[®]
Spectrum Air[™]

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN