

LIFT CHAIR

SERIES



OWNER'S MANUAL

Pride
Mobility Products Europe B.V.
www.pridemobility.com

Including Model: T3

The symbols below are used throughout this owner's manual and on the product to identify warnings and important information. It is very important for you to read them and understand them completely.



WARNING! Indicates a potentially hazardous condition/situation. Failure to follow designated procedures can cause either personal injury, component damage, or malfunction. On the product, this icon is represented as a black symbol on a yellow triangle with a black border.



MANDATORY! These actions should be performed as specified. Failure to perform mandatory actions can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a white symbol on a blue dot with a white border.



PROHIBITED! These actions are prohibited. These actions should not be performed at any time or in any circumstances. Performing a prohibited action can cause personal injury and/or equipment damage. On the product, this icon is represented as a black symbol with a red circle and red slash.

Please fill out the following information for quick reference:


Pride Provider: _____

Address: _____

Phone Number: _____

Purchase Date: _____ Serial Number: _____

NOTE: This owner's manual is compiled from the latest specifications and product information available at the time of publication. We reserve the right to make changes as they become necessary. Any changes to our products may cause slight variations between the illustrations and explanations in this manual and the product you have purchased. The latest/current version of this manual is available on our website.

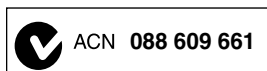

This product is manufactured by:
Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Copyright © 2009
Pride Mobility Products Europe B.V.
INFMANU3790/Rev A/February 2009

PRODUCT SAFETY SYMBOLS

The symbols below represent labels used on the product to identify warnings, mandatory actions, and prohibited actions. It is very important for you to read and understand these symbols completely. Do not remove these labels from your product. Please note that not all of the symbols may be used on your lift chair model.



Pinch/Crush Points Hazard! Do not place objects or appendages in the path of moving parts.




Electrical Hazard



Read and follow the information in the owner's manual.



Maximum weight capacity

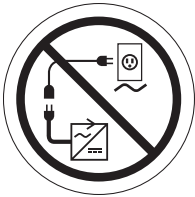

Do not connect an extension cord to the AC/DC converter or the battery charger.



Removal of grounding prong can create electrical hazard. If necessary, properly install an approved 3-pronged adapter to an electrical outlet having 2-pronged plug access.




Properly dispose of all electronic components, including the external transformer, hand control, batteries, actuator motors, and wiring. Contact your authorized Pride Provider for more information.



Do not place objects under lift chair. Make sure area is clear of obstructions, including pets and small children during operation.




Do not place objects under the footrest when lift chair is in fully reclined position. Make sure area is clear of obstructions, including pets and small children during operation.

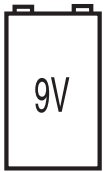


Battery Door Location



Indoor Use Only. Avoid exposure to rain, snow, ice, salt, or standing water. Maintain and store in a clean and dry environment.

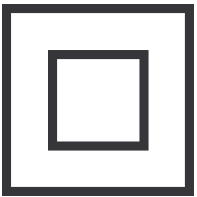

Class II Equipment

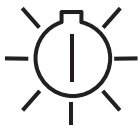

Green LED indicates power to the unit is on.



Degree of protection against electric shock.

TYPE B



This product has been tested and complies to IEC 60601-1-2.

SAFETY GUIDELINES	2
LABEL INFORMATION	3
I. INTRODUCTION	6
SAFETY	6
PURCHASER'S AGREEMENT	6
INFORMATION EXCHANGE	6
II. GENERAL GUIDELINES	7
MODIFICATIONS	7
WEIGHT LIMITATIONS	7
PINCH/CRUSH HAZARDS	7
DEGREE OF PROTECTION/MODE OF OPERATION	7
STORAGE AND OPERATION TEMPERATURES	7
EMI/RFI	8
SHIPPING AND DELIVERY	8
MOTOR VEHICLE TRANSPORT	8
III. YOUR LIFT CHAIR	9
BODY COMPONENTS	9
ELECTRICAL COMPONENTS	10
IV. ASSEMBLY/DISASSEMBLY	12
LIFT CHAIR ASSEMBLY	12
LIFT CHAIR PLACEMENT	13
BATTERY INSTALLATION	13
V. OPERATION	14
OPERATION PRECAUTIONS	14
HAND CONTROL OPERATION	14
VI. TROUBLESHOOTING	17
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS	17
VII. CARE AND MAINTENANCE	18
FABRIC CARE	18
ELECTRONICS CARE	18
DISPOSAL AND RECYCLING	18
VIII. WARRANTY	19
APPENDIX	39

**SAFETY**

WELCOME to Pride Mobility Products Europe B.V. (Pride). The product you have purchased combines state-of-the-art components with **safety**, comfort, and styling in mind. We are confident the design features will provide you with the conveniences you expect during your daily activities. Understanding how to **safely** operate and care for this product should bring you years of trouble-free operation and service.

Read and follow all instructions, warnings, and notes in this manual and all other accompanying literature before attempting to operate this product for the first time. In addition, your **safety** depends upon you, as well as your provider, caregiver, or healthcare professional in using good judgement.

If there is any information in this manual which you do not understand, or if you require additional assistance for setup or operation, please contact your authorized Pride Provider. **Failure to follow the instructions, warnings, and notes in this manual and those located on your Pride product can result in personal injury or product damage and will void Pride's product warranty.**

PURCHASER'S AGREEMENT

By accepting delivery of this product, you promise that you will not change, alter, or modify this product or remove or render inoperable or unsafe any guards, shields, or other safety features of this product; fail, refuse, or neglect to install any retrofit kits from time to time provided by Pride to enhance or preserve the safe use of this product.

INFORMATION EXCHANGE

We want to hear your questions, comments, and suggestions about this manual. We would also like to hear about the safety and reliability of your new lift chair and about the service you received from your authorized Pride Provider. Please notify us of any change of address, so we can keep you apprised of important information about safety, new products, and new options that can increase your ability to use and enjoy your lift chair. Please feel free to contact us at the address below:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NOTE: If you ever lose or misplace your product registration card or your copy of this manual, contact us and we will be glad to send you a new one immediately.



Your lift chair is a state-of-the-art life-enhancement device designed to increase mobility. Pride provides an extensive variety of products to best fit your individual needs. Please be aware that the final selection and purchasing decision regarding the type of lift chair to be used is the responsibility of you, the lift chair user, if capable of making such a decision, and/or your health-care professional (i.e., medical doctor, physical therapist, etc.).



MANDATORY! Read and follow the information provided in this owner's manual before attempting to operate your lift chair for the first time.

There are certain situations, including some medical conditions, where you will need to practice operating the lift chair in the presence of a trained attendant. A trained attendant can be defined as a family member or healthcare professional specially trained in assisting you with performing various daily-living activities while safely operating a lift chair.

Below are some precautions, tips, and other safety considerations that will help you become accustomed to operating the lift chair in a safe manner.

MODIFICATIONS

Pride has designed and engineered your lift chair to provide maximum comfort and utility. However, to prevent personal injury and/or damage to your lift chair, you should not modify, add, remove, or disable any feature, part, or function of your lift chair. Unauthorized modifications may also void your product's warranty.

NOTE: Use Pride parts only for all repairs and replacements.

WEIGHT LIMITATIONS

Your lift chair is rated for a maximum weight capacity. Refer to "Appendix A" for more information.



MANDATORY! Stay within the specified weight capacity of your lift chair. Pride will not be held responsible for injuries and/or product damage resulting from failure to observe weight limitations.

PINCH/CRUSH HAZARDS

The scissor and lift mechanisms are labeled as pinch/crush point hazards on your lift chair. Keep clear of these areas and make sure the path of motion is unobstructed. See figure 3.1 for pinch/crush point locations.



WARNING! Do not place objects or appendages in the path of moving parts.

DEGREE OF PROTECTION/MODE OF OPERATION

- Class II equipment/Type B protection against electric shock
- Degree of protection against the ingress of solid/liquids—IPX1
- Mode of operation—Maximum Duty Cycle: 2min ON/18min OFF

STORAGE AND OPERATION TEMPERATURES

- Transportation or storage: -75°C/-104°F to 70°C/158°F
- Operation: 10°C/50°F to 40°C/104°F

ELECTROMAGNETIC AND RADIO FREQUENCY INTERFERENCE (EMI/RFI)



WARNING! Laboratory tests have shown that electromagnetic and radio frequency waves can have an adverse affect on the performance of electrically-powered devices, such as lift chairs.

Electromagnetic and Radio Frequency Interference can come from sources such as cellular phones, mobile two-way radios (such as walkie-talkies), radio stations, TV stations, amateur radio (HAM) transmitters, wireless computer links, microwave signals, paging transmitters, and medium-range mobile transceivers used by emergency vehicles. In some cases, these waves can cause unintended movement or damage to the control system of electrically-powered devices. The lift chair user can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment. It is recommended that at least 3 metres (9 feet) of distance be maintained between the lift chair and any handheld equipment emitting 10 W or more of output power. Refer to the manufacturer's literature for the handheld device to determine the maximum output power of that device.

Every electrically-powered device has an immunity (or resistance) to EMI. The higher the immunity level, the greater the protection against EMI. Per EMC standards, this product has passed immunity testing and is rated as a Group 1, Class B product, meaning the lift chair uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment making the lift chair suitable for use in all establishments, including domestic establishments and hospitals.



WARNING! Be aware that cell phones, two-way radios, laptops, and other types of radio transmitters may cause unintended movement of your electrically-powered device due to EMI. Exercise caution when using any of these items while operating your lift chair.



WARNING! The addition of accessories or components to the lift chair can increase the susceptibility of the chair to EMI. Do not modify your lift chair in any way not authorized by Pride.

WARNING! Your lift chair itself can disturb the performance of other electrical devices located nearby, such as alarm systems.

NOTE: If unintended motion occurs, discontinue use of the lift chair. Contact Pride to report the incident.

SHIPPING AND DELIVERY

Before using your lift chair, make sure your delivery is complete as some components may be packaged individually. If you do not receive a complete delivery, please contact your authorized Pride Provider immediately. Where damage has occurred during transport, either to the packaging or content, please contact the delivery company responsible.

MOTOR VEHICLE TRANSPORT

If you will be transporting your lift chair in a motor vehicle, individual components (external transformer, etc.) should be secured against slipping. The lift chair itself must also be secured against slipping (a possible hazard during vehicle braking).



BODY COMPONENTS

This section describes the features of your lift chair. Carefully review the function and location of each item described.

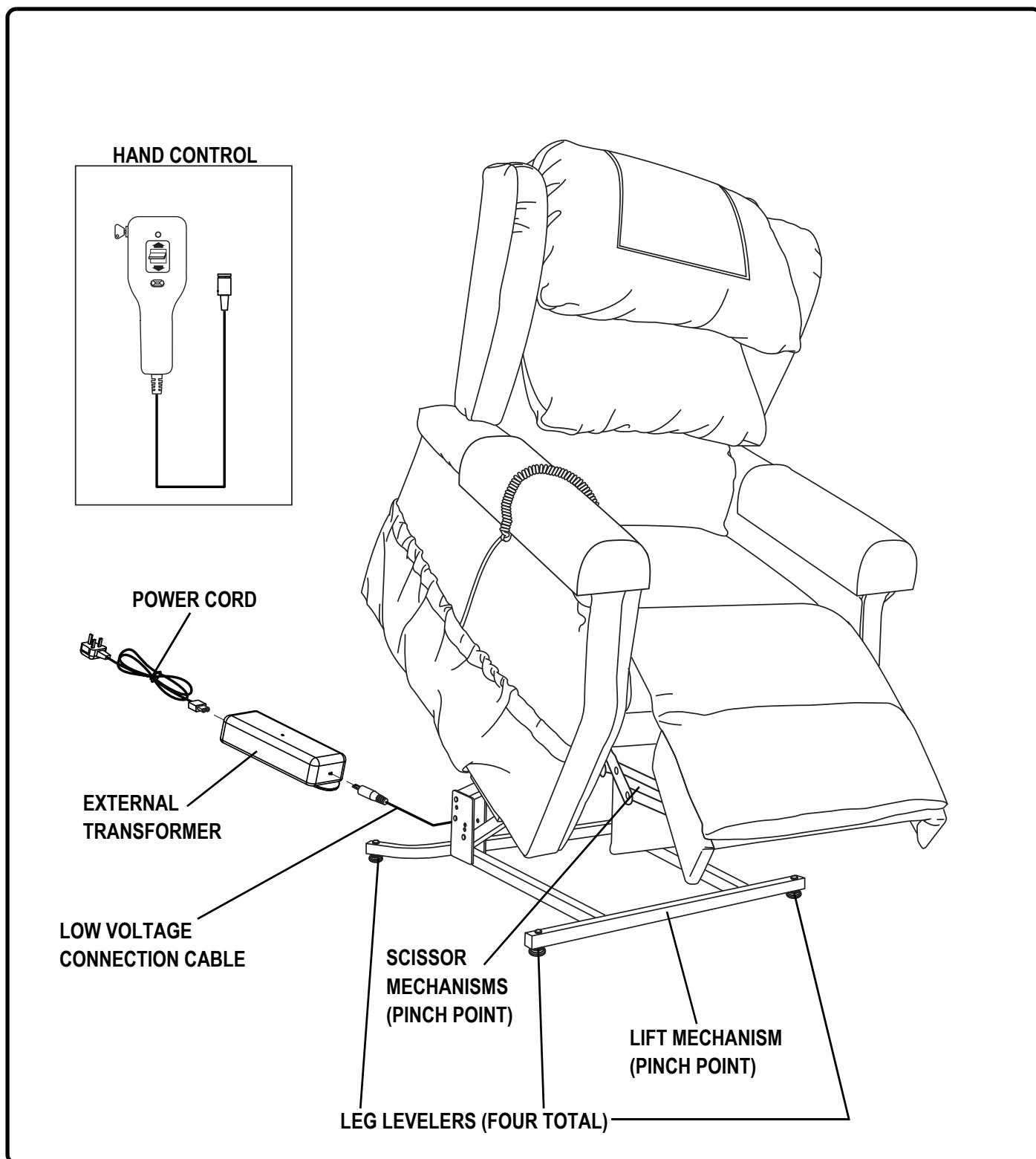


Figure 3.1 Pride Lift Chair Main Components

Lift Mechanism: Responds to the hand control commands to position the chair in the sit, recline, and stand positions.

Leg Levelers: Manually rotate up or down in order to stabilize the chair before use (Fig. 3.2).

Scissor Mechanisms: Extend or retract to take the chair through the various stages of recline (Fig. 3.3).

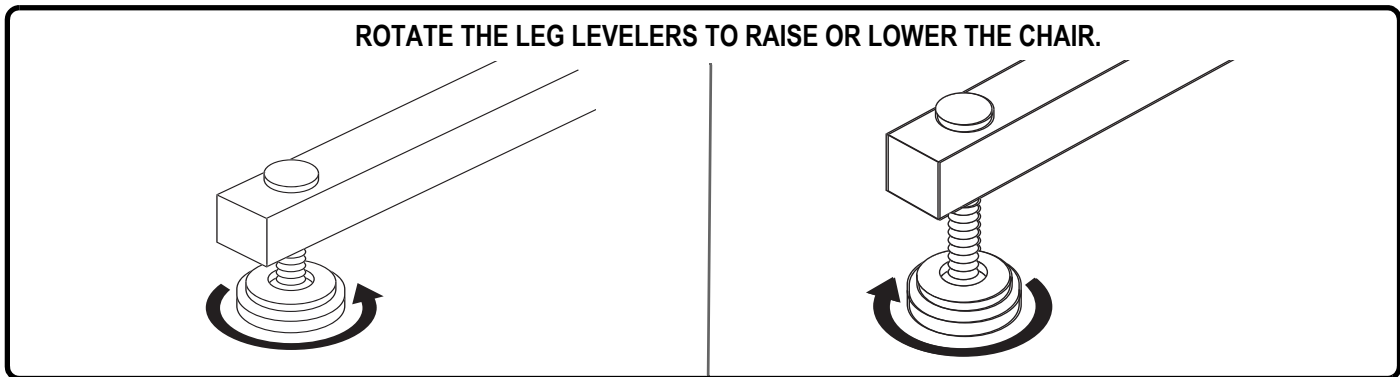


Figure 3.2 Leg Levelers

WARNING! Pinch/Crush Points Hazard! Be aware that the lift mechanism and scissor mechanisms are a pinch point on the lift chair. Keep the following items and similar objects clear of these points when operating the lift chair:



- appendages
- small children
- pets
- wires
- oxygen tubes
- loose items, including but not limited to clothing and blankets
- electrical power leads

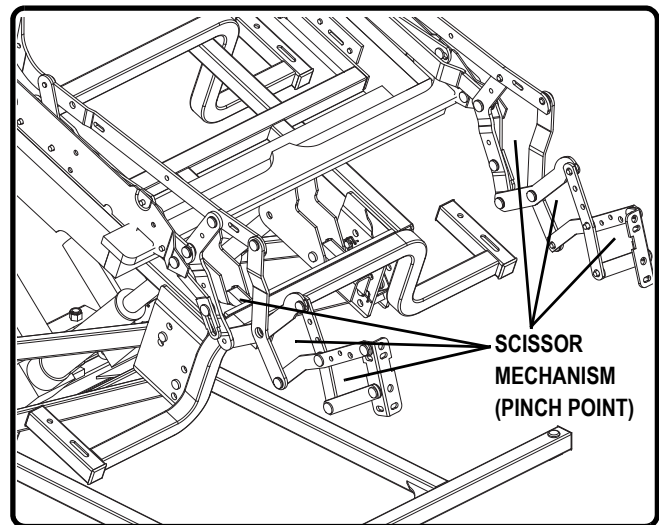


Figure 3.3 Scissor Mechanism

ELECTRICAL COMPONENTS

Your Pride Lift Chair is equipped with a low voltage DC motor system that reduces the standard household alternating current of 100V AC - 240V AC to direct current (24/39V DC). The electrical components include the external transformer, batteries, and hand control. Keep these areas free from moisture at all times.



WARNING! Keep all electrical components free from moisture at all times to prevent corrosion and electrical hazards.

External Transformer: Connects to a standard electrical outlet to provide power to the lift chair. The transformer is equipped with an LED indicator, which shows green when power to the transformer is on.

The external transformer will also come equipped with mounting brackets that allow the transformer to be mounted to the wall directly under the standard electrical outlet. The screws must be mounted to the wall stud for security. Refer to "Appendix C" for a mounting diagram.

NOTE: Pride is not responsible for damage due to improper installation.

Batteries: Provide the power needed to return the lift chair from the recline position to the sit and/or lift position in the event of a power failure. For those models equipped with a battery backup system, the batteries are located inside the external transformer.

Hand Control: Contains the controls needed to operate the various functions of the lift chair. Refer to V. "Operation" for more information. The hand control is equipped with a quick-release connector, which enables the user to detach the hand control from the chair, disabling all functions of the hand control.



LIFT CHAIR ASSEMBLY

Your lift chair will be shipped in two pieces: the chair-back and chair base. Minor assembly is required before initial use. Follow the instructions below for proper lift chair assembly.

Tools Required:

- 11-mm wrench (1)

Follow these steps to assemble the lift chair:

1. Engage and hold the up/down switch in the DOWN position until the footrest is sufficiently elevated from the ground (Fig. 5.1).
2. Remove the nuts from the threaded bolts on either side of the chair-back and retain for further use. Remove the wire tie from the actuator.



WARNING! You must ensure that the chair-back is properly secured before operating the lift chair. Failure to do so may result in personal injury and/or property damage.

3. With the pillow side of the chair-back and the lift chair armrests both facing the same forward position, position the chair-back between the chair base brackets, aligning the threaded bolts with the holes in the brackets. Insert the threaded bolts into the bracket holes and reinstall the nuts from step 1. Torque the nuts to 12 ft/lbs (53 N•m) to tighten securely (Fig. 4.1).
4. Engage and hold the up/down switch in the UP position until the lift chair is in an upright, seated position.
5. Remove the clevis pin from the motor mount, located on the back of the lift chair box. Place the motor between the motor mount, aligning the holes of the motor with the holes of the motor mount. Insert the clevis pin through the motor mount and motor.



WARNING! Make sure that the actuator is turned towards the right (if facing the back of the lift chair) to avoid possible damage to any lift chair components (Fig. 4.2).

NOTE: Make sure that the clevis pin is properly secured before proceeding with the lift chair set-up.

6. Engage and hold the up/down switch in the UP position to elevate the lift chair to its highest position (Fig. 5.1). Plug the chair-back motor cable (labeled with a green-A tag) into the green-A slot of the controller box. Plug the chair base motor cable (labeled with a yellow-B tag) into the yellow-B slot of the controller box. The controller box is located underneath the lift chair (Appendix B).

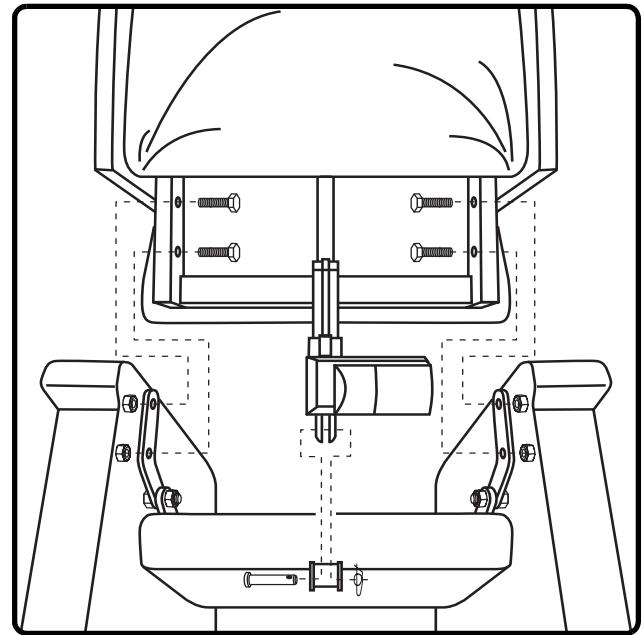


Figure 4.1 Lift Chair Assembly

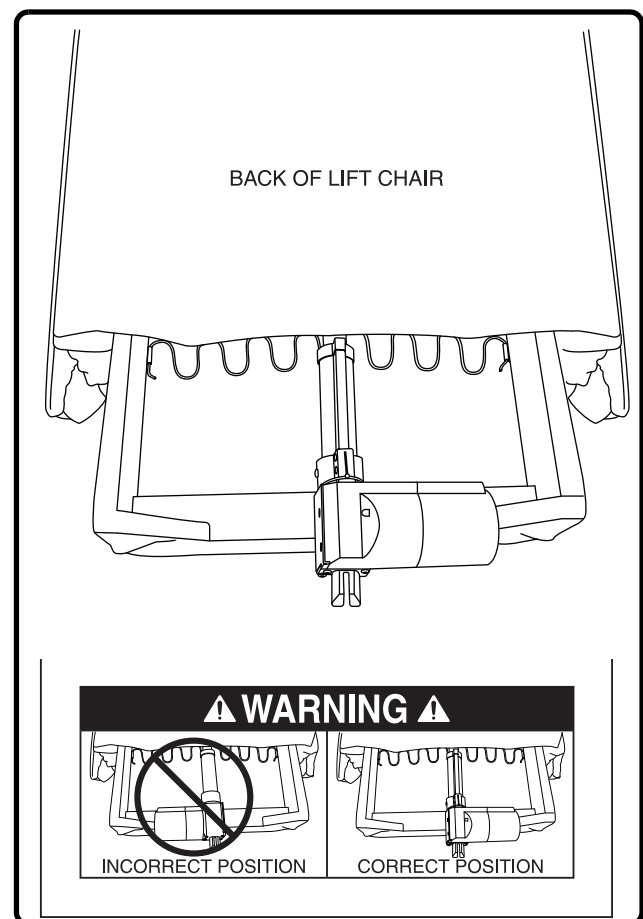


Figure 4.2 Correct Actuator Positioning

LIFT CHAIR PLACEMENT

Your lift chair should be placed near a standard electrical outlet on dry, level ground where there is ample room to allow for proper operation. Pride recommends that you have the assistance of an attendant when positioning the lift chair to avoid the possibility of injury when lifting.

Follow these steps to position the lift chair in a safe manner:

1. Place the back of the lift chair 76 cm (30 in.) from the nearest obstruction while the chair is in the seated position.
2. Adjust the leg levelers to stabilize the lift chair (Fig. 3.2).
3. Install the batteries into the external transformer if applicable. Refer to “Battery Installation” for more information.
4. Position the external transformer on the floor in an open, well-ventilated area where it will not be an obstruction, or if equipped, utilize the optional wall mount.
5. Position the low voltage connection cable where it will not be pinched between the frame and the lift mechanism.
6. Connect the low voltage connection cable to the external transformer if it is not already connected.
7. Plug the power cord directly into the electrical outlet. **Do not use an extension cord!**

NOTE: If you discover a problem at any point during the set up and positioning of your lift chair, stop and contact your authorized Pride Provider immediately. To avoid personal injury and/or product damage, do not plug the unit into the electrical outlet until the problem is corrected and do not attempt to fix electrical problems by yourself.

BATTERY INSTALLATION

Your lift chair will be equipped with a battery backup system that will activate during a power failure. The backup system is powered by two 9V batteries (not included) that need to be installed into the external transformer.

Follow these steps to install the batteries:

1. Unplug the external transformer power cord from the electrical outlet.
2. Open the marked battery door on the external transformer.
3. Install two 9V batteries into the external transformer (Fig. 4.3).
4. Replace the battery door.

NOTE: Always make sure the external transformer is equipped with two fresh 9V batteries, since the battery backup system does not recharge itself. Fresh batteries are defined as 9V alkaline batteries that are replaced every time the battery backup system is activated during a power failure, or once a year if the battery backup system has not been activated.

NOTE: If you unplug your lift chair for an extended period of time (more than one hour), remove the batteries from the external transformer. The lift chair will draw power from the batteries even when it is not in use.

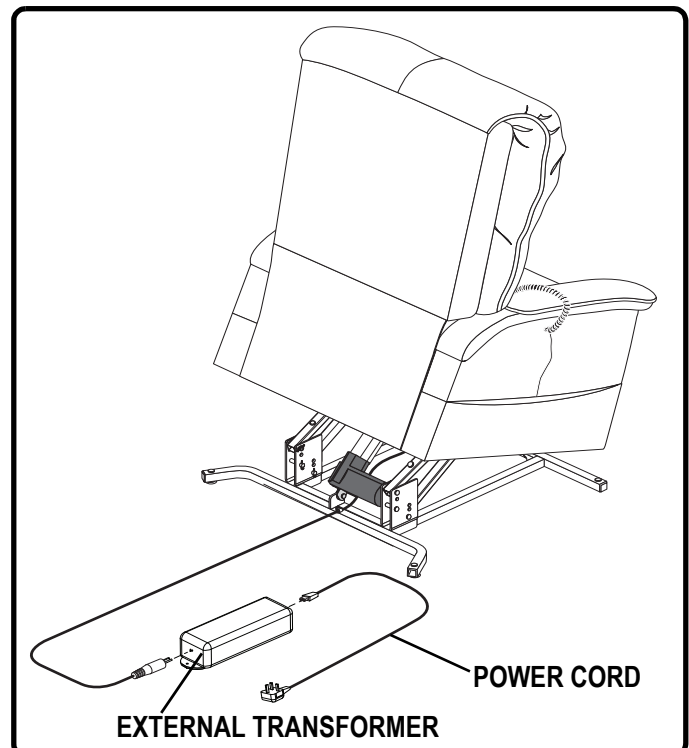


Figure 4.3 Lift Chair Battery Backup Location



OPERATION PRECAUTIONS

There are certain precautions that should be taken during the operation of your lift chair. Read and follow these precautions carefully in order to ensure safe lift chair operation and to prevent injury and/or product damage.

- Plug the power cord directly into the electrical outlet. **Do not use an extension cord!**
- Do not place anything (e.g., a drinking glass) on top of or near the external transformer.
- If the external transformer box or hand control requires cleaning, unplug the power cord from the electrical outlet and use a clean, dry cloth or lightly dampened cloth. Allow ample drying time before plugging the power cord back into the electrical outlet.
- Periodically check the hand control and all power cords for visible damage.
- Keep the hand control away from all heated surfaces.
- Ensure the hand control is out of the way before sitting in the chair.
- Keep children and pets away from all moving parts while operating the lift chair.
- Do not allow children to play on or operate the lift chair. Only the intended user should operate the lift chair.
- Keep the hand control locked or utilize the quick-disconnect feature on the standard hand control when the lift chair is not in use to prevent unintended operation of the chair.
- Avoid pinch points, such as the lift and scissor mechanisms. Keep hands and feet clear of these areas.
- Always leave the lift chair in an upright and closed position when not in use.
- Do not sit or stand on the footrest.
- Do not “drop” into the lift chair when sitting if it is in a partially raised position.



PROHIBITED! Do not place objects under the lift chair or footrest. Make sure area is clear of obstructions, including pets and small children during operation.



WARNING! Prevent the risk of electrical shock, fire, falls, and/or being pinched. Follow all instructions and precautions provided.

HAND CONTROL OPERATION

The hand control is equipped with buttons that control the movement of the chair-back, chair base, and footrest (Fig. 5.1).

WARNING! Do not lean on or apply downward force to the chair-back when the lift chair is in the fully reclined position. Doing so could cause the lift chair to tip, resulting in personal injury and/or product damage.



WARNING! Do not use the footrest as a seat, or for purposes outside its intended use. Doing so could cause instability in the lift chair and place undue stress on lift chair components, resulting in personal injury and/or product damage.

Follow these steps to sit in your lift chair (Fig. 5.1):

1. Slide the inhibit switch to the right.
2. Engage and hold the up/down switch in the UP position to raise your lift chair from the seated position to the standing position.
3. Back into the lift chair and sit in the center of the seat, using the armrests for support if needed.
4. Engage and hold the up/down switch in the DOWN position to lower the lift chair to a comfortable seated position.

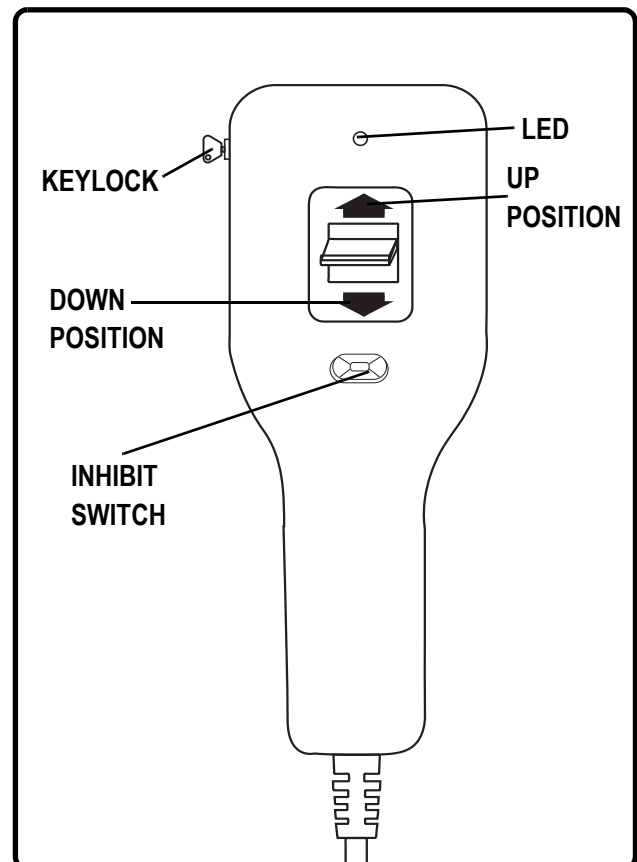


Figure 5.1 Hand Control

Follow these steps to recline your lift chair from the seated position (Fig. 5.1):

1. Slide the inhibit switch to the left.
2. Engage and hold the up/down switch in the DOWN position until comfortably reclined.
3. Engage and hold the up/down switch in the UP position to return to an upright, seated position. Release the switch when the lift chair reaches a comfortable seated position.

Follow these steps to stand up from your lift chair from the seated position (Fig. 5.1):

1. Slide the inhibit switch to the right.
2. Engage and hold the up/down switch in the UP position to raise your lift chair.
3. Release the switch when the lift chair reaches a height where you can stand up comfortably.

NOTE: The hand control on your lift chair is equipped with an LED that indicates power to the hand control. If this LED is not lit when the hand control is in use, contact your authorized Pride Provider.

Follow these steps to raise or lower the footrest while in the seated or reclined position (Fig. 5.1):

1. Slide the inhibit switch to the right.
2. Engage and hold the up/down switch in the DOWN position until the footrest reaches a comfortable height.
3. Engage and hold the up/down switch in the UP position to lower the footrest.

Follow these steps to recline your lift chair to the “Trendelenburg” position while in the seated position (Fig. 5.1):

1. Slide the inhibit switch to the right.
2. Engage and hold the up/down switch in the DOWN position until your feet are sufficiently elevated from the ground.
3. With the footrest elevated, engage and hold the up/down switch in the DOWN position until your feet are elevated higher from the ground than your head.
4. Engage and hold the up/down switch in the UP position to return to an upright, seated position.
5. From the upright, seated position, engage and hold the up/down switch in the DOWN position to lower the footrest.

NOTE: The “Trendelenburg” position is designed to direct and increase the flow of blood from the legs to the heart.

Follow these steps to recline your lift chair to the “zero gravity” position while in the seated position (Fig. 5.1):

1. Slide the inhibit switch to the right.
2. Engage and hold the up/down switch in the DOWN position until your feet are sufficiently elevated from the ground and until your thighs and lower legs are positioned slightly higher than your heart, putting your body in a “V-like” position.
3. Engage and hold the up/down switch in the UP position to return to an upright, seated position.
4. From the upright, seated position, engage and hold the up/down switch in the DOWN position to lower the footrest.

NOTE: The “zero gravity” position is designed to alleviate pressure on the spine and improve full-body circulation.

KEYLOCK

Your hand control is equipped with a keylock feature that will disable all functions of the hand control.

Follow these steps to operate the keylock (Fig. 5.1):

1. Remove the key from the side of the hand control to disable all functions of the hand control.
2. Reinsert the key to restore hand control function.



WARNING! Prevent injury! Remove the key to lock the hand control when not in use.

NOTE: *As an added safety measure, Pride recommends that you utilise the quick disconnect to remove the hand control from the lift chair and store the hand control out of the reach of children when not in use.*



Your lift chair is a state-of-the-art life-enhancement device designed to enhance your mobility. Your lift chair should bring you years of trouble-free service, however, it may require occasional troubleshooting. The following troubleshooting tips and FAQs should summarize what you need to know about your lift chair. If at any time you do not feel comfortable performing the troubleshooting steps listed in this manual, contact your authorized Pride Provider for service. Please have the model number, serial number, and nature of the problem when calling.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

What if my lift chair does not operate at all?

- Ensure the external transformer is plugged into a properly wired electrical outlet.
- Check the circuit breaker box connected to the electrical outlet.
- Ensure the low voltage connection cable is plugged into the external transformer.
- Ensure the hand control and motor(s) are plugged in properly.
- Ensure the low voltage connection cable is plugged into the motor(s).

What if my lift chair operates in one direction only?

- Check the up/down switch on the hand control to make sure it does not stick. If the switch is sticking, the hand control may need to be replaced.
- Contact your authorized Pride Provider for further assistance.

What if my lift chair stops during a lifting cycle?

- Your lift chair is equipped with an internal thermal shutoff switch located inside the external transformer that prevents the motor control box from overheating. If the thermal shutoff activates, allow the lift chair to remain in a stationary position for 10 minutes to allow the motor to cool, then resume normal operation. If you notice the motors overheating frequently, contact your authorized Pride Provider.
- There may have been a power failure and/or there are no batteries in the external transformer or the batteries have no charge. Always make sure there are fresh 9V batteries in the external transformer if equipped with battery backup.
- Check the circuit breaker box connected to the electrical outlet.

What if my lift chair is rocking from corner to corner after I position the chair?

The floor may be uneven or the carpet may be affecting chair position. Adjust the leg levelers in the area where the chair is rocking. See III. “Your Lift Chair” for instructions on leveling your chair.

Where can I place the external transformer box?

- On the floor away from heat sources in an open, well-ventilated area where it will not be an obstruction.
- On the wall away from heat sources utilizing the optional external transformer wall mount.

Where do I find the serial number on my lift chair?

You can find the serial number in two locations—one is near the rear of the motor on the steel lift mechanism, and the second is attached to the frame below the scissor mechanisms. The model number for your lift chair is printed below the serial number bar code.

Who do I call for service?

Contact your authorized Pride Provider for service.



Your Pride Lift Chair will require routine maintenance checks. You can perform some of these checks, but others may require assistance from an authorized Pride Provider. By following the maintenance checks in this section as scheduled, you can help ensure your lift chair gives you years of trouble-free operation. If you have any questions regarding your lift chair's care, contact your authorized Pride Provider.

FABRIC CARE

- Inspect the fabric on a regular basis for any pulls, tears, or gaps.
- Your lift chair fabric is made of 100% polyester and falls under cleaning code W. Frequent vacuuming and light brushing to remove dust and grime is the recommended cleaning method for your lift chair. If spot cleaning is required, you should use the foam from water-based cleaning agents such as mild detergent or non-solvent upholstery shampoo. Apply the foam with a soft brush in a circular motion and vacuum when dry. Pretest a small area of the fabric with the cleaning agent before using this method. If your lift chair fabric is in an overall soiled condition, use a professional furniture cleaning service.

WARNING! Fabric should not be allowed to come in direct contact with any type of heat source (e.g., a space heater or cigarette). Personal injury or fire damage may occur.



WARNING! Pride strongly recommends that you do not smoke cigarettes while seated in or using your lift chair, although the lift chair has passed the necessary testing requirements for cigarette smoking. You must adhere to the following safety guidelines if you decide to smoke cigarettes while seated in or using your lift chair.

- Do not leave lit cigarettes unattended.
- Keep ashtrays a safe distance from the lift chair.
- Always make sure cigarettes are completely extinguished before disposal.

NOTE: Do not use solvent-type cleaners to spot clean. Do not saturate the fabric. Prevent damage to the fabric; do not expose the lift chair to direct sunlight.

ELECTRONICS CARE

- Inspect all wiring harnesses to make sure they are not damaged or frayed.
- If damage is present, unplug the lift chair and contact your authorized Pride Provider for service.
- Keep all electronics free from moisture and temperature extremes. **Pride Lift Chairs are intended for indoor use only!**



WARNING! Even though the lift chair has passed the necessary testing requirements for ingress of liquids, you should keep electrical connections away from sources of dampness, including direct exposure to water or bodily fluids and incontinence. Check electrical components frequently for signs of corrosion and replace as necessary.

DISPOSAL AND RECYCLING

Your lift chair must be disposed of according to applicable local and national statutory regulations. Contact your local waste disposal agency or authorized Pride Provider for information on proper disposal of lift chair packaging, metal frame components, fabric, electronic components, and batteries.



WARNING! Plastic bags are a suffocation hazard. Dispose of plastic bags properly and do not allow children to play with them.

**TWO-YEAR LIMITED WARRANTY**

For two (2) years from the date of purchase, Pride will repair or replace at our option to the original purchaser any of the following parts found upon examination by an authorized representative of Pride to be defective in material and/or workmanship:

- Steel Frame
- Motors
- Hand Control
- Scissor Mechanisms
- Steel Lift Mechanism

NOTE: Pride reserves the right to replace only the part of the steel lift mechanism that may be defective.

NOT COVERED UNDER WARRANTY

The following parts are classed as wear items, which may under normal wear and tear require replacing. These items are **not** therefore covered under warranty: all fabric. Warranty will also be refused if damage is deemed to have been caused through misuse or accident for which Pride Mobility Products Europe B.V. cannot be deemed responsible.

NOTE: Pride Mobility Products Europe B.V. provides parts only under warranty. Your Pride Provider is responsible for labor and service. Please contact your Pride Provider for information about these services and for any applicable charges.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.



MISE EN GARDE! Soulignent les conditions/situations potentiellement dangereuses qui peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages (symbole noir sur triangle jaune et bordure noire).



OBLIGATOIRE! Ces actions doivent être exécutées tel que spécifié sous peine de vous blesser ou de provoquer des dommages matériels (symbole blanc sur point bleu).



INTERDIT! Ces actions sont interdites; ne jamais tenter sous aucune considération sous peine de vous blesser et/ou de provoquer des dommages matériels (symbole noir sur cercle rouge et rayures rouges).

SVP veuillez compléter les informations ci dessous:


Détaillant Pride: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____

Date d'achat: _____ Numéro de série: _____

NOTE: Ce manuel a été préparé à partir des spécifications et informations les plus récentes disponibles au moment de la publication. Nous nous réservons le droit d'apporter les changements nécessaires de temps à autre. Ces changements au produit peuvent causer des variations entre les illustrations et explications contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté. La dernière version de ce manuel est sur notre site Internet.

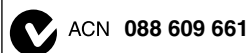

This product is manufactured by:
Pride Mobility Products Corporation
182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694
USA

Copyright © 2009
Pride Mobility Products Europe B.V.
INFMANU3790/Rev A/February 2009/French

SYMBOLES DE SECURITE

Les symboles ci dessous sont utilisés sur le produit pour souligner les mises en garde, les actions obligatoires et les actions interdites. Il est très important de lire les consignes et bien comprendre les symboles. N'enlevez pas les labels de votre produit. Prenez-note que vous pouvez ne pas retrouver certains symboles sur tous les modèles.



Endroit où vous pouvez pincer/écraser vos doigts. Ne placez pas d'objet ou vos doigts près de pièces en mouvement.




Risque de chocs électriques



Lisez et respectez les consignes présentées dans ce manuel.



Poids maximum

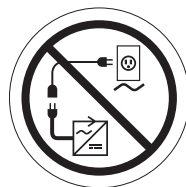

N'utilisez pas de cordon de rallonge pour brancher le transformateur externe ou le chargeur à batteries.



Ne retirez-pas la fiche de mise à la terre car vous risquez de vous électrocuter. Au besoin, utilisez un adaptateur à 3 branches sur une prise à deux fentes.



Disposez des composants électroniques tels que la manette, les batteries, les moteurs et transformateurs électriques correctement. Contactez votre détaillant Pride pour de plus amples informations.



Ne placez pas d'objets sous le fauteuil. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions y compris votre animal de compagnie ou un enfant près du fauteuil pendant le fonctionnement.




Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction y compris un jeune enfant ou votre animal de compagnie. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions y compris votre animal de compagnie ou un enfant près du fauteuil pendant le fonctionnement.




Emplacement de la porte d'accès aux batteries.



Pour usage à l'intérieur seulement. Ne pas exposer à la pluie, neige, glace, sel, ou eau stagnante. Gardez dans un endroit propre et sec.

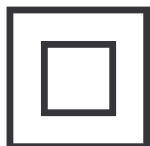

Équipement de classe II

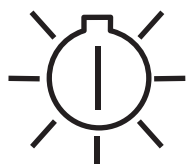

Voyant vert allumé indique que le bloc d'alimentation est sous tension. Ne s'applique pas à tous les modèles.



TYPE B

Degré de protection contre les chocs électriques.



Ce produit a subi et réussi les tests de la norme IEC 60601-1

CONSIGNES DE SECURITE	20
LABELS D'INFORMATION	21
I. INTRODUCTION	24
SECURITE	24
ENTENTE A L'ACHAT	24
ECHANGE D'INFORMATIONS	24
II. CONSIGNES GENERALES	25
MODIFICATIONS	25
LIMITE DE POIDS	25
DANGER DE SE Pincer/ECRASER LES DOIGTS	25
DEGRE DE PROTECTION/MODE DE FONCTIONNEMENT	25
TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT/ENTREPOSAGE	25
EMI/RFI	26
TRANSPORT ET LIVRAISON	26
TRANSPORT DANS UN VEHICULE	26
III. VOTRE FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR	27
COMPOSANTES DU FAUTEUIL	27
COMPOSANTES ELECTRIQUES	28
IV. ASSEMBLAGE/DEMONTAGE	30
ASSEMBLAGE DU FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR	30
MISE EN PLACE DU FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR	31
INSTALLATION DES BATTERIES	31
V. FONCTIONNEMENT	32
PRECAUTIONS A PRENDRE	32
FONCTIONNEMENT DE LA MANETTE DE COMMANDE	32
VI. PROBLEMS ET SOLUTIONS	35
QUESTIONS FREQUEMMENT DE POSEES	35
VII. SOINS ET ENTRETIEN	36
SOINS DU RECOUVREMENT	36
ENTRETIEN DES COMPOSANTES ELECTRONIQUES	36
MISE AU REBUT ET RECYCLAGE	36
VIII. GARANTIE	37
EN ANNEXES	39



SECURITE

Pride Mobility Products Europe B.V. (Pride) vous souhaite la bienvenue. Le produit que vous avez acheté a été conçu selon les toutes dernières technologies afin de maximiser la **sécurité** et le confort. Non pour votre usage quotidien. Apprenez les consignes de **sécurité** et le fonctionnement afin de vous assurer d'obtenir un fonctionnement fiable et sans problème.

Lisez et respectez toutes les instructions, mises en garde et notes de ce manuel ainsi que celles incluses dans la documentation accompagnant le produit avant de tenter de l'utiliser pour une première fois. De plus, soyez avisé que votre **sécurité** est tributaire de votre bon jugement ainsi que des conseils fournis par votre professionnel de la santé, votre détaillant et/ou de votre personne aidante.

Si vous ne comprenez pas quelque information que ce soit dans ce manuel, ou si vous avez besoin d'aide pour la préparation ou la mise en place de votre produit, s.v.p. contactez votre détaillant Pride autorisé. **Suivez les instructions, mise en garde et les notes incluses dans ce manuel ainsi que sur les labels apposés sur le produit sous peine de vous blesser, d'endommager votre fauteuil et d'annuler la garantie.**

ENTENTE A L'ACHAT

En acceptant ce produit, vous vous engagez à ne pas modifier, altérer, enlever ou rendre inutilisables les protecteurs et/ou gardes de sécurité, dispositifs de sécurité. Vous vous engagez à ne pas refuser ni négliger de faire installer les trousse de mise à jour au besoin, fournies par Pride afin de maintenir ou améliorer l'aspect sécuritaire de votre produit.

ECHANGE D'INFORMATIONS

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouvel appareil et sur les services offerts par votre détaillant Pride. Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrions ainsi vous tenir informé si des mesures venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre fauteuil, ou encore sur les nouveaux produits, nouvelles fonctions qui augmenteraient le plaisir associé à l'utilisation de votre fauteuil auto-souleveur. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands

NOTE: Si vous perdez ou égarez votre carte de garantie ou votre manuel du propriétaire, téléphonez ou écrivez-nous, nous vous ferons parvenir immédiatement des documents de remplacement.



Votre fauteuil auto-souleveur est un appareil dernier cri conçu pour améliorer votre autonomie. Pride propose une grande variété de produits adaptés aux besoins de chacun, cependant prenez note que le choix final d'achat et la décision concernant le type de fauteuil auto-souleveur vous incombe si vous en êtes capable ou incombe à votre professionnel (i.e., médecin, ergothérapeute, etc.) le cas échéant.



OBLIGATOIRE! Lisez et respectez les consignes et informations contenues dans ce manuel avant de tenter d'utiliser votre fauteuil auto-souleveur pour la première fois.

Dans certaines situations, incluant des conditions médicales qui exigent une certaine habileté pour l'utilisation vous aurez besoin de la présence d'une personne aidante qualifiée afin de vous initier. Une personne qualifiée peut être un membre de votre famille ou un professionnel de la santé formé pour vous assister lors de l'exécution d'activités quotidiennes telles que l'utilisation sécuritaire de votre fauteuil auto-souleveur.

Vous trouverez ci-dessous des conseils, trucs et autres consignes qui vous seront utiles pour le fonctionnement sécuritaire de votre fauteuil auto-souleveur.

MODIFICATIONS

Pride a conçu votre fauteuil auto-souleveur pour que celui-ci vous procure confort et facilité d'utilisation. Cependant, afin de prévenir blessures et dommages au produit, vous ne devez pas modifier, ajouter, retirer ou rendre inutilisable quelques fonctions, pièces ou parties de votre fauteuil auto-souleveur. Des modifications non-autorisés peuvent annuler la garantie.

NOTE: Utilisez seulement des pièces de remplacement Pride d'origine pour les réparations.

LIMITE DE POIDS

Votre fauteuil auto-souleveur possède une limite de poids maximale. Référez-vous à l' "Annexe A" pour de plus amples informations.



OBLIGATOIRE! N'excédez pas la capacité de poids maximum de votre fauteuil auto-souleveur. Pride ne pourra être tenu responsable des dommages et blessures découlant du non-respect de la consigne du poids maximum.

DANGER DE SE Pincer/ECRASER LES DOIGTS

Le mécanisme à cissex du fauteuil possède des étiquettes de mise en garde aux endroits où il y a danger de se pincer/écraser les doigts. Gardez ces endroits libres et sans obstructions.



MISE EN GARDE! Ne placez pas d'objets ou un membre dans la trajectoire du mécanisme.

DEGRE DE PROTECTION/MODE DE FONCTIONNEMENT

- Équipement de classe II /Protection de type B contre les chocs électriques
- Degré de protection contre la pénétration des solides/liquides—IPX1
- Mode de fonctionnement—Cycle d'utilisation: 2min en fonction «ON»/18min à l'arrêt «OFF»

TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT/ENTREPOSAGE

- Transport ou entreposage: -75°C/-104°F à 70°C/158°F
- Fonctionnement: 10°C/50°F à 40°C/104°F

INTERFERENCE ELECTROMAGNETIQUE ET RADIOMAGNETIQUE (EMI/RFI)

MISE EN GARDE! Des tests en laboratoire ont démontré que les ondes radio et les interférences électromagnétiques peuvent affecter les appareils électriques tel que votre fauteuil auto-souleveur.

Les ondes électromagnétiques et les interférences radio proviennent des sources telles que les téléphones cellulaires, les radios mobiles (walkie-talkies), stations radio, stations de télévision, radio amateur (HAM) liens informatiques, émetteurs micro-ondes, les téléavertisseurs et les radios émetteurs utilisés par les services d'urgence. Dans certains cas, ces ondes peuvent provoquer des mouvements involontaires ou endommager les systèmes de commande des appareils électriques. L'utilisateur peut aider à réduire les interférences électromagnétiques en conservant une distance minimale de 3 mètres (9 pieds) entre le fauteuil et les appareils portable et les équipements de communication de type "RF". Il est recommandé de maintenir au moins 3 mètres (9 pieds) de distance entre le fauteuil auto-souleveur et tout équipement portatif émettant 10 W ou plus de puissance radio. Référez-vous à la documentation accompagnant l'appareil émetteur pour connaître la puissance maximale de cet appareil.

Tout appareil électrique possède un niveau d'immunité (ou résistance) au EMI/RFI. Plus le niveau est élevé meilleure est la protection contre les EMI/RFI. Selon les normes "EMC", ce produit a réussi les tests d'immunité et est classé dans le groupe "1", Classe B, ce qui signifie que le fauteuil élévateur n'utilise l'énergie "RF" que pour son fonctionnement interne. Conséquemment les émissions "RF" sont très faibles et peuvent difficilement provoquer des interférences aux appareils électroniques avoisinant le fauteuil. Le fauteuil est parfaitement sécuritaire et peut être utilisé dans tous les environnements incluant les maisons privées et les hôpitaux.



MISE EN GARDE! Prenez garde aux téléphones cellulaires, radio émetteur, ordinateur portable et autres radio émetteurs car leurs ondes radio peuvent affecter le fonctionnement de votre fauteuil auto-souleveur. Soyez prudent si vous devez utiliser un appareil semblable.



MISE EN GARDE! L'ajout d'accessoires ou de composantes à votre fauteuil auto-souleveur peut accroître la sensibilité de celui-ci au EMI. Ne modifiez pas votre fauteuil auto-souleveur d'aucune façon sans l'autorisation de Pride.

MISE EN GARDE! Votre propre fauteuil auto-souleveur peut lui aussi affecter les appareils électriques de son entourage tel que les systèmes d'alarme.

NOTE: Si un incident de mouvement involontaire de votre fauteuil survient, cessez l'utilisation de votre fauteuil auto-souleveur et contactez Pride pour l'en informer.

TRANSPORT ET LIVRAISON

Avant d'utiliser votre fauteuil auto-souleveur, assurez-vous que vous avez bien reçu toutes les pièces car il se peut que certaines composantes aient été emballées séparément. S'il vous manque des pièces, SVP contactez votre détaillant Pride autorisé immédiatement. Si votre produit a été endommagé (emballage ou contenu) pendant le transport, SVP contactez le transporteur responsable des dommages.

TRANSPORT DANS UN VEHICULE

Si vous transportez votre fauteuil auto-souleveur dans un véhicule routier, certaines composantes (transformateur externe, etc.) doivent être ancrées afin qu'elles ne puissent glisser. De plus le fauteuil auto-souleveur doit lui-aussi être ancré au véhicule car il glisserait lors d'un freinage d'urgence.



COMPOSANTES DU FAUTEUIL

Cette section décrit les caractéristiques de votre fauteuil auto-souleveur. Étudiez bien toutes les fonctions et emplacements de chacune d'elle en prenant note que les illustrations contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté peuvent différer.

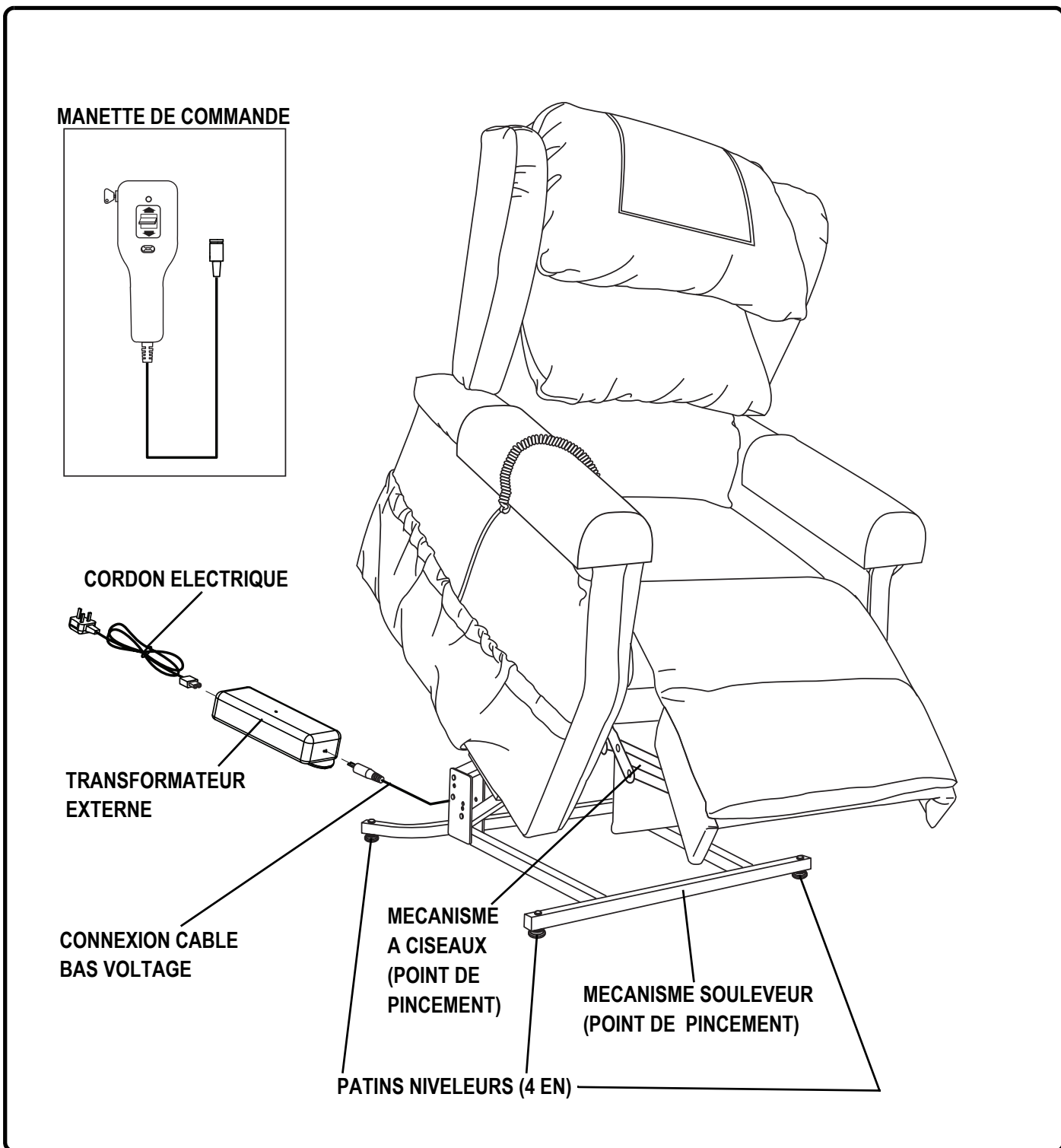


Figure 3.1 Composantes du fauteuil auto-souleveur

Mécanisme auto-souleveur: Réagit aux commandes de la manette pour placer le fauteuil en position relevée, assise ou debout.

Patins niveleurs: Tournez manuellement pour niveler vers le haut ou vers le bas afin de stabiliser le fauteuil avant usage (Fig. 3.2).

Ciseaux du mécanisme: S'allongent ou se rétractent lors du changement de position (Fig. 3.3).



Figure 3.2 Patins niveleurs

MISE EN GARDE! Danger! Prenez garde de vous pincer ou de vous écraser les doigts lorsque vous faites fonctionner le mécanisme élévateur du fauteuil inclinable. Gardez les items suivants et autres objets similaires loin des endroits où ils peuvent être pincés ou écrasés par les articulations du mécanisme du fauteuil:



- membres
- petits enfants
- animaux de compagnie
- fils ou câbles
- tubes d'oxygène
- articles pouvant se coincer tels que les vêtements, couvertures et autres articles semblables
- cordon d'alimentation électrique

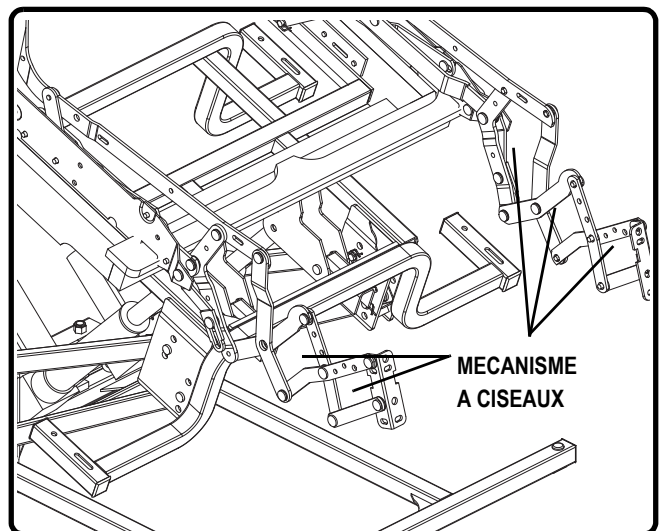


Figure 3.3 Mécanisme à ciseaux

COMPOSANTES ELECTRIQUES

Votre fauteuil auto-souleveur Pride est équipé d'un moteur DC à bas voltage qui transforme le courant standard 90V AC - 264V AC en courant direct (24/39V DC). Les composantes électriques sont le transformateur externe, les batteries et la manette de commande. Gardez les loin de l'humidité en tout temps.



MISE EN GARDE! Gardez les composantes électriques à l'abri de l'humidité en tout temps afin de prévenir les électriques.

Transformateur externe: Se branche dans une prise électrique standard pour alimenter le fauteuil auto-souleveur. Le transformateur peut être équipé d'un voyant lumineux vert qui s'allume lorsque le transformateur est alimenté.

Le transformateur externe peut être muni d'un boîtier moulé pour l'installation sur le mur directement sous la prise électrique. Les vis doivent être dans une membrure du mur pour plus de solidité. Référez vous à l' "Annexe C" pour les instructions de montage.

NOTE: Pride ne pourra être tenu responsable des dommages causés par une installation inadéquate.

Batteries: Procure une alimentation afin de positionner le fauteuil en position assise depuis la position inclinée ou de la position «debout» en cas de panne de courant. Pour les modèles équipés d'un système d'alimentation d'urgence, les batteries sont situées à l'intérieur du transformateur externe.

Manette de commande: Contient les différents boutons pour le fonctionnement du fauteuil auto-souleveur. Référez-vous à la section V. "Fonctionnement" pour de plus amples informations. La manette peut être équipée d'un connecteur rapide afin de la détacher du fauteuil et empêcher toute utilisation.



ASSEMBLAGE DU FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR

Votre fauteuil vous sera livré en deux parties: le dossier et la base. Vous devrez faire un peu d'assemblage avant de pouvoir l'utiliser pour la première fois. Suivez les instructions ci-dessous pour compléter correctement l'assemblage.

Outil requis:

- Clé ouverte de 11-mm (1)

Suivez ces étapes pour assembler le fauteuil élévateur:

1. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "DOWN" jusqu'à ce que le repose-pied soit suffisamment élevé par rapport au sol (Voir la figure. 5.1).
2. Retirez les écrous des boulons de chaque côté du dossier et mettez-les de côté pour usage prochain. Retirez l'attache fil du moteur.



MISE EN GARDE! Vous devez vous assurer que le dossier est installé correctement avant d'utiliser votre fauteuil élévateur sous peine de vous blesser ou de causer des dommages.

3. Orientez la partie du dossier cousinée et la face de la base dans la même direction. Alignez les boulons filetés avec les trous dans les supports de dossier sur la base. Insérez les boulons dans les ouvertures et installez les écrous que vous avez retirés à l'étape 1. Resserrez les écrous avec une pression de serrage de 12 pi/lb (53 Nom) pour bien fixer le dossier en place. (Fig. 4.1).
4. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "UP" jusqu'à ce que le fauteuil soit en position relevée (assise).
5. Retirez la goupille de la base du moteur située sur le dos du fauteuil. Placez le moteur entre les montants du support, alignez les trous dans la base avec ceux des montants. Insérez la goupille dans les trous de la base et des montants pour fixer le moteur.



MISE EN GARDE! Assurez-vous que le moteur est tourné vers la droite (si vous êtes face au dos du fauteuil) afin d'éviter d'endommager les composants du fauteuil élévateur (Fig. 4.2).

NOTE: Assurez-vous que la goupille est bien fixée en place avant de compléter l'assemblage du fauteuil.

6. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "UP" jusqu'à ce que le fauteuil soit en position la plus élevée (debout) (Fig. 5.1). Branchez le fil du moteur de dossier (identifié Vert-A) dans le réceptacle Vert-A de la boîte de contrôle. Branchez le fil du moteur de la base (identifié jaune-B) dans le réceptacle jaune-B de la boîte de contrôle. La boîte de contrôle est située sous le fauteuil auto-souleveur (Annexe B).

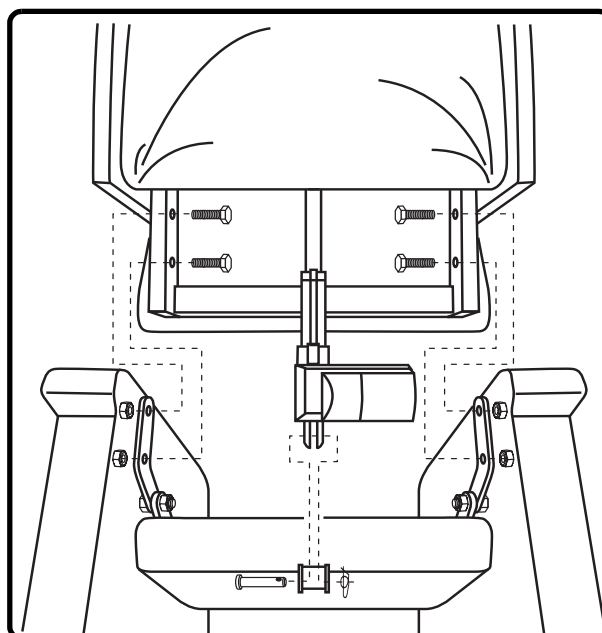


Figure 4.1 Assemblage du fauteuil auto-souleveur



Figure 4.2 Corriger la Position de Mécanisme de positionnement

MISE EN PLACE DU FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR

Votre fauteuil auto-souleveur devrait être placé près d'une prise électrique standard, sur un plancher à niveau, au sec et avec amplement d'espace pour le fonctionnement. Pride recommande de demander de l'aide pour la mise en place du fauteuil afin d'éviter des vous blesser en le soulevant.

Suivez ces consignes pour la mise en place sécuritaire de votre fauteuil auto-souleveur:

1. Placez le dos du fauteuil auto-souleveur à environ 76 cm (30 po) du plus proche obstacle alors que le fauteuil est en position droite. Cette distance peut varier selon le modèle.
2. Réglez les patins niveleurs pour stabiliser le fauteuil auto-souleveur (Fig. 3.2).
3. Installez les batteries dans le transformateur externe. Voir "Installation des batteries" au besoin.
4. Placez le transformateur externe sur le plancher dans un endroit à niveau, bien ventilé et où il ne fera pas obstacle. Installez-le au mur s'il est équipé de cette option.
5. Positionnez le câble d'alimentation bas voltage de manière à ce qu'il ne puisse pas être coincé entre le cadre du fauteuil et le mécanisme.
6. Branchez le câble dans le transformateur externe si ce n'est pas déjà fait.
7. Branchez le cordon d'alimentation directement dans la prise murale. **N'utilisez pas de cordon de rallonge électrique!**

NOTE: Si vous percevez un problème quelconque lors de la préparation ou de la mise en place de votre fauteuil auto-souleveur, stoppez et contactez votre détaillant Pride autorisé immédiatement. Afin de prévenir les blessures et/ou dommages au produit, ne branchez pas le fauteuil dans la prise électrique tant que le problème n'est pas résolu et ne tentez pas de corriger un problème électrique par vous-même.

INSTALLATION DES BATTERIES

Votre fauteuil est possiblement équipé d'un système d'alimentation d'urgence en cas de panne de courant. Le système est alimenté par deux batteries 9V (non incluses) qui doivent être installées dans le transformateur externe.

Suivez les étapes suivantes pour installer les batteries:

1. Débranchez le transformateur externe de la prise électrique.
2. Ouvrez la porte identifiée sur le transformateur externe.
3. Installez deux batteries 9V dans le transformateur externe (Fig. 4.3).
4. Remplacez la porte à batteries.

NOTE: Assurez-vous de toujours avoir deux batteries 9V fraîches installées dans votre système d'urgence car le système ne recharge pas les batteries. Des batteries fraîches sont des piles 9V de type alcaline qui sont remplacées après chaque utilisation du système d'urgence ou au moins une fois l'an si le système d'urgence n'a pas été sollicité.

NOTE: Si vous devez débrancher le fauteuil pour une période prolongée (plus d'une heure), retirez les batteries du transformateur car celui-ci drainera les batteries même si le fauteuil n'est pas en fonction.

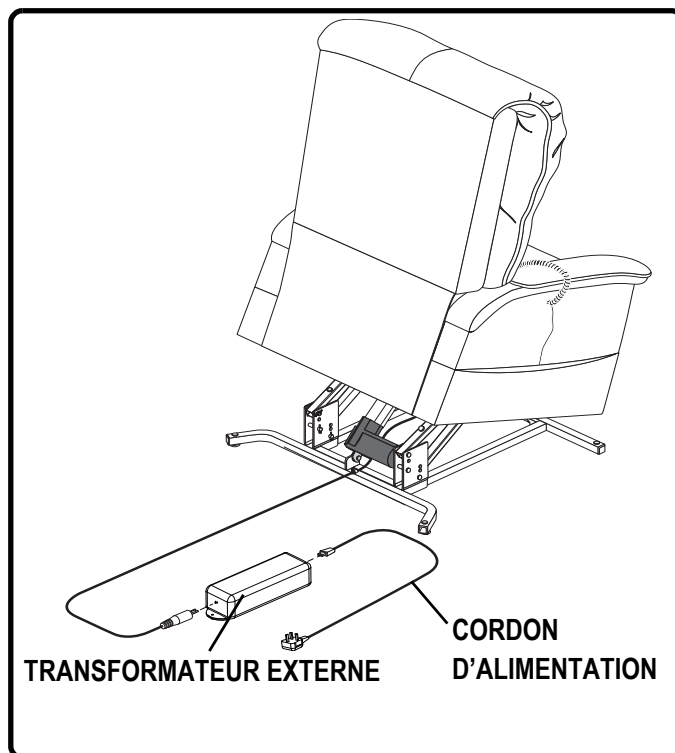


Figure 4.3 Emplacement des batteries



PRECAUTIONS A PRENDRE

Vous devez prendre certaines précautions lorsque vous utilisez votre fauteuil auto-souleveur. Lisez et suivez les consignes afin de vous assurer un bon fonctionnement et éviter les blessures et/ou dommages au produit.

- Branchez le cordon d'alimentation directement dans une prise. **N'utilisez pas de rallonge électrique!**
- Ne placez pas d'objets (par exemple un verre à boire) sur ou près du transformateur externe.
- Si le transformateur externe ou la manette doivent être nettoyés, débranchez le cordon de la prise électrique, utilisez un chiffon légèrement humide et laissez les composantes s'assécher avant de rebrancher le cordon.
- Inspectez périodiquement la manette et les fils afin de détecter des dommages visibles.
- Gardez toujours la manette loin des sources de chaleur.
- Assurez-vous que la manette ne fasse pas obstacle lorsque vous vous assoyez.
- Tenez les enfants et objets loin des pièces en mouvement lorsque vous faites fonctionner votre fauteuil auto-souleveur.
- Ne laissez pas d'enfant jouer près du fauteuil lorsque vous le faites fonctionner. Seule la personne qui a besoin du fauteuil devrait l'utiliser.
- Vous pouvez détacher la manette du fauteuil lorsque vous voulez prévenir l'utilisation non autorisée du fauteuil.
- Gardez le fauteuil en position droit et fermé lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Ne pas s'asseoir ou se tenir sur le repose-pieds ou son extension.
- Ne vous laissez pas tomber dans le fauteuil auto-souleveur lorsque celui-ci est partiellement soulevé.



INTERDIT! Ne placez aucun objet sous le fauteuil et/ou sous le repose-pied. Assurez-vous qu'il n'y ait aucune obstruction incluant un petit enfant ou un animal de compagnie avant de le faire fonctionner.



MISE EN GARDE! Évitez les risques de chute, de feux, de choc électrique ou de pincement/écrasement de doigts. Respectez toutes les consignes et précautions.

FONCTIONNEMENT DE LA MANETTE DE COMMANDE

La manette de commande peut être équipée de boutons qui contrôlent le fonctionnement du dossier, de la base du fauteuil et du repose-pieds (Fig. 5.1).

MISE EN GARDE! Ne pas vous appuyez ni mettre du poids sur le dossier lorsque celui-ci est en position complètement inclinée sous peine de faire basculer le fauteuil et de provoquer des blessures et/ou des dommages.



MISE EN GARDE! N'utilisez pas le repose-pied comme siège car celui-ci n'a pas été conçu à cet effet. Il se peut que le fauteuil se renverse, devienne instable ou encore que les composantes du fauteuil ne s'endommagent entraînant de blessures corporelles.

Manette de Commande Opération

Voici comment s'asseoir dans votre fauteuil auto souleveur (Fig. 5.1):

1. Faites glisser le bouton de blocage vers la droite.
2. Pesez et tenez le bouton «UP/DOWN» en position «UP» pour élever le siège de la position assise vers la position debout.
3. Approchez vous et prenez place bien au centre du siège en vous appuyant sur les accoudoirs au besoin.
4. Pesez sur le bouton «DOWN» pour abaisser le fauteuil vers la position assise confortablement.

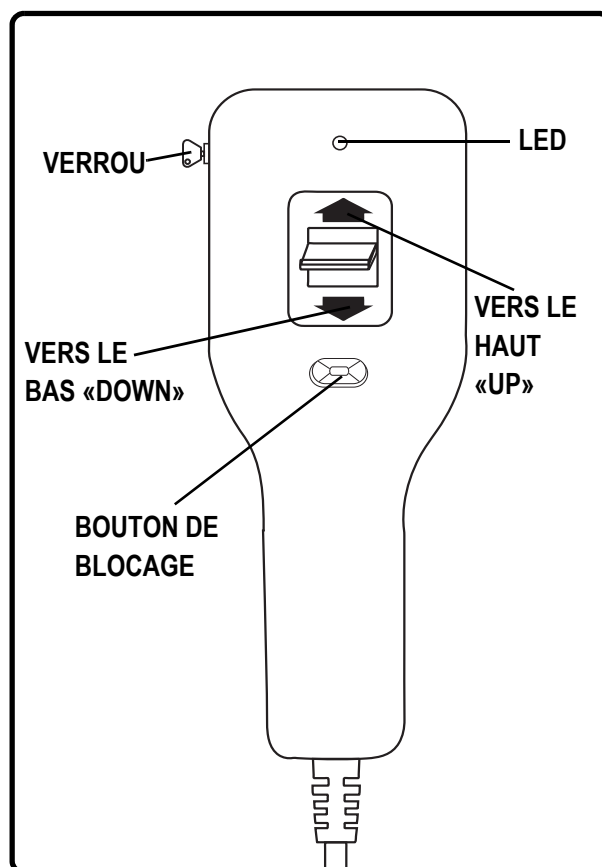


Figure 5.1 Manette de Commande

Voici comment s'incliner dans votre fauteuil auto-souveleur à partir de la position assis (Fig. 5.1):

1. Faites glisser le bouton de blocage vers la gauche.
2. Pesez sur le bouton «DOWN» pour incliner le fauteuil vers une position confortable.
3. Pesez sur le bouton «UP» sur la manette de commande pour ramener le fauteuil en position relevée droite pour être assis confortablement. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint la position désirée.

Suivez ces étapes pour élever ou abaisser le repose-pieds lorsque vous êtes en position assise ou inclinée (Fig. 5.1):

1. Faites glisser le bouton de blocage vers la droite.
2. Pesez et tenez le bouton «UP/DOWN» en position «DOWN» jusqu'à que le repose-pieds atteigne le niveau désiré.
3. Pesez et tenez le bouton en position «UP» pour abaisser le repose-pieds.

NOTE: La manette de votre fauteuil est possiblement équipée d'un voyant lumineux qui s'allume lorsque la manette est sous tension. Si celui-ci ne s'allume pas pendant le fonctionnement, contactez votre détaillant Pride autorisé.

Suivez ces étapes pour passer de la position assise à la position debout (Fig. 5.1):

1. Glissez le bouton de blocage vers la droite.
2. Pesez sur le bouton «up» de la manette de commande pour élever le fauteuil vers la position debout.
3. Relâchez le bouton lorsque vous avez atteint la hauteur ou vous pouvez vous tenir debout confortablement.

Suivez les étapes suivantes pour placez votre fauteuil auto-souveleur dans la position "Trendelenburg" alors que vous êtes en position "assise" (Fig. 5.1):

1. Faites glisser le commutateur vers la droite.
2. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "DOWN" jusqu'à ce que le repose-pied soit suffisamment élevé par rapport au sol (Voir la figure. 5.1).
3. Alors que le repose-pied est élevé, pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "DOWN" jusqu'à ce que vos pieds soient plus élevés que votre tête.
4. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "UP" pour retourner vers la position assise.
5. À partir de la position "assise", pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "DOWN" pour abaisser le repose-pied.

NOTE: La position "Trendelenburg" est conçue pour améliorer la circulation sanguine dans les membres inférieurs et vers le cœur.

Suivez les étapes suivantes pour placez votre fauteuil auto-souveleur dans la position "Gravité Zéro" alors que vous êtes en position "assise" (Fig. 5.1):

1. Faites glisser le commutateur vers la droite.
2. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "DOWN" jusqu'à ce que vos cuisses et vos jambes soient légèrement plus élevées que votre cœur dans une position corporelle en "V".
3. Pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "UP" pour retourner vers la position assise.
4. À partir de la position "assise", pesez et tenez le bouton "up/down" dans la position "DOWN" pour abaisser le repose-pied.

NOTE: La position "zéro gravité" est conçue pour alléger la pression sur la colonne vertébrale et améliorer la circulation sanguine dans son ensemble.

VERROU

Votre manette de contrôle est équipée d'un verrou à clé qui bloque complètement le fonctionnement de la manette.

Suivez les instructions suivantes pour le fonctionnement du verrou (Fig 5.1):

1. Retirez la clé du verrou pour verrouiller toutes les fonctions de la manette.
2. Réinsérez la clé pour rétablir le fonctionnement.



MISE EN GARDE! Évitez les blessures! Retirez la clé de la manette lorsque le fauteuil n'est pas occupé.

NOTE: Consigne de sécurité supplémentaire. Pride recommande de débrancher le connecteur rapide de la manette et de la ranger dans un endroit hors d'atteinte de jeunes enfants lorsque le fauteuil n'est pas en usage.



Votre fauteuil auto-souleveur Pride est un produit à la fine pointe de la technologie conçu pour améliorer la mobilité des personnes. Votre fauteuil auto-souleveur devrait vous procurer maintes années de service sans problème, cependant, si un problème survient vous trouverez ci-dessous des indications afin d'y remédier sans complication. Si vous croyez ne pas pouvoir solutionner le problème en suivant les étapes ci-dessous, contactez votre détaillant Pride autorisé pour du service. SVP ayez en main le numéro de modèle, le numéro de série et la nature du problème avant de téléphoner.

QUESTIONS FREQUEMMENT DE POSEES

Pourquoi mon fauteuil auto-souleveur refuse-t-il de fonctionner?

- Vérifiez que le transformateur externe est bien branché dans une prise électrique.
- Vérifiez le disjoncteur (circuit) de la prise électrique.
- Assurez-vous que le fil bas voltage est bien branché au transformateur externe.
- Assurez-vous que la manette et le(s) moteur(s) sont branchés correctement.
- Assurez-vous que le fil bas voltage est bien branché au(x) moteur(s).

Pourquoi mon fauteuil fonctionne seulement dans une direction?

- Vérifiez le fonctionnement du bouton «up/down» sur la manette. Il doit glisser de la position «UP» vers la position «DOWN» sans résistance. Si le bouton ne glisse pas sans adhérer, il faudra peut-être remplacer la manette de commande.
- Contactez votre détaillant Pride autorisé pour obtenir de l'aide.

Que faire si mon fauteuil auto-souleveur stoppe pendant que je me soulève?

- Votre fauteuil auto-souleveur est équipé d'une protection thermique interne située sur le transformateur externe afin de protéger le module de contrôle contre la surchauffe. Si la protection thermique coupe le courant, laissez le fauteuil auto-souleveur reposer pour environ 10 minutes afin que le moteur se refroidisse, puis reprenez l'utilisation normale. Si vous constatez que les moteurs surchauffent fréquemment, contactez votre détaillant Pride autorisé.
- Il se peut qu'il y ait eu une panne de courant et/ou il n'y ait pas de batteries installées dans le transformateur externe ou les batteries sont à plat. Assurez-vous de toujours avoir des batteries 9V fraîches dans le transformateur externe.
- Vérifiez le disjoncteur (circuit) de la prise électrique.

Que faire si mon fauteuil auto-souleveur oscille d'un coin à l'autre lorsqu'il est en place?

Le plancher est peut-être inégal ou un tapis affecte la position du fauteuil. Ajustez les patins niveleurs dans les coins où le fauteuil oscille, Voir la section III. "Votre Fauteuil auto-souleveur" pour les instructions.

Où puis-je placer le transformateur externe?

- Sur le plancher loin des sources de chaleur, dans un endroit bien ventilé et où il ne fera pas obstruction.
- Sur le mur, loin des sources de chaleur, en le fixant à l'aide de la trousse de fixation pour transformateur externe.

Où se trouve le numéro de série de mon fauteuil auto-souleveur?

Le numéro se trouve en deux endroits: près de l'arrière du moteur sur le cadre en métal du mécanisme, le second est attaché au cadre en dessous du mécanisme à ciseau. Le numéro de modèle de votre fauteuil auto-souleveur est imprimé sous le code barre du numéro de série.

Qui dois-je appeler pour obtenir du service?

Contactez votre détaillant Pride autorisé pour obtenir du service.



Votre fauteuil auto-souleveur Pride doit subir des vérifications de routine. Vous pouvez faire certaines inspections vous-même tandis que d'autres inspections peuvent exiger que votre détaillant autorisé Pride les exécute. En respectant la cédule des vérifications, vous vous assurez que votre fauteuil auto-souleveur vous procurera plusieurs années de service sans problèmes. Si vous avez des questions concernant l'entretien votre fauteuil auto-souleveur, contactez votre détaillant Pride autorisé.

SOINS DU RECOUVREMENT

- Inspectez le recouvrement pour voir s'il y a des fils tirés, des fentes ou des déchirures.
- Le recouvrement de votre fauteuil est composé à 100% polyester et est coté «W» pour le nettoyage. Nous recommandons de le nettoyer régulièrement avec un aspirateur et une brosse douce afin de retirer la poussière. Pour enlever une tache, utilisez un nettoyeur moussant à base d'eau pour tissu ou un shampoing pour tissu. Appliquez la mousse avec une brosse dans un mouvement circulaire et passer l'aspirateur lorsque après que le tout ait séché. Faites un test sur une petite surface avant de commencer le nettoyage. Si votre fauteuil est très sale, confiez le nettoyage à un professionnel.

MISE EN GARDE! Le recouvrement ne doit jamais être mis en contact direct avec une source de chaleur telle qu'une chauffette ou une cigarette sous peine de vous blesser et/ou de provoquer un incendie.



MISE EN GARDE! Pride recommande fortement de ne pas fumer lorsque vous prenez place ou que vous faites fonctionner votre fauteuil auto-souleveur, même si votre fauteuil auto-souleveur a réussi les tests d'exposition à la cigarette. Si vous décidez de fumer dans votre fauteuil auto-souleveur, vous devez respecter les consignes suivantes:

- Ne laissez-pas de cigarette allumée sans surveillance.
- Gardez les cendriers à distance du fauteuil auto-souleveur.
- Assurez-vous de bien éteindre les mégots de cigarette avant d'en disposer.

NOTE: N'utilisez pas de nettoyeur à base de solvant pour enlever une tache. Ne saturez pas le tissu. Ne placez pas le fauteuil en plein soleil afin de prévenir les dommages au recouvrement.

ENTRETIEN DES COMPOSANTES ELECTRONIQUES

- Inspectez tous les fils pour déceler des dommages ou de l'usure.
- Si vous décelez des dommages, débranchez le fauteuil et contactez votre détaillant Pride autorisé pour le faire réparer.
- Gardez les composantes électroniques bien au sec, loin de toute humidité et dans un endroit tempéré. **Les fauteuils auto-souleveurs Pride sont conçus pour l'utilisation à l'intérieur seulement.**



MISE EN GARDE! Même si votre fauteuil a réussi les test d'exposition aux liquides, gardez votre fauteuil à l'abri des sources d'humidité tel que l'exposition directe à de l'eau, les liquides corporels et l'incontinence. Inspectez les composantes électriques fréquemment et remplacez-les si vous décelez de la corrosion.

MISE AU REBUT ET RECYCLAGE

Votre fauteuil auto-souleveur doit être mis au rebut en respectant les lois et règlements de votre municipalité. Contactez votre organisme local ou votre détaillant Pride autorisé pour obtenir les informations sur la mise au rebut et le recyclage des pièces en métal, en bois, en plastique, batteries et l'emballage de votre fauteuil.



MISE EN GARDE! Les sacs en plastique sont dangereux pour les jeunes enfants. Assurez-vous d'en disposer de façon sécuritaire.

**GARANTIE LIMITEE DE DEUX ANS**

Pendant les deux (2) années à partir de la date d'achat, Pride réparera ou remplacera selon son choix, pour l'acheteur d'origine seulement, les pièces suivantes trouvées défectueuses après examen par son représentant:

- Structure métallique
- Moteur
- Manette de commande
- Ciseaux du mécanisme
- Pièces métallique du mécanisme élévateur

NOTE: Pride se réserve le droit de remplacer seulement la pièce du mécanisme de métal qui s'avère être défectueuse.

NON COUVERT PAR LA GARANTIE

Les pièces énumérées sont considérées sujettes à l'usure et doivent être remplacées de temps à autre. Toutes les pièces en tissu ne sont pas couvertes par cette garantie. La garantie ne sera pas honorée si les dommages ont été causés par un mauvais usage et/ou un accident. Pride Mobility Products Europe B.V. ne pourra être tenu responsable pour de type de dommages.

NOTE: Pride Mobility Products Europe B.V. fournit seulement les pièces sous garantie. Votre détaillant peut fournir la main d'œuvre et le service. S.V.P. contactez votre détaillant Pride pour obtenir les informations relatives aux frais de main d'œuvre et autres frais applicables.

LIFT CHAIR WEIGHT CAPACITY	
Model Number	T3
Rated Weight Capacity	170 kg (375 lbs.)



MANDATORY! Stay within the specified weight capacity of your lift chair. Exceeding the weight capacity voids your Pride Lift Chair warranty.

LIMITE DE POIDS FAUTEUILS AUTO-SOULEVEUR	
Modele	T3
Poids Maximal	170 kg (375 lbs.)



OBLIGATOIRE! N'excédez pas la limite de poids maximale de votre fauteuil auto-souleveur sous peine d'annuler la garantie offerte par Pride.

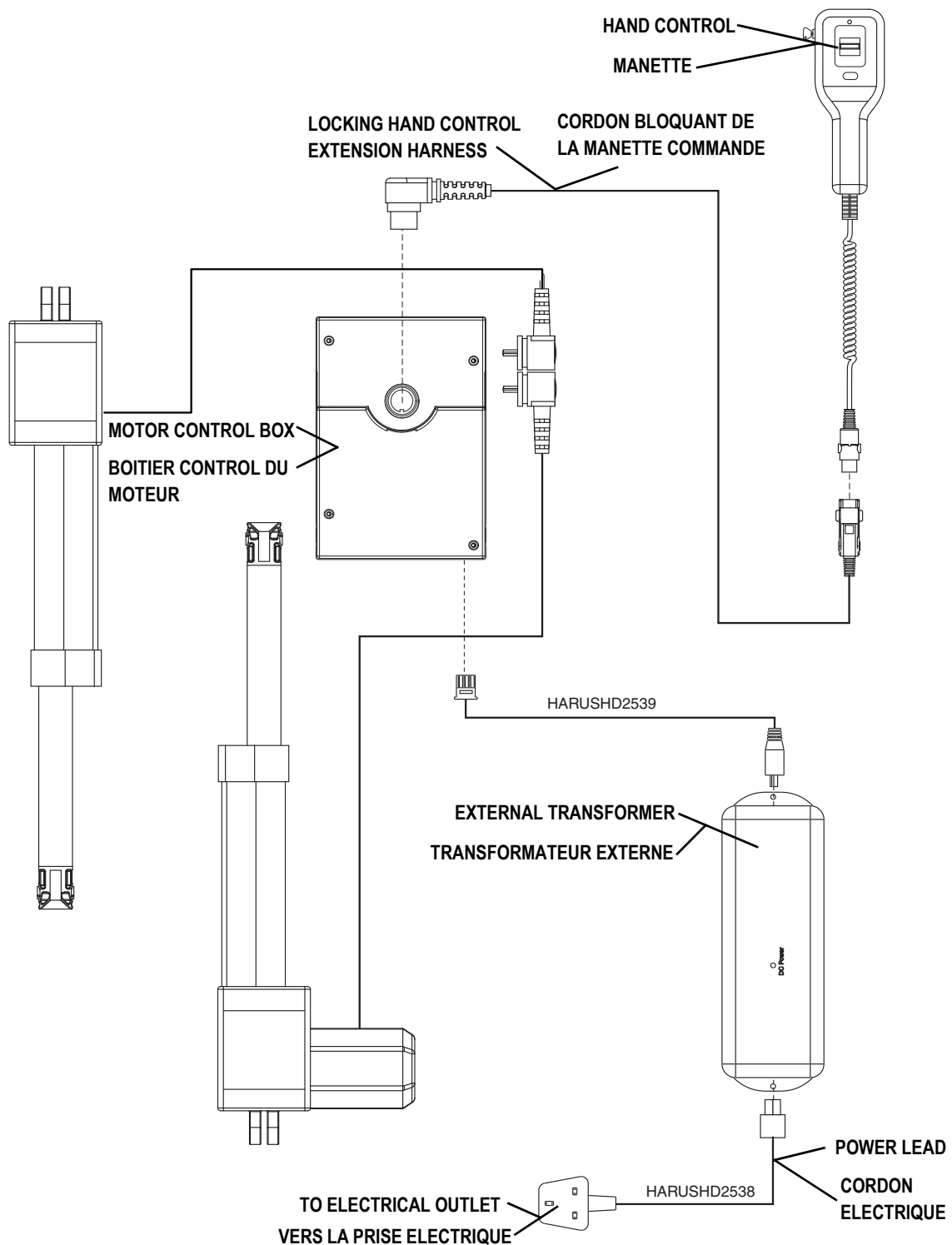



Diagram 1. Lift Chair Electrical Wiring Diagram
 Diagramme 1. Schéma circuit électrique modèles

EXTERNAL TRANSFORMER OPTIONAL WALL MOUNT DIAGRAM

Cut out this diagram (1:1 scale) and use to mark area of placement for the external transformer.

SCHEMA MONTAGE MURAL FACULTATIF TRANSFORMATEUR EXTERNE

Découpez le schéma (échelle de 1:1) et utilisez-le pour l'installation au mur du transformateur externe.

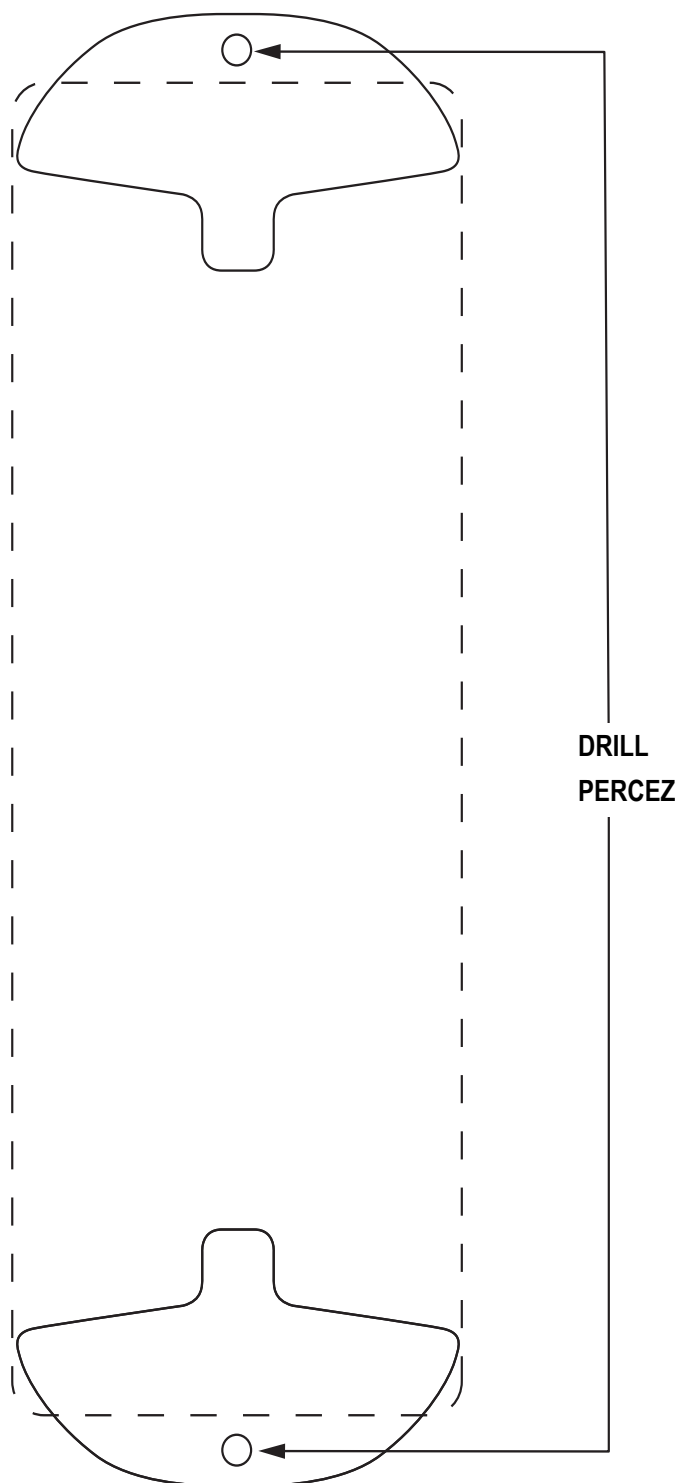

(This page intentionally left blank.)



Pride

Mobility Products Europe B.V.

Pride Mobility Products Europe B.V.

Castricummer Werf 26

1901 RW Castricum

The Netherlands

pridemobility.com