



Stealth Products

Positionnement et Support

Manuel du Propriétaire



Appui-tête Tri Comfort

Le Manuel du Propriétaire et le Guide D'entretien
de Stealth pour L'appui-Tête Tri Comfort

Les produits de Stealth visent la satisfaction du client à 100%. Votre entière satisfaction est importante. Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou modifications suggérées qui permettront d'améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos produits.

Vous pouvez nous joindre à l'adresse:

104 John Kelly Drive, Burnet, TX 78611

Téléphone: (512) 715-9995

Numéro Sans Frais: 1(800) 965-9229

Télécopieur: (512) 715-9954

Numéro Sans Frais: 1(800) 806-1225

info@stealthproducts.com

www.stealthproducts.com

Généralités

Lire et comprendre toutes les instructions avant l'utilisation du produit. Le fait de ne pas suivre les instructions et mises en garde dans ce document peut entraîner des dommages matériels, des blessures ou la mort. Une mauvaise utilisation du produit résultant du non-respect des instructions annulera la garantie.

Cesser immédiatement d'utiliser le produit si une fonction est compromise, des pièces sont manquantes, lâches, ou s'il présente des signes d'usure excessive. Consulter votre fournisseur pour les réparations, de réglage ou le remplacement.

Informations Importantes!

Toutes les personnes responsables de l'adaptation, du réglage, et de l'usage quotidien des appareils décrits dans ces instructions doivent connaître et comprendre tous les aspects liés à la sécurité des appareils mentionnés.

Pour que nos produits soient utilisés avec succès, vous devez:

- Lire et comprendre toutes les instructions et les mises en garde.
- Maintenir nos produits selon nos instructions en matière de soins et d'entretien.
- Les appareils devraient être installés et réglés par un technicien qualifié.

Référence du Fournisseur

Fournisseur: _____

Téléphone: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Modèle: _____

Avant de procéder au montage ou à l'utilisation de ce produit, il est important que vous lisiez et compreniez le contenu de ces consignes de montage et d'utilisation. Les consignes d'installation vous guideront à travers les possibilités de l'appui-tête Tri Comfort.

Les consignes sont rédigées dans l'intention explicite d'utilisation avec des configurations standard. Elles contiennent également des informations importantes sur la sécurité et l'entretien. Pour obtenir de l'aide ou des applications plus avancées, veuillez contacter votre fournisseur ou Stealth Products au (512) 715-9995 ou sans frais au 1-800-965-9229.

Toujours conserver les consignes d'utilisation dans un endroit sûr afin qu'elles puissent être consultées au besoin.

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications sont basées sur les informations sur les produits qui étaient disponibles au moment de l'impression. Les images et illustrations indiquées dans ces consignes sont des exemples représentatifs et ne sont pas destinées à être des représentations précises des différentes parties du produit.

Commande de Documents

Vous pouvez télécharger des exemplaires supplémentaires de ce manuel du propriétaire sur le site Web de Stealth:

www.stealthproducts.com/gui/docs/?type=usr&

Or rechercher:

Manuel du propriétaire Tri Comfort dans la barre de recherche en haut de la page.

L'appui-tête Tri Comfort est conçu et fabriqué selon les normes les plus élevées. Nos coussins/housses sont garantis exempts de défauts de matériaux et de main-d'œuvre pour une période de 24 mois. En cas de défaut de matériaux ou main-d'œuvre, Stealth Products réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, le coussin/housse de l'appui-tête Tri Comfort. Cette garantie ne couvre pas les appuis-tête qui ont été mal utilisés, maltraités ou endommagés par l'utilisateur et jugé comme tel par Stealth Products, LLC.

Les réclamations et les réparations devraient être traitées par le fournisseur de Stealth Products le plus proche.

Personne n'est autorisé à modifier, à prolonger, ou à renoncer aux garanties de Stealth Products, LLC. Stealth Products garantit ce produit contre toute défaillance en raison de défauts de matériau ou de main-d'œuvre:

Matériel: 5 ans

Composants électroniques: 3 ans

Limitations

4.1

Cette garantie ne couvre pas les éléments qui peuvent nécessiter un remplacement en raison de l'usure normale:

- Revêtements extérieurs
- Revêtements intérieurs
- Des circonstances qui échappent au contrôle de Stealth.
- La main-d'œuvre, les appels de service, le transport et d'autres frais engagés pour la réparation du produit, sauf autorisation expresse, À L'AVANCE, par Stealth Products, LLC.
- Les réparations et/ou les modifications apportées à une pièce sans l'accord spécifique de Stealth.

Les exclusions comprennent également des composants présentant des dommages causés par:

- L'exposition à l'humidité

1.0 Satisfaction du Client	i
2.0 Informations Importantes	ii
3.0 Introduction.....	iii
4.0 Garantie	iv
4.1 Limitations.....	iv
5.0 Table des Matières	v
6.0 Étiquettes de Mise en Garde	vi
6.1 Étiquettes de Mise en Garde	vi
6.2 Responsabilité Limitée	vi
6.3 Tests.....	vi
7.0 Pièces et Accessoires	1
7.1 Pièces Fournies	1
7.2 Tailles Disponibles	1
7.3 Pour le Montage	1
8.0 Montage de L'appui-Tête au Dispositif	2
8.1 Quincaillerie à Axes ou Liaisons Multiples	2
8.2 Quincaillerie à Axes Multiples	2
8.3 Quincaillerie de Liaison	3
8.4 Dispositif de Rabattement	3
8.5 Quincaillerie Standard	4
9.0 Première Utilisation	5
9.1 Assistance des Revendeurs	5
9.2 Test par L'utilisateur	5
9.3 Conditions D'utilisation	5
10.0 Entretien	6
10.1 Entretien et Maintenance	6

Étiquettes de Mise en Garde

6.1

Les mises en garde sont incluses pour la sécurité de l'utilisateur, du client, de l'opérateur et de la propriété. Veuillez lire et comprendre ce que les mots indicateurs **SÉCURITÉ**, **AVIS**, **ATTENTION**, **MISE EN GARDE** et **DANGER** signifient, comment ils pourraient affecter l'utilisateur, ceux autour de l'utilisateur et la propriété.

 DANGER	Identifie une situation imminente qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
 MISE EN GARDE	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) peut entraîner des blessures graves , la mort , et des dommages matériels .
 ATTENTION	Identifie une situation potentielle qui (si elle n'est pas évitée) entraînera des blessures mineures à modérées , et des dommages matériels .
AVIS	Identifie des informations importantes qui ne sont pas liées à des blessures, mais à des dommages matériels potentiels.
SÉCURITÉ	Indique les étapes ou les instructions pour des pratiques sûres, des rappels de procédures de sécurité, ou des équipements de sécurité importants qui pourraient être nécessaires.

Responsabilité Limitée

6.2

Stealth Products, LLC décline toute responsabilité pour les dommages corporels ou les dommages matériels pouvant découler de l'échec de l'utilisateur ou d'autres personnes de suivre les recommandations, les mises en garde et les instructions contenues dans ce manuel.

Tests

6.3

La configuration et conduite initiales doivent être effectuées dans un espace ouvert sans obstacles jusqu'à ce que l'utilisateur soit parfaitement en mesure de conduire en toute sécurité.

Le Appui-tête Tri Comfort doit toujours être réglé sans qu'une personne soit assise dans le fauteuil roulant jusqu'à ce que chaque modification de l'installation physique ou réglage soit terminé.

Pièces Fournies

7.1

Chaque support de dossier du siège est fourni avec les composantes suivantes:

- Deux vis à douille de 1/4-20 x 3/4 po.
- Quatre vis à douille de 10-32 x 3/4 po pour le montage sur le dossier du siège.

Tailles Disponibles


7.2

Numéro de Pièce Taille	TCP505 Niño X-Petit	TCP405 Petit	TCP305 Moyen	TCP205 Grand	TCP105 Très Grand	TCP905 Configurations Personnalisées
Largeur	6in.	8in.	10in.	14in.	19in.	Configurations Personnalisées
Hauteur	4in.	6in.	6in.	6in.	6in.	Configurations Personnalisées

Pour le Montage

7.3

1. Percer les trous nécessaires dans le dossier du siège.
2. Insérer les vis à douille de 1/4-20 et/ou 10-32 po dans les trous prévus dans le cadre du dossier du siège et à travers le dossier du siège.
3. Fixer avec des écrous sur le côté opposé.

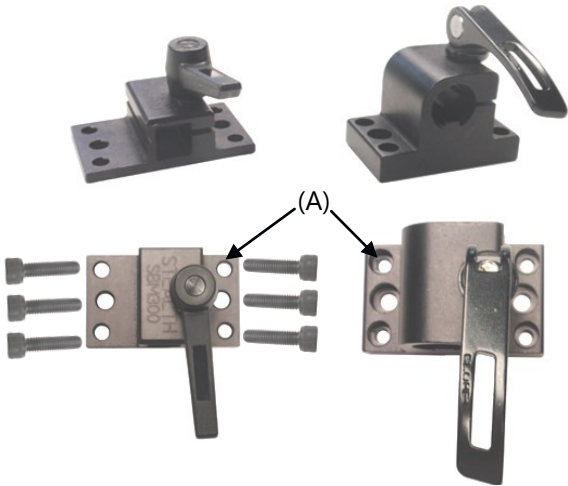

Quincaillerie à Axes ou Liaisons Multiples

8.1

1. Pour monter la quincaillerie à axes ou liaisons multiples sur l'appui-tête:
2. Placer la rotule de 1 po dans la douille indiquée à l'arrière de l'appui-tête.
3. Placer la bague fendue autour de la rotule de 1 po.
4. Insérer les trois vis à douille [B] à travers la bague et dans les trous taraudés à l'arrière de l'appui-tête.
5. Serrer les vis avec une clé hexagonale de 5/32 po.




Il existe trois points de réglage sur la quincaillerie à axes multiples.

- Angle
- Avant/Arrière
- Réglage Rotatif

Pour Régler:

1. Desserrer légèrement les vis à douille et la vis à tête plate dans le triangle (C).
2. Régler la position souhaitée et resserrer les vis.

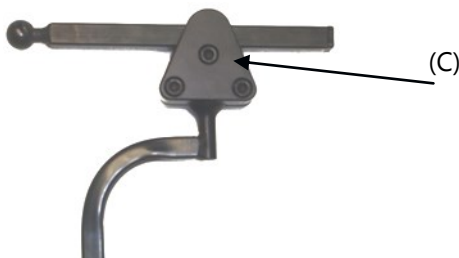


Quincaillerie à Liaison

8.3

Il existe trois points de réglage de l'angle sur la quincaillerie de liaison. Pour régler les angles (D):

1. Desserrer légèrement les vis à tête plate.
2. Régler les angles souhaités et resserrer les vis.

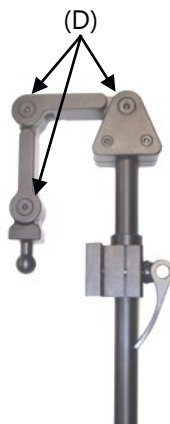


Dispositif de Rabattement

8.4

Pour utiliser la fonction de rabattement (avec la quincaillerie de liaison/quincaillerie de liaison pour décalage):

1. Appuyer sur le bouton de déclenchement rouge (E); la quincaillerie se rabat.
2. Le matériel se verrouille automatiquement en place en revenant à la position verticale.

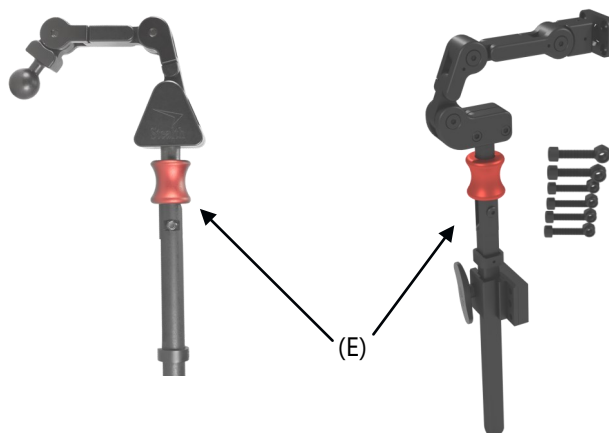


Quincaillerie Standard

8.5

La quincaillerie standard offre un réglage vers l'avant/arrière. Pour régler:

1. Desserrer légèrement les vis à douille (F).
2. Régler à la position souhaitée et resserrer les vis.

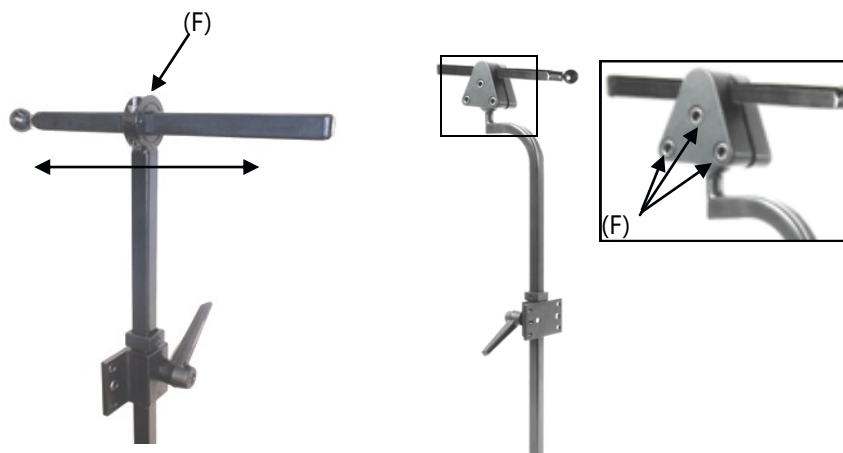

AVIS

Tous les appuis-tête, en dehors de leur réglage standard, offrent également un réglage de la hauteur via le cadre du dossier du fauteuil.

MISE EN GARDE

Durant le transport, s'assurer que le client est correctement aligné et que les ceintures de sécurité et le harnais sont bouclés.

MISE EN GARDE

L'appui-tête Tri Comfort n'est pas destiné à être utilisé comme un stabilisateur pendant le transport.

Assistance des Revendeurs

9.1

Lors de la première utilisation par le client, il est conseillé que le revendeur ou le technicien d'entretien aide et explique la configuration au client (l'utilisateur et/ou à la personne d'aide). Si nécessaire, le revendeur peut faire les derniers réglages.



MISE EN GARDE

L'appui-tête Tri Comfort ne doit être prescrit et installé que par des professionnels de la santé qualifiés.

Test par L'utilisateur

9.2

Il est important que le client soit pleinement conscient de l'installation et de la façon dont l'appui-tête peut être réglé afin d'obtenir, autant que possible, le meilleur positionnement. En tant que revendeur, procéder comme suit:

- Expliquer et montrer au client comment vous avez exécuté l'installation, et expliquer la fonction.

Demander à l'utilisateur de tester la position de l'appui-tête Tri Comfort:

- L'appui-tête se trouve-t-il dans la position appropriée pour le client?
- L'utilisateur peut-il faire fonctionner le fauteuil en toute sécurité?
- La position de l'appui-tête série Tri Comfort est-elle optimale pour l'utilisateur?

Si nécessaire, régler l'appui-tête Tri Comfort à la position appropriée.

Expliquer au client, les problèmes potentiels et la façon de les résoudre.

Conditions D'Utilisation

9.3

L'appui-tête Tri Comfort est destiné à être utilisé tel qu'installé par le concessionnaire, selon les consignes d'installation dans ce manuel.

- Les conditions d'utilisation prévues sont communiquées par le revendeur ou le technicien d'entretien à l'utilisateur et/ou à la personne d'aide lors de la première utilisation.
- Si les conditions d'utilisation changent considérablement, veuillez contacter votre revendeur ou un technicien qualifié afin d'éviter une usure et détérioration excessives ou des dommages involontaires.

Entretien et Maintenance

10.1

- Vérifier régulièrement la quincaillerie pour y déceler des vis desserrées ou des pièces usées.
- Inspecter l'appui-tête pour y déceler tout problème avec la mousse et/ou tout métal débordant de la mousse. Cela pourrait être potentiellement dangereux pour le client.
- Pour laver la housse de l'appui-tête, retirer la housse de l'appui-tête. Laver à la machine, à l'eau froide, sur programme délicat et égoutter.

SÉCURITÉ

Remplacer ou réparer les pièces si nécessaire.



Le non-respect de ces mises en garde peut causer de graves blessures.



Stealth Products, LLC. • info@stealthproducts.com • www.stealthproducts.com
+1(800) 965-9229 | +1(512) 715-9995 | 104 John Kelly Drive, Burnet TX 78611