

NOTE: The following information replaces the information contained in the *Travel Scooter Series Owner's Manual* provided with your scooter. It describes information on throttle control lever operation. Please retain this information with the scooter owner's manual and contact your authorized Pride Provider with any questions.

TILLER CONSOLE

The tiller console houses all controls needed to drive your Travel Scooter, including the key switch, throttle control lever, horn button, speed adjustment dial, and the battery condition meter. Please refer to the *Travel Scooter Features Table* on the inside of the front cover of the scooter owner's manual to determine which console figure to choose. See figures 1 through 4.



PROHIBITED! Do not expose the tiller console to moisture. In the event that the tiller console does become exposed to moisture, do not attempt to operate your Travel Scooter until the tiller console has dried thoroughly.

IDENTIFICATION KEY FOR FIGURES 1 THROUGH 4

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. HORN | 6. CHARGER POWER CORD RECEPTACLE (TILLER PORT) |
| 2. KEY SWITCH | 7. OFF-BOARD CHARGER FUSE |
| 3. BATTERY CONDITION METER | 8. LIGHT FUSE |
| 4. SPEED ADJUSTMENT DIAL | 9. LIGHT SWITCH |
| 5. THROTTLE CONTROL LEVER | |

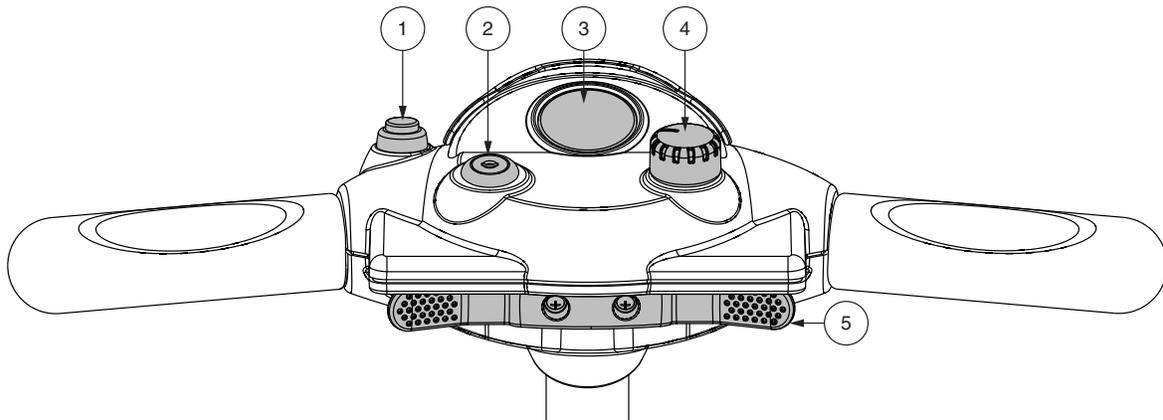


Figure 1. Tiller Console A

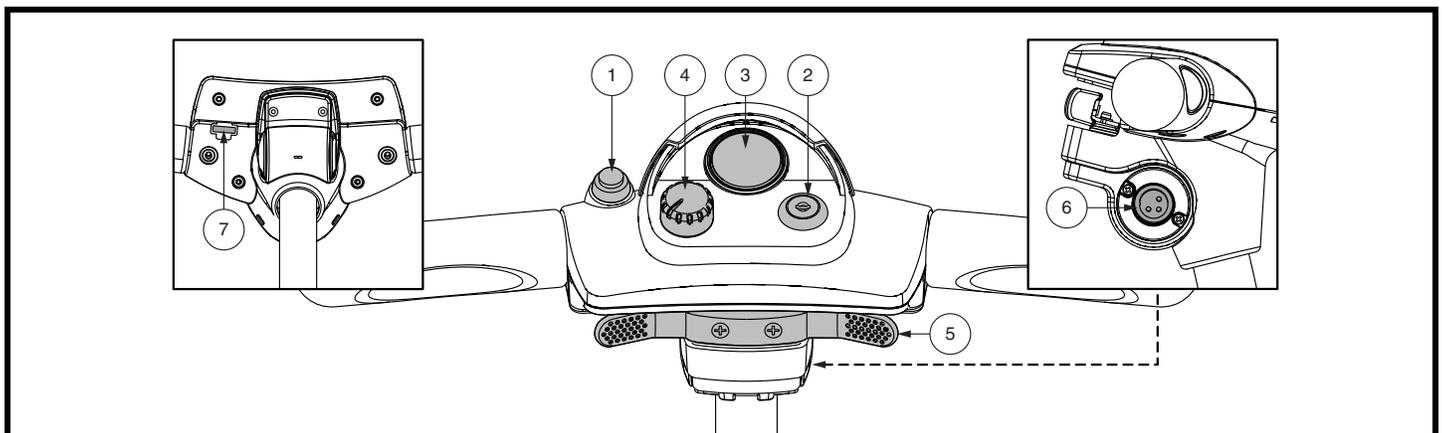


Figure 2. Tiller Console B



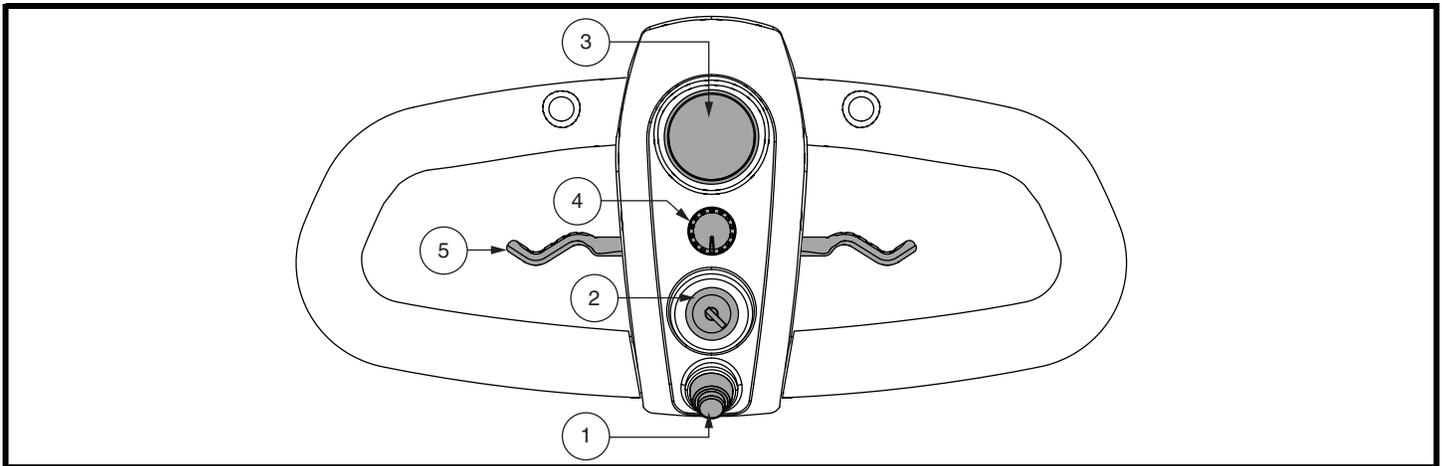


Figure 3. Tiller Console C

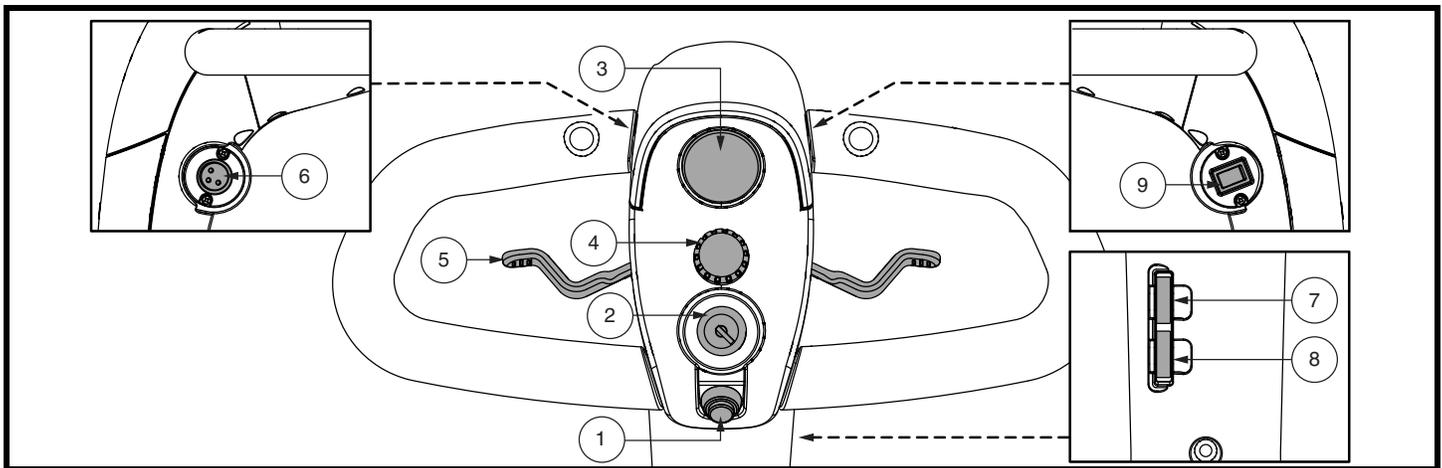


Figure 4. Tiller Console D

Throttle Control Lever

This lever allows you to control the forward speed and the reverse speed of your scooter up to the maximum speed you preset with the speed adjustment dial.

To use throttle control lever for models equipped with Tiller Consoles A and B:

- To move **Forward**, use your right thumb to push the right side of the throttle control lever.
- To move **Rearward**, use your left thumb to push the left side of the throttle control lever.

To use throttle control lever for models equipped with Tiller Consoles C and D:

To Move Forward, use either of the following:

- Use your left thumb to push the left side of the throttle control lever.
- Use your right hand fingers to pull back on the right side of the throttle control lever.

To Move Rearward, use either of the following:

- Use your right thumb to push the right side of the throttle control lever.
- Use your left hand fingers to pull back on the left side of the throttle control lever.

Release the throttle control lever and allow your scooter to come to a complete stop before engaging the other side of the lever. When the throttle control lever is completely released, it automatically returns to the center “stop” position and engages your scooter’s brakes.



NOTE: Les informations suivantes remplacent les informations contenues dans le manuel du propriétaire de la série Voyage Scooter fourni avec votre scooter. Elles décrivent le fonctionnement du levier de contrôle d'accélération. Veuillez conserver ces informations avec le manuel du propriétaire du scooter et si vous avez des questions contactez votre détaillant Pride autorisé.

TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord abrite toutes les commandes de fonctionnement de votre Travel Scooter incluant le contact, l'accélérateur, le klaxon, le bouton de réglage de la vitesse et la jauge à batteries. Veuillez-vous référer à la table des caractéristiques du Travel scooter qui se trouve sur la page 32 afin de déterminer quelle type de tableau de bord choisir. Voir les figures 1 à travers 4.



INTERDIT! N'exposez pas le tableau de bord à l'humidité. Si le tableau venait à être mouillé, ne tentez pas d'utiliser votre Travel Scooter avant que le tableau ait été asséché à fond.

CLE D'IDENTIFICATION POUR FIGURES 1 A TRAVERS 4

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. KLAXON | 5. LEVIER DE CONTROLE D'ACCELERATION |
| 2. CLE DE CONTACT | 6. RECEPTACLE DU CORDON DU CHARGEUR
(BRANCHEMENT DU CONSOLE) |
| 3. JAUGE A BATTERIES | 7. FUSIBLE DU CHARGEUR A BATTERIES EXTERNE |
| 4. BOUTON DE REGLAGE DE LA
VITESSE | 8. FUSIBLE DES FEUX ET PHARE |
| | 9. COMMUTATEUR DES FEUX ET PHARE |

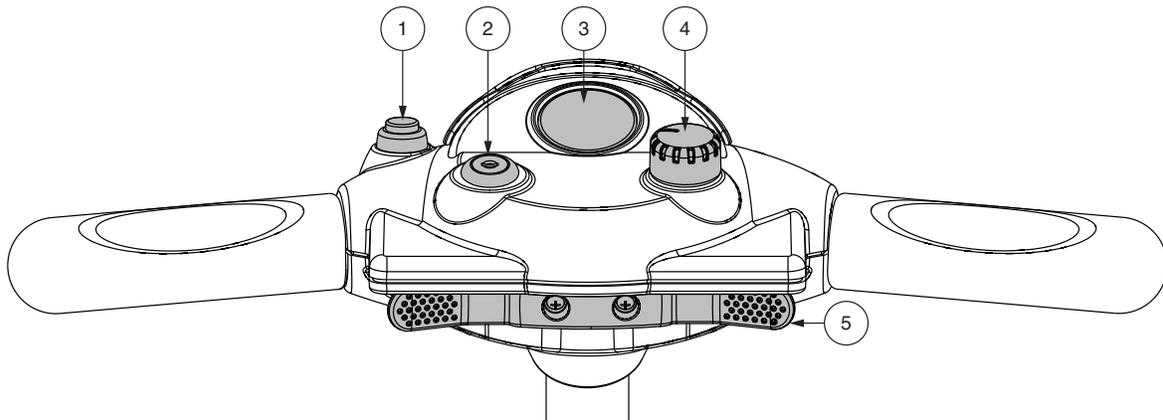


Figure 1. Tableau de bord A

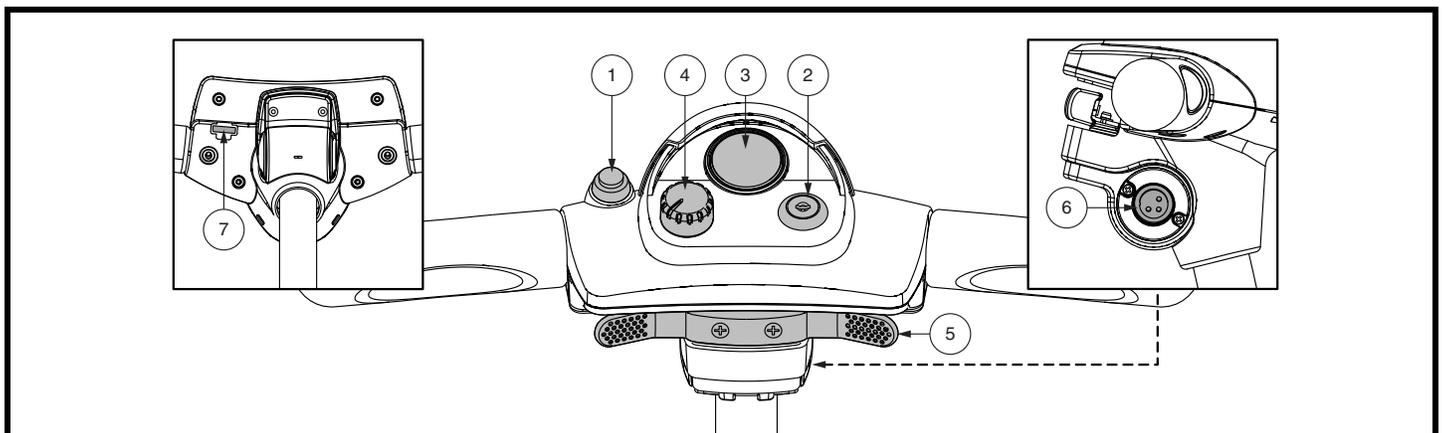


Figure 2. Tableau de bord B



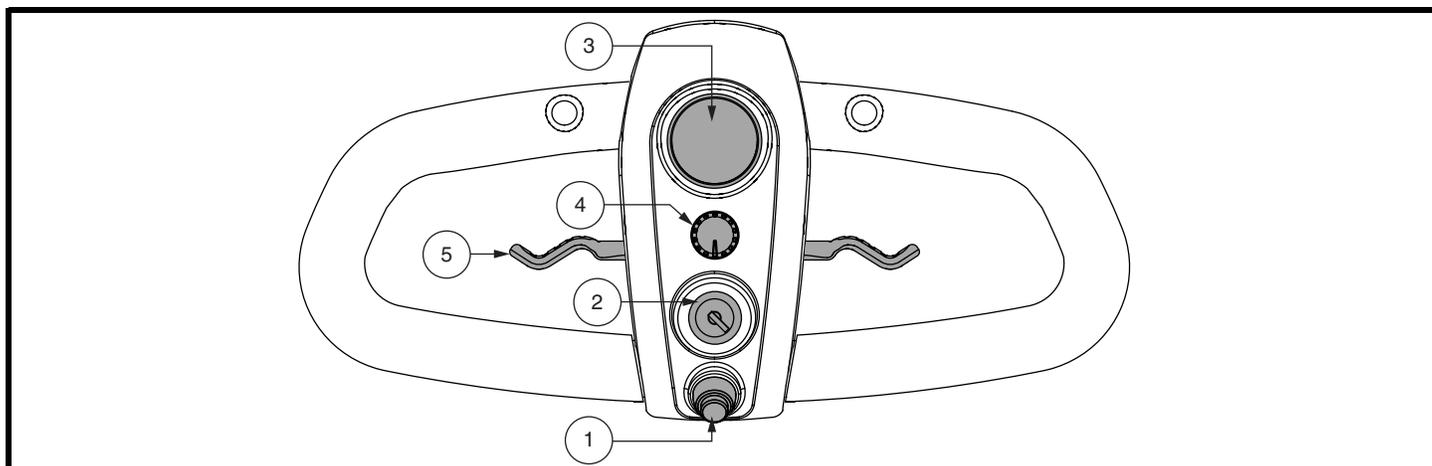


Figure 3. Tableau de bord C

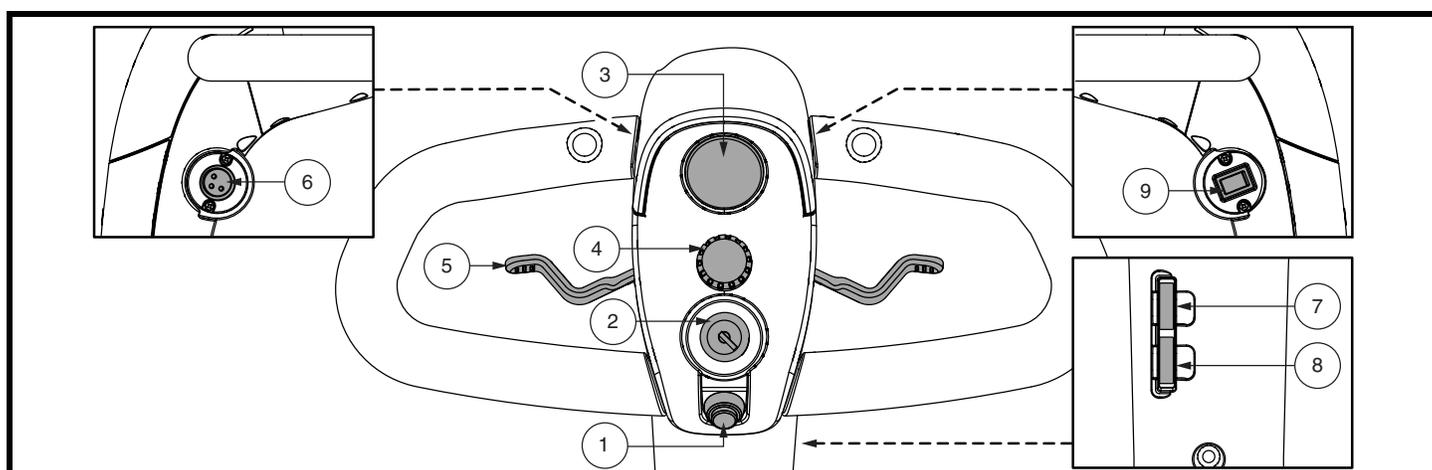


Figure 4. Tableau de bord D

Leviers d'accélérateur

Ces leviers commandent la marche avant ou arrière du scooter selon la vitesse maximale déterminée par le bouton de réglage de la vitesse.

Pour utiliser le levier de contrôle d'accélération pour les modèles équipés avec les tableaux de bord A et B:

- Pour rouler vers l'avant choisissez, utilisez votre pouce droit pour appuyer sur le levier droit et reculer.
- Pour rouler vers l'arrière choisissez, utilisez votre pouce gauche pour appuyer sur le levier gauche et avancer.

Pour utiliser le levier de contrôle d'accélération pour tous les modèles équipés avec les tableaux de bord C et D:

Pour rouler vers l'avant choisissez l'une ou l'autre de ces méthodes:

- Utilisez votre pouce gauche pour appuyer sur le levier gauche et avancer.
- Utilisez vos doigts de la main droite pour tirer sur le levier droit et avancer.

Pour rouler vers l'arrière choisissez l'une ou l'autre de ces méthodes:

- Utilisez votre pouce droit pour appuyer sur le levier droit et reculer.
- Utilisez vos doigts de la main gauche pour tirer sur le levier gauche et reculer.

Relâchez le levier complètement afin que le scooter s'immobilise complètement avant d'engager le levier opposé et changer de sens de roulement. Le levier retourne de lui-même au centre pour stopper le scooter afin que les freins s'engagent automatiquement.

