

INTERACTIVE ASSIST

ALLEEN VOOR APPLE-GEBRUIKERS



QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

WAARSCHUWING!

Een Quantum Rehab-leverancier of een bevoegd technicus moet de initiële installatie van dit product uitvoeren en dient alle instructies in deze handleiding uit te voeren.

Onderstaande symbolen worden overal in deze gebruikshandleiding en op de elektrische rolstoel gebruikt ter aanduiding van waarschuwingen en belangrijke informatie. Het is zeer belangrijk dat u deze symbolen doorneemt en volledig begrijpt.

WAARSCHUWING!

Wijst op een mogelijk gevaarlijke omstandigheid/situatie. Verzuim in het naleven van de voorgeschreven procedures kan leiden tot persoonlijk letsel, beschadiging van onderdelen of defecten. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool op een gele driehoek met een zwarte rand.

VERPLICHT

Deze handelingen dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven. Verzuim in het uitvoeren van verplichte handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een wit symbool op een blauwe stip met een witte rand.

VERBODEN!

Deze handelingen zijn verboden. Deze handelingen mogen op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid worden uitgevoerd. Het uitvoeren van verboden handelingen kan leiden tot persoonlijk letsel en/of beschadiging van apparatuur. Op het product wordt dit pictogram weergegeven als een zwart symbool met een rode cirkel en een rode schuine streep.

NB: Deze instructies zijn samengesteld uit de meest recente specificaties en productinformatie die beschikbaar was ten tijde van publicatie. We behouden ons het recht voor om, indien nodig, wijzigingen aan te brengen. Eventuele wijzigingen aan onze producten kunnen resulteren in lichte afwijkingen tussen de afbeeldingen en de uitleg in deze handleiding en het product dat u hebt gekocht. De nieuwste/meest recente versie van deze handleiding is beschikbaar op onze website.



WAARSCHUWING!

INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN VOOR STOELSTOELGEBRUIKERS, CARETAKERS, HME-AANBIEDERS EN TECHNICIEN IN VERBAND MET HET VEILIGE GEBRUIK VAN DEZE APPLICATIE MET INTERACTIEVE ASSISTSOFTWARE ("IAA"). TIJDENS ELKE GEBRUIK VAN IAA MOET DE INDIVIDUELE GEBRUIK VAN IAA DE VOLGENDE BEWIJZEN VOLDOEN.

DANKZETTING VAN INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN AAN DE GEBRUIKERS, CARETAKERS, HME-AANSTELLERS EN TECHNICIEN VAN DE STOELSTOEL:

DOOR NOG STEEDS DEZE APPLICATIE VAN INTERACTIEVE ASSISTSOFTWARE ("IAA") TE GEBRUIKEN, ERKENT IK DAT IK HEB GELEZEN EN ZAL HANDELEN IN OVEREENSTEMMING MET DE VOLGENDE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN DIE HIERONDER ZIJN VERMELD BETREFFENDE EEN VEILIG EFFECTIEF GEBRUIK VAN IAA.

IAA maakt beveiligde externe toegang mogelijk tot de elektronische programmering van een elektrische rolstoel. Om een veilig, effectief en correct gebruik van IAA te verzekeren, moeten de volgende INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN in acht worden genomen:

WAARSCHUWING!

1. Een gebruiker van een elektrische rolstoel of een vervanger voor elektrische rolstoel zou het kanaal en de toegangscode van de IAA alleen aan een betrouwbare vertegenwoordiger van de HME-leverancier moeten verstrekken.
2. Een HME-aanbieder mag alleen vertrouwen op gekwalificeerde technici om IAA te gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot het besturingssysteem van een elektrische rolstoel.
3. IAA remote access mag alleen worden gebruikt:
 - a. Om de huidige instellingen en / of probleemoplossingsinformatie van de controller van de elektrische rolstoel te identificeren.
 - b. Om de niet-prestatiegerelateerde instellingen van de controller aan te passen. Deze wijzigingen mogen alleen worden geïnitieerd door een gekwalificeerde technicus die bekend is met de afmetingen van de rolstoel, de fysieke en medische toestand en de milieu-uitdagingen.
4. Gebruikers van elektrische rolstoelen en HME-providers moeten de inloginformatie zorgvuldig beveiligen om een veilige toegang en gebruikersveiligheid van de stoel te garanderen.
5. HME-providers en hun gekwalificeerde technici die gebruikmaken van IAA-toegang op afstand moeten een gezond klinisch oordeel hebben in verband met de identificatie, beoordeling en / of wijziging van de instellingen van het besturingssysteem van de elektrische stoel.

6. IAA mag niet worden gebruikt door een HME-aanbieder en / of gebruiker of verzorger van een elektrische rolstoel als vervanging voor een degelijke persoonlijke evaluatie en programmering van een elektrische rolstoel, inclusief maar niet beperkt tot zijn besturingssysteem om te voldoen aan de specifieke behoeften en veiligheidseisen van een bepaalde gebruiker van de elektrische rolstoel.
7. HET NIET VOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN RESULTEREN IN ONJUISTE TOEGANG EN / OF ONJUISTE IDENTIFICATIE, BEOORDELING EN / OF WIJZIGING VAN DE INSTELLINGEN VAN DE STOELSTOELREGELAAR. EEN ONJUISTE WIJZIGING VAN DEZE INSTELLINGEN KAN LEIDEN TOT ONAFHANKELIJKE WERKING VAN DE STOELSTOEL, DIE KAN LEIDEN TOT GEVAREN VOOR DE STOELSTOELGEBRUIKER EN BYSTANDERS, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN HET EVENWICHT, ONVERLEDE VERSNELLING OF STOPPEN, BOTEN EN KIPPEN, WAARVAN KAN RESULTEREN IN ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD VOOR EEN STOELSTOELGEBRUIKER OF BYSTANDER.

OPMERKING: Deze waarschuwing moet binnen de app worden bevestigd voordat Interactive Assist kan worden gebruikt.

QUANTUM®

PROVIDING GREATER INDEPENDENCE

Invoering

Deze interactieve hulpgids behandelt de Q-Logic 3 interactieve assistent, interactieve assistent-apps en Remote Econ-W.

Q-Logic 3 Interactive Assist

Q-Logic 3-elektronica kan een Quantum Rehab-aanbieder verbinden met een elektrische rolstoel die zich niet op dezelfde locatie bevindt als de provider.

Interactive Assist App

De app Interactive Assist is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten. De app verbindt de Q-Logic 3-elektronica via Bluetooth met de Remote Econ-W via de internettoegang van het apparaat.

Bij aansluiting op de Q-Logic 3 Lite-elektronica worden een kanaal en wachtwoord weergegeven. Het kanaal en de toegangscode worden naar de provider gestuurd om te zorgen voor verbinding met de juiste elektrische rolstoel.

Inhoudsopgave

Interactieve Assist-app - Apple, Q-Logic 3.....	5
Interactive Assist-app - Overzicht.....	6
Apple Interactive Assist-verbinding met dealer-naar-gebruikerstoegang.....	9
 Interactieve Assist-app - Apple, Q-Logic 3e.....	 19
Interactive Assist-app - Overzicht.....	20
Apple Interactive Assist-verbinding met dealer-naar-gebruikerstoegang.....	23


**INTERACTIVE ASSIST-APP
VOOR APPLE-APPARATEN
Q-LOGIC 3**



Interactive Assist-app voor Apple Device Overzicht


De Interactive Assist-app voor een Apple-apparaat kan worden gedownload via de App Store. De Interactive Assist-app is compatibel met iOS 9 en hoger.

De Interactive Assist-app is te vinden in de App Store door te zoeken naar 'Interactive Assist'.

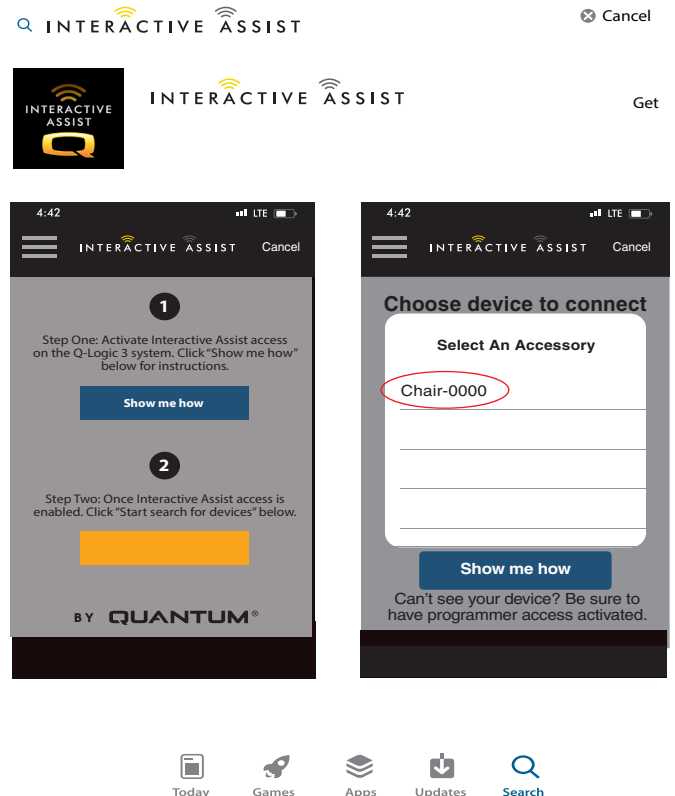

Apple Figuur 1. App Store

Interactive Assist App Startscreen

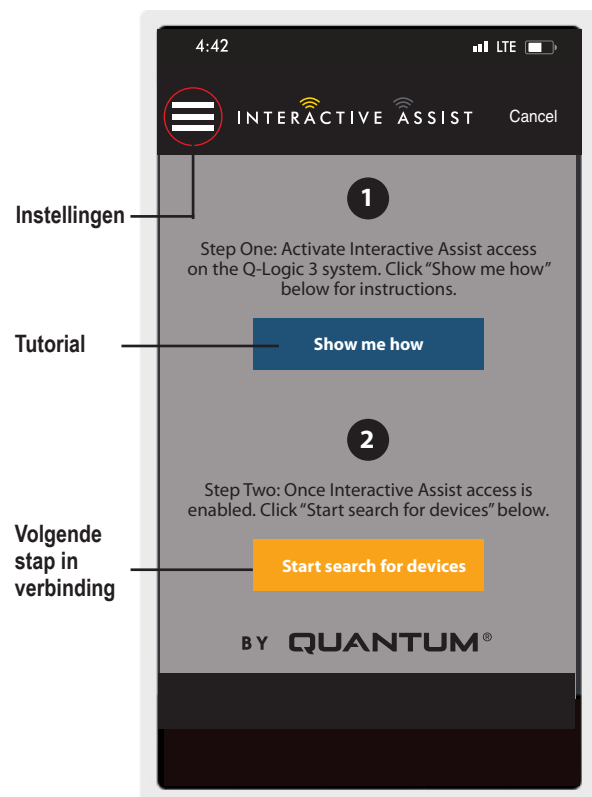


Apple Figuur 2. Startscreen

Instellingen

Aanbieder Inloggen - Inschakelen / Uitschakelen

Aanmelding provider voegt een scherm toe aan het startscherm van de app om inloginformatie van de provider in te voeren. De alleen-providerfunctie wordt gebruikt wanneer de provider ter plaatse is met de elektrische rolstoel om de parameters van de provider te wijzigen.

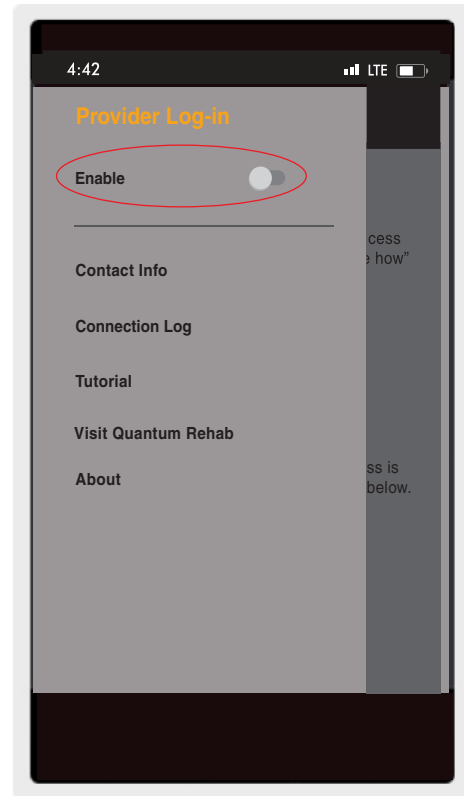


Apple Figuur 3. Provider-logboek inschakelen

Contact informatie

- Bedrijfsnaam – Provider company nameact Info
- Contactnaam – Naam van contactpersoon bij provider
- Contact telefoon – Telefoonnummer van contactpersoon bij provider
- Contact Email – E-mailadres van contactpersoon bij provider
- Klantnaam – Naam van de gebruiker van de elektrische rolstoel.


De app gebruikt de contactgegevens voor directe e-mails en oproepen naar de provider.

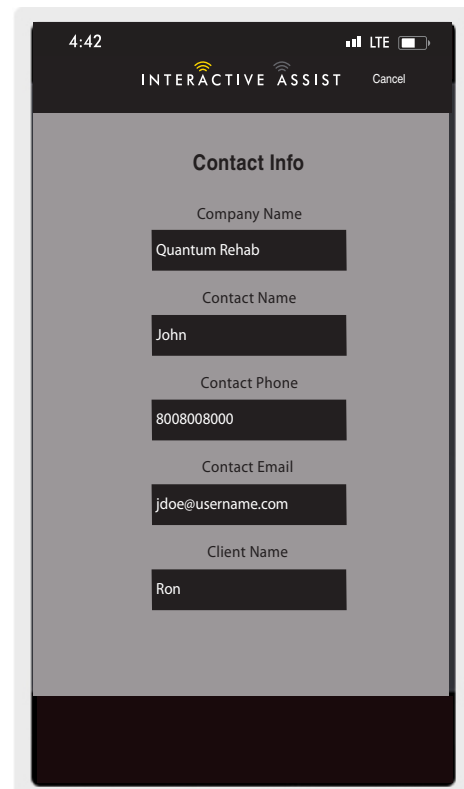

Apple Figuur 4. Contactinformatie

Verbindingslog

Geeft de Interactive Assist-verbindingen van het apparaat weer. Klik op "Details bekijken" om het scherm met details van verbindingen weer te geven.

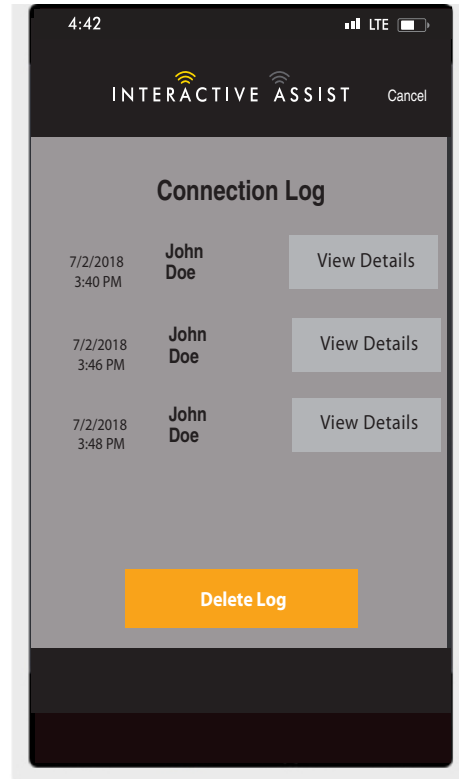

Apple Figuur 5. Verbindingslog

Tutorial

Stapsgewijze instructies voor het tot stand brengen van de Interactive Assist-verbinding.



Apple Figuur 6. Tutorial

Wat betreft

Versie van de app Interactive Assist.



Apple Figuur 7. Over

Apple Interactive Assist-verbinding met dealer-naar-gebruikerstoegang

1. Schakel het Q-Logic 3-systeem in en ga naar het hulpscherm met de opdracht mode.

OPMERKING: Navigeer, indien beschikbaar, naar het hulpscherm met de home-knop en twee linkse ingangen.



Apple Figuur 8. Hulpscherm Q-Logic 3


2. Voer een op- of neer-ingang in om "Econ / Interactive Assist" te markeren en voer dan de juiste invoer uit om Interactive Assist in te schakelen.



Apple Figuur 9. Q-Logic 3 extra Econ / Interactive Assist


OPMERKING: Het vakje zal worden gecontroleerd als het is ingeschakeld, een andere invoer aan de rechterkant "schakelt" uit of schakelt Interactive Assist uit.

3. Noteer de ID bovenaan het scherm.

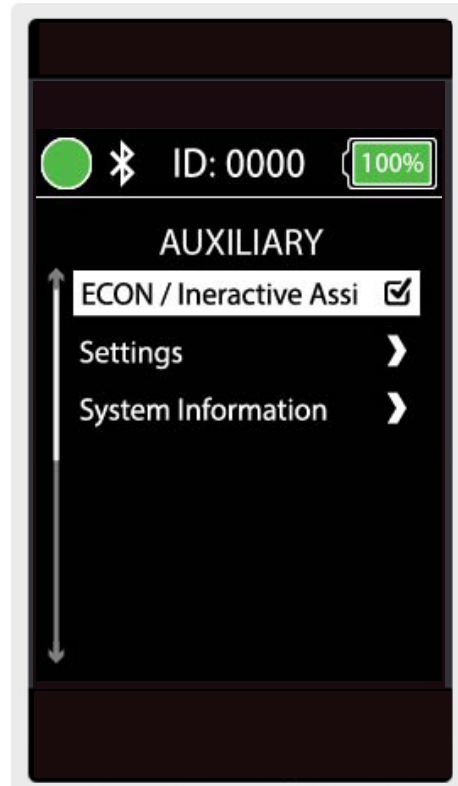

Apple Figuur 10. Q-Logic 3 Hulp Econ / Interactive Assist-selectie


4. Schakel de app Interactive Assist in.
5. Klik op 'Zoeken naar apparaten starten'.

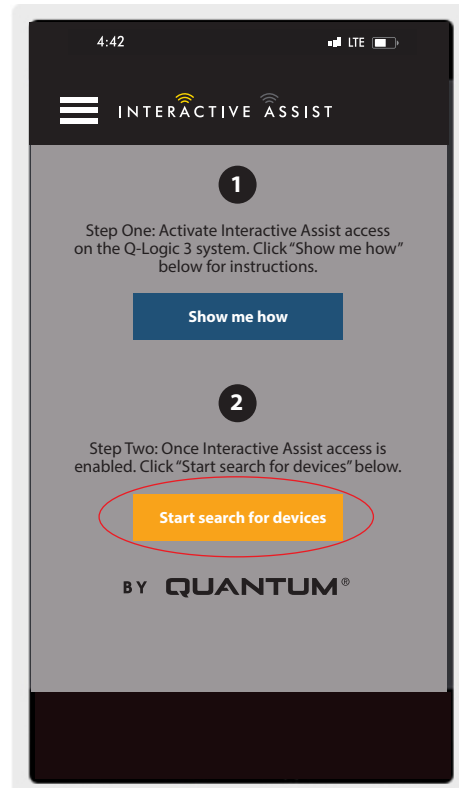

Apple Figuur 11. Zoeken naar apparaten

6. Klik op de stoel die overeenkomt met het ID: -nummer boven aan het Q-Logic 3-scherm.


OPMERKING: Als de stoel nog niet is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat van het Apple-apparaat, verschijnt er een paar bevestiging op het Q-Logic 3-scherm en op het Apple-apparaat. Vergelijk paringscodes. Als ze overeenkomen, bevestig dan op het Q-Logic 3-systeem en het Apple-apparaat.

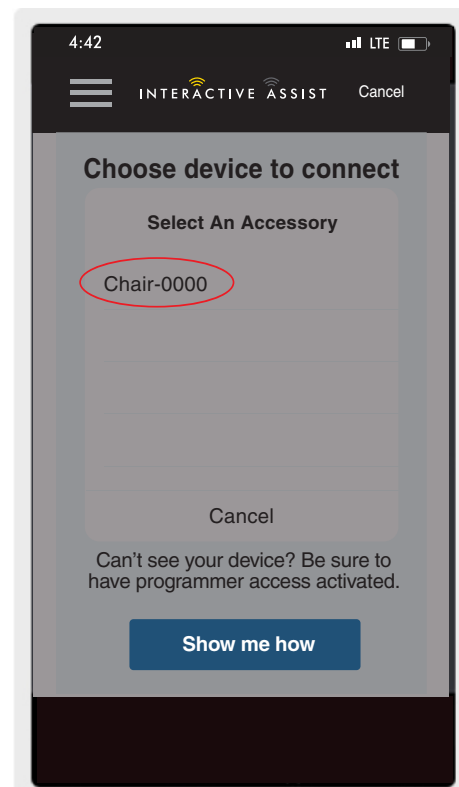

Apple Figuur 12. Selecteer een accessoire


7. Geef uw Quantum Rehab-aanbieder het kanaal en de toegangscode door om de Interactive Assist-verbinding te starten

OPMERKING: Als de informatie van de aanbieder (zie contactgegevens) is ingevoerd, kan de provider het kanaal en de toegangscode per e-mail verzenden of rechtstreeks vanuit dit scherm bellen.

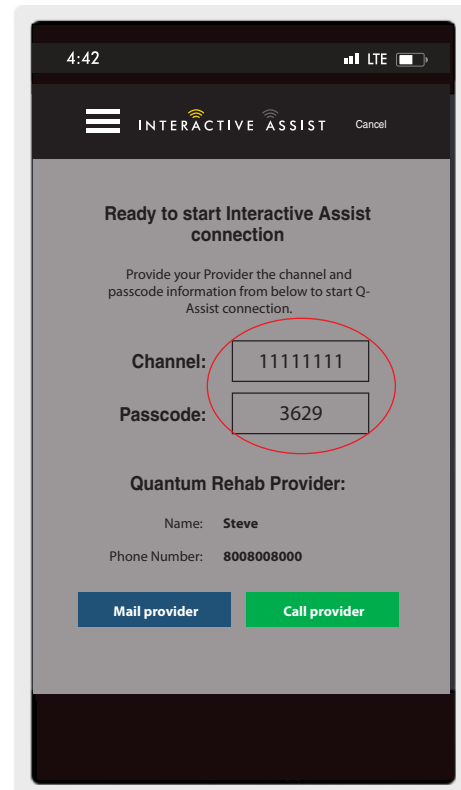


Apple Figuur 13. Kanaal en toegangscode

8. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" het kanaal en de toegangscode invoert, verschijnt een bevestigingsscherm op het Q-Logic-systeem. Een forward-ingang accepteert de Interactive Assist-verbinding.
9. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" verbinding maakt, verschijnt het volgende scherm ter bevestiging van de Interactive Assist-verbinding.

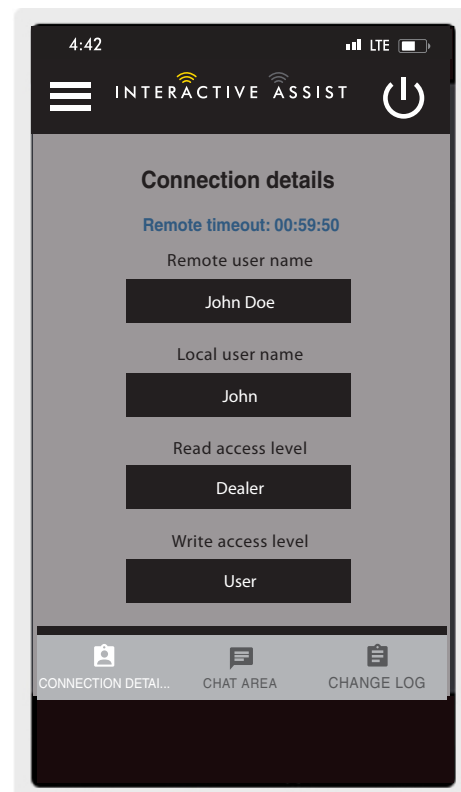

Apple Figuur 14. Verbindingsdetails Dealer-naar-gebruiker

10. Klik op de knop "Chatgedeelte" om een chatvenster tussen de Interactive Assist App en de Remote Econ-W mogelijk te maken. Dit chatvenster kan worden gestart vanuit de Interactive Assist App of de Econ-W. Het chatvenster bevat een knop "Afbeelding verzenden" om foto's te verzenden die al op uw apparaat staan, en een knop "Foto maken" om de camera van uw apparaat te gebruiken om een foto te maken en te verzenden via het chatvenster.

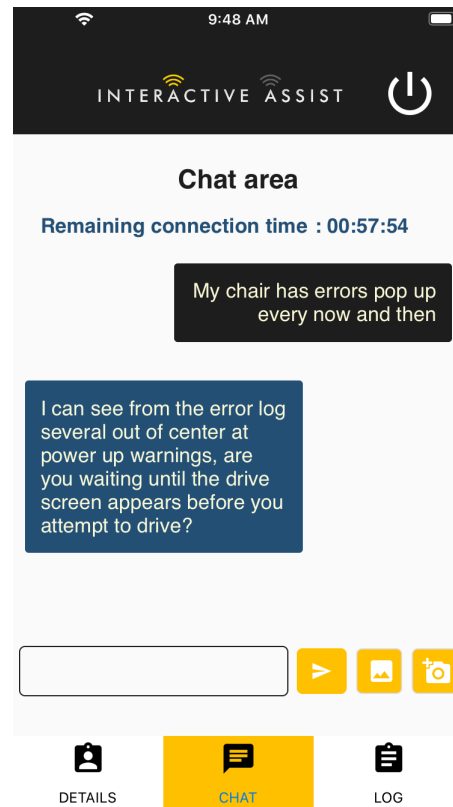


Apple Figuur 15. Chat

11. Klik op de knop "Wijzig log" om alle wijzigingen weer te geven die de Econ-W aan de stoel heeft aangebracht.

OPMERKING: Interactive Assist zal na een periode van één uur een time-out krijgen

OPMERKING: Het toegangsniveau Interactive Assist bepaalt het niveau van toegestane wijzigingen.

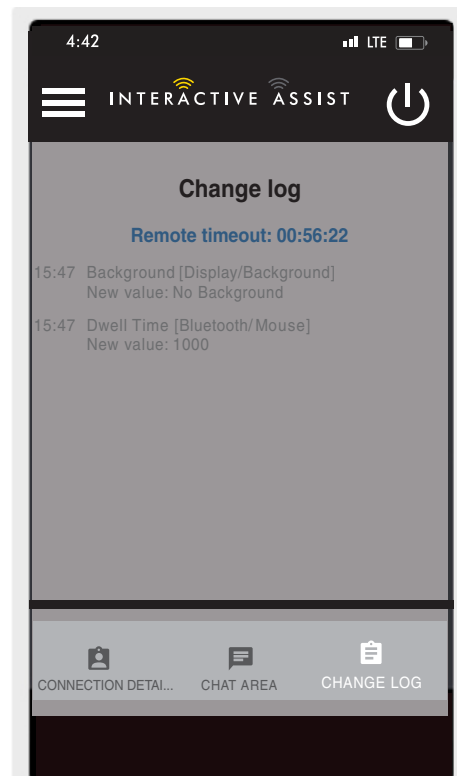

Apple Figuur 16. Verander log

Provider-to-provider toegang

1. Schakel het Q-Logic 3-systeem in en ga met de modusopdracht naar het AUX-scherf.

OPMERKING: Navigeer naar het Aux-scherf indien beschikbaar met de home-knop en twee linkse ingangen.



Apple Figuur 17. Q-Logic 3 Hulpinvoerapparaat


2. Voer een op- of neer-ingang in om "Econ / Interactive Assist" te markeren en voer dan de juiste invoer uit om Interactive Assist in te schakelen.

OPMERKING: Het selectievakje wordt ingeschakeld wanneer ingeschakeld. Een andere juiste invoer zal het "uitzetten" of de interactieve assist deactiveren.




Apple Figuur 17. Q-Logic 3 Auxiliary Econ / Interactive Assist

3. Noteer de ID bovenaan het scherm.

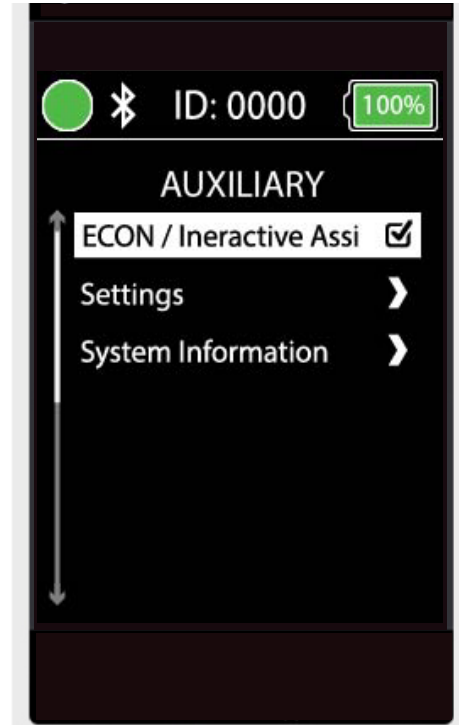


Apple Figuur 19. Q-Logic 3 Auxiliary Econ / Interactive Assist Selection

4. Schakel de app Interactive Assist in.
5. Klik op 'Zoeken naar apparaten starten'.

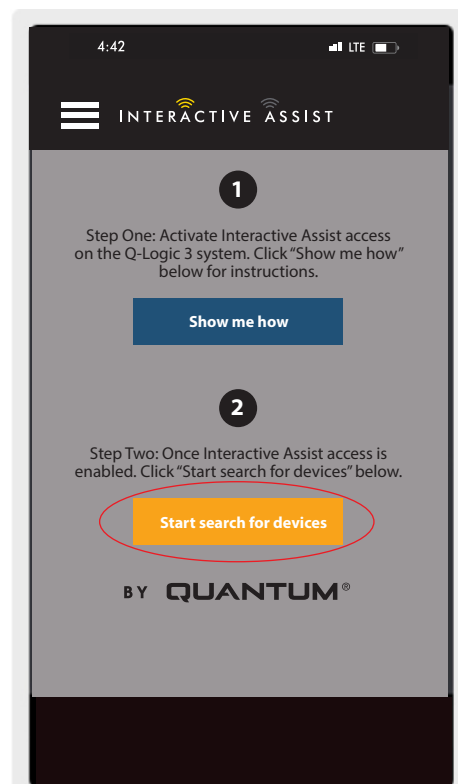

Apple Figuur 20. Zoeken naar apparaten


6. Klik op Aanmelding provider om in te schakelen en klik vervolgens nogmaals op de knop Menu om het instellingenvak te sluiten.

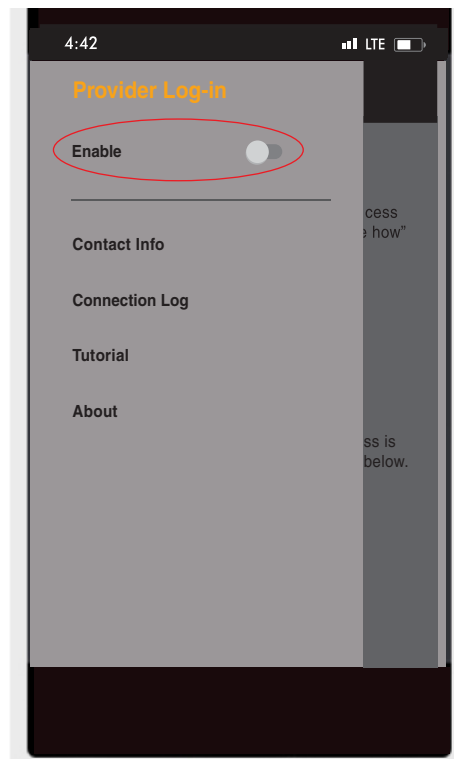

Apple Figuur 21. Apple Provider Log Enable


7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord (hetzelfde gebruikt voor Econ-W) van de aanbieder in met de stoel.

OPMERKING: De aanmelding bij de app *Interactive Assist* kan niet hetzelfde zijn als de aanmelding bij *Econ-W*.

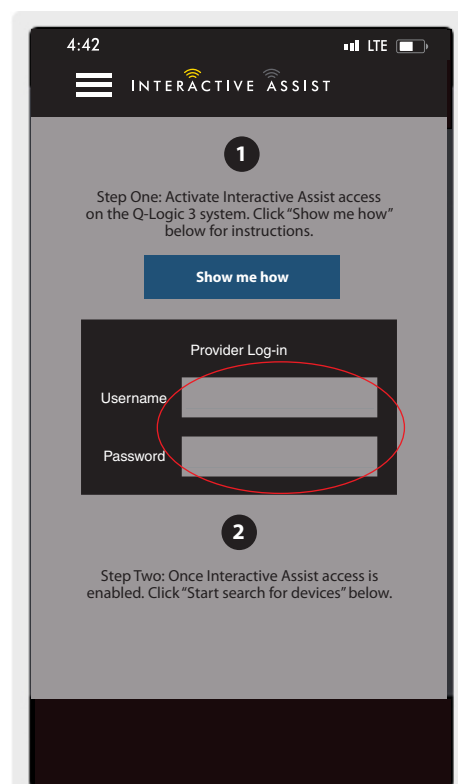

Apple Figuur 22. Startpagina log-in


8. Klik op "Zoeken naar apparaten starten".

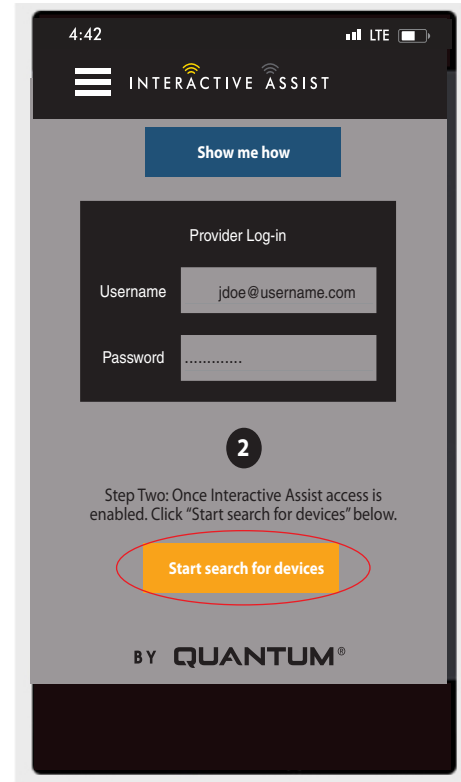

Apple Figuur 23. Zoeken naar apparaten

9. Klik op de stoel die overeenkomt met de ID bovenaan het Q-Logic 3-scherm.

OPMERKING: Als de stoel nog niet is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat van het Apple-apparaat, verschijnt er een paar bevestiging op het Q-Logic 3-scherm en op het Apple-apparaat. Vergelijk paringscodes. Als ze overeenkomen, bevestig dan op het Q-Logic 3-systeem en het Apple-apparaat.

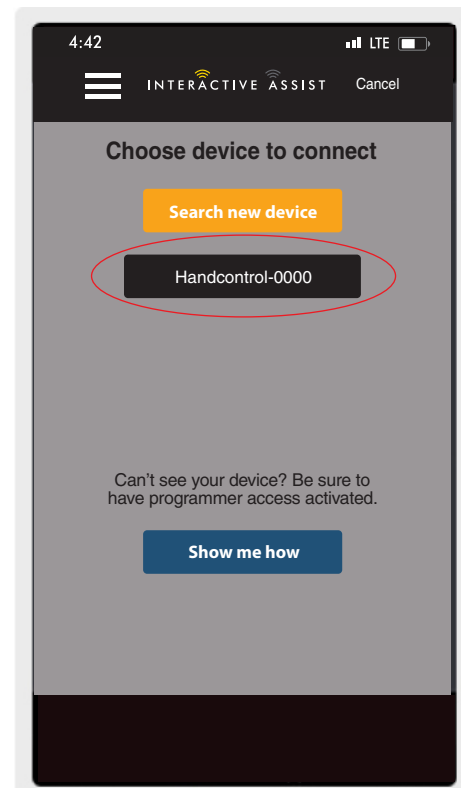

Apple Figuur 24. Kies Device to Connect

10. Geef uw Quantum Rehab-aanbieder het kanaal en de toegangscode door om de Interactive Assist-verbinding te starten.

OPMERKING: Als de informatie van de aanbieder (zie contactgegevens) is ingevoerd, kan de provider het kanaal en de toegangscode per e-mail verzenden of rechtstreeks vanuit dit scherm bellen.

4:42 LTE

INTERACTIVE ASSIST Cancel

Ready to start Interactive Assist connection

Provide your Provider the channel and passcode information from below to start Q-Assist connection.

Channel: 11111111

Passcode: 3629

Quantum Rehab Provider:

Name: Steve

Phone Number: 8008008000

Mail provider Call provider

Apple Figuur 25. Kanaal en toegangscode

11. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" het kanaal en de toegangscode invoert, vereist het Q-Logic 3-systeem een invoer voorwaarts zodat de gebruiker de verbinding kan bevestigen.
12. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" verbinding maakt, verschijnt het volgende scherm ter bevestiging van de Interactive Assist-verbinding.

4:42 LTE

INTERACTIVE ASSIST

Connection details

Remote timeout: 00:59:52

Remote user name

John Doe

Local user name

John Doe

Read access level

Dealer

Write access level

Dealer

CONNECTION DETAIL... CHAT AREA CHANGE LOG

Apple Figuur 26. Verbinding Detail dealer-tot-dealer


**INTERACTIVE ASSIST-APP
VOOR APPLE-APPARATEN
Q-LOGIC 3e**



Interactive Assist-app voor Apple Device Overzicht


De Interactive Assist-app voor een Apple-apparaat kan worden gedownload via de App Store. De Interactive Assist-app is compatibel met iOS 9 en hoger.

De Interactive Assist-app is te vinden in de App Store door te zoeken naar "Interactive Assist".

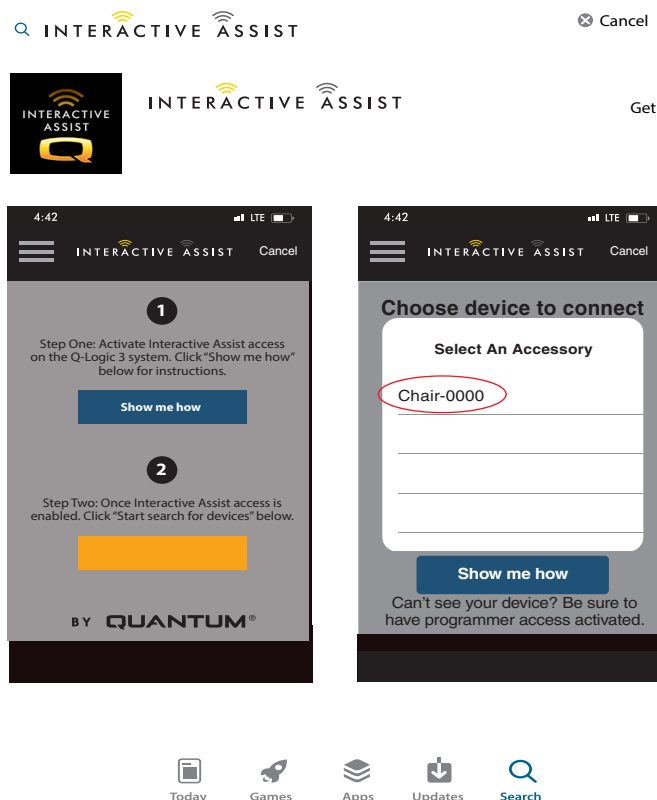

Apple Figuur 1. App Store

Interactive Assist App Startscherm

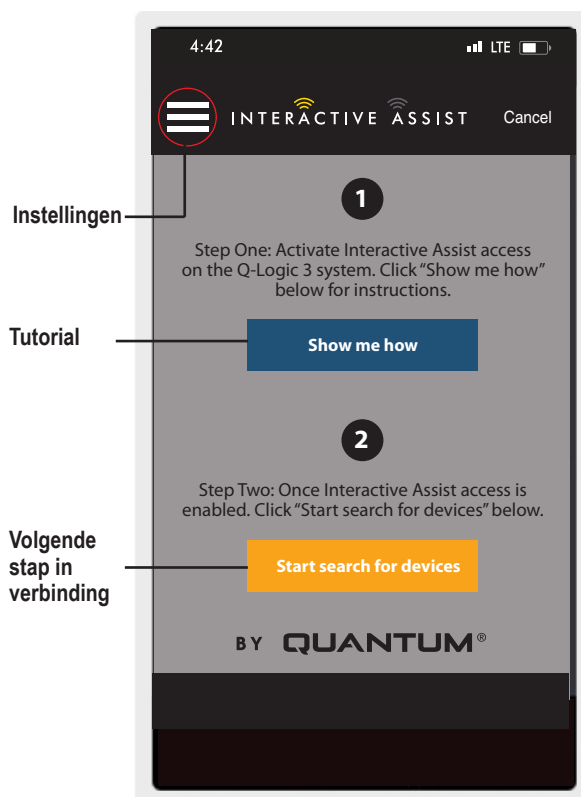


Apple Figuur 2. Startscherm

Instellingen

Aanbieder Inloggen - Inschakelen / Uitschakelen

Aanmelding provider voegt een scherm toe aan het startscherm van de app om inloginformatie van de provider in te voeren. De alleen-providerfunctie wordt gebruikt wanneer de provider ter plaatse is met de elektrische rolstoel om de parameters van de provider te wijzigen.

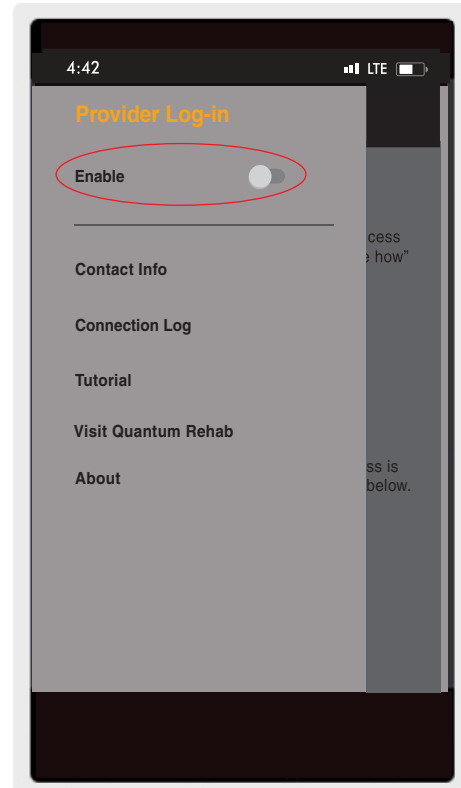


Apple Figuur 3. Provider-logboek inschakelen

Contact informatie

- Bedrijfsnaam – Provider company nameact Info
- Contactnaam – Naam van contactpersoon bij provider
- Contact telefoon – Telefoonnummer van contactpersoon bij provider
- Contact Email – E-mailadres van contactpersoon bij provider
- Klantnaam – Naam van de gebruiker van de elektrische rolstoel.


De app gebruikt de contactgegevens voor directe e-mails en oproepen naar de provider.

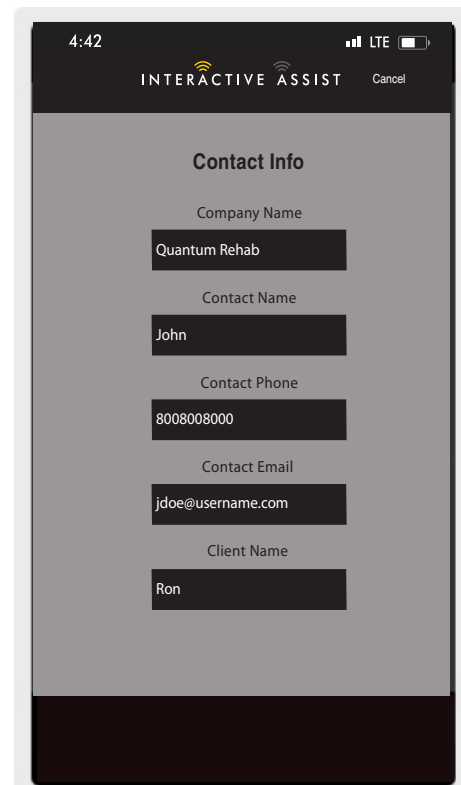

Apple Figuur 4. Contactinformatie

Verbindingslog


Geeft de Interactive Assist-verbindingen van het apparaat weer. Klik op "Details bekijken" om het scherm met details van verbindingen weer te geven.

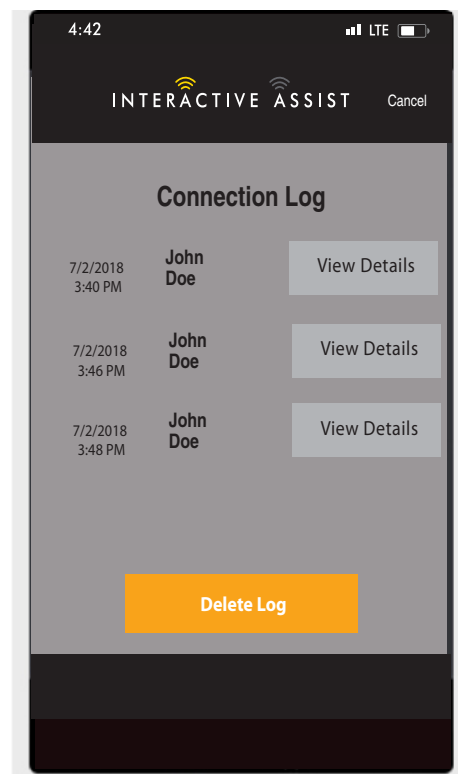

Apple Figuur 5. Verbindingslog

Tutorial

Stapsgewijze instructies voor het tot stand brengen van de Interactive Assist-verbinding.

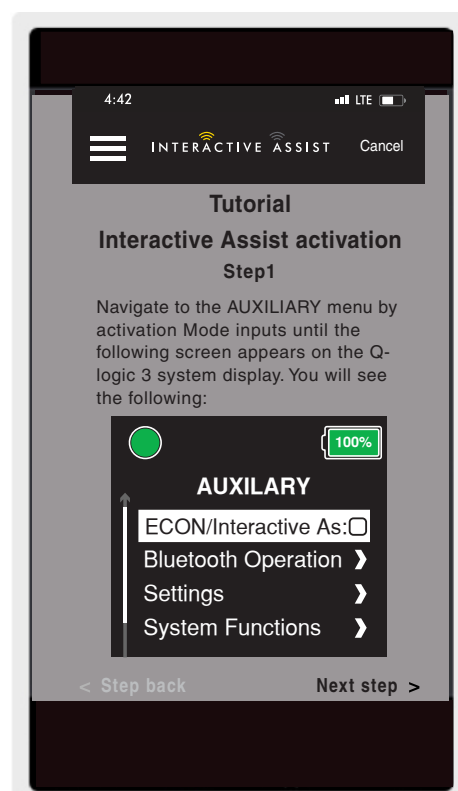

Apple Figuur 6. Tutorial

Wat betreft

Versie van de app Interactive Assist.



Apple Figuur 7. Over

Apple Interactive Assist-verbinding met dealer-naar-gebruikerstoegang


1. Schakel het Q-Logic 3e-systeem in en ga naar het hulpscherm met de opdracht mode.



Q-Logic 3e Controller-scherm

Apple Figuur 8. Q-Logic 3e instellingenscherm


2. Voer een op- of neer-ingang in om "Econ / Interactive Assist" te markeren en voer dan de juiste invoer uit om Interactive Assist in te schakelen.

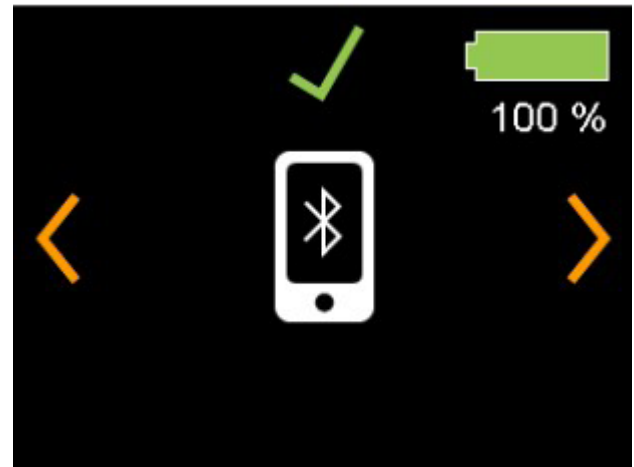

Q-Logic 3e Controller-scherm

Apple Figuur 9. Q-Logic 3e Bluetooth-scherm


Noteer de ID bovenaan het scherm.

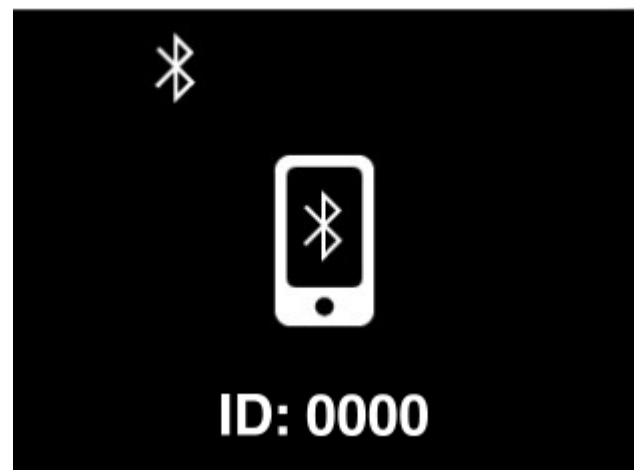

Q-Logic 3e Controller-scherm


Apple Figuur 10. Q-Logic 3e Hulp Econ / Interactive Assist-selectie

3. Schakel de app Interactive Assist in.
4. Klik op "Zoeken naar apparaten starten".

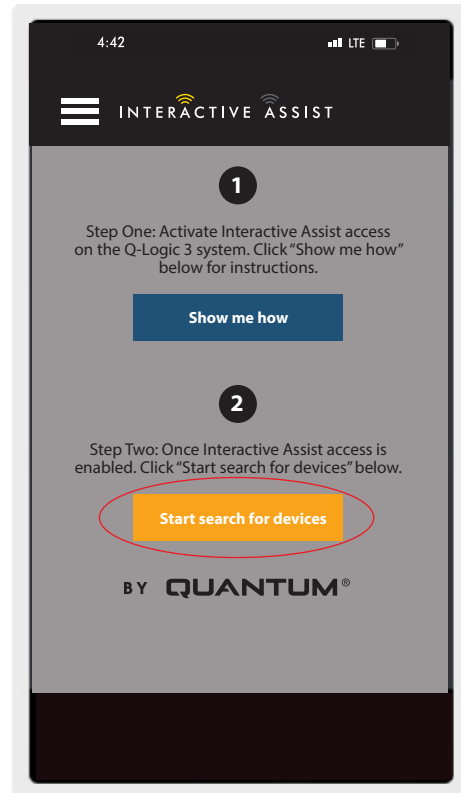



Apple Figuur 11. Zoeken naar apparaten

-
5. Klik op de stoel die overeenkomt met het ID: -nummer boven aan het Q-Logic 3e-scherm.

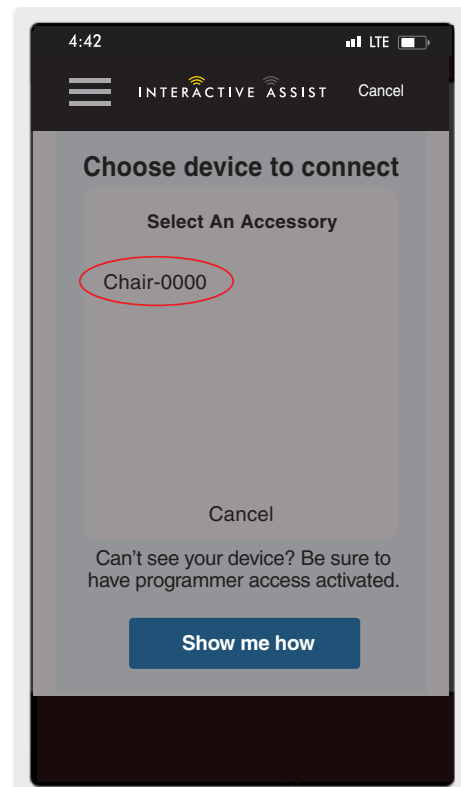

Apple Figuur 12. Selecteer een accessoire

OPMERKING: Als de stoel nog niet is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat van het Apple-apparaat, verschijnt er een paar bevestiging op het Q-Logic 3e-scherm en op het Apple-apparaat. Vergelijk paringscodes. Als ze overeenkomen, bevestig dan op het Q-Logic 3e-systeem en het Apple-apparaat.

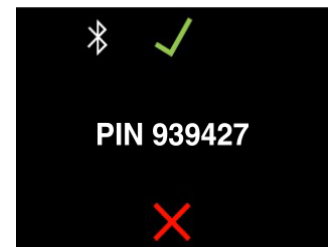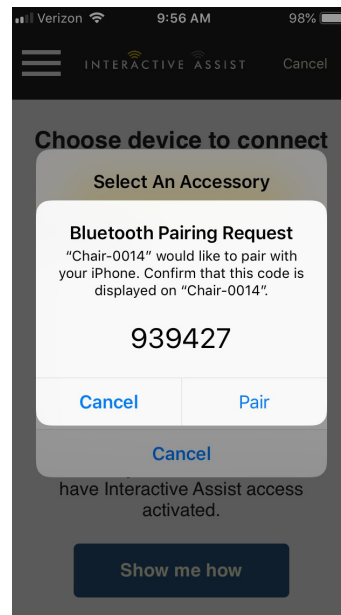


Q-Logic 3e
Controller-scherm

Apple Figuur 13. Selecteer een accessoire


6. Geef uw Quantum Rehab-aanbieder het kanaal en de toegangscode door om de Interactive Assist-verbinding te starten

OPMERKING: Als de informatie van de aanbieder (zie contactgegevens) is ingevoerd, kan de provider het kanaal en de toegangscode per e-mail verzenden of rechtstreeks vanuit dit scherm bellen.

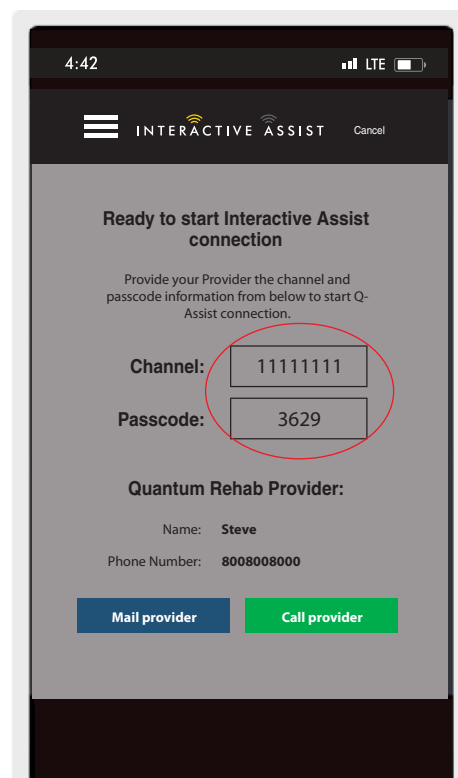

Apple Figuur 14. Kanaal en toegangscode


7. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" het kanaal en de toegangscode invoert, verschijnt een bevestigingsscherm op het Q-Logic-systeem. Een forward-ingang accepteert de Interactive Assist-verbinding.

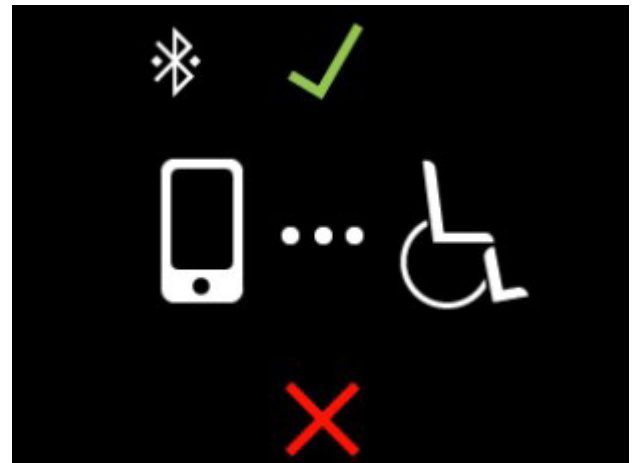

Q-Logic 3e Controller-scherm


Apple Figuur 15. Verbindingsdetails

8. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" verbinding maakt, verschijnt het volgende scherm ter bevestiging van de Interactive Assist-verbinding.

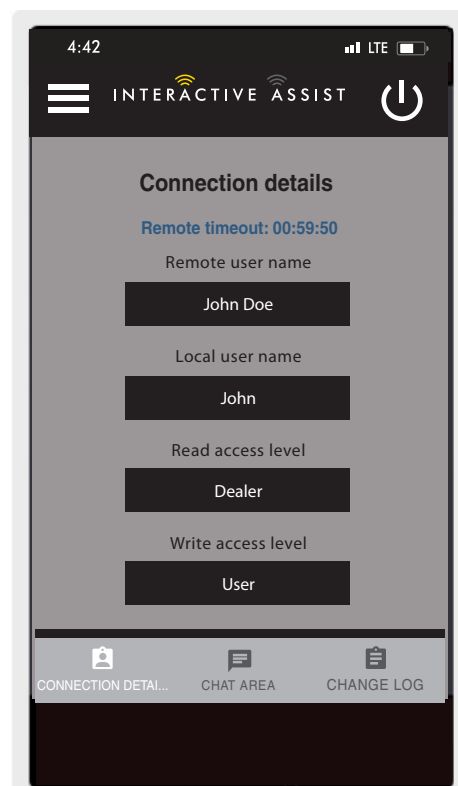

Apple Figuur 16. Verbindingsdetails

9. Klik op de knop "Chatgedeelte" om een chatvenster tussen de Interactive Assist App en de Remote Econ-W mogelijk te maken. Dit chatvenster kan worden gestart vanuit de Interactive Assist App of de Econ-W. Het chatvenster bevat een knop "Afbeelding verzenden" om foto's te verzenden die al op uw apparaat staan, en een knop "Foto maken" om de camera van uw apparaat te gebruiken om een foto te maken en te verzenden via het chatvenster.

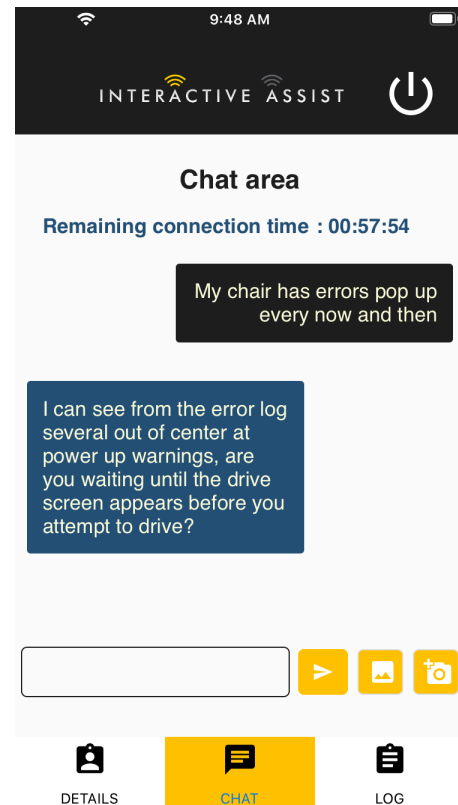


Apple Figuur 17. Chat

10. Klik op de knop "Wijzig log" om alle wijzigingen weer te geven die de Econ-W aan de stoel heeft aangebracht.

OPMERKING: *Interactive Assist zal na een periode van één uur een time-out krijgen.*


OPMERKING: *Het toegangsniveau Interactive Assist bepaalt het niveau van toegestane wijzigingen.*

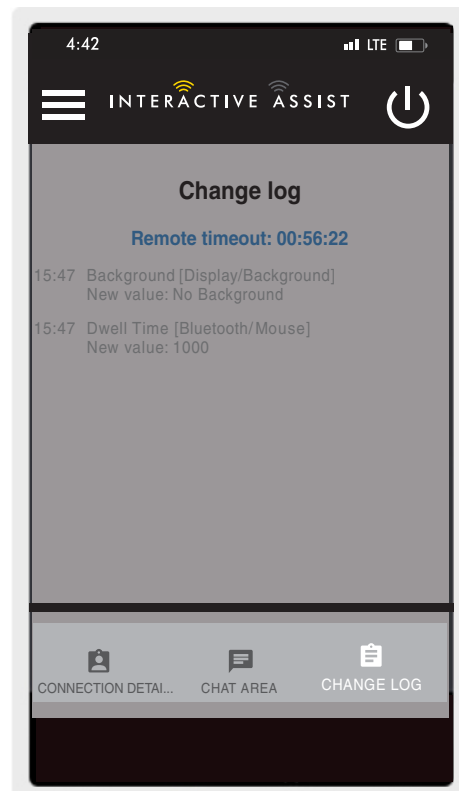

Apple Figuur 18. Verander log

Provider-to-provider toegang

1. Schakel het Q-Logic 3e-systeem in en ga met de modusopdracht naar het AUX-scherm.

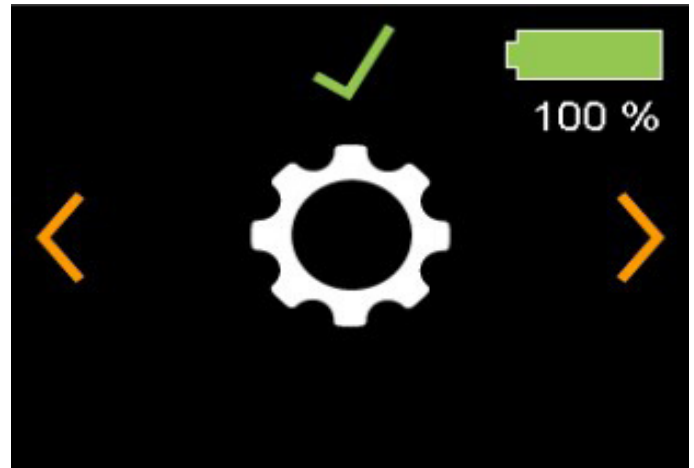

Q-Logic 3e Controller-scherm

Apple Figuur 19. Q-Logic 3e Hulpinvoerinputapparaat

2. Voer een juiste invoer in om naar het scherm Instellingen te navigeren. Voer een voorwaartse invoer uit om Bluetooth in te schakelen



Q-Logic 3e Controller-scherm

Apple Figuur 20. Q-Logic 3e Auxiliary Econ / Interactive Assist


Noteer de ID bovenaan het scherm.



Q-Logic 3e Controller-scherm


Apple Figuur 21. Q-Logic 3e Auxiliary Econ / Interactive Assist Selection

3. Schakel de app Interactive Assist in.
4. Klik op "Zoeken naar apparaten starten".

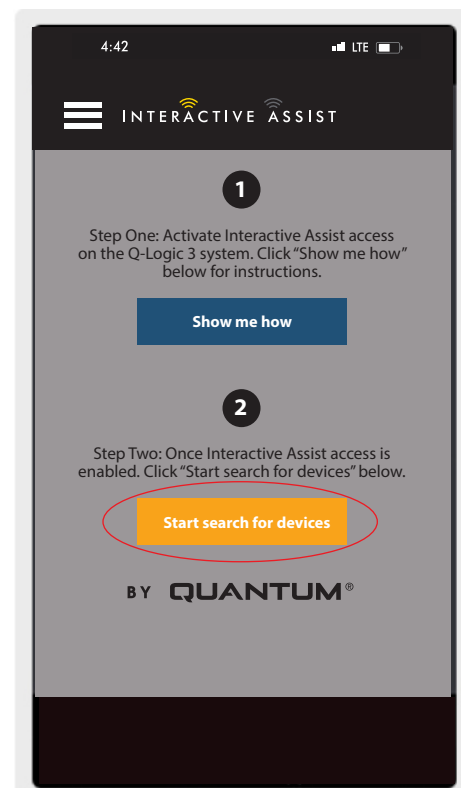

Apple Figuur 22. Zoeken naar apparaten


5. Klik op Aanmelding provider om in te schakelen en klik vervolgens nogmaals op de knop Menu om het instellingenvak te sluiten.

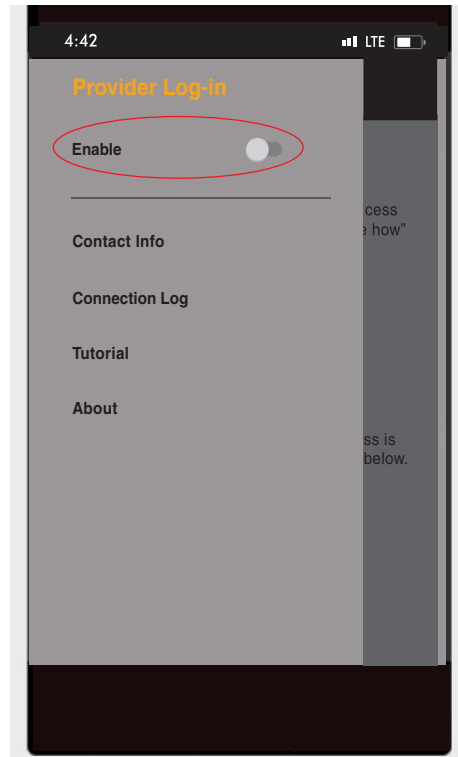

Apple Figuur 23. Provider-logboek inschakelen


6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord (hetzelfde gebruikt voor Econ-W) van de aanbieder in met de stoel.

OPMERKING: De aanmelding bij de app *Interactive Assist* kan niet hetzelfde zijn als de aanmelding bij *Econ-W*.

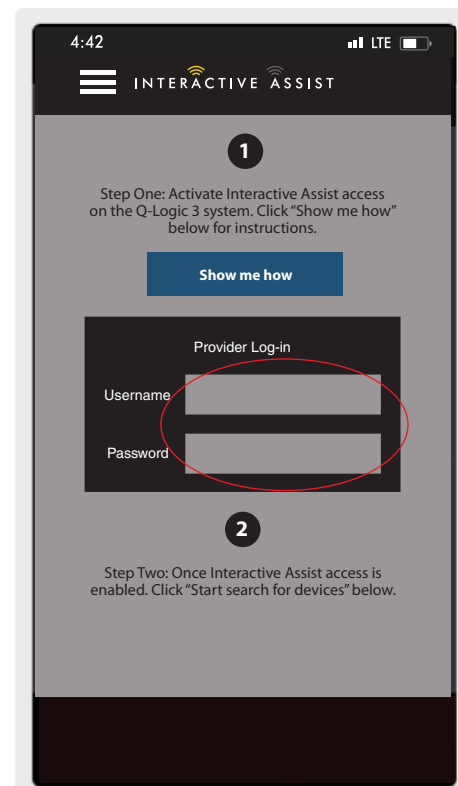


Apple Figuur 24. Startpagina log-in

7. Klik op "Zoeken naar apparaten starten".

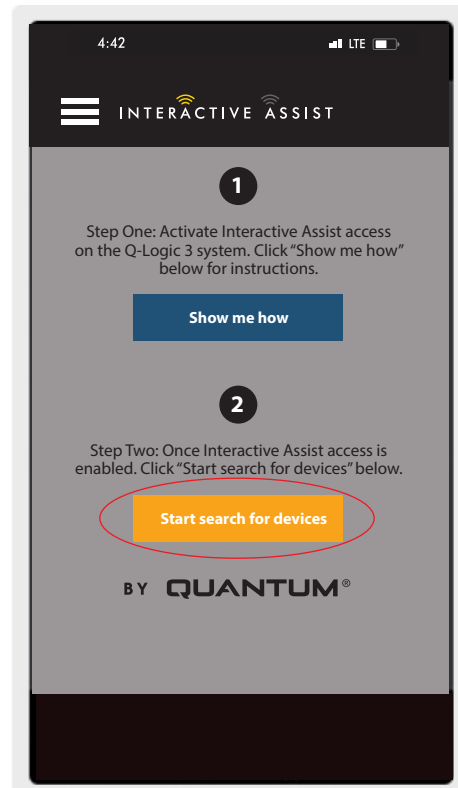


Apple Figuur 25. Zoeken naar apparaten

8. Klik op de stoel die overeenkomt met de ID bovenaan het Q-Logic 3e-scherm.

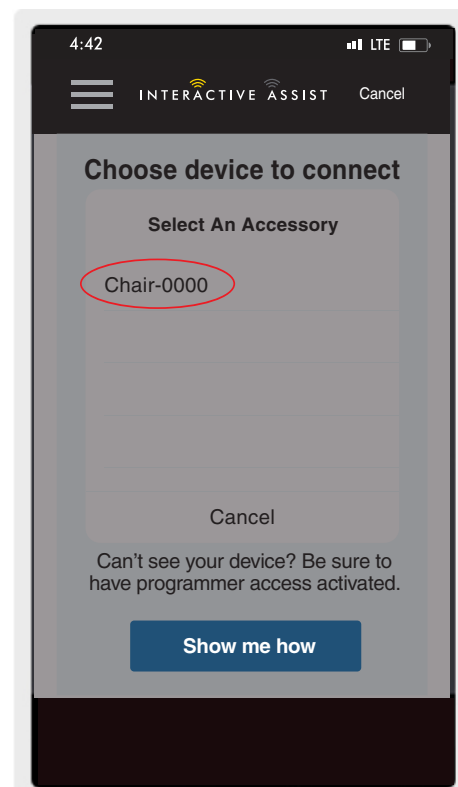

Apple Figuur 26. Selecteer een accessoire


OPMERKING: Als de stoel nog niet is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat van het Apple-apparaat, verschijnt er een paar bevestiging op het Q-Logic 3e-scherm en op het Apple-apparaat. Vergelijk paringscodes. Als ze overeenkomen, bevestig dan op het Q-Logic 3e-systeem en het Apple-apparaat.

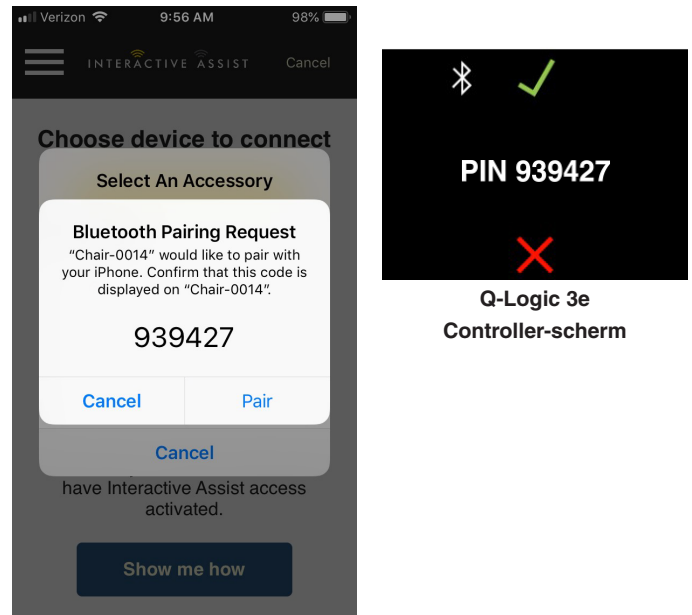

Apple Figuur 27. Selecteer een accessoire


9. Geef uw Quantum Rehab-aanbieder het kanaal en de toegangscode door om de Interactive Assist-verbinding te starten

OPMERKING: Als de informatie van de aanbieder (zie contactgegevens) is ingevoerd, kan de provider het kanaal en de toegangscode per e-mail verzenden of rechtstreeks vanuit dit scherm bellen.

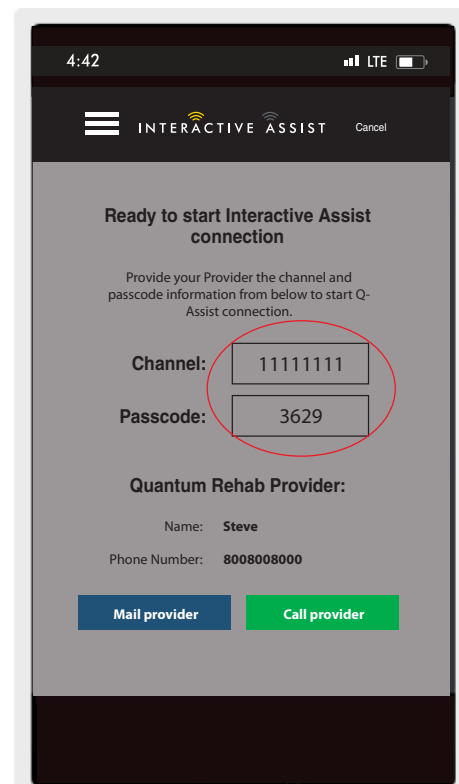

Apple Figuur 28 Kanaal en toegangscode


10. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" het kanaal en de toegangscode invoert, vereist het Q-Logic 3 Lite-systeem een invoer voorwaarts zodat de gebruiker de verbinding kan bevestigen.

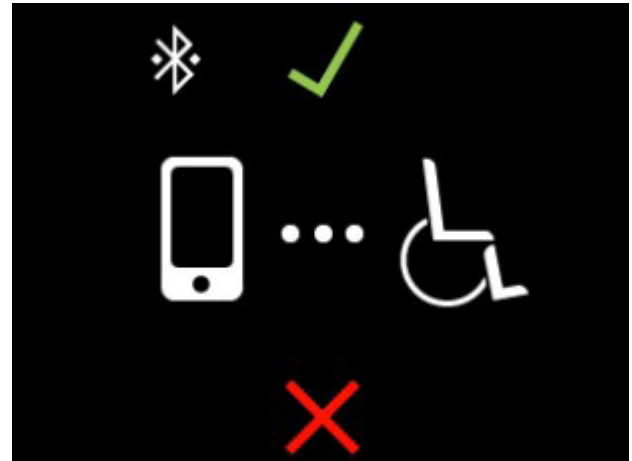

Q-Logic 3e Controller-scherm

Apple Figuur 29. Verbindingsdetail

11. Wanneer de "Remote Quantum Rehab Provider" verbinding maakt, verschijnt het volgende scherm ter bevestiging van de Interactive Assist-verbinding.

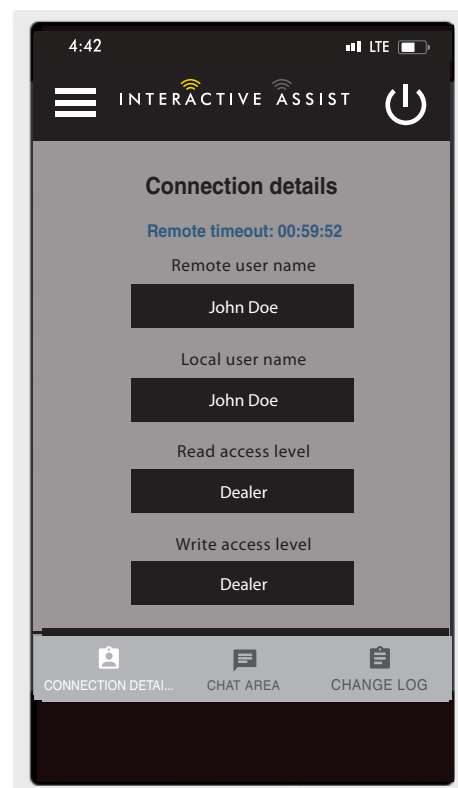

Apple Figuur 30. Verbindingsdetail

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642
www.quantumrehab.com

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3
www.quantumrehab.com

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.quantumrehab.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale, Auckland 0600
www.pridemobility.co.nz

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.quantumrehab.co.uk

Netherlands

(Authorised EU Representative)
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
www.quantumrehab.eu

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.quantumrehab-italia.it

France

26 Rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest
www.quantumrehab.fr

Spain

Calle Las Minas Número 67
Polígono Industrial Urtinsa II, de Alcorcón
28923 Madrid
www.quantumrehab.es

Germany

Hövelrieger Str. 28
33161 Hövelhof
www.quantumrehab.de

China

Room 508, Building #4
TianNa Business Zone
No. 500 Jianyun Road
Pudong New Area
Shanghai 201318
www.pridechina.cn

