


Allegato al prodotto









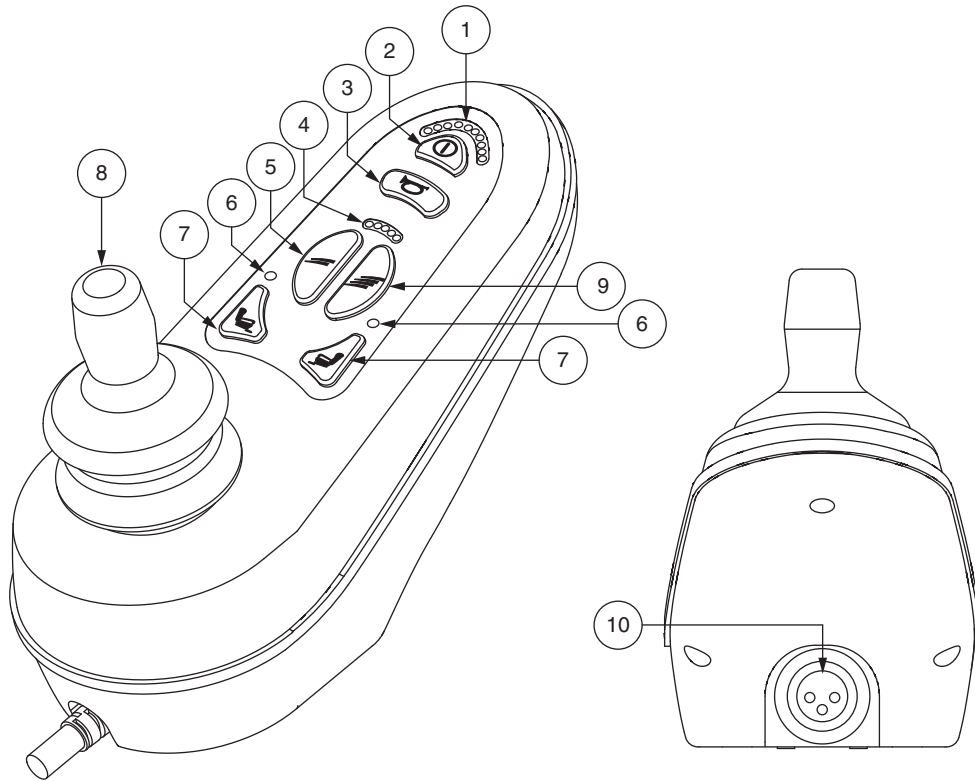


VR2



air®

Codice di Identificazione



 Centralina	<p>1</p>  Indicatore di stato di carica della batteria	<p>2</p>  Tasto On/Off	<p>3</p>  Clacson
<p>4</p>  Indicatore Profilo Velocità Massima	<p>5</p>  Pulsante Diminuzione Velocità/Profilo	<p>6</p>  Modalità LED	<p>7</p>  Pulsanti Attuatore
<p>8</p>  Joystick	<p>9</p>  Pulsante Aumento Velocità/Profilo	<p>10</p>  Porta del Caricabatterie	



Allegato al Prodotto

Nota: *Le Informazioni che seguono sono da intendersi in aggiunta a quelle contenute nelle Istruzioni Operative di Base fornite con la centralina VR2 e spiegano come utilizzare il sistema di elevazione elettronica della seduta Jazzy Air. Si prega di conservare le presenti informazioni e di contattare il rivenditore autorizzato Pride per qualsiasi dubbio e/o necessità.*

Jazzy AIR

La vostra carrozzina elettronica è dotata della funzionalità Jazzy Air per l'elevazione elettronica della seduta. La funzionalità Jazzy Air è montata su una base elettronica Quantum in modo da garantire la massima stabilità quando il sistema di elevazione della seduta è attivato.

In determinate situazioni, ivi incluse alcune condizioni di salute, è necessario che l'utente familiarizzi con la carrozzina dotata di funzionalità Jazzy Air in presenza di un assistente qualificato. Può essere considerato tale un membro della famiglia o un assistente specializzato addestrati ad assistere l'utente della carrozzina durante le varie attività quotidiane.

Durante le attività quotidiane potranno presentarsi situazioni per le quali sarà necessario aver acquisito una certa familiarità con la funzionalità Jazzy Air. Prendetevi il tempo necessario e presto sarete in grado di gestire i comandi in piena sicurezza.

Elevazione

La funzionalità Jazzy Air può essere attivata selezionando l'attuatore di elevazione della seduta.

Per selezionare e regolare l'elevazione della seduta utilizzando il joystick VR2:

1. Premere una volta il pulsante On/Off per accendere la centralina.
2. Premere il pulsante dell'attuatore finché i LED della funzione MODE si illuminano.
3. Quando la modalità di elevazione seduta è selezionata, spostare il joystick in avanti o all'indietro per regolare la posizione nell'una o nell'altra direzione.
4. Per ritornare ad un profilo diverso, premere e poi rilasciare il pulsante dell'attuatore fino a tornare al profilo di guida desiderato.

NOTA: *Se le impostazioni del vostro VR2 differiscono da quelle descritte qui, contattate il rivenditore autorizzato Pride. Il rivenditore potrebbe infatti aver modificato la programmazione della vostra centralina VR2.*

Per attivare Jazzy AIR utilizzando un pulsante:

1. Premere una volta il pulsante per sollevare la seduta ed attivare la funzionalità Jazzy Air.
2. Premere una volta il pulsante per abbassare la seduta.

NOTA: *La funzionalità Jazzy Air è automaticamente inserita quando l'elevazione elettronica della seduta è attivata ed il LED dell'indicatore di Velocità Massima/ Profilo sulla centralina lampeggia.*

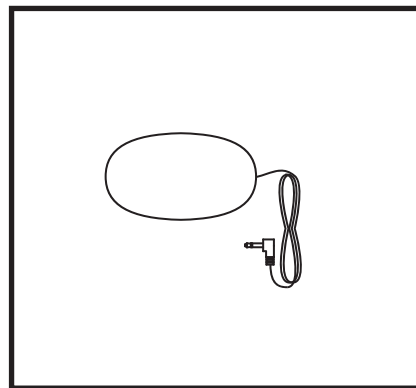


Figura 1. Interruttore

La carrozzina dovrebbe essere utilizzata in ambienti chiusi su superfici piane come supermercati, uffici, abitazioni e/o strutture mediche. Una volta attivato l'attuatore di elevazione della seduta, la funzionalità Jazzy Air limita i movimenti delle sospensioni sulle ruote direzionali anteriori e riduce la capacità della carrozzina di superare dislivelli.

AVVERTENZA! La carrozzina dovrebbe essere utilizzata solo in ambienti chiusi su superfici piane come supermercati, uffici, abitazioni e/o strutture mediche. Non alzare la seduta dalla sua posizione più bassa quando la carrozzina si trova su superfici irregolari o in pendenza. Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare il ribaltamento della carrozzina.

AVVERTENZA! La funzionalità Jazzy Air dovrebbe essere utilizzata all'aperto solo in spazi ristretti, asfaltati, piani e privi di asperità. Se non conoscete perfettamente il vostro contesto ambientale astenetevi dall'utilizzare la funzionalità Jazzy Air all'aperto.



PROIBITO! Non utilizzare mai la funzionalità Jazzy Air all'aperto su terreni irregolari (ghiaia, colline o altri tipi di terreno irregolare e non compatto) o nei campi.




AVVERTENZA! Non elevare la seduta con la funzionalità Jazzy Air quando state utilizzando la carrozzina su superfici sconnesse o irregolari. Il mancato rispetto di questa avvertenza può provocare il ribaltamento della carrozzina.










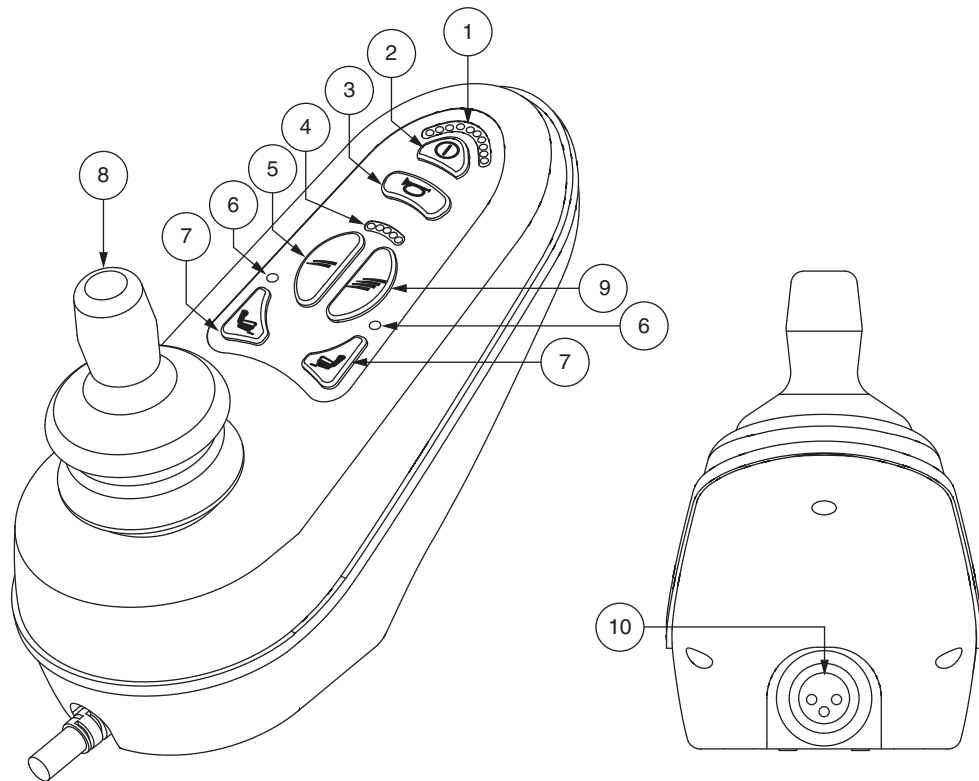

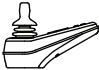AVVERTENZA! Allacciare sempre la cintura quando la carrozzina è in funzione.

AVVERTENZA! Non attivare la funzionalità Jazzy Air e non modificare l'elevazione della seduta quando vi trovate con la carrozzina sotto un oggetto fisso, come un tavolo o una scrivania. Mantenere libera l'area di utilizzo sia prima che durante movimento.

AVVERTENZA! Quando per qualsivoglia ragione il sistema Jazzy Air non viene riconosciuto in fase di elevazione della seduta da parte della centralina, si udirà un allarme sonoro accompagnato dal lampeggio dei 10 led sull'indicatore di carica. La velocità massima raggiungibile verrà automaticamente ridotta al 25% con seduta elevata, per la vostra sicurezza. Se questo avviso permane anche in assenza di elevazione, interrompete l'utilizzo della Jazzy Air e consultate il rivenditore autorizzato Pride per assistenza.

NOTA: *La funzionalità Jazzy Air è dotata di un sistema che consente alla carrozzina di viaggiare ad una velocità predeterminata di sicurezza quando la seduta è elevata. Assicurarsi sempre che il sistema funzioni correttamente prima di utilizzare la carrozzina.*



 Centralina	 Indicatore di stato di carica della batteria	 Tasto On/Off	 Clacson
 Indicatore Profilo Velocità Massima	 Pulsante Diminuzione Velocità/Profilo	 Modalità LED	 Pulsanti Attuatore
 Joystick	 Pulsante Aumento Velocità/Profilo	 Porta del Caricabatterie	

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

B.V.

Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
www.pride-mobility.nl

www.pridemobility.com



I N F I N F B 3 5 0 8