

Sonic

Manuel d'instructions

ATTENTION:
Prenez le temps de lire
ce manuel en entier
avant d'utiliser votre
scooter.



Le Summum du Style et de la Performance®

Pride
Mobility Products Europe B.V.

*Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam The Netherlands*

www.pridemobility.com

REGLES DE SECURITE

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel avant d'utiliser votre scooter pour la première fois. Si certains aspects vous semblent peu clair ou si vous avez besoin d'aide, contactez votre détaillant Pride.

Votre sécurité lors de l'utilisation de votre scooter de Pride dépend de votre diligence à respecter les mises en garde, instructions et consignes de sécurité présentées dans ce manuel. Votre sécurité lors de l'utilisation du scooter est également tributaire de votre bon jugement ainsi que celui de votre détaillant, personne aidante et de professionnel de la santé. Pride ne pourra être tenu responsable pour des blessures ou dommages découlant d'une utilisation non-sécuritaire du scooter. De plus, Pride ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages découlant d'une utilisation sans bon jugement ou l'ommission de suivre les instructions et recommandations contenues dans ce manuel.

Les symboles suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour identifier les mises en garde et moments d'attention particulière. Il est important de les comprendre et de les suivre à la lettre.



MISE EN GARDE! Ne pas les suivre pourrait entraîner des blessures.



ATTENTION! Ne pas les suivre pourrait entraîner des dommages à votre véhicule.

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION	4
II. SECURITE	6
III. SPECIFICATIONS	15
IV. VOTRE SONIC	17
V. BATTERIES ET RECHARGE	20
VI. FONCTIONNEMENT	24
VII. REGLAGES CONFORT	26
VIII. DEMONTAGE ET ASSEMBLAGE	28
IX. ACCESSOIRES EN OPTION	31
X. PROBLEMES ET SOLUTIONS	32
XI. SOINS ET ENTRETIEN	34
XII. GARANTIE	35



SONIC

I. INTRODUCTION

Bienvenue chez Pride Mobility Products Europe B.V. (Pride). Nous vous félicitons et vous remercions d'avoir fait l'achat d'un nouveau scooter Pride. Voilà un appareil aux lignes modernes et attrayantes, fabriqué selon une technologie d'avant-garde. Nous sommes convaincus que la fiabilité de votre Sonic et les services qu'il vous rendra feront de vous un propriétaire satisfait.

Chez Pride, la sécurité passe avant tout. **Nous vous prions de prendre le temps de lire les instructions contenues dans ce manuel avant d'utiliser votre Sonic pour la première fois.** Pride a préparé ce manuel d'utilisation dans votre intérêt. Il est primordial pour votre sécurité que vous compreniez les instructions contenues dans ce manuel.

Pride ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages découlant d'une utilisation non-sécuritaire du scooter. De plus, Pride ne pourra être tenu responsable des blessures ou dommages découlant d'une utilisation sans jugement ou l'omission de suivre les instructions et recommandations contenues dans ce manuel.

En préparation de ce manuel, nous avons compilé les dernières données disponibles. Pride se réserve le droit d'apporter des modifications et des mises à jour à ses produits antérieurs. Ces modifications peuvent causer des variations entre les illustrations contenues dans ce manuel et le produit que vous avez acheté.

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Sonic que vous n'arrivez pas à résoudre, ou que vous n'êtes pas certain de vos capacités à suivre les instructions contenues dans ce manuel, svp contactez votre détaillant Pride pour obtenir de l'aide.

Lorsque vous comprendrez toutes les consignes et que vous saurez comment prendre soin de votre scooter, celui-ci, nous en sommes convaincus, vous apportera maintes années de loyaux services.

Echange d'informations

Nous aimerions recevoir vos commentaires, questions et suggestions au sujet de ce manuel. Nous aimerions aussi recevoir vos commentaires concernant la fiabilité et la sécurité de votre nouveau Sonic et ainsi que sur les services offerts par votre détaillant Pride.

Nous aimerions être avisés si vous déménagez, car nous pourrions ainsi vous tenir informé si des mesures venaient à être prises pour augmenter la sécurité de votre scooter, ou encore sur les nouveaux produits et nouvelles options qui augmenteraient le plaisir associé à l'utilisation de votre Sonic. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante:

Pride Mobility Products Europe B.V.
Tijnmuiden 28
1046 AL Amsterdam
The Netherlands

I . I N T R O D U C T I O N

Mon détaillant autorisé Pride:

Nom: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____

Référence et informations:

Modèle de scooter: _____

Numéro de série: _____

Date d'achat: _____

NOTE: Si vous égarez ou perdez votre manuel d'instructions ou votre carte d'enregistrement de garantie, il nous fera plaisir de vous les remplacer sur le champ.

II. SECURITE

Consignes de securite generales



MISE EN GARDE! Ne prenez pas votre scooter pour la première fois sans avoir lu et compris les instructions et consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

Votre scooter est un appareil dernier cri d'aide à la vie quotidienne en mobilité. La compagnie Pride construit toute une collection de scooters afin de rencontrer les besoins de chacun. Prenez note que le choix final et la décision d'achat sont la responsabilité de l'utilisateur et du/des professionnels de la santé tels que le médecin, l'ergothérapeute etc.

Dans ce manuel, il est pris pour acquis que le scooter a été réglé par un expert en mobilité, que celui-ci a également conseillé le professionnel de la santé au sujet de l'utilisation de ce produit.

Dans certaines situations,(conditions médicales) l'utilisateur du scooter aura besoin de supervision pour acquérir l'habileté nécessaire à la conduite de son appareil. Un superviseur peut être un membre de la famille ou un professionnel de la santé qui aura reçu une formation sur l'utilisation d'un véhicule motorisé personnel comme aide à la vie quotidienne.

Lorsque vous commencerez à utiliser votre scooter, vous serez confronté à des situations qui demandent une certaine habileté. Prenez alors votre temps et procédez lentement, vous développerez de la facilité pour manoeuvrer dans les ascenseurs, ouvrir les portes, négocier les rampes d'accès et pour rouler sur des surfaces modérément difficiles.

Vous trouverez ci-dessous des conseils, consignes et mises en garde qui vous seront utiles afin de vous acclimater à la conduite sécuritaire du Sonic.

Modifications

Votre scooter a été conçu pour fournir un maximum de mobilité et de facilité. Plusieurs accessoires sont proposés chez votre détaillant Pride afin de personnaliser votre scooter pour que celui-ci rencontre mieux vos besoins. Cependant, vous ne devez, sous aucune considération, modifier, ajouter, retirer, ou rendre inutilisable toute pièce ou fonction de votre scooter.



MISE EN GARDE! Ne modifiez votre scooter d'aucune façon sans l'autorisation de Pride. Des modifications non-autorisées peuvent entraîner des blessures corporelles et/ou dommages à votre scooter.

Pieces enlevables



MISE EN GARDE! Ne jamais tenter de soulever ou déplacer le scooter en le prenant par une pièce enlevable sous peine d'entraîner des blessures corporelles et/ou dommages à votre scooter.

II. SECURITE

Avant de prendre la route

Apprenez à connaître les capacités et limites de votre scooter. Faites les vérifications requises avant chaque sortie pour vous assurer d'un fonctionnement sans problème et sécuritaire. Voyez la section XI. "Soins et entretien" pour connaître les détails sur les inspections nécessaires.

Inspectez les points suivants avant de prendre la route:

- Inspectez les connexions électriques. Vérifiez qu'il n'y a pas de rouille et qu'elles soient bien serrées.
- Vérifiez les freins.
- Vérifiez le niveau de charge des batteries.

Si vous découvrez un problème, contactez votre détaillant Pride pour obtenir de l'aide.

Limite maximale de poids

La limite maximale de poids pour votre Sonic est de 113 kg (250 lb).



MISE EN GARDE! Dépasser la limite maximale de poids sur votre scooter annule la garantie et peut provoquer un accident causant des dommages et blessures. Pride ne pourra être tenu responsable des dommages et pertes découlant du non-respect de cette consigne.

MISE EN GARDE! Ne prenez pas de passager sur votre scooter car ceci pourrait entraîner des blessures et/ou dommages.

Informations sur les pentes et les surfaces inclinées

La plupart des édifices modernes possèdent des rampes d'accès sécuritaires conçues spécifiquement pour les scooters et les fauteuils roulants. Certaines possèdent des virages à 180 degrés qui demandent un bon maniement de votre scooter.

- Soyez toujours très prudent lorsque vous approchez d'une pente ou d'une surface inclinée.
- Négociez les virages serrés lentement en décrivant un grand arc avec la roue avant de votre scooter. De cette façon, les roues arrière décriront également un grand arc et ne seront pas coincées par la bordure ou le coin de la rampe.
- Pour descendre une rampe, réglez le bouton de vitesse au plus lent pour un meilleur contrôle du scooter. Voir la section IV. "Votre Sonic."
- Evitez d'arrêter ou de démarrer abruptement.

Lorsque vous gravissez une pente, essayez de ne pas faire d'arrêt. Si vous devez stopper, redémarrez lentement et accélérez avec précaution. Lorsque vous descendez une pente, réglez le bouton de vitesse au minimum, et descendez toujours de face. Si votre scooter se met à descendre plus vite que vous le désirez, relâchez l'accélérateur et laissez le scooter s'arrêter complètement. Ensuite, pesez légèrement sur l'accélérateur de façon à garder le contrôle de votre descente.

II. SECURITE

MISE EN GARDE! Lorsque vous gravissez une pente, ne pas zigzaguer n'attaquer pas la pente en diagonale. Gravissez la pente en ligne droite directement face à la pente pour réduire grandement les risques de renversement ou de chute. Soyez toujours extrêmement prudent lorsque vous gravissez quelque pente que ce soit.



MISE EN GARDE! Ne jamais monter ou descendre une pente qui comporte des risques tels de la neige, des feuilles mouillées, du gazon frais coupé, de la glace etc.

MISE EN GARDE! Ne jamais débrayer votre Sonic lorsque celui-ci est dans une pente, que vous soyez assis ou debout à côté de votre scooter.

D'autres pentes sont naturelles ou, si construites de main d'homme, n'ont pas été conçues spécifiquement pour des scooters. Les figures 1 et 1A illustrent les capacités et la stabilité de votre scooter dans différentes conditions de poids et d'inclinaison.

Les tests ont été conduits avec le siège du scooter réglé à son plus haut niveau et à la position la plus reculée possible. Ces informations doivent vous servir de guide. La capacité de gravir une pente de votre Sonic dépendra de votre poids, de la vitesse, de l'angle d'approche ainsi que de la configuration de votre scooter.

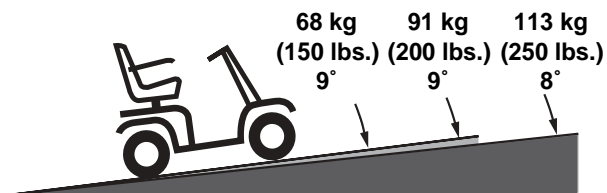


Figure 1. Inclinaison maximale scooter

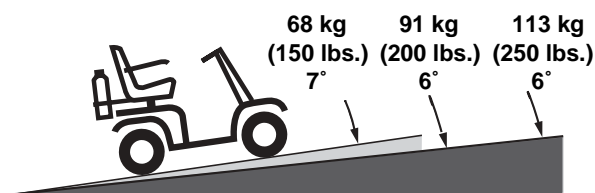


Figure 1A. Inclinaison maximale avec un panier arrière ou un réservoir d'oxygène



MISE EN GARDE! Ne jamais tenter de gravir ou descendre une pente plus abrupte que celle illustrée ci-haut sous peine de provoquer un accident avec blessures corporelles.

MISE EN GARDE! Ne pas utiliser de réservoir d'oxygène de plus de 6 kg (13 lb.). Ne jamais placer plus de 7 kg (15 lb.) de poids dans le panier arrière.

II. SECURITE

Lorsque vous approchez d'une pente, nous vous recommandons d'incliner le torse vers l'avant. Voir les figures 2 et 2A. De cette façon, vous déplacez le centre de gravité vers l'avant afin d'augmenter la stabilité du scooter.



MISE EN GARDE! Ne dépassez pas les inclinaisons maximales et autres spécifications présentées dans ce manuel.



Figure 2. Position de conduite normale

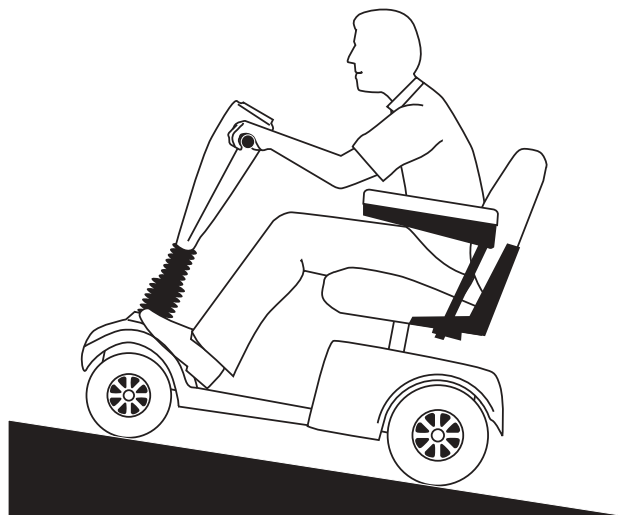


Figure 2A. Position avec stabilité accrue

Informations sur les virages

Une vitesse excessive peut entraîner un renversement dans un virage. Voici une liste partielle des facteurs qui peuvent provoquer un renversement: la vitesse pendant le virage, l'angle du virage (virage plus ou moins serré), des surfaces de roulement inégales, des surfaces de roulement inclinées, passer d'une surface ayant une bonne adhérence vers une surface plus glissante (passer d'un trottoir vers du gazon spécialement dans un virage à haute vitesse), ou un changement abrupt de direction. Les virages à haute vitesse sont déconseillés. Si vous sentez que vous allez vous renverser dans un virage, réduisez la vitesse et l'angle de braquage (i.e. virez moins serré) afin d'empêcher le scooter de se renverser.



MISE EN GARDE! Ralentissez lorsque vous négociez un virage serré. Ne prenez pas de virage serré lorsque vous roulez à haute vitesse car vous risquez de verser sur le côté ou de tomber. Utilisez votre bon jugement afin d'éviter des blessures et/ou dommages lors des virages.

Informations sur le freinage

Votre scooter est équipé de deux puissants systèmes de freins:

1. Régénératif: Utilise de l'électricité pour freiner le scooter rapidement lorsque vous relâchez l'accélérateur.
2. Frein de stationnement à disque: S'active mécaniquement dès que le frein régénératif a ralenti le scooter et presque stoppé ou lorsque le contact est coupé pour quelque motif que ce soit.

II. SECURITE

Surfaces de roulement a l'extérieur

Votre Sonic a été conçu pour une stabilité maximale dans des conditions de conduites normales: surfaces planes et sèches composées de béton ou d'asphalte. Cependant, Pride est conscient que vous serez appelé à conduire sur d'autres types de surfaces. Nous avons pris en considération ces besoins et avons conçu votre scooter de façon à ce qu'il se comporte admirablement lorsqu'utilisé sur le gazon, la terre battue et le gravier. Profitez des parcs et des endroits gazonnés pour vous promener.

- Ralentissez le scooter lorsque vous approchez d'une surface de roulement inégale ou molle.
- La terre battue, le gravier, les sentiers et chemins ne présentent pas de problèmes pour votre scooter.
- Évitez le sable mou et le gravier épais.
- Si vous doutez de la surface devant vous, évitez-la si possible.

Obstacles fixes (escaliers, trottoirs, etc.)

MISE EN GARDE! Prenez garde lorsque vous roulez sur le bord d'un trottoir ou d'une bordure surélevée (balcons, escaliers etc.).

MISE EN GARDE! Ne tentez pas de gravir, de descendre une pente ou de négocier un obstacle plus grand qu'ordinaire. Vous pourriez vous blesser gravement ou endommager votre scooter.



MISE EN GARDE! Ne tentez jamais de faire marche arrière (reculer) pour descendre une pente ou négocier un obstacle telle une bordure de trottoir.

MISE EN GARDE! Approchez perpendiculairement toutes bordures surélevées que vous devez monter ou descendre avec votre scooter. Voir les figures 3 et 3A.

MISE EN GARDE! Ne tentez pas de négocier une bordure de plus de 5 cm (2 po) de haut.

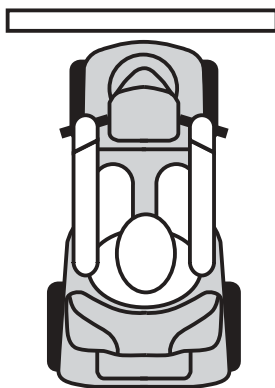


Figure 3. Approche correcte

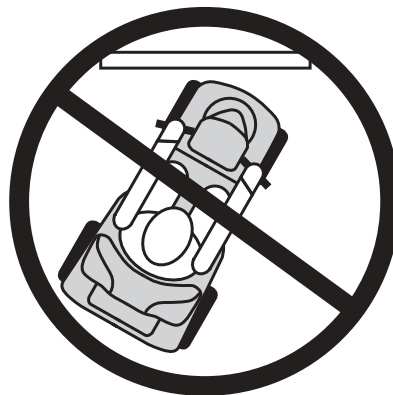


Figure 3A. Approche incorrecte

II. SECURITE

Rues et chemins publics



MISE EN GARDE! Vous ne devez pas rouler avec votre scooter dans les rues ou sur les routes. Il est difficile pour les automobilistes de vous voir lorsque vous êtes assis sur votre scooter. Respectez les règlements pour les piétons. Attendez que la circulation soit dégagée de votre chemin avant de procéder prudemment.

Precautions pour meteo inclemente



MISE EN GARDE! N'utilisez pas votre scooter sur des surfaces glacées ou salées (ex.: trottoir ou chemin). Ces conditions peuvent affecter le fonctionnement de votre scooter et provoquer des dommages et même des accidents.

MISE EN GARDE! N'exposez jamais les composantes électroniques de votre scooter à l'humidité (pluie, neige, brume, ou eau de lavage), car cela pourrait endommager ses circuits. N'utilisez jamais votre scooter s'il est mouillé. Laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser à nouveau.

Mode roues libres (neutre)

Votre scooter est équipé d'un levier de débrayage qui permet de passer en mode roues libres (neutre) pour le déplacement manuel du scooter. Pour de plus amples informations sur le mode roues libres, voyez la section IV. "Votre Sonic."



MISE EN GARDE! Ne débrayez pas votre scooter sans la présence d'une personne aidante au risque de vous blesser.

MISE EN GARDE! Ne tentez pas de débrayer votre scooter alors que vous y prenez place au risque de vous blesser. Demandez de l'aide au besoin.

MISE EN GARDE! Ne jamais débrayer votre scooter lorsque celui-ci est dans une pente, que vous soyez assis ou debout à côté de votre scooter.

Votre Sonic est équipé d'un dispositif de sécurité: le "push-too-fast." Ce dispositif empêche le scooter d'atteindre une vitesse excessive lorsque celui-ci est débrayé (neutre).

Le dispositif "Push-too-fast" fonctionnera différemment selon les situations suivantes:

- Si vous retirez la clé du contact lorsque le scooter est débrayé(neutre), le contrôleur actionnera le freins régénératif si le scooter atteint la vitesse maximale préprogrammée. Dans cette situation, le contrôleur agit comme un régulateur de vitesse.
- Si vous mettez le contact alors que le scooter est débrayé, celui-ci opposera une résistance considérable à n'importe quelle vitesse. Ceci préviendra que le scooter ne s'emballer au cas où celui-ci serait débrayé par inadvertance pendant son utilisation.

II. SECURITE

Escaliers et escaliers mécaniques

Les scooters ne sont pas conçus pour être utilisés dans les escaliers ou les escaliers mécaniques. Prenez toujours l'ascenseur.



MISE EN GARDE! Ne tentez jamais d'emprunter un escalier ou un escalier mécanique sous peine de vous blesser gravement et/ou d'endommager votre scooter.

Portes

- Déterminez dans quelle direction la porte s'ouvre.
- Utilisez votre main pour tourner la poignée ou pousser la barre.
- Faites avancer votre scooter doucement contre la porte pour la pousser ou retenez la porte avec votre main et reculez lentement.

Ascenseurs

Les ascenseurs modernes ont des dispositifs qui réouvrent la ou les porte(s) lorsqu'elle(s) rencontre(nt) un obstacle.

- Si vous êtes dans l'ouverture alors que la ou les porte(s) se referme(nt), poussez la bande de caoutchouc de la main ou laissez-la venir en contact avec le scooter pour réouvrir la ou les porte(s).
- Soyez prudent, évitez que des articles tels des colis, sacs ou autres objets ne restent coincés dans le mécanisme de la ou des porte(s).

Appareil pour Soulever/Elever

Si vous voyagez avec votre scooter, il vous sera nécessaire d'utiliser un appareil pour vous aider à le déplacer. Nous recommandons de suivre les instructions du fabricant méticuleusement et de lire les spécifications en entier avant d'utiliser votre appareil.

Batteries

En plus des mises en garde énoncées ci-dessous, vous devez respecter les consignes de soins à donner aux batteries indiquées dans la section V. "Batteries et recharges."



MISE EN GARDE! Les bornes des batteries, les connecteurs et les accessoires reliés aux batteries contiennent du plomb. Lavez-vous les mains après les avoir manipulés.

MISE EN GARDE! Toujours protéger les batteries contre le gel. Ne jamais tenter de recharger une batterie gelée car vous pourriez vous blesser ou endommager la batterie.

Prevention des Mouvements Non-Intentionnels



MISE EN GARDE! Si vous prévoyez demeurer en place pendant plusieurs minutes, coupez le contact afin de réduire le risque de mouvements non-intentionnels sous peine de provoquer un accident avec blessures.

II. SECURITE

Transport

A ce jour, il n'y a pas de système d'ancrage qui permette à une personne d'utiliser son scooter comme un siège dans un véhicule routier.

Même si votre scooter est équipé d'une ceinture de positionnement, celle-ci n'est pas une ceinture de sécurité et n'a pas été conçue pour être utilisée dans un véhicule en mouvement. Toute personne voyageant dans un véhicule motorisé doit porter la ceinture de sécurité approuvée par le fabricant du véhicule.



MISE EN GARDE! Ne vous assoyez pas dans votre scooter lorsque celui-ci est dans un véhicule en mouvement. Blessures et dommages peuvent s'en suivre.

MISE EN GARDE! Ancrez solidement votre scooter et ses batteries pour le transport en véhicule à défaut de provoquer des blessures corporelles et/ou dommages au scooter.

Monter ou descendre de votre scooter

Monter ou descendre d'un scooter demande un bon sens de l'équilibre. S.V.P. respectez les consignes de sécurité lorsque vous montez ou descendez de votre scooter:

- En premier lieu, coupez le contact d'abord. Voir la section VI. "Fonctionnement."
- Assurez-vous que le scooter n'est pas débrayé (au neutre). Voir la section IV. "Votre Sonic."
- Assurez-vous que le siège est bloqué et que la clé n'est pas sur le contact.
- Vous pouvez placer les accoudoirs à la verticale pour faciliter le transfert.



MISE EN GARDE! Prenez place bien au fond du siège du scooter afin de prévenir un renversement et les blessures conséquentes.

MISE EN GARDE! Evitez de prendre appui sur les accoudoirs afin de prévenir un renversement et les blessures conséquentes.

Ceinture de Positionnement

Votre fournisseur, votre thérapeute ou la personne aidante ont la responsabilité de déterminer le type de ceinture de positionnement adéquate pour l'utilisation sécuritaire de votre scooter.



MISE EN GARDE! Ne placez pas tout votre poids sur le plancher du scooter sous peine de provoquer un renversement avec blessures.

MISE EN GARDE! Si vous devez porter une ceinture de positionnement, assurez-vous que celle-ci est bien attachée sous peine de faire une chute et de vous blesser gravement.

II. SECURITE

Comment atteindre des objets

Evitez de vous pencher ou d'essayer d'atteindre des objets lorsque vous conduisez votre scooter. Il est primordial de maintenir le centre de gravité en équilibre pour empêcher le scooter de se renverser lorsque vous vous penchez ou essayez d'atteindre un objet à partir de votre scooter. Nous recommandons de déterminer vos capacités et limites en présence d'une personne aidante qualifiée.



MISE EN GARDE! Ne tentez pas de ramasser un objet sur le sol entre vos jambes en penchant le torse vers l'avant. Cette manoeuvre déplace le centre de gravité et la distribution du poids et peut provoquer le renversement du scooter. Des blessures peuvent en découler. N'approchez pas vos mains des pneus lorsque vous roulez.

Medicaments prescrits et handicaps physiques

Vous devez être prudent et prévenant lorsque vous conduisez votre scooter. Ceci implique que vous devez tenir compte des effets des médicaments prescrits ou non prescrits ainsi que des handicaps physiques sur votre habilité à conduire.



MISE EN GARDE! Consultez votre médecin si vous prenez des médicaments prescrits ou non prescrits ou si vous avez un handicap physique car votre habilité à conduire peut en être affectée.

Alcool

Vous devez être prudent lorsque vous conduisez votre scooter. Ceci implique que vous devez tenir compte des effets de l'alcool sur votre habilité à conduire sécuritairement votre scooter.



MISE EN GARDE! Ne conduisez pas votre scooter lorsque vous avez consommé de l'alcool car vos facultés sont affaiblies.

III. SPECIFICATIONS

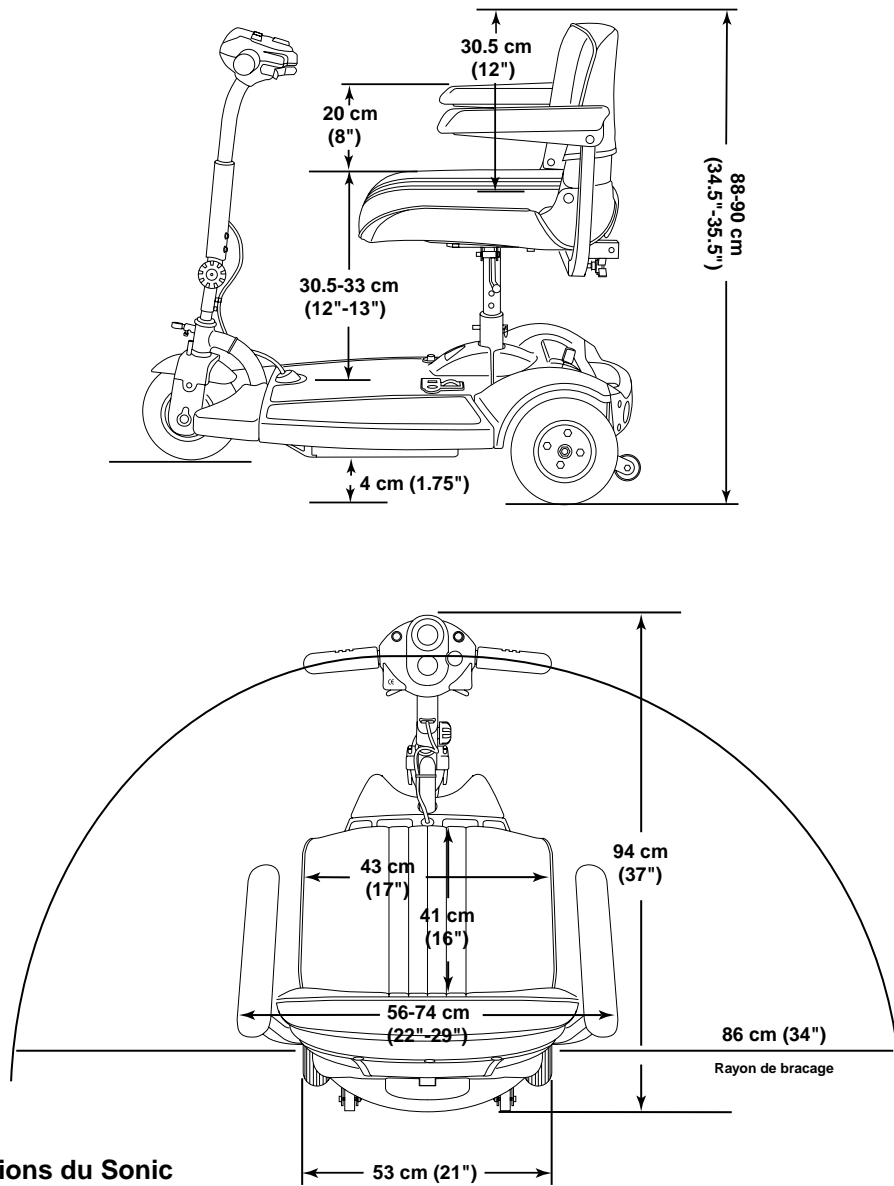


Figure 4. Dimensions du Sonic

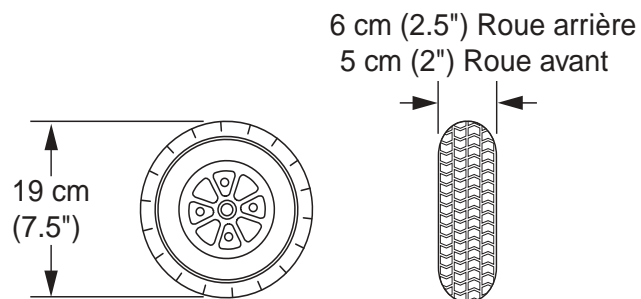


Figure 4A. Dimensions des roues du Sonic

III. SPECIFICATIONS

Spécifications	
Numéro du modèle	SC50EUR
Couleurs offerte	Rouge
Longueur hors-tout	94 cm (37 po)
Largeur hors-tout	53 cm (21 po)
Poids total sans les batteries	42 kg (93 lbs)
Composante la plus lourde (démontée)	16 kg (35 lbs)
Rayon de braccage	86 cm (34 po)
Vitesse maximale	Variable jusqu'à 6.8 km/h (4.25 mph)
Autonomie*	Jusqu'à 16 km (10 milles)
Dégagement au sol	4 cm (1.75 po)
Charge utile	113 kg (250 lbs)
Siège standard	Type: Repliable en plastique moulé Dimensions: 43 cm (17 po) largeur x 41 cm (16 po) profondeur (utilisable) x 30.5 cm (12 po) hauteur (utilisable) Recouvrement: Tissu couleur charbon
Rouage d'entraînement	Roues motrices à l'arrière, moteur 24-volt DC à essieu scellé
Système de frein double	Electronique, régénératif et électromécanique
Jantes de roues	En plastique moulé noir
Pneus	Type: À âme pleine Avant: 5.08 cm (2 po) x 19 cm (7.5 po) Arrière: 6 cm (2.5 po) x 19 cm (7.5 po)
Spécifications des batteries	Type: Deux 12-volt à décharge poussée (SLA ou au gel scellé) Format: 12 AH
Chargeur à batteries	Chargeur 2 ampères
Garantie	Limitée de 3 années
Accessoires	Support à béquille/cane simple ou double; support à béquille; support à marchette; support à béquille canadienne; support à oxygène; panier avant ou arrière; fanion; support à tasse; housse

* Varie en fonction du poids de l'utilisateur, du type de terrain, de l'état et de la condition des batteries ainsi que la pression dans les pneus.

IV. VOTRE SONIC

Tableau de bord

Le tableau de bord abrite toutes les commandes de fonctionnement du scooter, incluant le bouton de réglage de la vitesse, les leviers accélérateurs, la jauge à batteries, les voyants d'alerte et les boutons du klaxon. Voir la figure 5.



MISE EN GARDE! N'exposez pas le tableau de bord à l'humidité. Si le tableau venait à être mouillé, ne tentez pas d'utiliser votre scooter avant que le tableau ait été asséché à fond.



Figure 5. Tableau de bord

Clé de contact

- Insérez la clé dans le contact et tournez-la dans le sens horaire pour allumer votre scooter.
- Tournez la clé dans le sens opposé pour couper le contact de votre scooter.

Leviers accélérateurs

Ces leviers commandent la marche avant ou arrière du scooter selon la vitesse maximale déterminée par le bouton de réglage de la vitesse.

- Placez la main droite sur la poignée droite et la main gauche sur la poignée gauche du guidon.
- Utilisez votre pouce droit pour appuyer sur l'accélérateur, les freins se relâcheront et le scooter avancera.
- Relâchez l'accélérateur, laissez le scooter s'arrêter avant de peser sur l'accélérateur gauche et faire marche arrière.
- Lorsque les accélérateurs sont complètement relâchés, ils reviennent au centre en position "stop" et les freins s'engagent automatiquement.

Klaxon

Assurez-vous que la clé est sur le contact et que le scooter est allumé.

- Pesez sur le bouton pour klaxonner.
- N'hésitez pas à klaxonner si vous croyez pouvoir éviter un accident.

IV. VOTRE SONIC

Voyants d'alerte

Ces voyants vous alertent si un problème électrique survient dans les circuits du scooter. Les voyants sont constamment illuminés lorsque le scooter est allumé. Si un problème survient, les voyants clignoteront en séquence codée. Voir la section X. "Problèmes et solutions" pour les codes de clignotement. Si la séquence n'est pas sur le tableau des codes, contactez votre détaillant Pride.

Bouton de réglage de la vitesse maximale

Ce bouton vous permet de présélectionner la vitesse maximale désirée.

- L'image de la tortue représente la vitesse minimale.
- L'image du lièvre représente la vitesse maximale.

Composantes du système de recharge

Le système est composé des batteries, du chargeur, du réceptacle du cordon d'alimentation, de l'ampèremètre et du disjoncteur du circuit principal. Voir la figure 6.

Batteries (non montrées)

Les batteries emmagasinent l'énergie requise pour le fonctionnement du scooter. Elles sont enfermées dans un module facilement enlevable situé dans son compartiment. Soulevez le couvercle du compartiment pour voir le module de batteries.

Réceptacle du cordon du chargeur

Le cordon du chargeur à batteries de votre Sonic se branche dans ce réceptacle.

Ampèremètre

Pendant la recharge des batteries, l'ampèremètre vous indique le débit du chargeur. Voir la section V. "Batteries et recharge."

Bouton du disjoncteur principal

Lorsque les batteries sont faibles et que la demande est excessive (charge lourde ou pente forte) le disjoncteur peut se déclencher pour éviter d'endommager les composantes électroniques et le moteur. Voir la figure 6.

- La tête du bouton du disjoncteur sort lorsqu'il est déclenché.
- Lorsqu'il est déclenché, tous les circuits sont hors service.
- Attendez une minute avant d'essayer d'enclencher le circuit à nouveau.
- Pesez sur le bouton pour l'enfoncer et rétablir les circuits.
- Si le disjoncteur se déclenche à répétition, nous recommandons de charger vos batteries plus souvent et de faire tester vos batteries par votre marchand autorisé Pride.
- Si le disjoncteur saute à nouveau, vous devrez voir votre détaillant Pride autorisé pour faire vérifier votre appareil.

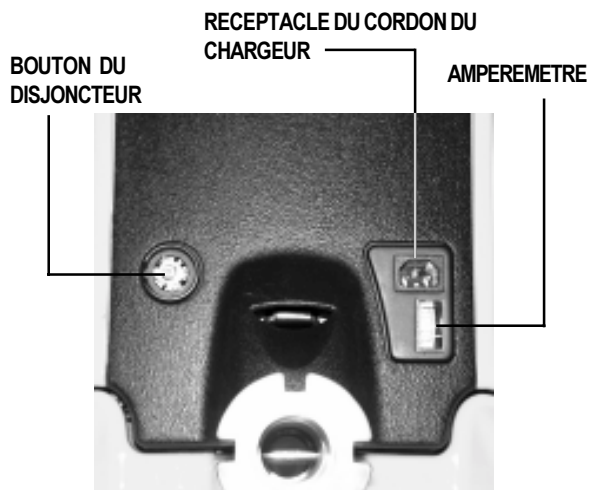


Figure 6. Compartiment à batteries

IV. VOTRE SONIC

Section arriere

La section arrière de votre scooter abrite le module moteur/transmission (non-montré) les antibascules et le levier d'embrayage. Voir la figure 7.



MISE EN GARDE! Avant de débrayer votre scooter, soyez assuré que le contact est coupé. Ne jamais vous asseoir sur votre scooter lorsqu'il est au neutre (débrayé). Ne jamais débrayer votre scooter alors que celui-ci est dans une pente ou sur une surface inclinée.

Levier d'embrayage manuel

Vous pouvez débrayer votre scooter (neutre) pour le déplacer manuellement sur de courtes distances.

- Le levier d'embrayage est situé dans le coin supérieur gauche de la section arrière du scooter.
- Tirez le levier vers le haut pour débrayer et relâcher les freins.
- Vous pouvez déplacer votre scooter en le poussant manuellement.
- Poussez le levier vers l'avant pour embrayer et activer les freins.

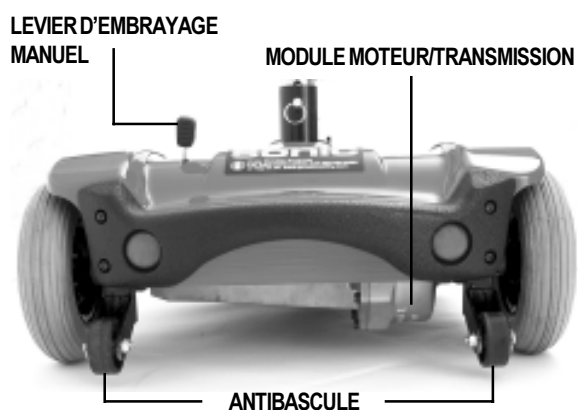


Figure 7. Section arrière



MISE EN GARDE! Ne jamais débrayer votre scooter lorsque vous y prenez place alors que celui-ci est dans une pente ou sur une surface inclinée.

FONCTIONNEMENT DU LEVIER D'EMBRAYAGE MANUEL

- Débrayez seulement lorsque le scooter est éteint et sur un plan horizontal.
- Tirez vers l'arrière fermement sur le levier pour débrayer le scooter.
- Poussez vers l'avant fermement sur le levier pour embrayer le scooter.

Roulettes antibascule

Les roulettes antibascule sont une composante de sécurité importante de votre scooter. Ne jamais, sous aucune considération, enlever les roulettes antibascule de votre scooter.

Module moteur/transmission

Le module moteur/essieu est composé du moteur et d'un essieu scellé à la transmission et au différentiel. Ce module électromécanique transforme l'énergie des batteries en puissance pour les roues motrices de votre Sonic.

V. BATTERIES ET RECHARGE

Votre Sonic utilise deux batteries à décharge poussée, scellées et sans entretien de 12 volts, 12 AH.

- Chargez vos batteries avant la toute première utilisation de votre scooter.
- Gardez vos batteries bien chargées pour éviter les complications.

Lecture du voltage des batteries

La jauge à batteries située sur le tableau de bord indique la quantité d'énergie stockée dans les batteries à l'aide d'un code de couleur. Voir la figure 8. Le vert indique des batteries pleine charge, le jaune indique que la charge est partielle tandis que le rouge montre que les batteries doivent être rechargées immédiatement. Pour prendre une lecture, vous devez débrancher le cordon d'alimentation du chargeur et mettre le contact du scooter.

Vous pouvez également vérifier l'état des batteries à l'aide de l'ampèremètre situé à l'arrière du scooter. Le chargeur à batteries doit être branché pour obtenir une lecture. Lorsque l'aiguille oscille près du zéro, la recharge des batteries est complétée. Voir la figure 9.

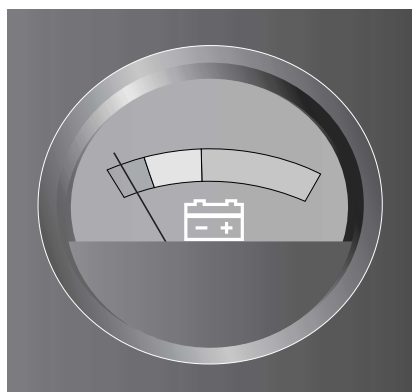


Figure 8. Jauge à batteries



Figure 9. Ampèremètre (batteries complètement chargées)

Recharge des batteries

Voici comment recharger vos batteries sécuritairement:

1. Placez votre scooter près d'une prise de courant standard.
2. Retirez la clé du contact.
3. Assurez-vous que le scooter soit bien embrayé (levier poussé vers l'avant).
4. Retirez le couvercle du réceptacle et branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans son réceptacle à l'arrière de votre scooter.



MISE EN GARDE! Ne jamais utiliser de cordon de rallonge électrique pour le branchement du chargeur. Toujours brancher le cordon directement dans une prise murale ordinaire.

5. Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans la prise de courant standard.
6. Lorsque les batteries sont complètement rechargées, débranchez le cordon du réceptacle du chargeur et de la prise murale.
7. Remplacez le couvercle du réceptacle du cordon d'alimentation.

NOTE: Votre scooter possède un dispositif coupe-circuit qui empêche le scooter et la jauge à batteries de fonctionner lorsque le chargeur est en marche.

V. BATTERIES ET RECHARGE

Questions fréquentes au sujet des batteries

Comment fonctionne le chargeur?

Si les batteries sont faibles, le chargeur travaillera davantage. Au fur et à mesure que les batteries se rechargent, le chargeur ralentit le niveau de recharge jusqu'à ce que les batteries soient complètement chargées. Lorsqu'elles le sont, le niveau d'intensité est presque à zéro. Les batteries seront alors maintenues chargées mais ne peuvent être surchargées. Il est recommandé de ne pas charger les batteries pendant plus de 24 heures.

Que faire si le chargeur de mon sonic refuse de fonctionner?

- Assurez-vous que les deux extrémités du cordon d'alimentation soient bien branchées à fond.

À quelle fréquence dois-je recharger mes batteries?

Deux facteurs influencent la nécessité de recharger les batteries.

- Une utilisation journalière.
- Une utilisation occasionnelle du scooter.

D'autres facteurs, comme le poids du conducteur, les bagages, la configuration du terrain doivent aussi être pris en considération. Conscient de ces facteurs, vous devez vous poser deux questions: «Est-ce que je dois recharger mes batteries souvent et pendant combien de temps?». Bien que le chargeur de batteries intégré ait été conçu de façon à ne jamais surcharger les batteries, plusieurs propriétaires hésitent à charger leurs batteries régulièrement. Si vous suivez les conseils décrits ci-dessous, vos batteries seront fiables et plus durables.

- Si vous utilisez votre scooter toute la journée, rechargez vos batteries dès que vous avez fini de l'utiliser. Le chargeur possède un dispositif automatique qui ne surchargera pas vos batteries et votre scooter sera prêt chaque matin. Après une journée d'utilisation, il est recommandé de recharger vos batteries pendant 8 à 14 heures.
- Si vous utilisez votre scooter occasionnellement (une fois par semaine ou moins), il est recommandé de recharger vos batteries au moins une fois par semaine pendant 12 à 14 heures.
- Gardez vos batteries bien chargées.
- Évitez de les décharger complètement.
- Ne pas recharger les batteries pendant plus de 24 heures.

Comment obtenir une distance maximale avec mes batteries?

Les conditions de conduite ne sont jamais idéales... terrain ferme et plat sans courbe et pas de vent contraire. Souvent, nous faisons face à des pentes, des crevasses dans les trottoirs, du gravier, des courbes, etc. Ces facteurs affecteront la distance que vous pourrez parcourir avec votre scooter. Voici quelques suggestions pour maximiser la distance parcourue avec une recharge de batteries:

- Avant de partir, assurez-vous que vos batteries sont pleinement chargées.
- Planifiez votre sortie de façon à éviter les pentes et les surfaces difficiles.
- Emportez le minimum de bagages.
- Essayez de maintenir une vitesse constante.
- Évitez d'arrêter et de repartir fréquemment.

Au sujet des transporteurs publics?

Si vous avez l'intention d'utiliser les transports publics, nous vous recommandons de les contacter à l'avance pour connaître leurs règlements.

V. BATTERIES ET RECHARGE

Quel type de batteries devrais-je utiliser?

Nous recommandons les batteries à décharge poussée (deep cycle), sans entretien et scellées à l'usine ce qui élimine les risques de fuite. Les batteries de type scellé (SLA), à l'acide ou au gel sont des batteries "à décharge poussée" offrant des performances similaires. N'utilisez pas de batteries conventionnelles à bouchons enlevables.

Caractéristiques des batteries de remplacement:

Type:	À décharge poussée (scellées, à l'acide ou au gel)
Voltage:	12 volts chaque
Format:	12 AH

Pourquoi mes nouvelles batteries semblent-elles faibles?

Les batteries de type "à décharge poussée" sont très différentes des batteries d'automobiles, nickel/cadmium ou des autres batteries de types courants. Entre autres, les composantes chimiques utilisées dans les batteries à décharge poussée augmentent leur puissance et permettent de les recharger rapidement.

En collaboration avec son fournisseur de batteries, Pride équipe ses scooters avec les meilleures batteries disponibles. Elles sont chargées à bloc avant la livraison, cependant le transport les expose à des conditions climatiques parfois extrêmes qui peuvent affecter leur performance. En effet, la chaleur et le froid réduisent la charge des batteries et augmentent le temps nécessaire pour les recharger.

Une batterie peut prendre quelques jours pour se stabiliser à la température ambiante.

De plus, il est important de se rappeler que les batteries atteindront leur performance maximale après quelques cycles d'utilisation et de recharge.

Voici quelques conseils pour bien roder vos batteries:

1. Chargez complètement vos batteries avant d'utiliser votre appareil pour la première fois. Elles seront alors à 88 % de leur capacité.
2. Utilisez tout d'abord votre scooter autour de la maison de façon à vous habituer aux commandes et en apprécier le confort. Ceci permettra de roder vos batteries.
3. Rechargez vos batteries à nouveau pendant environ 8 à 14 heures. Utilisez votre scooter de façon à continuer le rodage. Vos batteries seront alors à 90 % de leur capacité.
4. Utilisez de nouveau votre scooter et rechargez vos batteries.
5. Après quatre ou cinq cycles de décharge et recharge, vos batteries atteindront 100% de leur capacité et dureront plusieurs années grâce aux soins que vous leur aurez apportés.

Que dois-je faire pour allonger la vie utile de mes batteries?

Les batteries à décharge poussée sont conçues pour fournir une performance supérieure plus longtemps que les batteries ordinaires. Gardez vos batteries pleinement chargées aussi souvent que possible. Des batteries trop déchargées, rechargées de façon non assidue, ou entreposées sans qu'elles ne soient pleinement chargées ne seront pas fiables, auront une piètre performance et de plus, dureront moins longtemps.

V. BATTERIES ET RECHARGE

Remplacement des batteries de votre Sonic



MISE EN GARDE! Les batteries, les bornes et les accessoires de batteries contiennent du plomb. Lavez vos mains après les avoir manipulés.

Enlèvement des batteries

1. Retirez le couvercle du compartiment à batteries. Voir la figure 10.
2. Débranchez les câbles à batteries. Voir la figure 11.
3. Retirez le module de batteries du scooter. Voir la figure 11A.
4. Ouvrez le module de batteries pour retirer la ou les batteries.
5. Débranchez la borne rouge (+) positive et la borne noire (-) négative en tirant doucement sur le connecteur. Voir la figure 11B.

Remplacement des batteries

1. Rebranchez les câbles (2) aux bornes de la batterie. Voir la figure 11B.
 - Rouge(+) à la borne positive.
 - Noir (-) à la borne négative.
2. Placez la batterie dans le module, les bornes faisant face au dessus.
3. Refermez le module et placez le dans le compartiment.
4. Rebranchez le câble du module.
5. Remplacez le couvercle du compartiment à batteries.



Figure 10. Couvercle du compartiment

CABLES DES BATTERIES



Figure 11. Enlèvement des câbles



Figure 11A. Enlèvement du module de batteries

BORNES
DES BATTERIES

CABLES
DES BATTERIES

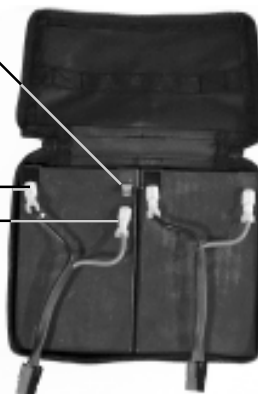


Figure 11B. Câbles des batteries

VI. FONCTIONNEMENT

Avant de prendre place sur votre scooter

- Avez-vous rechargé vos batteries à fond? Voir la section V. “Batteries et recharge.”
- Le scooter est-il embrayé (levier abaissé)? Ne jamais laisser le levier en position relevée sauf si vous poussez sur votre scooter pour le déplacer manuellement.
- Le guidon est-il déverrouillé? Voir la section VIII. “Montage et assemblage.”

S’installer sur son scooter



MISE EN GARDE! Ne jamais monter ou descendre de votre scooter sans d’abord retirer la clé du contact. Ceci évitera les mouvements non-intentionnels en cas de contact accidentel avec l’accélérateur.

1. Assurez-vous que la clé n’est pas sur le contact.
2. Tenez-vous debout à côté de votre scooter.
3. Tirez sur la manette de commande du siège et faites-le pivoter jusqu’à ce qu’il soit face à vous.
4. Assurez-vous que le siège est bloqué en position.
5. Asseyez-vous confortablement sur le siège.
6. Tirez la manette de commande du siège et faites-le pivoter jusqu’à ce que vous soyez face au guidon.
7. Assurez-vous que le siège est bloqué en position.
8. Vérifiez que vos pieds soient bien posés sur le plancher du scooter.

Verifications avant depart

- Etes-vous assis confortablement dans le siège? Voir les consignes ci-haut.
- Le siège est-il à la bonne hauteur? Voir la section VII. “Réglages confort.”
- Le siège est-il bloqué en position? Voir la section VII. “Réglages confort.”
- Avez-vous réglé et verrouillé l’angle du mât du guidon pour être confortable? Voir la section VII. “Réglages confort.”
- La clé est-elle dans le contact et le scooter est-il allumé? Voir la section IV. “Votre Sonic.”
- Le klaxon fonctionne-t-il?
- Avant de partir, assurez-vous qu’il n’y a personne ni aucun obstacle devant vous.
- Avez-vous choisi votre parcours afin d’éviter les pentes et les surfaces difficiles?

Fonctionnement de votre scooter

Lorsque votre route est planifiée:

- Réglez le bouton de vitesse au niveau désiré.
- Pesez doucement sur l’accélérateur droit pour avancer ou sur le gauche pour reculer.
- Les freins électromagnétiques se relâcheront automatiquement et votre scooter avancera à la vitesse sélectionnée.
- Tirez le guidon vers la gauche pour avancer vers la gauche et vers la droite pour aller vers la droite.
- Placez le guidon au centre pour avancer en ligne droite.
- Relâchez l’accélérateur pour ralentir et vous arrêter complètement.
- Les freins électromagnétiques de stationnement s’engageront automatiquement dès que le scooter sera stoppé.

V I . F O N C T I O N N E M E N T

Pour descendre de votre scooter

1. Stoppez votre scooter complètement.
2. Retirez la clé du contact.
3. Tirez sur la manette de commande du siège et faites-le pivoter vers le côté.
4. Assurez-vous que le siège est verrouillé après avoir relâché la manette.
5. Descendez prudemment et tenez-vous debout près de votre scooter.
6. Vous pouvez laisser le siège face à vous, prêt pour votre prochaine sortie.

VII. REGLAGES CONFORT

Reglage de l'inclinaison du guidon



MISE EN GARDE! Retirez la clé de contact avant de régler le guidon. Ne jamais tenter de régler le guidon alors que le scooter est en marche.

Le guidon de votre scooter est inclinable et réglable.

1. Desserrez le bouton de verrouillage dans le sens opposé à l'horaire. Voir la figure 12.
2. Placez le guidon dans l'inclinaison désirée.
3. Resserrez le bouton pour le bloquer en position.

NOTE: Le siège doit avoir été retiré afin de pouvoir abaisser le guidon jusqu'au niveau du plancher du scooter.

Pivotement du siège

Le siège possède quatre positions de blocage.

1. Tirez sur le levier pour débloquer le siège.
Voir la figure 13.
2. Faites pivoter le siège vers la position désirée.
3. Relâchez le levier pour verrouiller le siège en place.

Reglage en largeur des accoudoirs

Votre scooter est équipé d'accoudoirs réglables en largeur.
Voir la figure 13.

1. Desserrez les boutons de réglage sur la structure arrière du siège.
2. Faites glisser les accoudoirs vers la position désirée.
3. Resserrez les boutons pour les bloquer en place.

Vous pouvez relever les accoudoirs à la verticale pour faciliter les transferts.

BOUTON DE
VERROUILLAGE DU GUIDON



Figure 12. Réglage du guidon

BOUTON DE REGLAGE DES ACCOUDOIRS

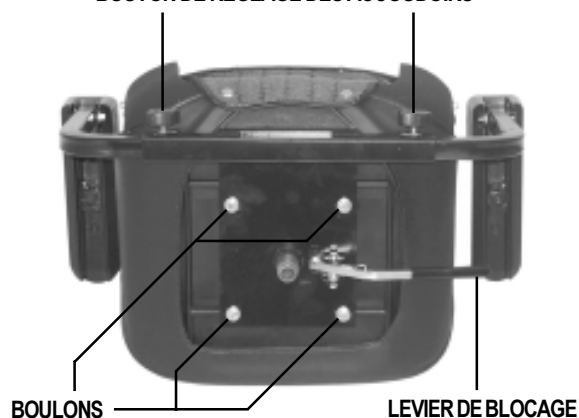


Figure 13. Réglage du siège

VII. REGLAGES CONFORT

Reglage avant/arriere du siege

Vous pouvez repositionner le siège du scooter vers l'avant ou vers l'arrière dans l'un des trois réglages de façon à vous rapprocher ou vous éloigner du guidon. Voir la figure 13.

1. Retirez le siège du scooter. Référez-vous à la section VIII. "Démontage et assemblage."
2. Retirez les quatre boulons qui retiennent le siège à sa plateforme.
3. Alignez le siège avec les trous désirés dans la plateforme.
4. Remplacez et resserrez les quatre boulons.

Reglage de la hauteur du siege

Vous pouvez régler la hauteur du siège du scooter vers l'un des deux niveaux de réglage. Voir la figure 14.

1. Retirez le siège du scooter. Voir la VIII. "Démontage et assemblage."
2. Tirez sur l'anneau de la goupille dans la base du mât du siège.
3. Faites glisser le mât vers le niveau désiré.
4. Tenez le mât en alignant les trous du mât avec ceux de la base et insérez la goupille de blocage.
5. Poussez la goupille à fond.
6. Remplacez le siège.

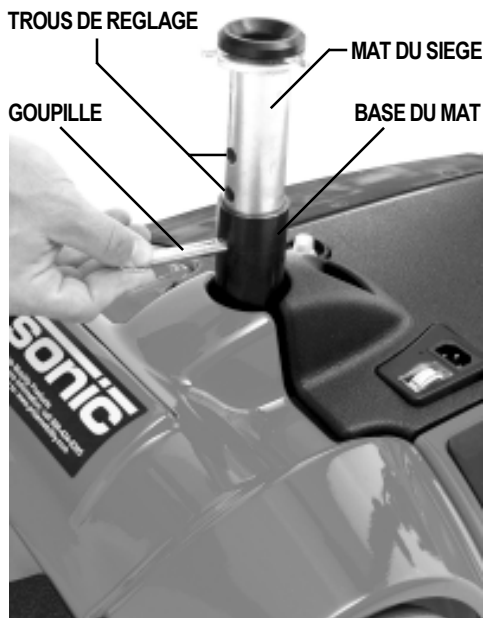


Figure 14. Réglage de la hauteur du siège

VIII. MONTAGE ET DEMONTAGE

Demontage

Aucun outil n'est requis pour démonter ou monter votre scooter. Toujours procéder au démontage ou au montage du scooter sur une surface propre, sèche et à niveau. Gardez à l'esprit le fait que le scooter démonté occupera plus d'espace que lorsqu'il est assemblé.

Vous pouvez démonter votre Sonic en quatre pièces: le siège (9.5 kg /21 lbs), la section avant (16 kg /35 lbs), la section arrière (16 kg /35 lbs), et le module de batteries (8 kg/18 lb). Voir la figure 15.

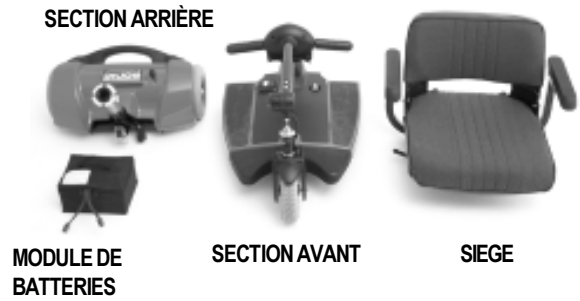


Figure 15. Sonic démonté



MISE EN GARDE! Ne soulevez pas de poids dépassant vos capacités sous peine de vous blesser. Au besoin demandez de l'aide pour démonter votre scooter.

NOTE: Avant de démonter votre scooter, retirez la clé du contact et embrayer le en poussant le levier vers l'avant.

1. Verrouillez la roue avant en poussant sur le bouton de réglage du guidon et en le tournant 90 degrés. Voir la figure 16.
2. Retirez le siège en le soulevant à la verticale.
3. Retirez le couvercle à batteries et rangez-le.
4. Débranchez le moteur et les deux batteries. Voir la figure 17.



MISE EN GARDE! Toujours vous assurer que le guidon est déverrouillé avant de monter sur votre scooter sous peine de provoquer un accident avec blessures et/ou dommages.




POSITION
VERROUILLEE

Figure 16. Guidon (verrouillé)



POSITION
DEVERROUILLEE

Figure 16A. Guidon (déverrouillé)

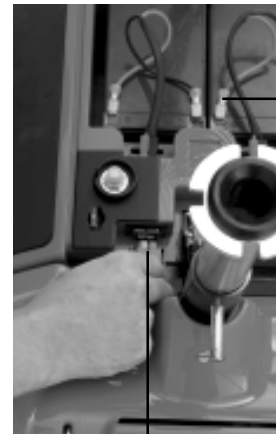

CABLE
BATTERIE

CABLE MOTEUR


Figure 17. Câbles branchements

VIII. MONTAGE ET DEMONTAGE

Détente du fermoir à bascule

1. Pesez sur le bouton de détente tout en tirant sur le fermoir. Voir la figure 18.
2. Basculez la boucle du fermoir par dessus le fermoir. Voir la figure 19.
3. Abaissez le guidon jusqu'au niveau du plancher du scooter puis resserrez le bouton de réglage du guidon.

FERMOIR A BASCULE

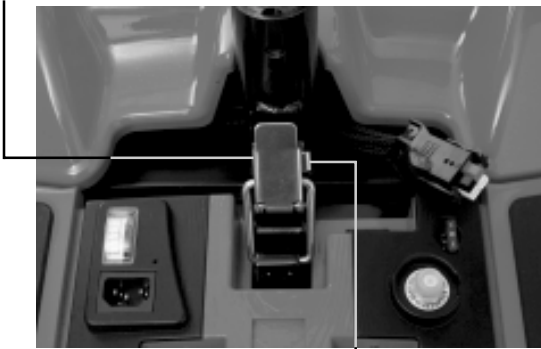

BOUTON DU FERMOIR A BASCULE

Figure 18. Fermoir à bascule

BOUCLE DU FERMOIR A BASCULE



Figure 19. Fermoir à bascule

Séparation du cadre

1. Poussez le mât du siège vers l'arrière pour pivoter la section arrière vers l'arrière jusqu'à ce que la section soit à la verticale sur son pare-choc. Voir la figure 20.
2. Soulevez la section avant pour dégager les ergots des fentes. Voir la figure 21.
3. Éloignez la section avant de la section arrière.



Figure 20. Positionnement du cadre

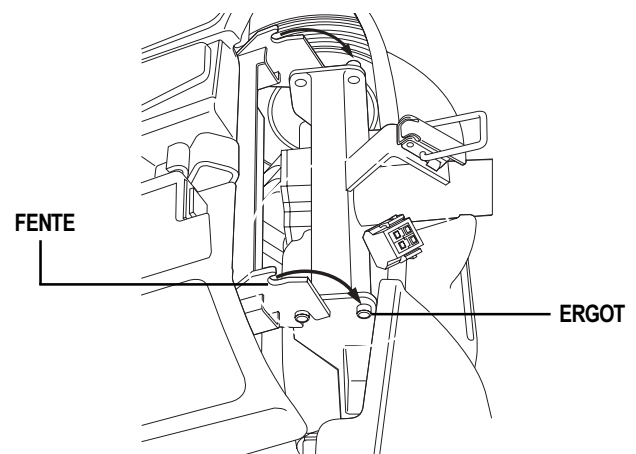


Figure 21. Verrouillage du cadre

VIII. MONTAGE ET DEMONTAGE

Montage

1. Positionnez les sections avant et arrière tel que montré dans la figure 22.
2. Alignez les fentes inférieures dans la section avant avec les ergots correspondants dans la section arrière. Voir la figure 21.
3. Tenez le mât du siège pour faire pivoter la section arrière vers l'avant jusqu'à ce que les ergots soient complètement insérés dans les fentes d'assemblage. Voir la figure 20.
4. Remontez le guidon et serrez bien le bouton de verrouillage.
5. Enclenchez le ferموir à bascule. Voir la figure 18.
 - Abaissez la boucle du ferموir à bascule.
 - Pesez sur le ferموir pour le verrouiller en place.
6. Connectez le câble avant/arrière et les câbles des batteries.
7. Remplacez le couvercle à batteries.
8. Remplacez le siège et bloquez-le en place.
9. Débloquez le guidon en tournant le bouton à 90 degrés dans le sens opposé à l'horaire. Voir la figure 16A.



MISE EN GARDE! Toujours vous assurer que le guidon est déverrouillé avant de monter sur votre scooter sous peine de provoquer un accident avec blessures et/ou dommages.


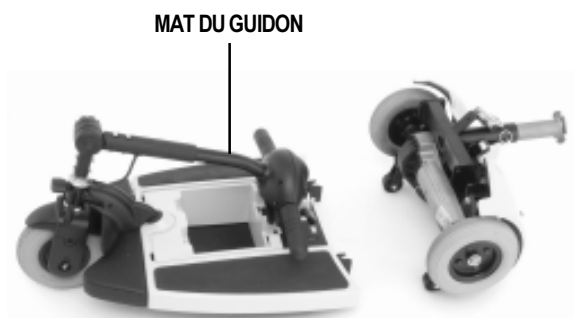


Figure 22. Sections du cadre


IX. ACCESSOIRES FACULTATIFS

Accessoires facultatifs

Contactez votre détaillant Pride autorisé pour plus d'informations au sujet des accessoires facultatifs.

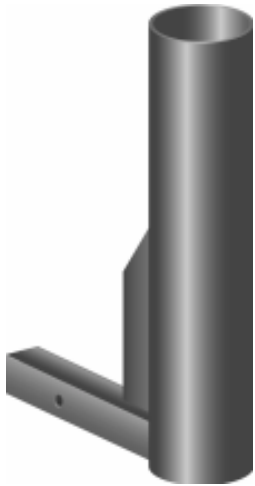

SUPPORT POUR CANES/BEQUILLES

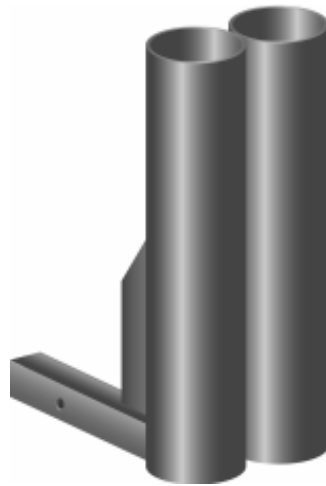


SUPPORT DOUBLE POUR CANES/
BEQUILLES



SUPPORT A MARCHETTE



SUPPORT A BEQUILLES
CANADIENNE

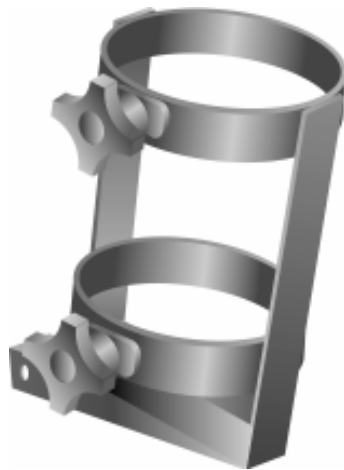

SUPPORT A BONBONNE D' OXYGENE



PANIER ARRIERE



PANIER AVANT



FANION DE SECURITE



SUPPORT À Gobelet

X. PROBLEMES ET SOLUTIONS

Tout appareil électronique nécessite un entretien régulier. Souvent, lorsque des problèmes surviennent, le gros bon sens règle la plupart d'entre eux. De plus, plusieurs problèmes sont causés par des batteries défectueuses ou insuffisamment chargées.

Code des problèmes

Les clignotements codés de votre Sonic ont été conçus pour vous aider à identifier les problèmes élémentaires facilement et rapidement. Les voyants clignoteront en séquence codée si un des problèmes suivants survient.

NOTE: Votre scooter ne pourra fonctionner à nouveau que lorsque le problème sera résolu et que le contact sera coupé puis rétabli.

Clignotements	Problèmes	Solutions
■ ■ ■ ■ ■	Les batteries sont trop faibles ou le chargeur à batteries est en fonction.	Rechargez les batteries ou débranchez le cordon d'alimentation du chargeur.
■ ■	Le contrôleur est bouillant et le scooter semble faiblir.	Coupez le contact et laissez le scooter refroidir pendant quelques minutes.
■ ■ ■ ■	Erreur "Wigwag": les accélérateurs ne répondent pas aux commandes.	Contactez votre détaillant Pride pour obtenir de l'aide.
■ ■ ■ ■ ■ ■	Le levier d'embrayage est en position arrière (neutre)	Coupez le contact. Poussez le levier vers l'avant pour embrayer et remettez le contact.
■ ■ ■ ■ ■ ■	Le cordon du chargeur est demeuré branché	Retirez le cordon du réceptacle du chargeur.

Que faire si le scooter semble complètement "mort?"

- Assurez-vous que la clé de contact est bien insérée à fond.
- Vérifiez que les batteries soient pleinement chargées. Voir la section V. "Batteries et recharge."
- Pesez sur le bouton du disjoncteur principal. Voir la section IV. "Votre Sonic."
- Vérifiez les connexions des batteries et celles du module électronique.
- Assurez-vous que le coupe-circuit automatique n'est pas activé. Voir la section "Coupe-circuit automatique."

Coupe-circuit automatique

Le scooter est équipé d'un coupe-circuit automatique afin de conserver l'énergie.

- Si le scooter est allumé depuis environ 20 minutes sans qu'il n'ait bougé, le contact sera coupé automatiquement afin de préserver les batteries.

Pour rétablir le fonctionnement normal du scooter:

- Retirez la clé du contact.
- Insérez la clé dans le contact à nouveau.

Le fonctionnement normal sera rétabli.

X. PROBLEMES ET SOLUTIONS

Que faire si le scooter refuse de bouger lorsque j'appuis sur les accélérateurs?

- Votre scooter est probablement débrayé.
- Lorsque le levier d'embrayage est en position poussée vers l'arrière, les freins sont relâchés et le courant est complètement coupé.
- Poussez le levier vers l'avant pour embrayer le scooter et rétablir le fonctionnement normal.

Que faire si le disjoncteur saute à répétition? Voir la section IV. "Votre Sonic."

- Rechargez vos batteries plus souvent. Voir la section V. "Batteries et recharge."
- Si le problème persiste, faites vérifier vos batteries par votre détaillant Pride.
- Voyez la section V. "Batteries et recharge" ou la section III. "Specifications" pour les informations concernant les batteries de votre scooter.

Que faire si l'aiguille de la jauge à batteries plonge et que le moteur hésite lorsque j'appuis sur l'accélérateur de mon scooter? Voir la section IV. "Votre Sonic."

- Rechargez complètement vos batteries. Voir la section V. "Batteries et recharge."
- Faites tester vos batteries par votre détaillant Pride.

Si vous rencontrez des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre vous-même, contactez votre détaillant Pride pour obtenir des informations ou du service.

XI. SOINS ET ENTRETIEN

Votre scooter demande un minimum de soins. Si vous croyez ne pas posséder les connaissances et habiletés pour exécuter les consignes suivantes, vous pouvez les faire exécuter par votre détaillant Pride. Les points suivants demandent un entretien périodique.

Etat des pneus et usure

- Inspectez l'usure des pneus régulièrement.
- Protéger les flancs des pneus avec un protecteur à caoutchouc.



MISE EN GARDE! Ne jamais appliquer de protecteur à caoutchouc sur la bande de roulement des pneus au risque de les rendre très glissants.

Surfaces externes

- Les pare-chocs et garnitures peuvent bénéficier d'une couche occasionnelle de protecteur à caoutchouc.



MISE EN GARDE! Ne jamais appliquer de protecteur à caoutchouc sur le siège de vinyle ou sur les tapis du plancher au risque de les rendre très glissants.

- Le capot en ABS du Sonic est protégé par une peinture à base d'uréthane.
- Une couche occasionnelle de cire automobile peut le protéger et en prolonger l'éclat.

Cablages électriques

- Vérifiez et inspectez les connections et le câblage régulièrement.
- Inspectez régulièrement les gaines protectrices de tous les câbles et fils incluant le cordon du chargeur.
- Faites réparer tous les câbles ou les fils endommagés par votre détaillant Pride avant d'utiliser votre scooter.

Roulements à bille et module moteur/transmission

- Ces pièces sont scellées à l'usine et ne requièrent aucune lubrification.

Console, chargeur et module de commandes électroniques

- Protégez-les de l'humidité.
- Si une de ces composantes venaient à être exposées à de l'humidité, laissez sécher votre scooter complètement avant de l'utiliser à nouveau.

Entreposage

Si vous prévoyez ne pas utiliser votre scooter pour une période prolongée:

- Rechargez les batteries complètement avant d'entreposer votre scooter.
- Débranchez les câbles des deux batteries.
- Entreposez votre scooter dans un endroit sec à l'abri du gel.
- Évitez d'entreposer votre scooter dans un endroit exposé à des températures extrêmes.

Pour un entreposage prolongé, il est recommandé de placer plusieurs planches de bois sous votre scooter de façon à ce que les pneus ne soient pas en contact avec le sol. Cela empêchera les pneus de se déformer.

XII. GARANTIE

LA GARANTIE LIMITÉ DE DEUX ANS

Les constituants structural des cadre, prep y compris: la plate-forme, le fourchette, le poteau du siège, et les cadres soudures.

Le train conduire, prep y compris: le differentiale, le moteur, et le frein.

LA GARANTIE LIMITÉ D'UNE ANÉE

Votre Sonic est complètement garantie pour douze (12) mois a la date vous l'achetez contre les défauts qui resultent venir a des défauts du manufacture ou des matériaux.

Toutes les pièces électronique, pret y compris des controleurs, ont la warantie d'un (1) an. Il fautque la service du controleur est par votre fournisseur autorisé de Pride. Si vous essayez de faire les réparations, ce peut vide la warantie sur l'article.

N'EST PAS SOUS LA GARANTIE

La warantie ne compris pas des articles qui peuvent besoin le remplacement pour la raison de la détérioration normale (les pneus, les ceintures, les bulbes, la garniture, les linceuls plastics, les brosses moteur, les plombs, et les batteries), ou les dégats de la produits qui resultent a la raison d'utilisation incorrect ou accidentel. Cette warantie n'inclus pas le travail ou les coups de service.

LES BATTERIES

Les batteries sont dessous une garantie pour douze (12) mois du manufacture originale.

La détérioration graduelle dans la performance a raison d'etre dans un état sans le charge, l'exposition des coditions très froides pour un long temp, ou beaucoupes d'utilisation ne sont pas inclus.

SERVICE DES EXAMINATIONS ET LA GARANTIE

La service de garantie peut faire par votre fournisseur autorisé de Pride. S'il vous plait contactez votre fournisseur autorisé de Pride pour l'information sur la prix de la visite pour la service.

NOTES