

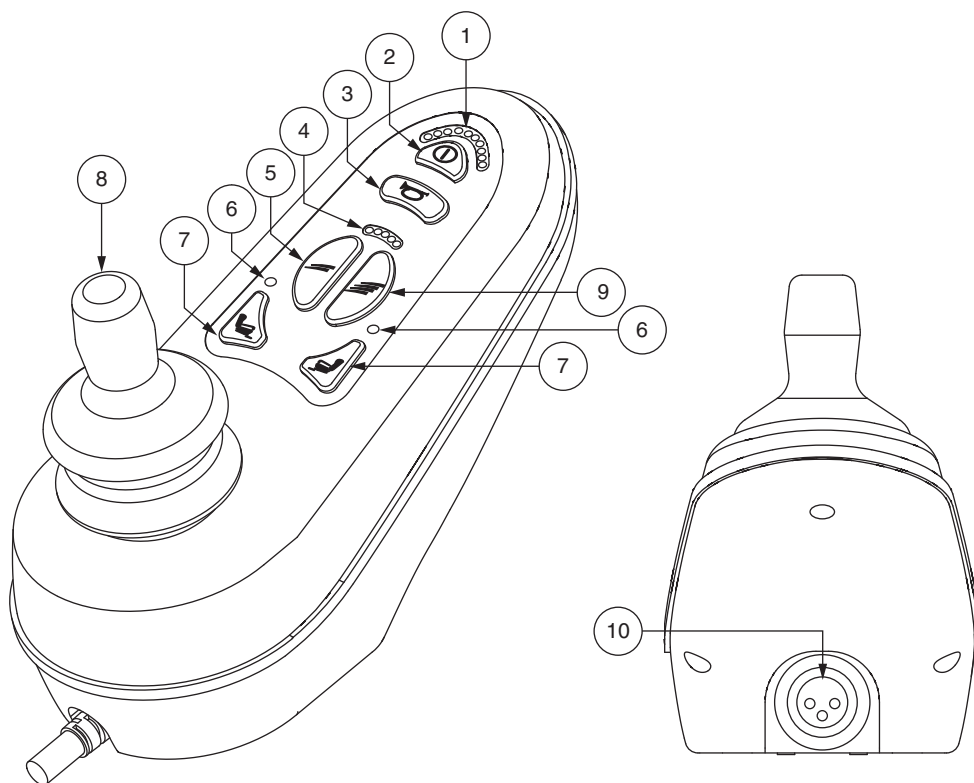
# Productbijsluiter

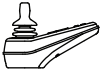
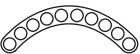









## VR2



**air**<sup>®</sup>

# Overzicht van de onderdelen



 <b>Controller</b>	 <b>Accu-indicator</b>	 <b>Aan-/Uitknop</b>	 <b>Claxonknop</b>
 <b>Maximumsnelheid-/ profielindicator</b>	 <b>Snelheid-/ profielverminderingknop</b>	 <b>Modus-LED</b>	 <b>Schakelaarknoppen</b>
 <b>Joystick</b>	 <b>Snelheid-/ profieltoenameknop</b>	 <b>Oplaadpoort</b>	



## Productbijsluiter

**NB: Onderstaande informatie is een aanvulling op de informatie in de basishandleiding die met uw VR2-controller werd meegeleverd. Deze informatie beschrijft de bediening van de Jazzy Air elektrisch in hoogte verstelbare stoel. Bewaar deze informatie voor uw administratie en neem in geval van vragen contact op met uw bevoegde Pride-leverancier.**

### Jazzy Air

Uw elektrische rolstoel is voorzien van de functie die in combinatie met uw Jazzy Air wordt gebruikt. De Jazzy Air-functie is gemonteerd op een elektrisch onderstel van Pride voor betere stabiliteit als het zittingsysteem wordt verhoogd.

In bepaalde situaties, zoals in het geval van sommige medische aandoeningen, zal de gebruiker van de elektrische rolstoel in het bijzijn van een geoefende begeleider moeten oefenen in het gebruik van de elektrische rolstoel met Jazzy Air. Een bevoegde begeleider is bijvoorbeeld een gezinslid of een zorgverlener die speciale training heeft gevolgd voor het assisteren van een gebruiker van een elektrische rolstoel bij het uitvoeren van verschillende dagelijkse handelingen.

Zodra u uw Jazzy Air gaat gebruiken bij dagelijkse activiteiten zult u waarschijnlijk situaties tegenkomen die enige oefening vereisen. Neem rustig de tijd en dan zult u al snel genoeg zelfvertrouwen hebben en alles onder controle hebben.

### Tilfunctie

De Jazzy Air-functie kan worden ingeschakeld door selectie van de schakelaar voor stoelverhoging.

### Voor selectie en aanpassing van de stoelverhoging met gebruik van de VR2-controller:

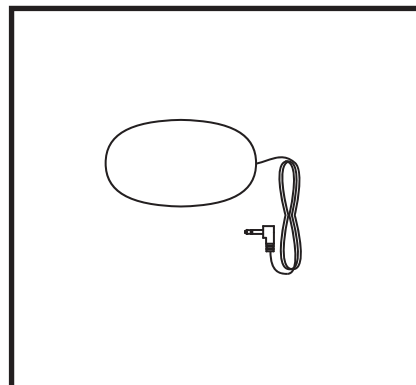
1. Druk de Aan/Uit één keer omhoog om de stoel en de controller.
2. Druk op de bedieningsknop tot de Mode -lampje branden .
3. Druk de joystick naar links of rechts om door de liftmodus van de stoel te bladeren, die wordt op de schakelaarindicator verlicht.
4. Als u wilt terugkeren naar een ander profiel, moet u op de schakelaarknop drukken en deze weer loslaten totdat u bent teruggekeerd bij het gewenste rijprofiel.

**NB: Neem contact op met uw Pride-leverancier als uw VR2-instellingen afwijken van de beschrijving. Uw bevoegde Pride-leverancier heeft mogelijk de programmering van uw VR2-controller gewijzigd.**

### Voor activering van de Jazzy Air met een enkele schakelaar:

1. Druk de enkele schakelaar eenmaal in om de zitting te verhogen en Jazzy Air te activeren.
2. Druk de enkele schakelaar eenmaal in om de zitting te verlagen.

**NB: De Jazzy Air-functie wordt automatisch ingeschakeld als de elektrisch in hoogte verstelbare zitting wordt geactiveerd en er gaat een LED-lampje op de indicator voor maximale snelheid/profiel op uw controller knipperen.**



Figuur 1. Enkele schakelaar

De elektrische rolstoel moet binnenshuis worden gebruikt op een egale ondergrond, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische instellingen om de Jazzy Air in te schakelen. Als de schakelaar van het zittingstelsel is gestart, beperkt de Jazzy Air beweging van de voorste zwenkwielen en wordt het klimvermogen van de elektrische rolstoel beperkt.

**WAARSCHUWING!** De Jazzy Air-functie dient alleen te worden gebruikt op een vlakke en egale ondergrond binnenshuis, zoals in winkelcentra, kantoren en/of medische instellingen. De zitting mag nooit vanuit de laagste positie worden verhoogd op een schuine ondergrond. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot het omkiepen van de elektrische rolstoel.

**WAARSCHUWING!** De Jazzy Air-functie is bedoeld voor beperkt gebruik buitenshuis en uitsluitend op een vlakke, egale en harde ondergrond. Als u twijfels hebt over uw omgeving, gebruik Jazzy Air dan niet buitenshuis.



**VERBODEN!** Gebruik de Jazzy Air nooit buitenshuis op oneffen terrein (grind, heuvels of ander ongelijke, niet-stevige ondergrond) of in weilanden.



**WAARSCHUWING!** Verhoog de stoel nooit in Jazzy Air als uw elektrische rolstoel wordt gebruikt op een hobbelige of ongelijke ondergrond. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot het omkiepen van de elektrische rolstoel.

**WAARSCHUWING!** De veiligheidsgordel moet altijd vastgemaakt zijn als de elektrische rolstoel functie.

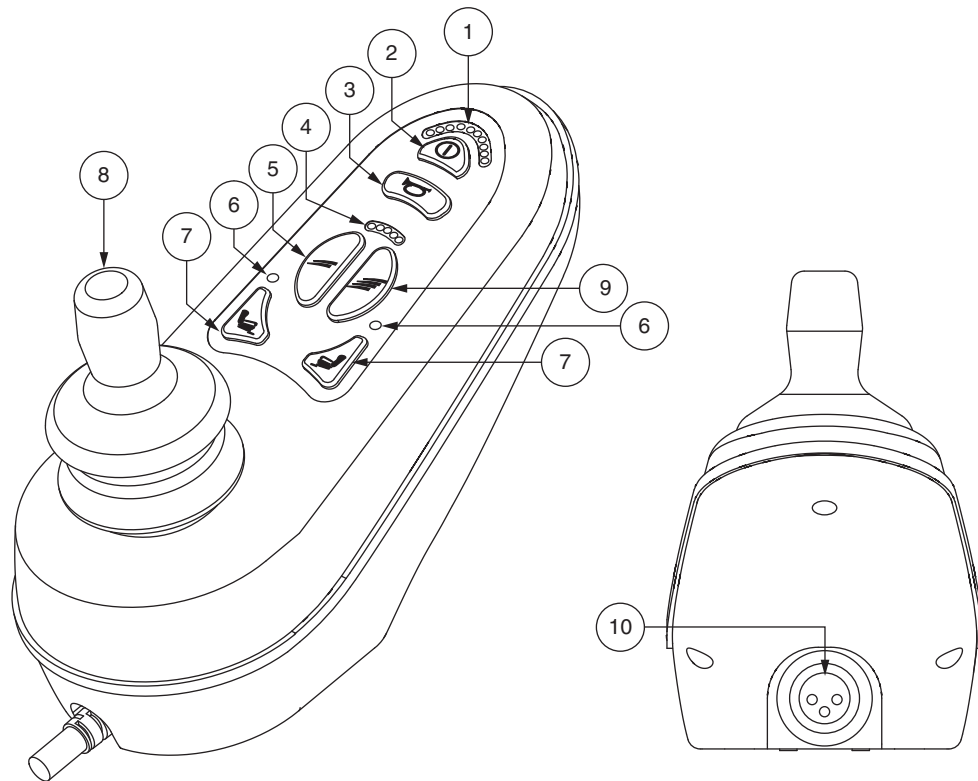
**WAARSCHUWING!** De Jazzy Air niet gebruiken en de zittinghoogte op geen enkele wijze veranderen als de elektrische rolstoel zich onder een vast object bevindt, zoals een tafel of een bureau. Houd de omgeving vrij, zowel voorafgaand aan als tijdens verplaatsing.


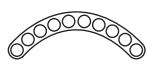









**WAARSCHUWING!** Als de Jazzy Air-vergrendeling niet is ingeschakeld, krijgt u een waarschuwing door een geluidsalarm en de conditiemeter van de accu toont 10 balkjes. Bij verhoging wordt de snelheid met 25% verminderd. Indien deze waarschuwing nog steeds verschijnt op een vlakke ondergrond, beëindig dan het gebruik van Jazzy Air en raadpleeg uw bevoegde Pride-leverancier.

***NB: De Jazzy Air-functie is voorzien van een systeem waarmee de elektrische rolstoel met een vooraf ingestelde, veilige snelheid kan rijden als de zitting is verhoogd. Controleer altijd of dit systeem correct functioneert voordat u de elektrische rolstoel in gebruik neemt.***







 <b>Controller</b>	 <b>Accu-indicator</b>	 <b>Aan-/Uitknop</b>	 <b>Claxonknop</b>
 <b>Maximumsnelheid/ profielindicator</b>	 <b>Snelheid/ profielverminderingknop</b>	 <b>Modus-LED</b>	 <b>Schakelaarknoppen</b>
 <b>Joystick</b>	 <b>Snelheid/ profieltoenameknop</b>	 <b>Oplaadpoort</b>	

**USA**

401 York Avenue  
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue  
Exeter, PA 18643-2694

**Canada**

5096 South Service Road  
Beamsville, Ontario L0R 1B3

**UK**

32 Wedgwood Road  
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL  
[www.pride-mobility.co.uk](http://www.pride-mobility.co.uk)

**Australia**

20-24 Apollo Drive  
Hallam, Victoria 3803  
[www.pridemobility.com.au](http://www.pridemobility.com.au)

**New Zealand**

38 Lansford Crescent  
Avondale  
Auckland, New Zealand 1007  
[www.pridemobility.co.nz](http://www.pridemobility.co.nz)

**Italy**

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro  
Loc. Prato della Corte  
00065 Fiano Romano (RM)  
[www.pride-italia.it](http://www.pride-italia.it)

**B.V.**

Castricummer Werf 26  
1901 RW Castricum  
The Netherlands  
[www.pride-mobility.nl](http://www.pride-mobility.nl)

[www.pridemobility.com](http://www.pridemobility.com)



I N F I N F B 3 5 0 6