



Nota informativa








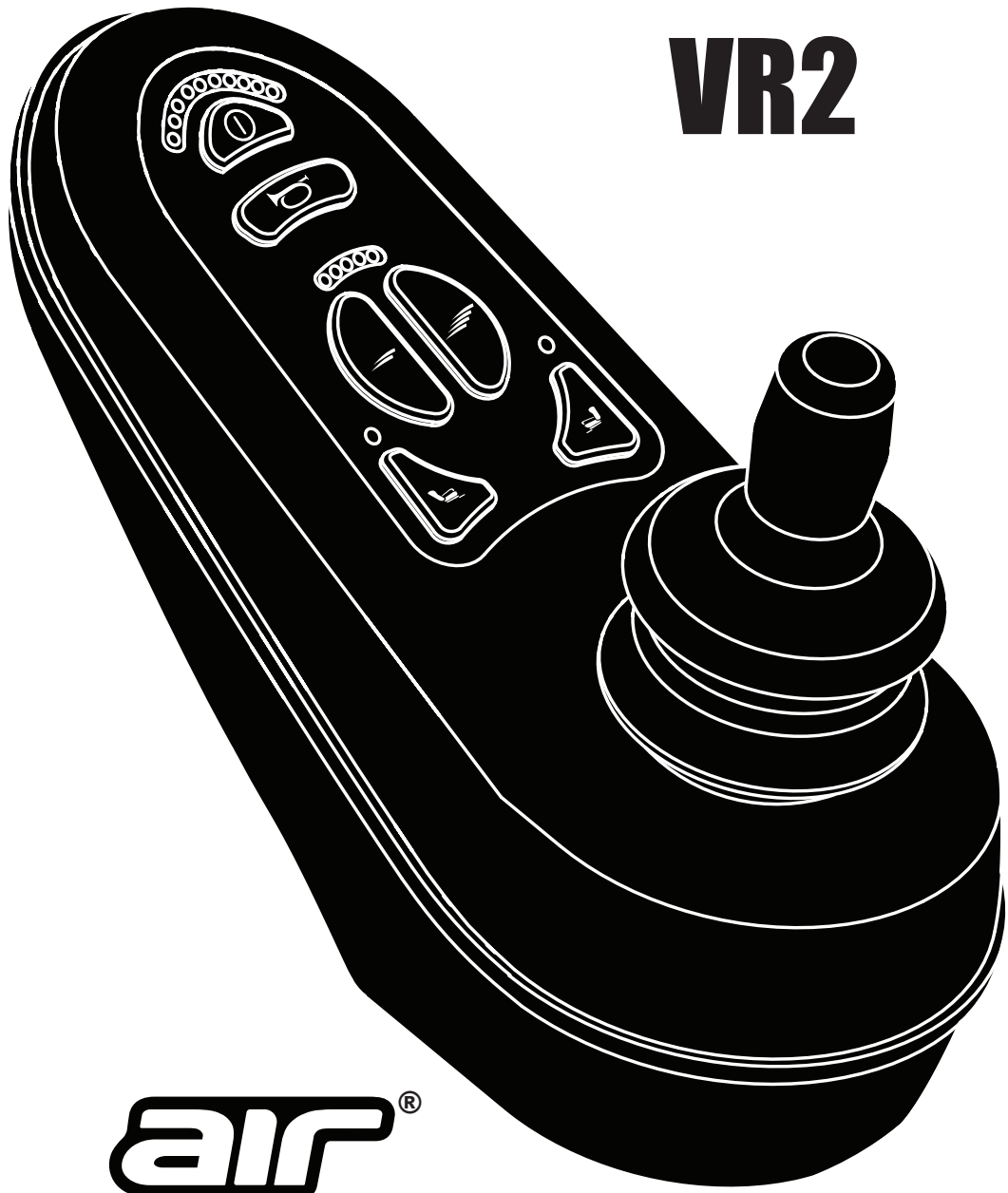

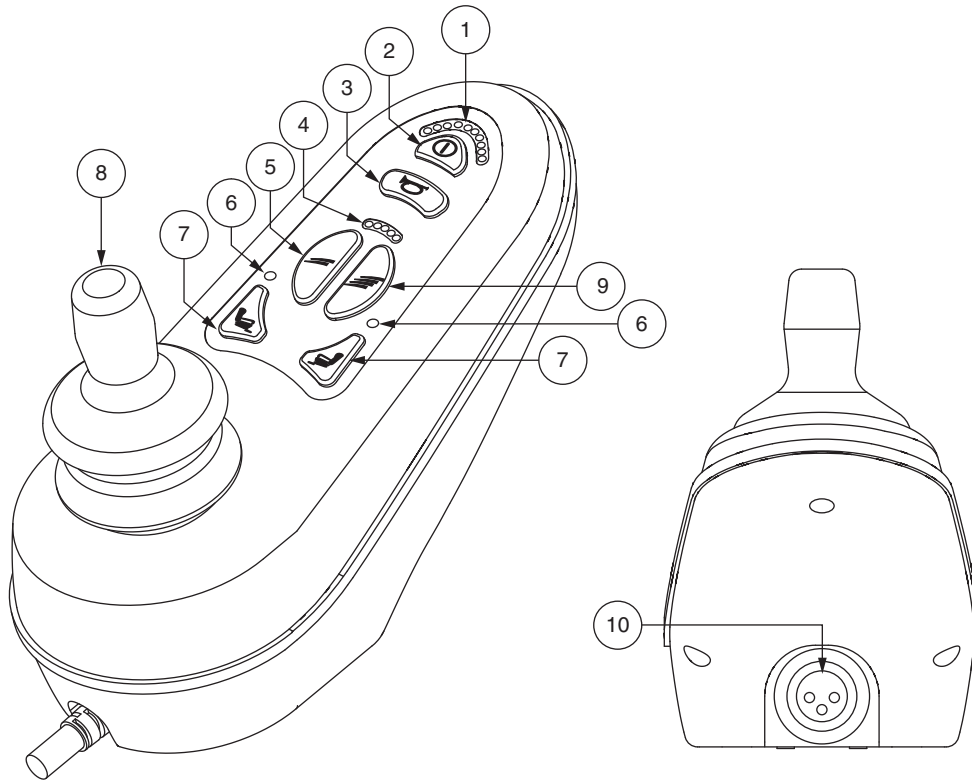

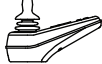VR2



air[®]

Clave de Identificación



 Regulador	 Indicador del nivel de batería	 Botón On/Off	 Claxson
 Indicador de perfil/ velocidad max	 Botón de disminución de velocidad/perfil	 Piloto de Mode	 Botones del actuador
 Palanca de mando	 Botón de aumento de velocidad/perfil	 Puerto del cargador	



Nota informativa

NOTA: La siguiente información se añade a la información contenida en la Instrucciones básicas de operación que se le suministró con su controlador VR2. Explica cómo operar su asiento de elevación eléctrica Jazzy Air. Por favor, conserve esta información para sus registros y contacte a su proveedor autorizado de Pride si tiene alguna pregunta.

Jazzy Air

Su silla de ruedas eléctrica está equipada con el dispositivo que se usará junto con su Jazzy Air. El dispositivo Jazzy Air se monta sobre una base donde está el motor de Pride para una mayor estabilidad cuando el sistema de asiento es elevado.

Hay ciertas situaciones, incluidas algunas condiciones médicas, en las que el usuario de la silla de ruedas eléctrica tendrá que practicar la operación de la silla de ruedas eléctrica equipada con Jazzy Air en presencia de un asistente capacitado. Puede definir como un miembro de la familia o un profesional de la salud capacitado especialmente para asistir a un usuario de silla mecánica en varias actividades de la vida diaria.

Cuando comience a usar Jazzy Air durante las actividades cotidianas, probablemente se encontrará con situaciones para las que precisará cierta práctica.

Elevation

El dispositivo Jazzy Air se puede activar seleccionando el actuador de elevación de asiento.

Para seleccionar y ajustar la elevación del asiento usando el controlador VR2:

1. Empuje la palanca de encendido/apagado hacia arriba una vez para encender la silla y el controlador.
2. Empujar el botón de accionamiento hasta que los LED se iluminan de modo.
3. Empuje la palanca de mando hacia la izquierda o derecha para ir hacia el modo de elevación del asiento, que se iluminará en el indicador del accionador.
4. Si desea regresar a otro perfil, presione y libere el botón del actuador hasta que regrese al perfil de conducción deseado.

NOTA: Si la configuración de su VR2 es diferente de la que se describe, contacte a su proveedor autorizado de Pride. Es posible que su proveedor autorizado de Pride haya cambiado la programación de su controlador VR2.

Para activar el Jazzy Air usando un interruptor único:

1. Presione una vez el interruptor único para elevar el asiento y activar Jazzy Air.
2. Presione una vez el interruptor único para bajar el asiento.

NOTA: El dispositivo Jazzy Air se conecta automáticamente cuando se activa el asiento de elevación, y una luz LED en el indicador de velocidad/perfil máximo parpadea en su regulador.

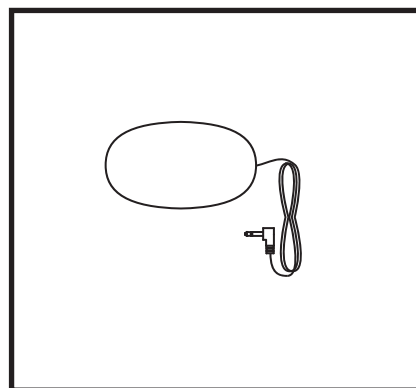


Figura 3. Interruptor unico

Para activar el Jazzy Air, la silla de ruedas eléctrica se debe usar en una superficie bajo techo y nivelada, por ejemplo en centros comerciales, oficinas y/o centros médicos. Una vez iniciado el actuador del sistema de asiento, el Jazzy Air limita el movimiento de las ruedas giratorias delanteras, y restringe la capacidad de ascender.

¡ADVERTENCIA! El dispositivo Jazzy Air sólo se debe usar en una superficie bajo techo plana y nivelada, por ejemplo en centros comerciales, oficinas y/o centros médicos. Nunca eleve el asiento desde su posición más baja en una superficie inclinada. Si no hace caso a esta advertencia, podrá provocar que la silla de ruedas eléctrica vuelque.

¡ADVERTENCIA! El dispositivo Jazzy Air está diseñado para un uso limitado al aire libre, y sólo en superficies planas, niveladas y duras. Si no está seguro del entorno, no utilice Jazzy Air al aire libre.



¡PROHIBIDO! Nunca use el Jazzy Air al aire libre en terrenos desnivelados (grava, colinas u otros terrenos desparejos y no compactos) o en los campos.




¡ADVERTENCIA! Nunca eleve el asiento con Jazzy Air cuando esté operando su silla de ruedas eléctrica en superficies desparejas o desniveladas. Si no hace caso a esta advertencia, podrá provocar que la silla de ruedas eléctrica vuelque.










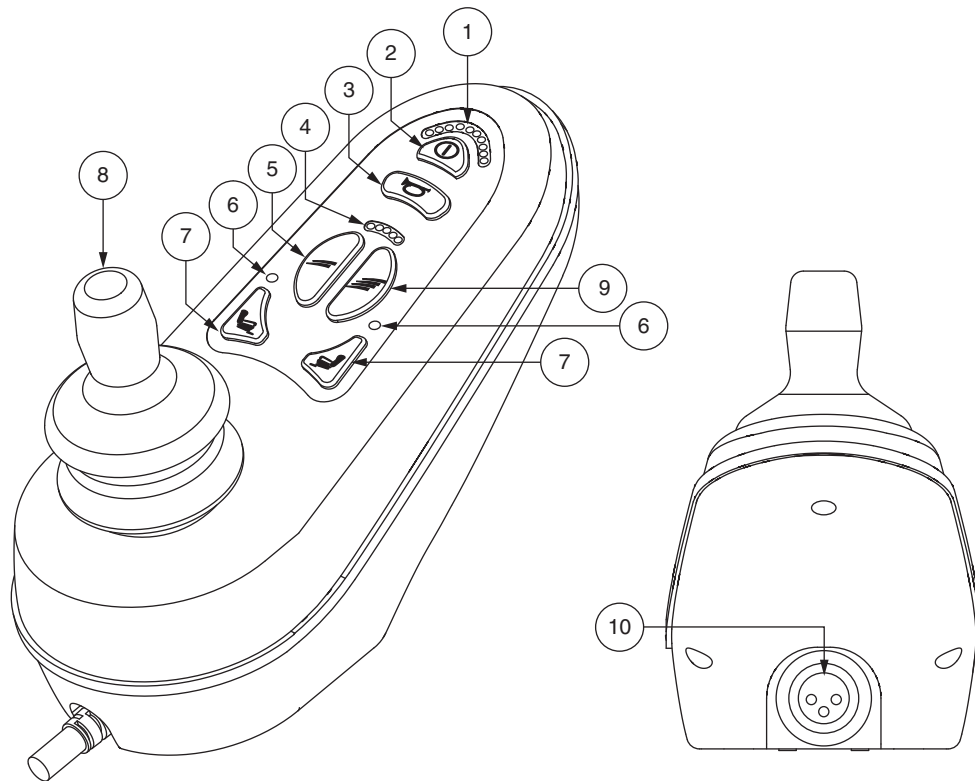

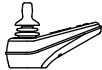¡ADVERTENCIA! Siempre ajústese el cinturón de posicionamiento cuando opere la silla mecánica.

¡ADVERTENCIA! No opere el Jazzy Air ni cambie la altura del asiento de ninguna manera cuando su silla de ruedas eléctrica esté posicionada debajo de un objeto fijo, como una mesa o un escritorio. Mantenga el área despejada antes y durante el movimiento.

¡ADVERTENCIA! Cuando los bloqueos del Jazzy Air no están activados, una alarma audible se lo notificará y el medidor de la condición de la batería se desplazará 10 barras. La velocidad se reducirá al 25% cuando esté elevado. Si esta advertencia continúa apareciendo al estar en el piso nivelado, por favor deje de usar el Jazzy Air y solicite asistencia a su proveedor autorizado de Pride.

NOTA: El dispositivo Jazzy Air está equipado con un sistema que permite que la silla de ruedas eléctrica se impulse a una velocidad predeterminada y segura cuando el asiento es elevado. Siempre verifique para asegurarse de que este sistema esté funcionando correctamente antes de usar su silla de ruedas eléctrica.



 Regulador	 Indicador del nivel de batería	 Botón On/Off	 Claxson
 Indicador de perfil/ velocidad max	 Botón de disminución de velocidad/perfil	 Piloto de Mode	 Botones del actuador
 Palanca de mando	 Botón de aumento de velocidad/perfil	 Puerto del cargador	

USA

401 York Avenue
Duryea, PA 18642

182 Susquehanna Avenue
Exeter, PA 18643-2694

Canada

5096 South Service Road
Beamsville, Ontario L0R 1B3

UK

32 Wedgwood Road
Bicester, Oxfordshire OX26 4UL
www.pride-mobility.co.uk

Australia

20-24 Apollo Drive
Hallam, Victoria 3803
www.pridemobility.com.au

New Zealand

38 Lansford Crescent
Avondale
Auckland, New Zealand 1007
www.pridemobility.co.nz

Italy

Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
www.pride-italia.it

B.V.

Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
The Netherlands
www.pride-mobility.nl

www.pridemobility.com



I N F I N F B 3 5 0 9