


Sitting Pretty

POWER RECLINERS

325 lbs.

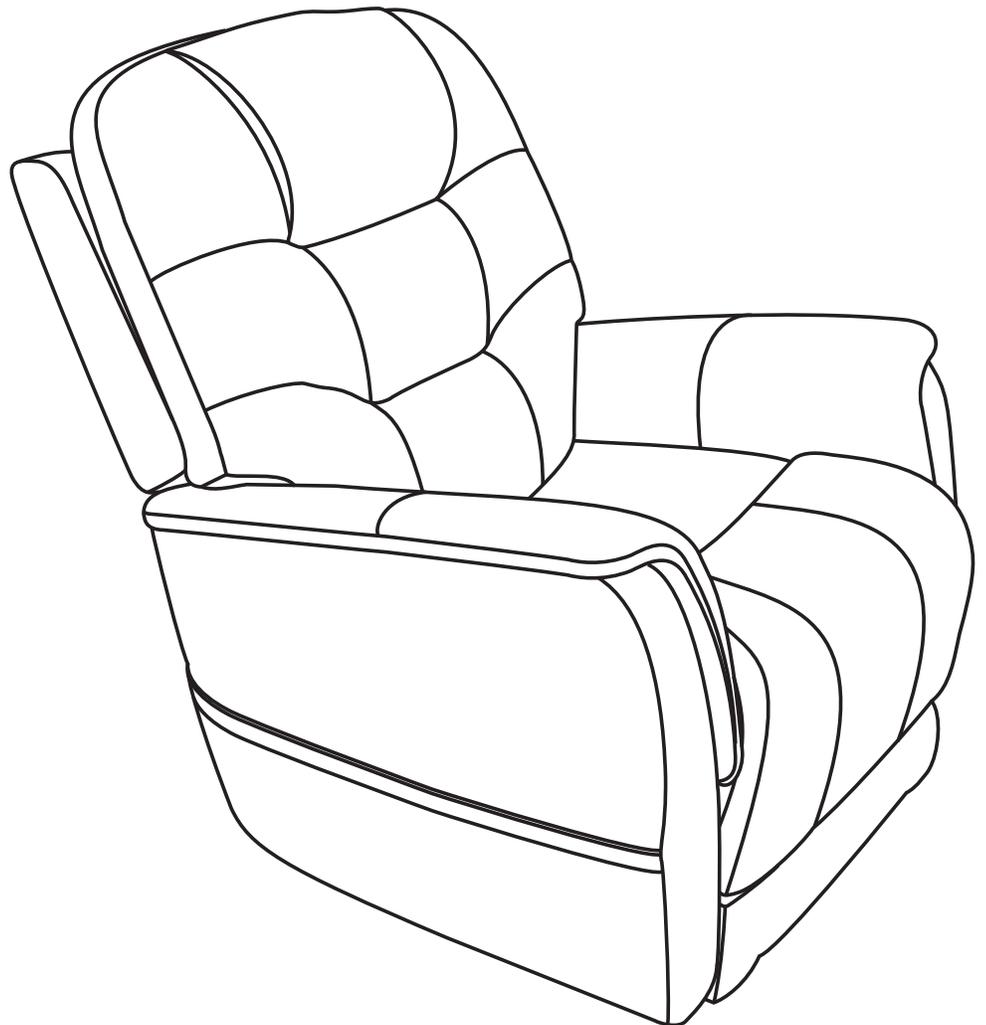

Included in this document: Hand Control Reference Guide, Fabric Care, Chair Assembly and Setup, Warranty, and Weight Capacity



ACN 088 609 661



CH REP

NOTE: This quick reference guide offers basic hand control functions, general care instructions, basic assembly information, warranty information, and weight capacity information for your chair. Before operating the chair, thoroughly read the owner's manual and all other supplemental documents for information on safety, basic operation, and care and maintenance.

The illustrations reflect those hand controls with the highest level of functionality.

The premier feature of the Sitting Pretty Power Recliner is that you have the ability to adjust your feet and back to achieve your perfect position. For example, the seatback can recline until it is horizontal to the floor.

HAND CONTROL IDENTIFICATION KEY

1. UP BUTTON

Press and hold to return all chair power options to the neutral position, while lifting you into an upright position.

2. DOWN BUTTON

Press and hold to lower chair to seated or reclined position.

Follow these steps to properly stand up from your chair:

1. Activate and hold the UP button (switch) to raise your chair.
2. Release the button (switch) when the chair reaches a height where you can stand up comfortably.

WARNING! Do not attempt to stand up until you can stand safely, are steady on your feet, and can bear weight. Pride recommends the use of assistance aids and/or an attendant for enhanced stability.



WARNING! Avoid putting all of your weight on the chair armrests when attempting to stand and do not use the armrests for weight bearing purposes.

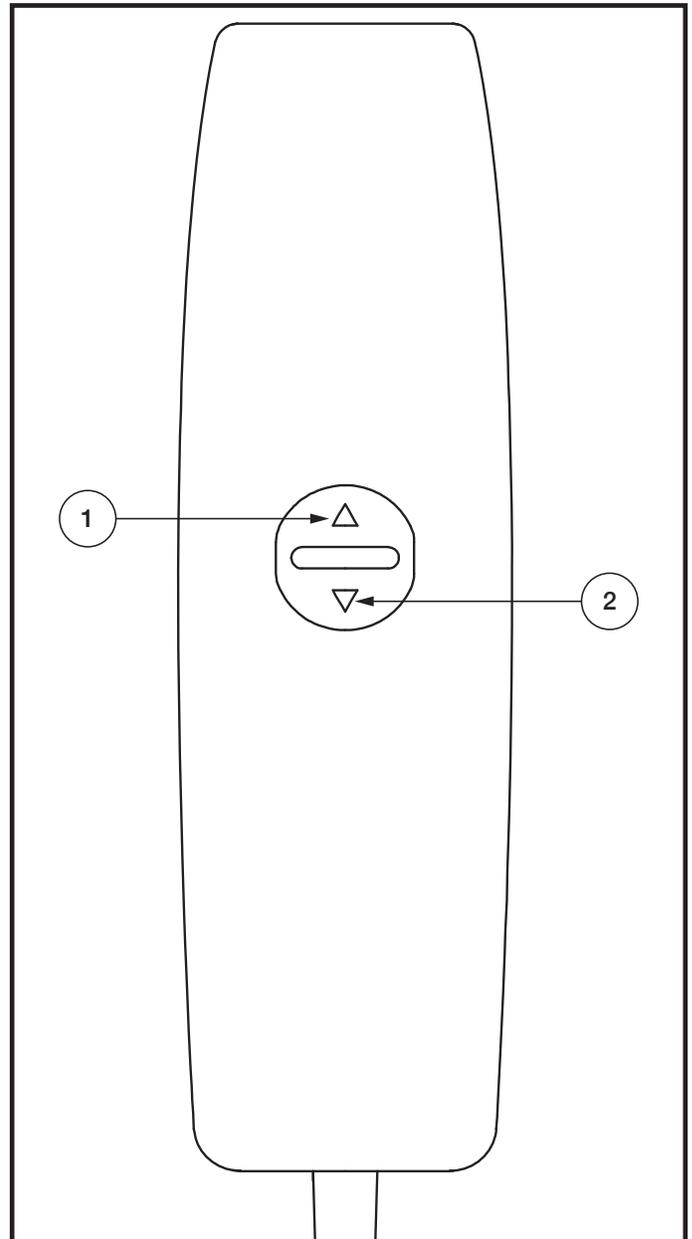


Figure 1. Hand Control

FABRIC CARE INSTRUCTIONS

NOTE: Refer to the Care and Maintenance section of the owner's manual supplied with your chair for complete fabric care, electronics care, and disposal and recycling information.

CHAIR ASSEMBLY AND SETUP

1

Unpack the chair, then lay the chair back, face down, on the chair base.

2

1. Check that the locking clip on the back of the chair is in the vertical position. Reposition if necessary.


NOTE: Depending on chair width, you may need to slide on one side of the back at a time. If this is the case, level the chair-back before pressing down to lock into position.

2. Push firmly on the top of the back to lock into position. You must hear a click from each side of the chair to ensure the back is locked in properly.

NOTE: Pull up on the chair-back to ensure that it is locked in place.

3. Plug in the lumbar and headrest connectors. If your model is Headrest Only, you only need to plug in the Headrest.

3

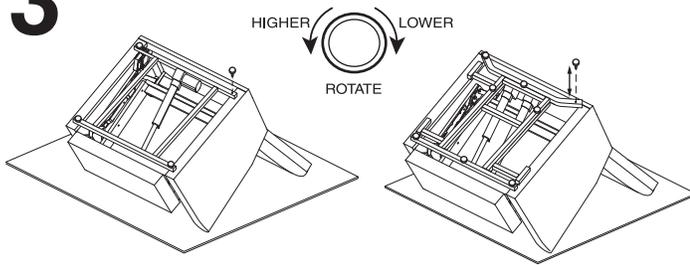

With the chair upside down, insert the leg levelers if not pre-installed, and tighten each leveler evenly. Return the chair to the upright position. If your chair is rocking, adjust the levelers as necessary (tighten to lower or loosen to raise) until the chair is stable.


NOTE: Depending on your kit and chair model, you may have four leg levelers or eight leg levelers.

4



TIP: To ensure quality delivery of your new chair, we have developed a customized packaging system to guard against possible damage that may occur during the transportation and handling of your product. As a result, the packaging components used to protect the product could cause the fibers in the cushioning to appear misshaped upon unpacking. In the event that you experience this, we recommend that you “fluff” the chair cushions to allow air into the cushion fibers. This process will return the cushions to their original shape.

5

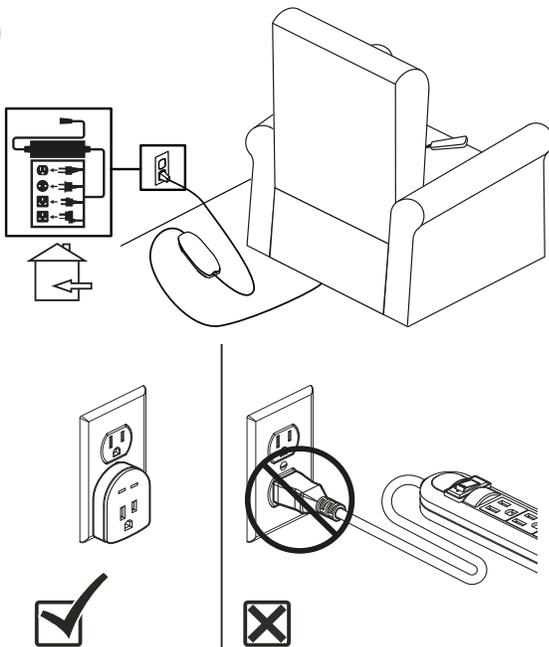

Plug the power cord leading from the external transformer directly into a standard electrical outlet. Route the power cord through the back of the chair. Do not use an extension cord.



WARNING! Do not connect an extension cord to the AC/DC converter or the battery charger. A UL Listed or UL Recognized single outlet plug-style surge protector with a minimum of 1000 joules of protection may be used. The surge protector **MUST** be plugged directly into an electrical outlet.

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For two (2) years from the date of purchase, Pride will repair or replace at our option to the original purchaser any of the following parts found upon examination by an authorized representative of Pride to be defective in material and/or workmanship. Any warranty claims for electronic assemblies may become void if damage results from the use of parts/accessories that are not Pride original parts and are not purchased through an authorized Pride provider:

- Motor
- Hand Control
- Transformer/Control Boxes
- Scissor Mechanisms
- Lift Frame

Your chair was developed for your convenience. Your chair has a weight capacity of 325 lbs. (147 kg). Refer to the owner's manual for any additional information concerning your chair.



MANDATORY! Stay within the specified weight capacity of your lift chair. Exceeding the weight capacity voids your lift chair warranty.

REMARQUE : Ce guide de référence rapide propose les fonctions de base de la commande manuelle, les instructions générales d'entretien, les informations de base sur l'assemblage, les renseignements sur la garantie et la capacité de poids de votre fauteuil. Avant d'utiliser le fauteuil, lisez attentivement le manuel du propriétaire et tous les autres documents supplémentaires pour obtenir des renseignements sur la sécurité, le fonctionnement de base, ainsi que l'entretien et la maintenance.

Les illustrations illustrent les commandes manuelles avec le plus haut niveau de fonctionnalité.

La principale caractéristique du fauteuil inclinable électrique Sitting Pretty est que vous avez la possibilité d'ajuster vos pieds et votre dos pour obtenir votre position parfaite. Par exemple, le dossier peut s'incliner jusqu'à ce qu'il soit horizontal par rapport au sol.

CLÉ D'IDENTIFICATION DE LA COMMANDE MANUELLE

1. BOUTON HAUT

Appuyez et maintenez enfoncé pour remettre toutes les options électriques du fauteuil en position neutre, tout en vous soulevant en position verticale.

2. BOUTON BAS

Appuyez et maintenez enfoncé pour abaisser le fauteuil en position assise ou inclinée.

Suivez ces étapes pour vous lever correctement de votre chaise :

1. Activez et maintenez enfoncé le bouton UP (interrupteur) pour surélever votre chaise.
2. Relâchez le bouton (interrupteur) lorsque le fauteuil atteint une hauteur à laquelle vous pouvez vous tenir debout confortablement.

AVERTISSEMENT! N'essayez pas de vous lever avant d'être capable de vous tenir debout en toute sécurité, d'être stable sur vos pieds et de pouvoir supporter votre poids. Pride recommande l'utilisation d'aides d'assistance et/ou d'un accompagnateur pour une meilleure stabilité.



AVERTISSEMENT! Évitez de mettre tout votre poids sur les accoudoirs du fauteuil lorsque vous essayez de vous tenir debout et n'utilisez pas les accoudoirs pour supporter votre poids.



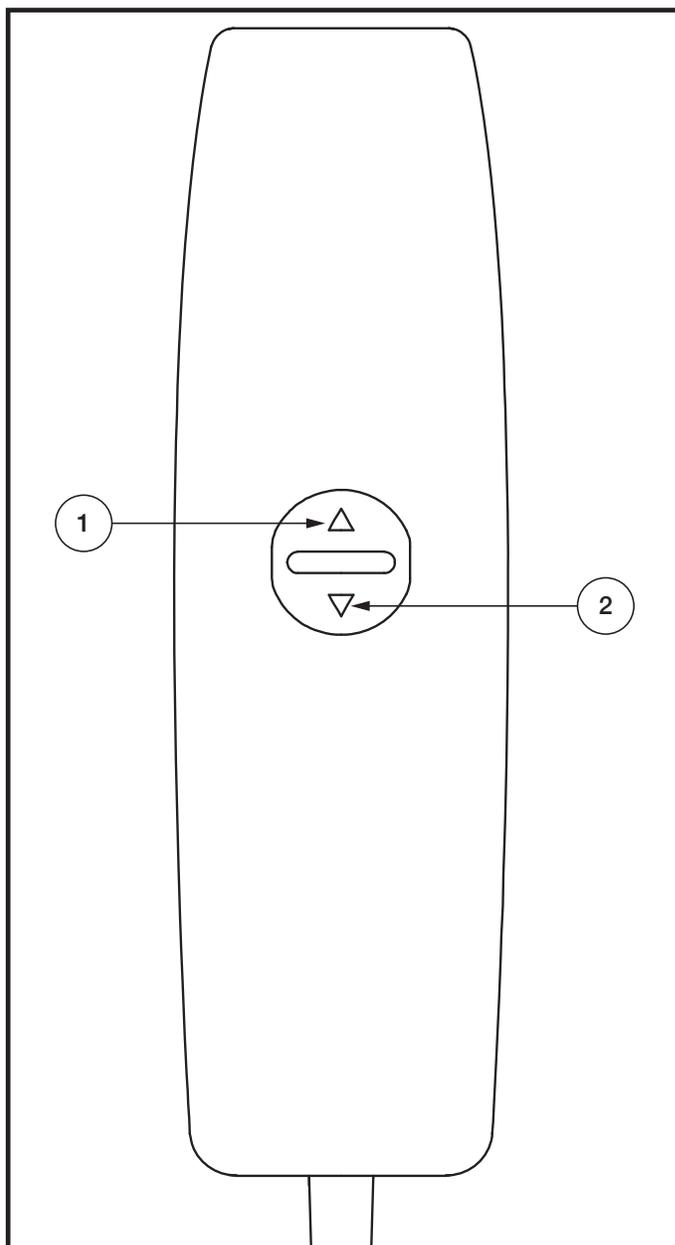


Figure 1. Commande manuelle


DIRECTIVES D'ENTRETIEN DES TISSUS

REMARQUE : Consultez la section *Entretien et entretien du manuel du propriétaire* fourni avec votre fauteuil pour obtenir des renseignements complets sur l'entretien des tissus, l'entretien des appareils électroniques, ainsi que sur l'élimination et le recyclage.

ASSEMBLAGE ET CONFIGURATION DE LA CHAISE

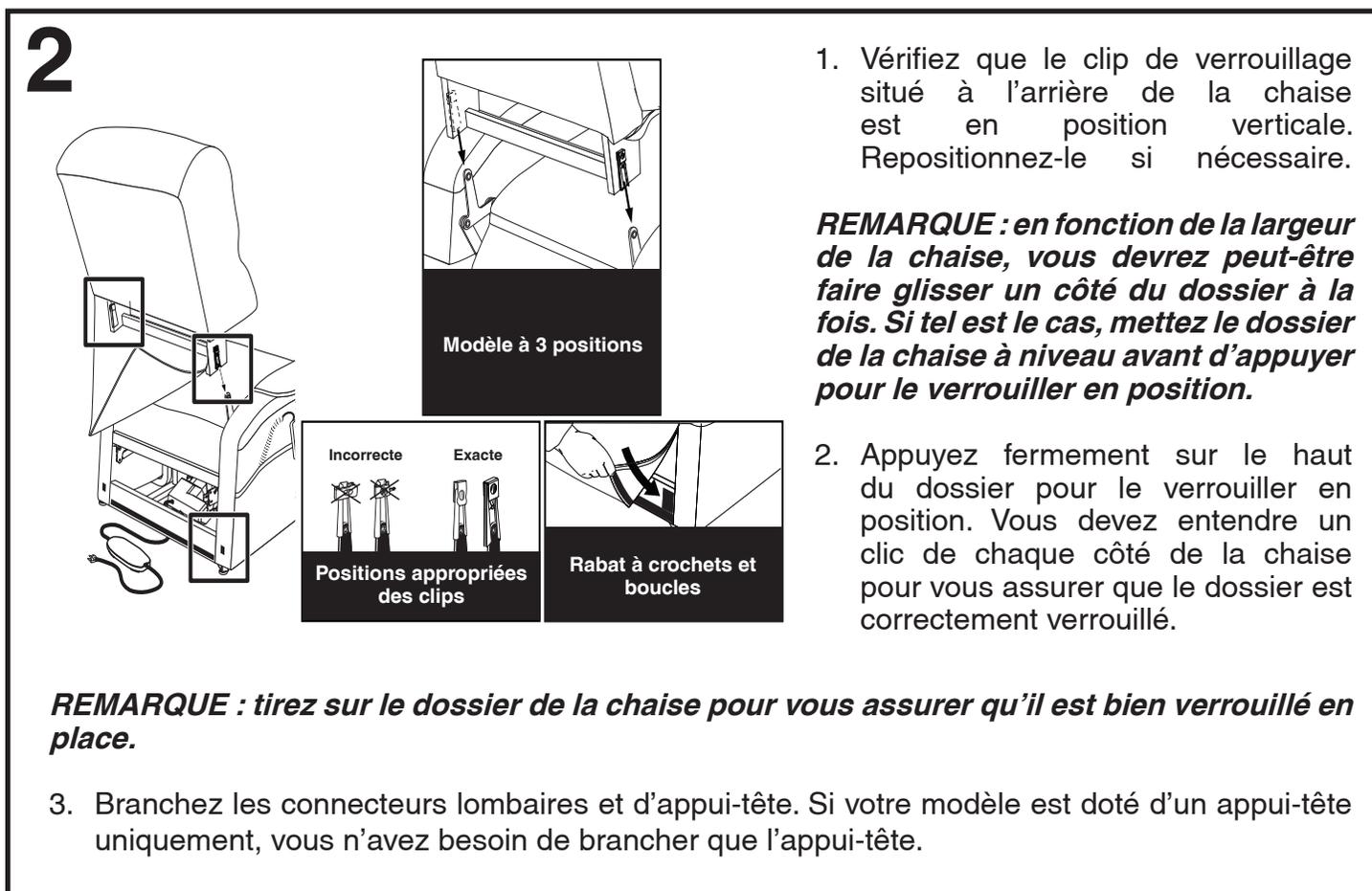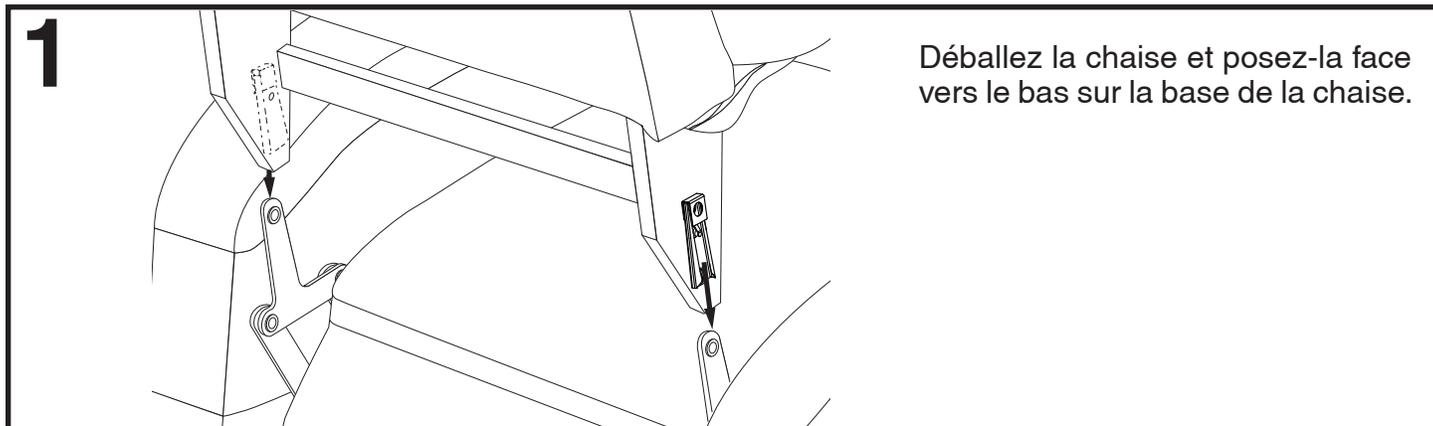

3

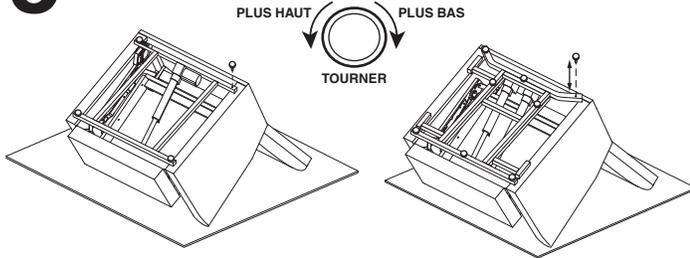

Avec la chaise à l'envers, insérez les niveleurs de pieds s'ils ne sont pas préinstallés et serrez chaque niveleur uniformément. Remplacez la chaise en position verticale. Si votre chaise bascule, ajustez les niveleurs au besoin (serrez pour abaisser ou desserrez pour relever) jusqu'à ce que la chaise soit stable.


REMARQUE : Selon votre trousse et le modèle de chaise, vous pouvez avoir quatre ou huit niveleurs de pieds.

4



CONSEIL : Afin d'assurer une livraison de qualité de votre nouvelle chaise, nous avons développé un système d'emballage personnalisé pour vous prémunir contre d'éventuels dommages pouvant survenir lors du transport et de la manutention de votre produit. En conséquence, les composants d'emballage utilisés pour protéger le produit pourraient donner une apparence déformée aux fibres du rembourrage lors du déballage. Dans le cas où vous rencontrez cela, nous vous recommandons de « gonfler » les coussins de la chaise pour permettre à l'air de pénétrer dans les fibres du coussin. Ce processus redonnera aux coussins leur forme originale.

5

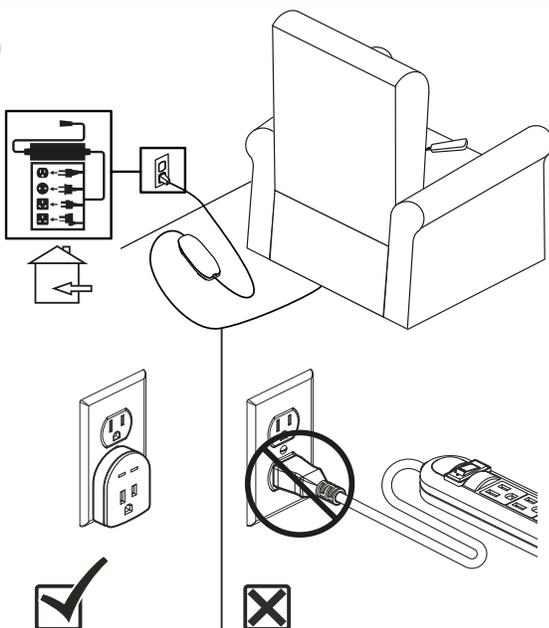

Branchez le cordon d'alimentation du transformateur externe directement dans une prise électrique standard. Faites passer le cordon d'alimentation à travers le dossier de la chaise. N'utilisez pas de rallonge.



AVERTISSEMENT! Ne branchez pas de rallonge au convertisseur AC/CC ou au chargeur de batterie. Un parasurtenseur de type fiche à prise unique homologué UL ou reconnu UL avec un minimum de 1 000 joules de protection peut être utilisé. Le parasurtenseur **DOIT** être branché directement into an electrical outlet.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat, Pride réparera ou remplacera, à notre discrétion, pour l'acheteur d'origine, l'une des pièces suivantes qui, après examen par un représentant autorisé de Fierté, s'est avérée défectueuse en termes de matériau et/ou de fabrication. Toute demande de garantie pour les assemblages électroniques peut devenir nulle si les dommages résultent de l'utilisation de pièces/accessoires qui ne sont pas des pièces d'origine Pride et qui ne sont pas achetés auprès d'un fournisseur Pride autorisé :

- Moteur
- Mécanismes à ciseaux
- Commande manuelle
- Cadre de levage
- Transformateurs/Boîtiers de contrôle

Votre chaise a été développée pour votre commodité. Votre chaise a une capacité de poids de 147 kg (325 lb.). Consultez le manuel du propriétaire pour toute information supplémentaire concernant votre chaise.



OBLIGATOIRE! Restez dans la capacité de poids spécifiée de votre fauteuil élévateur. Le dépassement de la capacité de poids annule la garantie de votre fauteuil élévateur.

Rev C/December 2024



I N F I N I T Y B 4 6 5 0