

If your single motor lift chair is equipped with a heat and massage hand control, please read the instructions below for operation. Refer to the owner's manual for any additional information on your lift chair.

Heat Buttons: Press the appropriate HEAT button(s) to activate the heat function in either the back, the base, or both. Press the HEAT button(s) again to cycle intensity through LOW (1), HIGH (2) and OFF (3). **See figure 1.**

Lock/Unlock Button: Press and hold the LOCK/UNLOCK button for approximately 5 seconds to lock the hand control. The center LOCK button will illuminate indicating the hand control is locked. Press and hold the LOCK/UNLOCK button for approximately 10 seconds to unlock the hand control. The hand control buttons/LEDs will all flash indicating it is no longer locked and the LOCK button will no longer be lit. **See figure 1.**

Massage Button: Press the MASSAGE button once to activate the massage function. This will automatically set the massage to the wave setting. Press the MASSAGE button again to go to the next of three available massage settings: wave, steady, or pulse. Each press of the button will take you to the next setting. Each setting is indicated by a colored LED. Press and hold the MASSAGE button for approximately 2 seconds to shut off the massage function, otherwise this function will shut off automatically after 20 minutes of continuous use. **See figure 1.**

Intensity Button: Press the INTENSITY button once to set the massage option to low. Press the INTENSITY button again to set the massage option to the next of three available settings: low, medium, or high. Each press of the button will take you to the next setting. Each setting is indicated by a colored LED. **See figure 1.**

Up Button: Press and hold the UP button to raise your lift chair from the seated position or to raise the chair back and lower the footrest from the reclined position. **See figure 1.** A green LED will indicate the operation is in process.

Down Button: Press and hold the DOWN button to lower the lift chair from the standing position or to recline the chair back and elevate the footrest from the seated position. **See figure 1.**

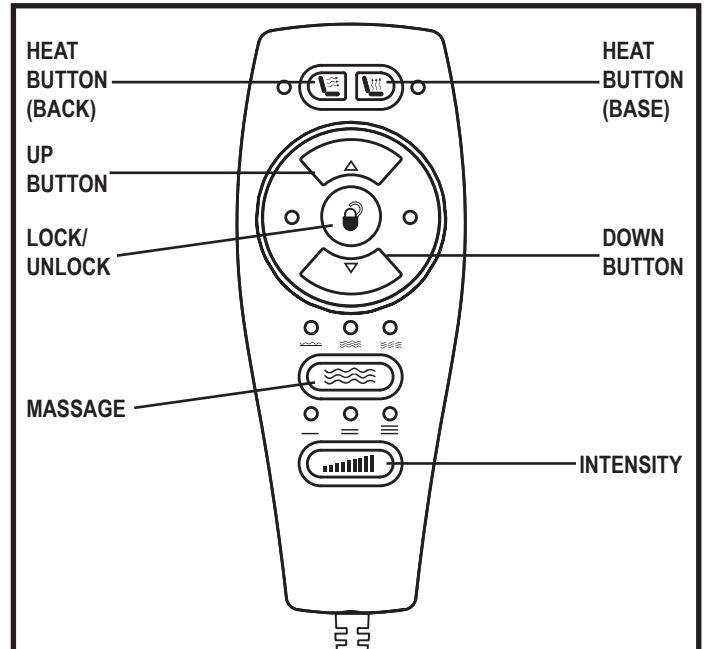


Figure 1. Single Motor Heat and Massage Hand Control



Si votre fauteuil auto-souleveur à seul moteur est équipé d'une commande manuelle de massage et de chaleur, s'il vous plaît lisez les instructions ci-dessous pour l'opération. Référez-vous au manuel du fauteuil auto-souleveur pour toutes autres informations.

Boutons Chaleur: Appuyez sur le(s) bouton(s) de chaleur approprié pour activer la fonction de chaleur soit au dossier, la base, ou les deux. Appuyez sur le bouton "CHALEUR" (HEAT) une deuxième fois pour éteindre la fonction de chaleur. Appuyez à nouveau sur le(s) bouton(s) HEAT pour faire passer l'intensité du cycle à LOW (1), HIGH (2) et OFF (3). **Voir la figure 1.**

BOUTON VERROUILLER/DEVERROUILLER (LOCK/UNLOCK): Appuyez sur le bouton "VERROUILLER" (LOCK/UNLOCK) pendant environ 5 secondes pour verrouiller la manette. Le bouton central LOCK s'allumera pour indiquer que la commande manuelle est verrouillée. Appuyez sur le bouton "VERROUILLER" (LOCK/UNLOCK) pendant environ 10 secondes pour déverrouiller la manette. Les boutons/voyants de la commande manuelle clignotent tous, ce qui indique qu'il n'est plus verrouillé et que le bouton LOCK ne s'allume plus. **Voir la figure 1.**

Bouton Massage: Appuyez sur le bouton "MASSAGE" une fois pour actionner la fonction de massage. Le réglage des vagues est le réglage par défaut à la mise en marche. Appuyez sur le bouton "MASSAGE" une deuxième fois pour choisir un des trois réglages suivants vague, régulier ou pulsation. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous avancez d'un réglage. Chaque réglage est indiqué par un voyant de couleur. Appuyez sur le bouton "MASSAGE" pendant environ 2 secondes pour éteindre la fonction de massage. Après 20 minutes d'utilisation continue, la fonction de massage s'éteint automatiquement. **Voir la figure 1.**

Bouton Intensité (Intensity): Appuyez une fois sur le bouton "INTENSITE" (INTENSITY) pour régler l'option d'intensité du massage. Appuyez une deuxième fois sur le bouton "INTENSITE" (INTENSITY) pour régler l'option d'intensité du massage à l'une des trois intensités suivantes: faible, moyenne ou élevée. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous avancez d'un réglage. Chaque réglage est indiqué par un voyant de couleur. **Voir la figure 1.**

Bouton Vers le Haut (UP): Appuyez et maintenez le bouton vers le haut (UP) pour mettre votre fauteuil auto-souleveur en position debout ou pour relever le dossier et abaisser le repose-pied de la position inclinée. **Voir la figure 1.** Une LED verte indique que l'opération est en cours.

Bouton Vers le Bas (DOWN): Appuyez et maintenez le bouton vers le bas (DOWN) pour remettre le fauteuil auto-souleveur en position assise ou pour incliner le dossier du fauteuil et d'élever le repose-pieds en position assise. **Voir la figure 1.**

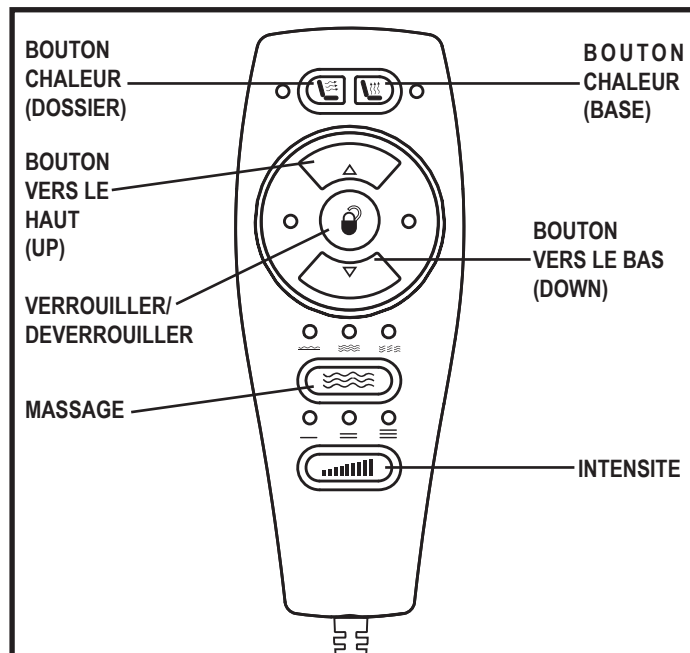


Figure 1. Commande manuelle de massage et de chaleur à seul moteur