

NOTE: The following is in addition to the information contained in the chair owner's manual. It explains how to initialize and program your memory button hand control prior to chair use. Read the owner's manual and all other supplemental information thoroughly before operating the chair for information on safety, basic operation, and care and maintenance.

Memory Button Hand Control Initialization

Your memory button hand control will need to be initialized when setting your chair up for the first time.

To initialize your hand control:

1. Assemble your chair. Refer to the "Assembly/Disassembly" section in your owner's manual.
2. Plug the power cord directly into an electrical outlet.
3. Locate the Recline Button and the Footrest Up Button on your memory button hand control. **See figure 1.**
4. Press and hold the Recline Button and the Footrest Up Button until your chair is in the full horizontal position. **See figure 2.**
5. Your memory button hand control and chair are now initialized for use.

Memory Button Hand Control Programming

Your memory button hand control can be set to four (4) individual settings.

1. Adjust your chair to the desired position.
2. Press and hold Memory Button 1 and Memory Button 2 for three (3) seconds. The LEDs on the memory buttons will flash to indicate that the hand control is in "set" mode.
3. Press and hold the desired memory button for three (3) seconds to set the memory position. The LEDs will stop flashing.
4. To go to a preset memory position, press and hold the desired memory button.

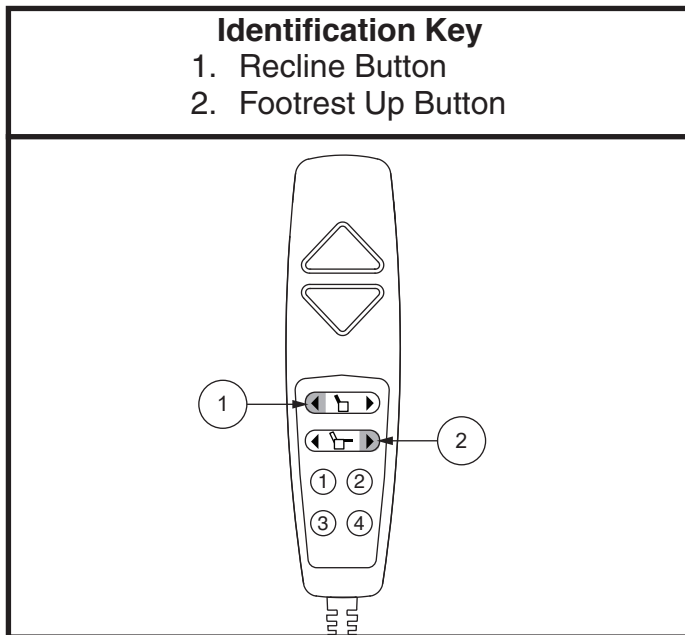


Figure 1. Memory Button Hand Control

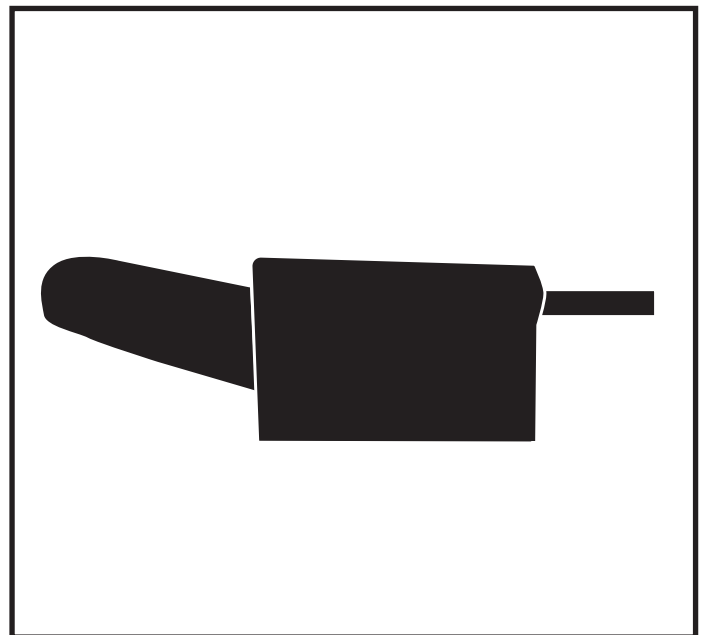


Figure 2. Lift Chair in Full Horizontal Position



REMARQUE: L'information suivante est un ajout aux informations contenues dans le manuel du propriétaire du fauteuil. Elle explique comment initialiser et programmer le bouton mémoire de votre manette avant l'utilisation du fauteuil. Lisez attentivement le manuel du propriétaire et toutes les autres informations supplémentaires, avant d'utiliser le fauteuil, afin d'obtenir des instructions sur la sécurité, l'utilisation de base, les soins et l'entretien.

Initialisation du bouton mémoire de la manette

Le bouton mémoire de votre manette devra être initialisé dans le cadre de la configuration initiale du fauteuil.

Pour initialiser votre manette:

1. Montez votre fauteuil. Reportez-vous à la section «Montage/Démontage» de votre manuel du propriétaire.
2. Branchez le cordon d'alimentation directement dans une prise secteur.
3. Localisez le bouton d'inclinaison et le bouton de repose-pieds sur le bouton de mémoire de votre manette. **Voir la figure 1.**
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'inclinaison et le bouton de repose-pieds jusqu'à ce que votre fauteuil soit en position horizontale complète. **Voir la figure 2.**
5. Le bouton mémoire de votre manette et votre fauteuil sont maintenant initialisés et prêts à être utilisés.

Programmation de la commande manuelle du bouton de mémoire

La commande manuelle de votre bouton mémoire peut être réglée sur quatre (4) réglages individuels.

1. Réglez votre chaise dans la position souhaitée.
2. Maintenez enfoncés le bouton mémoire 1 et le bouton mémoire 2 pendant trois (3) secondes. Les LED des boutons de mémoire clignotent pour indiquer que la commande manuelle est en mode «set».
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mémoire souhaité pendant trois (3) secondes pour définir la position de la mémoire. Les LED cesseront de clignoter.
4. Pour accéder à une position de mémoire prédéfinie, maintenez enfoncé le bouton de mémoire souhaité.

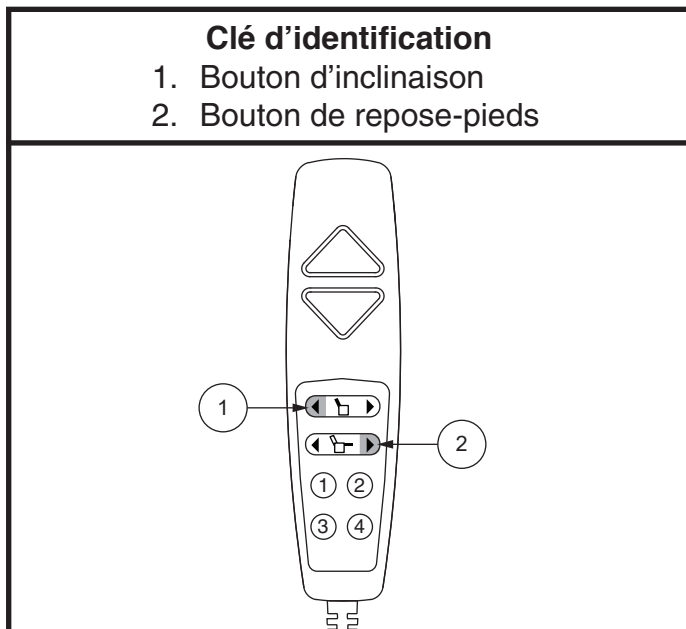


Figure 1. Bouton mémoire de la manette

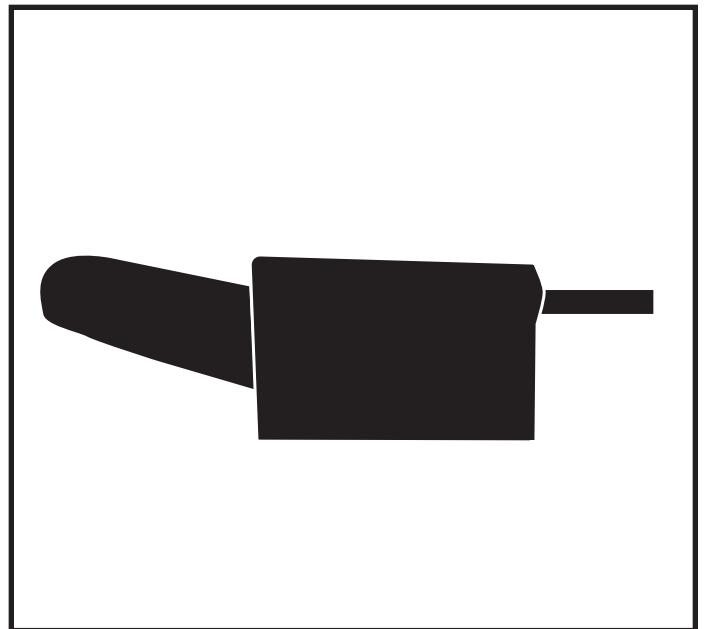


Figure 2. Fauteuil en position horizontale complète