

NOTE: The following information replaces the information contained in the Scooter Series Owner's Manual provided with your scooter. It describes information on throttle control lever operation. Please retain this information with the scooter owner's manual and contact your authorized Pride Provider with any questions.

TILLER CONSOLE

The tiller console houses all of the controls needed to drive your scooter, including the speed adjustment dial, key switch, battery condition meter, horn buttons, turn signal buttons and the throttle control lever. Please note that some of the features listed in this section are optional items and may not appear on your scooter. Contact your authorized Provider for more information. See figure 1 or 2.



PROHIBITED! Do not expose the tiller console to moisture. In the event that the tiller console does become exposed to moisture, do not attempt to operate your scooter until the tiller console has dried thoroughly.

IDENTIFICATION KEY FOR FIGURES 1 AND 2

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. HORN BUTTON | 7. THROTTLE CONTROL LEVER |
| 2. *LEFT TURN SIGNAL BUTTON | 8. SPEED ADJUSTMENT DIAL |
| 3. *HAZARD LIGHTS SWITCH | 9. BATTERY CONDITION METER |
| 4. LIGHT SWITCH | 10. KEY SWITCH |
| 5. *RIGHT TURN SIGNAL BUTTON | 11. MIRROR AND MIRROR PLUGS |
| 6. *HI-LOW SWITCH | 12. *HANDBRAKE LEVER |

*OPTIONAL COMPONENTS AVAILABLE ON SOME MODELS

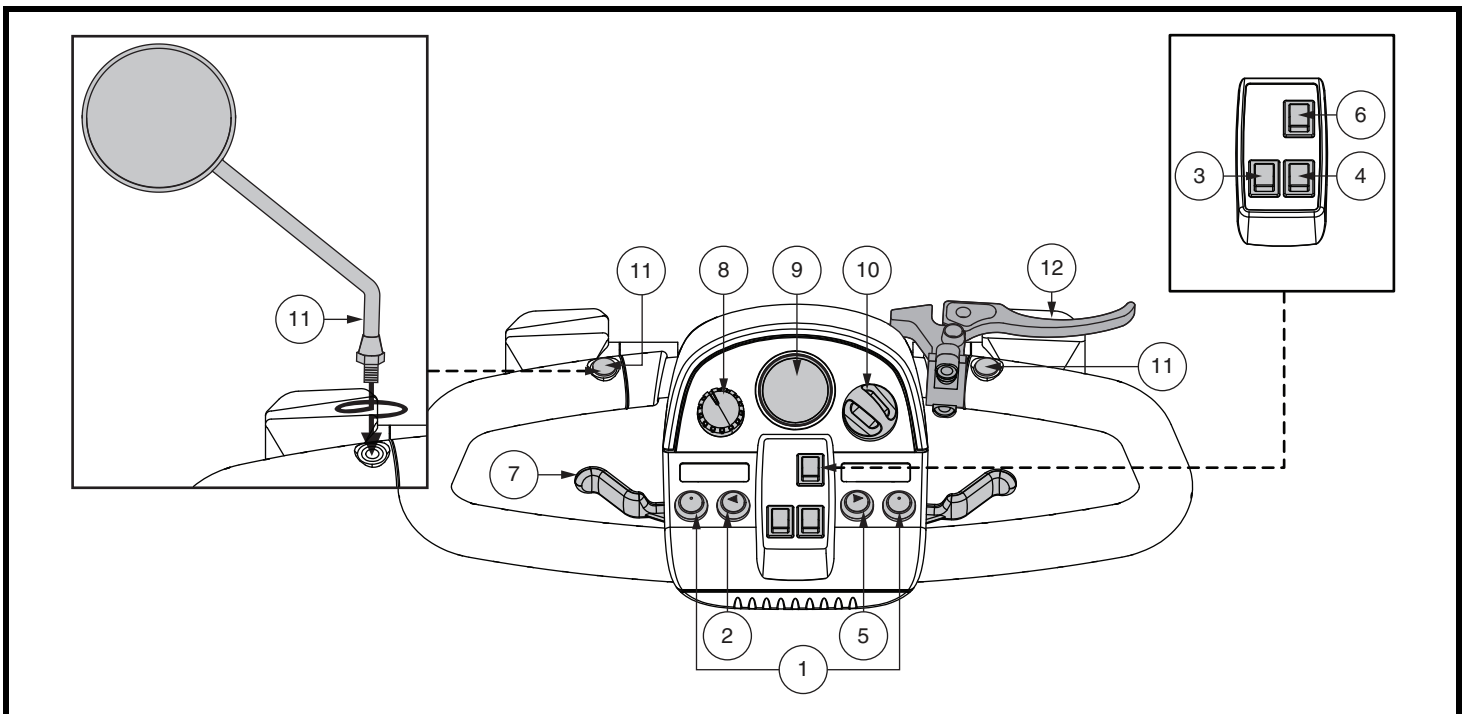


Figure 1. Tiller Console A



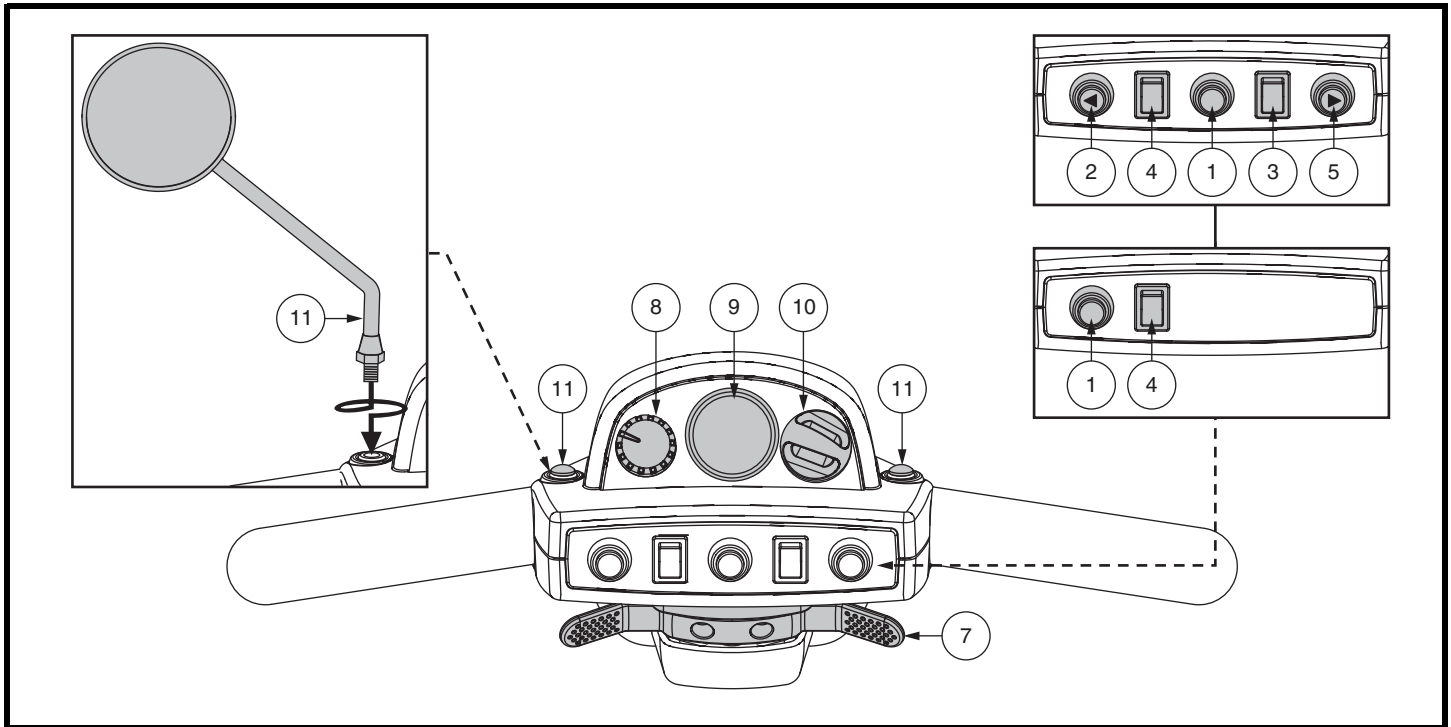


Figure 2. Tiller Console B

Throttle Control Lever

This lever allows you to control the forward speed and the reverse speed of your scooter up to the maximum speed you preset with the speed adjustment dial.

To use throttle control lever for models equipped with Tiller Console A:

To Move Forward, use either of the following:

- Use your left thumb to push the left side of the throttle control lever.
- Use your right hand fingers to pull back on the right side of the throttle control lever.

To Move Rearward, use either of the following:

- Use your right thumb to push the right side of the throttle control lever.
- Use your left hand fingers to pull back on the left side of the throttle control lever.

To use throttle control lever for models equipped with Tiller Console B:

- To move **Forward**, use your right thumb to push the right side of the throttle control lever.
- To move **Rearward**, use your left thumb to push the left side of the throttle control lever.

Release the throttle control lever and allow your scooter to come to a complete stop before engaging the other side of the lever. When the throttle control lever is completely released, it automatically returns to the center “stop” position and engages your scooter’s brakes.



NOTE: Les informations suivantes remplacent les informations contenues dans le manuel du propriétaire de la série Scooter fourni avec votre scooter. Elles décrivent le fonctionnement du levier de contrôle d'accélération. Veuillez conserver ces informations avec le manuel du propriétaire du scooter et si vous avez des questions contactez votre détaillant Pride autorisé.

TABLEAU DE BORD

Le tableau de bord abrite toutes les commandes de fonctionnement de votre scooter, incluant le bouton de réglage de la vitesse, la clé de contact, la jauge à batteries, klaxon, bouton des clignotants et le levier d'accélérateur. S.V.P. prenez note que certaines caractéristiques sont facultatives et peuvent ne pas se retrouver sur votre scooter. Contactez votre détaillant autorisé pour les informations. **Voir les figures 1 ou 2.**



INTERDIT! N'exposez pas le tableau de bord à l'humidité. Si le tableau venait à être mouillé, ne tentez pas d'utiliser votre Travel Scooter avant que le tableau ait été asséché à fond.

CLE D'IDENTIFICATION POUR FIGURES 1 ET 2

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. KLAXON | 7. LEVIER D'ACCELERATEUR |
| 2. *CLIGNOTANT (GAUCHE) | 8. BOUTON DE REGLAGE DE LA VITESSE |
| 3. *BOUTON FEUX D'URGENCE | 9. JAUGE A BATTERIES |
| 4. COMMUTATEUR DES FEUX ET PHARE | 10. CLE DE CONTACT |
| 5. *CLIGNOTANT (DROIT) | 11. MIROIR ET PRISES POUR MIROIR |
| 6. *COMMUTATEUR HI-LO | 12. *FREIN MANUEL |

*OPTIONS FACULTATIVES DISPONIBLE SUR CERTAIN MODÈLES

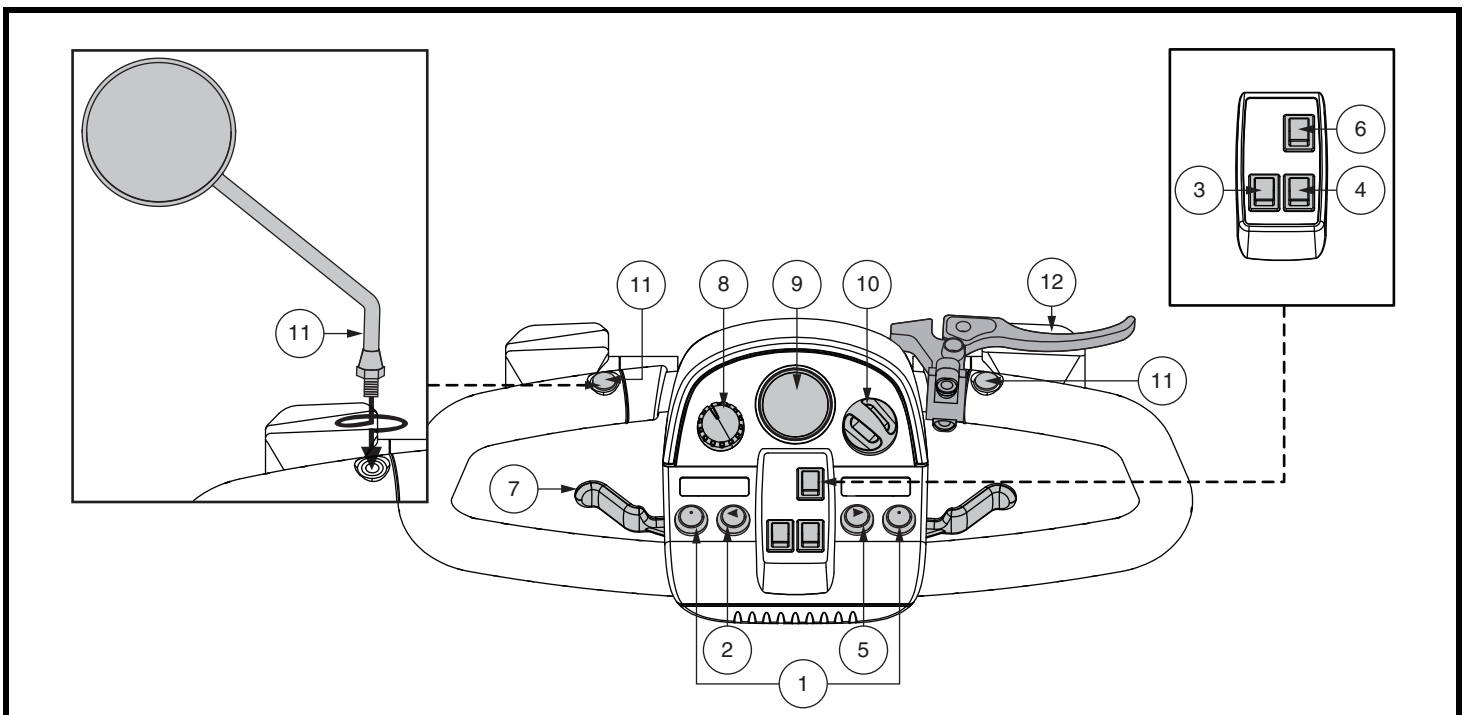


Figure 1. Tableau de bord A



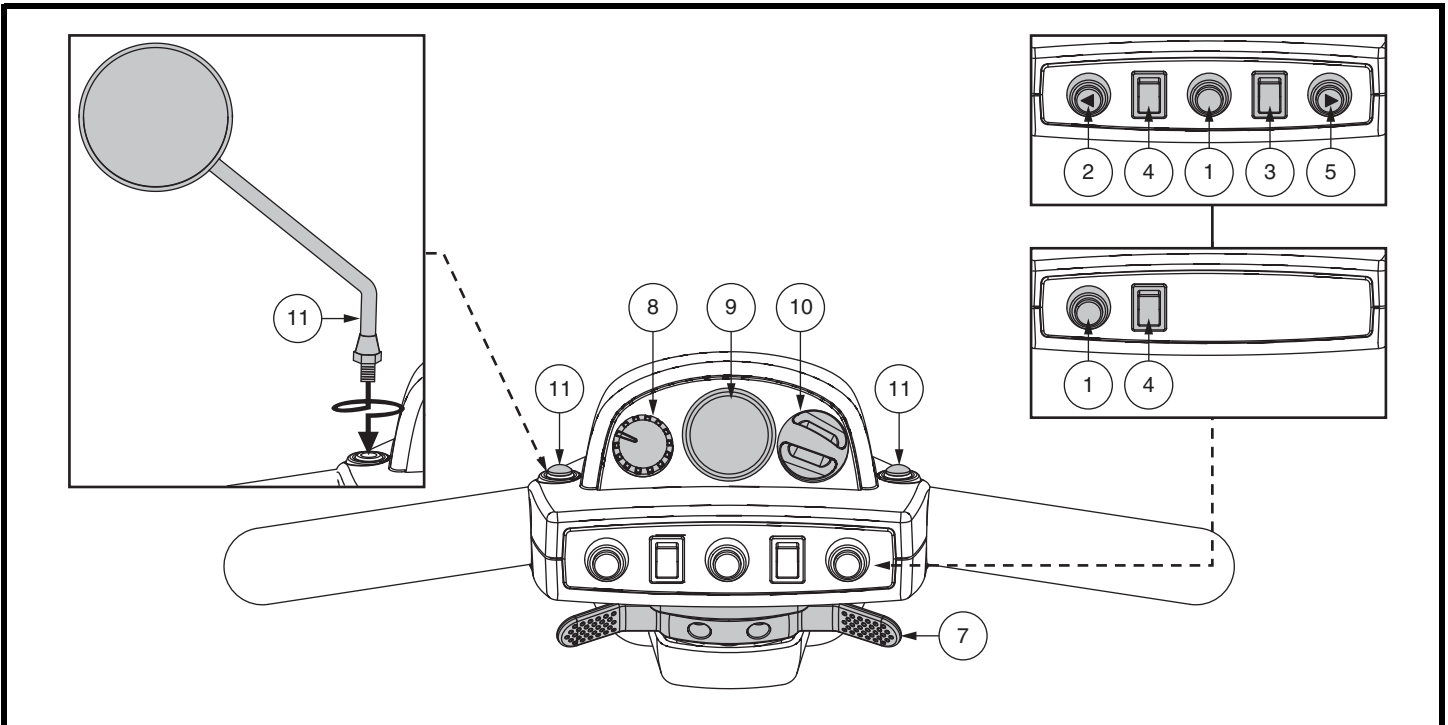


Figure 2. Tableau de bord B

Leviers d'accélérateur

Ces leviers commandent la marche avant ou arrière du scooter selon la vitesse maximale déterminée par le bouton de réglage de la vitesse.

Pour utiliser le levier de contrôle d'accélération pour tous les modèles équipés avec le tableaux de bord A:

Pour rouler vers l'avant choisissez l'une ou l'autre de ces méthodes:

- Utilisez votre pouce gauche pour appuyer sur le levier gauche et avancer.
- Utilisez vos doigts de la main droit pour tirer sur le levier droit et avancer.

Pour rouler vers l'arrière choisissez l'une ou l'autre de ces méthodes:

- Utilisez votre pouce droit pour appuyer sur le levier droit et reculer.
- Utilisez vos doigts de la main gauche pour tirer sur le levier gauche et reculer.

Pour utiliser le levier de contrôle d'accélération pour les modèles équipés avec le tableaux de bord B:

- Pour rouler vers l'avant choisissez, utilisez votre pouce droit pour appuyer sur le levier droit et reculer.
- Pour rouler vers l'arrière choisissez, utilisez votre pouce gauche pour appuyer sur le levier gauche et avancer.

Relâchez le levier complètement afin que le scooter s'immobilise complètement avant d'engager le levier opposé et changer de sens de roulement. Le levier retourne de lui-même au centre pour stopper le scooter afin que les freins s'engagent automatiquement.

