

VICTORY® 9

LE CHOIX ULTIME PARMIS LES APPAREILS À ROUES DE 9", AVEC DES CARACTÉRISTIQUES LUXUEUSES À PETIT PRIX.

VICTORY® 9

Le scooter **Victory® 9** à l'allure sportive, grâce à ses nombreuses caractéristiques exclusives de Pride Mobility, vous offre des performances inégalées. Il s'assemble et se désassemble facilement, sans effort. Ses pneus à profil bas, qui ne marque pas au plancher, son indicateur de batteries LED pour plus de précision et de durabilité et son volant Delta pour une meilleure manœuvrabilité font du Victory® 9 le scooter le plus avantageux sur le marché présentement.




Pride
Mobility Products Co.

St. Catharines, Ontario • 888-570-1113 • www.pridemobility.com

Victory® 9	Triporteur	Quadriporteur
Numéro de modèle:	SC609	SC709
Capacité de poids:	300 lb	300 lb
Vitesse maximale ¹ :	Jusqu'à 5.25 mph	Jusqu'à 5.25 mph
Dégagement au sol ² :	2"	2.25"
Longueur ² :	43.5"	45.5"
Largeur ² :	22.25"	22.5"
Rayon de giration:	40.25"	51.5
Autonomie ^{1,6} :	13 miles ⁵	
Pneus:	Avant: 8" solides Arrière: 9" solides	Avant: 9" solides Arrière: 9" solides
Poids total sans les batteries ^{2,7} :	117.5 lb	131 lb
Pièce la plus lourde lorsque désassemblé ² :	Avant: 48.5 lb	Avant Arrière: 45 lb
Siège standard:	Type: Siège style Fish-On V Poids: 28 lb Matériaux: Vinyle noir Dimensions: 18" de largeur 18" de profondeur	
Hauteur siège/plancher:	17.25" - 18.75"	
Groupe motopropulseur:	Propulsion arrière, transaxe scellé, moteur 4 pôles DC 24V	
Système de freinage:	Intelligent (électronique, à disques régénérateurs)	
Batteries requises ^{3,4} :	(2) 12V à décharge profonde Types: U-1 ou en option 40 AH Poids: U-1: 24.5 lb chacune 40 AH: 32.5 lb chacune	
Chargeur:	Externe, 3A	

Choix des couleurs:

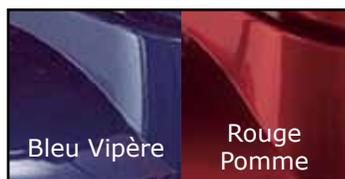

¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ AGM ou Cellules Gel recommandées.

⁴ Le poids des batteries peut varier selon les fabricants.

⁵ Cette distance est obtenue avec le quadriporteur.

⁶ Testé en conformité avec les standards ANSI/RESNA, WC Vol 2, section 4 et ISO 7176-4.

Les tests d'autonomie sont faits avec le poids maximum. Les résultats dérivent des calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries ainsi que du groupe motopropulseur.

⁷ Incluant le siège standard.



Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

St. Catharines, Ontario • 888-570-1113 • www.pridemobility.com

CAFR_VICTORY9_3W_SS_02-28-11_FR

Caractéristiques

- Loquet de barrure automatique, ultra simple pour l'assemblage et le désassemblage
- Pneus à profil bas, légers, exclusivité de Pride Mobility et qui ne marquent pas le plancher
- Câble principal avant arrière à connexion automatique
- Guidon Delta à poignées recourbées
- Lumière avant LED à haute intensité et à longue durabilité pour une illumination de la route optimale
- Charnières sans pincement et siège à rotation
- 300 lbs. capacité de poids
- Moteur puissant 4 broches

Options

- Support à béquilles d'avant-bras
- Support à cannes/ béquilles
- Support à oxygène
- Support à verre
- Panier arrière
- Drapeau
- Support à marchette
- Housse
- Sac de voyage
- Siège style Fish-On ET 17.5"x17"
- Sièges sur mesures disponibles

Pride™ Lifts & Ramps

- Backpacker® Plus
- Outlander
- PrideBoom 250
- Backpacker® MV



Outlander



Backpacker® Plus

Ces leviers sont compatibles avec le Victory® 9

