
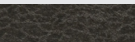
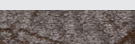
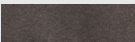
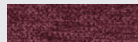
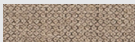
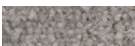
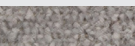


LE FAUTEUIL AUTO-SOULEVEUR INCLINABLE LE PLUS CONFORTABLE AU MONDE !

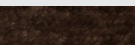

COLLECTION	RADIANCE ^{1,2,3}	RADIANCE ^{1,2,3}	RADIANCE ^{1,2,3}	RADIANCE ^{1,2,3}	ATLAS PLUS ^{1,2}	TRANQUIL	TRANQUIL	TRANQUIL	TRANQUIL	ELEGANCE		LEGACY		METRO	URBANA	PERFECTA
MODÈLE	PLR-3955LT	PLR-3955M	PLR-3955PW	PLR-3955S	PLR2985M	PLR935LT	PLR935M	PLR935PW	PLR935S	PLR975L	PLR975M	PLR958L	PLR958M	PLR925M	PLR965M	PLR945M
POSITION	Infinie Détente Inclinée Soulevé Trendelenburg 5'10" et plus	Infinie Détente Inclinée Soulevée Trendelenburg 5'4"-5'9	Infinie Détente Inclinée Soulevée Trendelenburg 5'3" et moins	Infinie Détente Inclinée Soulevée Trendelenburg 5'3" et moins	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'10" et plus	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'3" et moins	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'3" et moins	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'10" et plus	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'10" et moins	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"	Infinie Détente Inclinée Soulevée 5'4"- 5'9"
CAPACITÉ DE POIDS	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb	400 lb
HAUTEUR SOL-SIÈGE	21.5"	19.5"	19.5"	18"	19.5"	21.5"	19.5"	18"	18"	20.5"	20"	20.5"	19.5"	19"	20"	19"
PROFONDEUR DU SIÈGE	22"	21"	18"	18"	21"	22.5"	20.5"	18.5"	18.5"	22"	21"	22"	21.5"	21"	20"	20"
LARGEUR DU SIÈGE	23.5"	22.5"	24"	20"	22"	23.5"	22"	24"	20"	22"	21"	23"	22"	21"	21"	22"
HAUTEUR DOSSIER-SIÈGE	31"	28"	23"	25"	26"	30"	29"	24.5"	25"	30"	27"	26"	25"	26.5"	25"	25"
PROFONDEUR D'ASSISE **	39"	38"	34"	34"	39"	40"	38"	36"	36.5"	39"	39"	39.5"	39"	39.5"	39"	39"
COUSSIN DE SIÈGE COMPLET	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
CHALEUR	Standard	Standard	Standard	Standard	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
EXTENSION D'APPUI-PIED	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
TYPE DE SIÈGE	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort	Total Comfort
HAUTEUR TOTALE DU FAUTEUIL	49"	43"	40"	41"	42"	47"	43"	38"	40"	43"	42"	43.5"	42"	41"	42"	43"
DISTANCE AVEC LE MUR	21.5"	15"	14"	15"	16"	16"	16"	12.5"	13"	16"	14"	16"	16"	14"	14"	15"
LARGEUR TOTALE DU FAUTEUIL	40"	39"	41"	37"	39"	38"	37.5"	36"	33.75"	37.5"	35.5"	36.5"	35"	33"	33"	31"
POIDS DU FAUTEUIL	178 lb	158 lb	161 lb	156 lb	164 lb	155 lb	145 lb	143 lb	137 lb	157 lb	152 lb	160 lb	153 lb	142 lb	145 lb	142 lb
GARANTIE	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata	7 ans au prorata

GUIDE DE SÉLECTION DES TISSUS STANDARDS	CANYON   OCEAN STEEL   SILT WALNUT				BADLANDS  MUSHROOM  WALNUT  STEEL	ASTRO  GREY  BROWN  MUSHROOM				BADLANDS  MUSHROOM  WALNUT  STEEL	SAVILLE  WINE  GREY  BROWN	SAVILLE  WINE  GREY  BROWN	STONEWASH  GRANITE  GUNMETAL	MERINO  FAWN  STEEL								
	GUIDE DE SÉLECTION DES TISSUS OPTIONNELS					CRYPTON ARIA  COOL GREY  ESPRESSO	CRYPTON ARIA  COOL GREY  ESPRESSO															

NOTES:

1. Le chargeur sans fil est uniquement compatible avec les téléphones intelligents dotés de capacités de charge sans fil. De plus, aucun autre appareil intelligent (par exemple des montres intelligentes) ne doit être utilisé avec le chargeur sans fil.
2. Le fauteuil a un porte-gobelet escamotable et un chargeur de téléphone intelligent.
3. Le fauteuil est muni d'une manette à bascule et des touches mémoires.

Les mesures peuvent varier de +/- 1". Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Les informations contenues dans ce document sont exactes au moment de la publication ; nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.



APPUI-TÊTE
MOTORISÉ



SUPPORT
LOMBAIRE
MOTORISÉ

CARACTÉRISTIQUES STANDARD:



MANETTE
AVEC PORT
USB



BATTERIE
DE SECOURS
AU LITHIUM-ION



EXTENSION
D'APPUI-PIED



DOSSIER
MOTORISÉ



DÉTENTE



INCLINÉE



SOULEVÉE



INFINIE
À PLAT



TRENDELBURG

*Ce ne sont pas tous les fauteuils qui sont en mesure d'atteindre toutes les positions. SVP vous référez à chaque produit de façon spécifique.



APPUI-TÊTE MOTORISÉ



SUPPORT LOMBAIRE
MOTORISÉ



EXTENSION
D'APPUI-PIED



POSITIONS INFINIES



FONCTION DE SOULÈVEMENT

LE FAUTEUIL
INCLINABLE LE
PLUS CONFORTABLE
AU MONDE !



FONCTIONS INDÉPENDANTES

1. L'appui-tête motorisé soulève votre tête, votre cou ainsi que vos épaules pour maximum de confort.
2. La fonction de soulèvement vous aide à vous lever et vous asseoir dans votre fauteuil.
3. Le support lombaire motorisé vous permet de personnaliser votre confort.
4. L'extension d'appui-pied vous permet de relaxer et vous étirer complètement.
5. Le dossier monte et descend de façon indépendante afin de vous aider à trouver la position parfaite.
6. L'inclinaison infinie des positions permet au dossier et au repose-pieds de se déplacer indépendamment l'un de l'autre, ce qui permet d'atteindre diverses positions.

STANDARD FEATURES


7. La manette contrôle toutes les fonctions de positionnement du fauteuil et inclus un port de chargement USB intégré.
8. La batterie de secours au lithium garantit que votre fauteuil auto-souleveur est opérationnel lorsqu'il y a une panne de courant.



UN PORT DE CHARGEMENT
USB INTÉGRÉ



MANETTE À BASCULE ET
DES TOUCHES MÉMOIRES

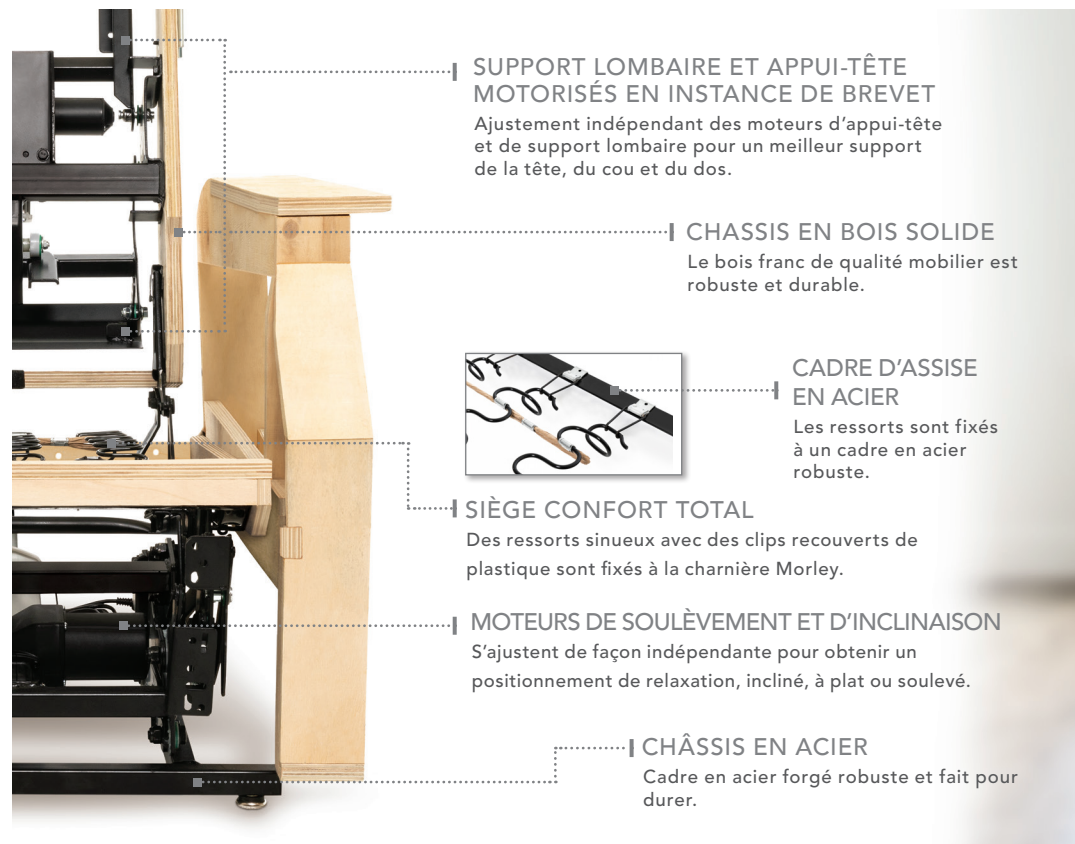

SUPPORT LOMBAIRE ET APPUI-TÊTE MOTORISÉS EN INSTANCE DE BREVET

Ajustement indépendant des moteurs d'appui-tête et de support lombaire pour un meilleur support de la tête, du cou et du dos.

CHASSIS EN BOIS SOLIDE

Le bois franc de qualité mobilier est robuste et durable.



CADRE D'ASSISE EN ACIER

Les ressorts sont fixés à un cadre en acier robuste.

SIÈGE CONFORT TOTAL

Des ressorts sinueux avec des clips recouverts de plastique sont fixés à la charnière Morley.

MOTEURS DE SOULÈVEMENT ET D'INCLINAISON

S'ajustent de façon indépendante pour obtenir un positionnement de relaxation, incliné, à plat ou soulevé.

CHÂSSIS EN ACIER

Cadre en acier forgé robuste et fait pour durer.

PRIDE
MOBILITY
VIVEZ VOTRE MEILLEUR®

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de la publication.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

CAFR_LC-VIVA-END-9-22-21



VivaLIFT!
COLLECTION DE FAUTEUILS INCLINABLES MOTORISÉS



BROCHURE CANADIENNE

Beamsville, Ontario | 888-570-1113

pridemobility.ca |    