

# Jazzy air<sub>2</sub>



## LA MOBILITÉ 2.0

### **Passez au niveau supérieur !**

*L'interrupteur Air permet un accès rapide à la position haute. Grâce à lui, vous pourrez vous déplacer et élever l'assise en même temps. Les suspensions autobloquantes optimisent l'équilibre. Grâce à ce mécanisme, le Jazzy Air 2.0 roule à la même vitesse, que l'assise soit en haut ou en bas. La motricité centrale et la suspension Active-Trac offrent des performances accrues tant en intérieur qu'en extérieur. Son design et ses matériaux procurent au Jazzy Air 2.0 un look élégant et moderne. Le panel de coloris proposé vous permettra de le personnaliser selon vos goûts. De nouvelles possibilités s'offrent à vous.*

# Spécifications Techniques

<b>Capacité de poids</b>	136 kg
<b>Vitesse maximale<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 5,6 km/h (position basse et haute)
<b>Dégagement au sol<sup>2</sup></b>	2,54 cm au moteur
<b>Hauteur siège-sol</b>	53,4 cm - 83,8 cm
<b>Rayon de giration<sup>2</sup></b>	50,8cm
<b>Dimensions<sup>2,6</sup></b>	Longueur: 104 cm Largeur: 58,42 cm
<b>Type de manipulateur</b>	PG VR2
<b>Roues motorisées</b>	10" anti-crevaisons
<b>Roues pivotantes</b>	6" anti-crevaisons
<b>Suspension</b>	Active-Trac®
<b>Autonomie<sup>1,4</sup></b>	Jusqu'à 30,57km avec ses batteries 40Ah
<b>Poids des composantes<sup>5</sup></b>	Base: 111 kg <sup>7</sup> avec batteries 40 Ah Batteries 40 Ah: 14,5 kg
<b>Motorisation</b>	2 moteurs
<b>Freins</b>	Freins intelligents
<b>Batteries<sup>3</sup></b>	(2) 40 Ah
<b>Chargeur</b>	5 amp, externe
<b>Garantie</b>	2 ans (sauf batteries : 1 an)

- 1) L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification est sujette à une variation de +10%, -5%.
- 2) En raison des tolérances de fabrication et d'amélioration continue des produits. Cette spécification est sujette à une variation de + ou -3%.
- 3) Requier des batteries AGM ou au gel.
- 4) Testé conformément à la norme ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Section 4. Résultats issus de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et les performances du système d'entraînement. Test effectué à capacité de poids maximum.
- 5) Le poids des batteries peut varier selon le fabricant.
- 6) Les dimensions indiquées concernent uniquement la base motorisée. Les dimensions hors-tout varient en fonction de l'assise et des accessoires choisis.
- 7) Le poids comprend la base, le siège et les batteries.


# Caractéristiques

- Siège sport inclinable à dossier haut ou assise plaque. Le siège dispose d'un réglage de profondeur de 5 cm. Choix de 40 cm x 40-45 cm, 45cm x 45-50 cm, 50 cm x 50-55 cm
- Accoudoirs réglables en angle, en hauteur et en profondeur
- Appui-tête réglable en hauteur
- Caractéristiques du siège élévateur récemment remodelé :
  - Une hauteur sol-siège abaissée de 5cm permet maintenant à l'utilisateur de s'asseoir confortablement à une table ou un bureau de hauteur standard
  - L'assise s'élève et s'abaisse en 11 secondes à l'aide de l'interrupteur Air ou du manipulateur VR2
- Caractéristiques supplémentaires :
  - Conduite en toute sécurité à 5,6 km/h en position surélevée
  - Palette centrale relevable et ajustable en angle, avec inserts anti-dérapants, assurant un confort optimal
  - Les feux LED offrent une visibilité dans tous les environnements
  - Une stabilité maximale en position haute ou basse grâce aux suspensions et aux 6 roues
  - Le compartiment de rangement sous le siège permet de garder vos objets de valeur accessibles

# Accessoires

- Ceinture ventrale
- Support de canne
- Support de téléphone portable
- Porte gobelet
- Sacoche de rangement sous accoudoir
- Chargeur USB XLR

## Couleurs

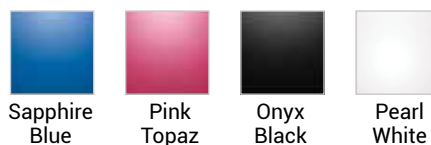

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest

04 81 65 94 70 - info@pridemobility.fr