


Celebrity® X Sport

Tragfähigkeit:	159 kg
Maximalgeschwindigkeit:	bis zu 15 km/h
Bodenfreiheit:	8,25 cm
Wenderadius:	145 cm
Gesamtlänge:	118,75 cm
Gesamtbreite:	61 cm
Reifen:	
Vorn:	9 cm × 25 cm
Hinten:	10 cm × 33 cm
Antikipprollen:	hinten
Federung:	vorn und hinten
Transportgewicht:	
Gewicht ohne Batterien:	65 kg
Schwerstes Bauteil nach Zerlegung:	29 kg (Vorderteil)
Antrieb:	Hinterradantrieb, versiegeltes Getriebe, 24 V-Gleichstrommotor
Duales Bremssystem:	Elektronisches, regeneratives und elektromechanisches System (elektronisch, regenerative Scheibenbremsen)
Standard-Sitz:	Captains-Sitz
Batterieladegerät:	extern, 5 A
Reichweite pro Ladung:	bis zu 40 km
Batterieanforderungen:	(2) 12 V tiefentladbar, 40 Ah
Batteriegröße:	40 Ah: je 11 kg
Gewährleistung:	Zweijährige eingeschränkte Gewährleistung

Farben:

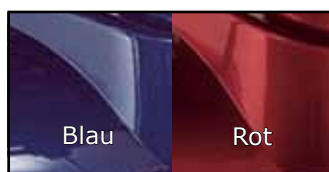

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Hochmoderne Federung (vorn und hinten)
- Maximale Geschwindigkeit bis zu 15 km/h
- Maximale Tragfähigkeit 159 kg
- Ultraleichte automatische Verriegelung für schnellen Auseinanderbau/Zusammenbau
- Leicht zugängliche Verzurrpunkte (für den Transport eines nicht besetzten Elektromobils)
- Korb vorn (Standard)
- Enger Wenderadius von 145 cm
- Mit winkelverstellbarer Zweilampen-Ausstiegsbeleuchtung (Standard)
- Optimale Stabilität durch auf dem Vorderrahmen montierte Sitzsäule
- Abnehmbare Standardaufbewahrungstasche für Batterieladegerät
- Gut sichtbare Reflektoren
- Mikroprozessor-Controller
- Bei aktivierter Lenkersperre kann der Lenker als Griff während des Transports verwendet werden.

OPTIONEN

- Stock-/Krückenhalter
- Sauerstoffflaschenhalter
- Becherhalter
- Korb hinten
- Gehwagenhalter

Die Informationen in diesen Unterlagen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt; da der Hersteller jedoch bemüht ist, die Produkte ständig zu verbessern und zu entwickeln, behält er sich technische Änderungen ohne vorherige Mitteilung vor. Die theoretische Reichweite wird entsprechend den Testbedingungen nach europäischen Normen berechnet. Die tatsächliche Reichweite bei normaler Verwendung hängt von vielen Faktoren ab, z. B. vom Zustand des Fahrzeugs und der Batterien, dem Gewicht des Fahrers, dem korrekten Reifendruck, der Umgebungstemperatur sowie Neigung und Beschaffenheit der Straße oder des Fußweges.

CELEBRITY X SPORT

DIE NÄCHSTE GENERATION SPORT-SCOOTER

CELEBRITY® X SPORT

Das Elektromobil **Celebrity® X Sport** besitzt alle Vorteile eines 15 km/h schnellen Elektromobils in einer sportlichen, kompakteren Konstruktion. Große Hinterräder sorgen für bessere Leistung. Celebrity X Sport besitzt viele Funktionen, z. B. einen vollständig verstellbaren Liegesitz und einen umwickelten Deltalenker, und zeichnet sich aus durch Präzisionsleistung mit außerordentlichem Komfort.

