



De Edge geeft u een streepje voor

Met in het basispakket : 4-polige motoren, Mid-Wheel 6® midden-aandrijf wiel technologie en de ATX vering is de Q6 Edge® ontworpen om te voldoen aan de prestatie-eisen van de meest actieve gebruiker. De Q6 Edge is geschikt voor het complete assortiment aan stoelenopties en elektronica uitrusting, om soepele rehabilitatie optimaal te ondersteunen, tegen een uitstekende prijs.



Q6 EDGE® is hier afgebeeld met het TRU-Balance® elektrisch zitsysteem en Q-Logic Elektronica




THE POWER YOU TRUST

Specificaties

AANDRIJFWIELEN	35.5 cm (pneumatisch of solide beschikbaar) ⁵
MEUBELVRIENDELIJKE BOLVORM ZWENKWIELEN	Voor: 15.25 cm solide Achter: 15.25 cm solide / 20.32 cm solide ^{5,6}
VERING	Active-Trac® ATX (verhoogde motor)
MAXIMALE SNELHEID ¹	Tot 8.05 km/h / Tot 9.66 km/h ⁵
REMMEN	Remmen (elektronisch, elektromechanisch en regeneratief)
BODEMVRIJHEID	6.35 cm (centraal onder het frame)
DRAAICIRKEL ²	50.8 cm
TOTALE OMVANG ²	Lengte: 90.17 cm Breedte: 60.96 cm
ZITTING	Synergy® stoelsysteem Aanpasbare Breedte: 25 cm - 56 cm Aanpasbare Diepte: 25 cm - 56 cm TRU-Balance® elektrisch zitsysteem Aanpasbare Breedte: 35.5 cm - 56 cm Aanpasbare Diepte: 35.5 cm - 56 cm Stoel met hoge rugleuning (56 cm x 56 cm Maximale afmetingen) Stoel met lage rugleuning (56 cm x 56 cm Maximale afmetingen)
AANDRIJVING	Twee-motoren, 4-polig, Mid-Wheel 6®
ACCUS	Twee 12 volt, deep cycle NF-22
BEREIK PER LADING ^{1,3}	Tot 25 km
ACCU LADER	8A, buitenboord
BESCHIKBARE ELEKTRONICA	75A Q-Logic NE 75A Q-Logic NE+ Q-logic 75A Besturingssysteem
GEWICHT CAPACITEIT	136 kg maximum (gewicht gebruiker)
BASISGEWICHT	62.59 kg
GEWICHT ZONDER ACCUS ⁴	17.24 kg (each)
GARANTIE	Levenslange, beperkte garantie op het frame 2 jaar garantie op de elektronische componenten 18 maanden garantie op de motoren

Beschikbare kleuren

METALLIC

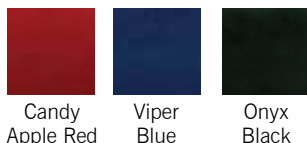

Candy Apple Red

Viper Blue

Onyx Black

Kenmerken

- Maximale stabiliteit dankzij Mid-Wheel 6® technologie, wielcontact met alle 6 wielen
- Geschikt voor het TRU-Balance® zitsysteem
- Meubel-vriendelijke OMNI bolvorm nylon zwenkwieken voorkomen verlies van wielcontact bij het passeren van obstakels
- ATX wielophanging (Active-Trac® met extra stabiliteit) met aan de voorzijde toegevoegde OMNI-zwenkwieken, voor superieure prestaties op uiteenlopende ondergrond

Opties

- TRU-Balance® Elektrische kantel- en rughoekverstelling
- TRU-Comfort zitsysteem
- Q-Logic EX elektronica
- 9,65 km/u motoren set
- Accu-Trac geavanceerde wegliggingsstechnologie ⁶
- Hoog/laag verstelling
- Beademingsapparatuur houder, gondel systeem ⁶
- Beademingsapparatuur houder, compact ⁶
- LED verlichtingsset
- 10 cm brede anti-lek profielbanden op de aandrijfwieken ^{6,7}
- WC19 verankeringsysteem tijdens vervoer ^{6,8}
- Stabilisatorbalk met semi-onafhankelijk geveerde achter-zwenkwieken

VOETNOOT:

- De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk dit wijkt 5-10% af.
- Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties worden bijgesteld met + of -3%. Genoemde afmetingen hebben alleen betrekking tot de power base. Totale afmetingen kunnen variëren gebaseerd op zittingen en accessoires.
- Theoretische actieradius is berekend onder testvoorwaarden in overeenkomst met Europese standaarden. In de praktijk hangt deze af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk. Dit kan tussen de 5-10% afwijken.
- Gewicht van de batterij kan variëren, afhankelijk van de fabrikant
- Motorenset met hogere snelheid.
- Bel voor beschikbaarheid.
- Verkrijgbaar als algemeen-gebruikset bij de 9,65 km/u motorenset, totale rolstoelbreedte neemt met 3,8 cm toe
- Raadpleeg voor meer informatie over het WC19 verankeringsysteem tijdens vervoer onze informatie folder INFMANU3658

De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.



QUANTUM REHAB®

Castricummer Werf 26
1901 RW Castricum
Netherlands

Tel: +31 251 377 577
Fax: +31 251 377 580
www.pridemobility.com



— LIVE YOUR BEST! —