

# Modern Ontworpen voor **Krachtige Prestaties** en Uitzonderlijke Stijl



Victory® XL 140  
getoond met optionele  
kussen-top zetel

**VICTORY** *XL 140*

4-Wiel Scooter



De **Victory® XL 140** is de ultieme mix van kracht en precisie en zit vol toepassingen van hoge kwaliteit, zoals volledige vering, platte profielbanden en een hydraulisch rem systeem. De Victory XL 140 kenmerkt een glanzende, agressieve stijl en een weelde aan standaard luxe zoals een doorlopend delta stuur en LED verlichting. Dit maakt de Victory XL 140 de ultieme scooter voor buitenshuis.



Volledige Vering

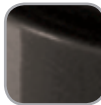
PRIDE® **MOBILITY** SCOOTERS  
LIVE YOUR BEST®

| [pridemobility.eu](http://pridemobility.eu) |



## Specificaties

4W: SC714 (20KM/H)

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale belasting                          | 181 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximum snelheid <sup>1</sup>               | Tot 20 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bodemvrijheid <sup>2</sup>                  | 13,33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Draaicirkel <sup>2</sup>                    | 210,8 cm (rechts) / 208,3 cm (links)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lengte <sup>2</sup>                         | 142,8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breedte <sup>2</sup>                        | 69,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Voorbanden                                  | 10 cm x 33 cm (4" x 13") (pneumatisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Achterbanden                                | 10 cm x 33 cm (4" x 13") (pneumatisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vering                                      | Voor en achter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actieradius volle batterijen <sup>1,5</sup> | 100 AH Batterijen: Standard: Tot 46,57 km<br>Optioneel: Tot 42,18 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Totaal gewicht zonder batterijen            | 117,70 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zwaarste stuk, indien gedemonteerd          | Geheel frame: 93,21 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Standaard stoel                             | Type: Inklapbare platte stoel<br>Gewicht: 21,77 kg<br>Materiaal: Zwart vinyl<br>Afmeting: breedte - 49,53 cm<br>diepte - 44,45 cm<br>hoogte - 47 cm                                                                                                                                                                                                                     |
| Aandrijving                                 | Achterwiel aandrijving, gesloten differentieel, 24-volt DC motor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dubbel Rem Systeem                          | Regeneratief en elektromechanisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Batterijen <sup>3</sup>                     | 2 (12 V)<br>Grootte: Groep 31 (100 AH)<br>Gewicht <sup>4</sup> : 27,44 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Accu lader                                  | 8-amp, buitenboord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kleuren                                     |  Rood  Blauw  Zwart  Zilver |

## Kenmerken

- Volledige vering voor optimaal gebruik
- Gesloten hydraulische remmen
- Grote 33 cm (13") pneumatische banden voor optimale prestaties buitenshuis
- Volledig verlichtingspakket, inclusief richtingaanwijzers, koplamp en remlichten
- Delta stuur met doorlopende handvaten
- Eenvoudig toegankelijke vastbind punten (voor het transport van onbemande scooter)
- Standaard achteruitkijkspiegel

## Optioneel

- Voorste schild
- Kussen-top zetel
- Dubbele krukhouders
- Zuurstoftank houder
- Achtermandje
- Extra achteruitkijkspiegel

<sup>1</sup> Varieert door het gewicht van de gebruiker, de soort ondergrond, accu sterkte (Ah), accu capaciteit, accu conditie, en de conditie van de banden. Deze specificatie kan onderhevig zijn aan een verschil van (+/- 10%).

<sup>2</sup> Door fabrieksinstellingen en continue product verbetering, kan deze specificatie verschillen met (+ of - 3%).

<sup>3</sup> AGM of Gel-Cell type vereist.

<sup>4</sup> Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

<sup>5</sup> Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van geen theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

**Opmerking: Alle specificaties kunnen gewijzigd worden zonder kennisgeving.** De inhoud van deze publicatie is correct op het moment van uitgave. Op grond van verplichtingen van de fabrikant voor voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen behoudt Pride zich het recht voor om specificaties te veranderen zonder voorafgaande aankondiging. De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk.

Theoretisch bereik wordt berekend onder testomstandigheden volgens de Europese normen. Werkelijk bereik bij normaal gebruik hangt af van vele factoren, waaronder de conditie van het voertuig en de accu's, het gewicht van de bestuurder, de juiste bandenspanning, omgevingstemperatuur en de verloop en het oppervlak van de weg of de stoep. De vermelde afmetingen zijn alleen voor stroombasis. De totale metingen zullen variëren op basis van zit- en toebehoren.