

Het is een **nieuw tijdperk** in de Power Mobility...



De Jazzy Air® is een nieuw tijdperk in de Power mobiliteit. Het is sociale mobiliteit. Of het nu thuis is of in de stad, de unieke aantrekkingskracht van Jazzy Air zal uw zelfstandigheid en sociale vertrouwen in stijl verheffen.

- **Verhoogt** in slechts **16 seconden** tot de primaire stahoogte positie en maakt het mogelijk sneller toegang te hebben tot uw omgeving.
- rijd **veilig 5,6 km/h** in verhoogde positie, zodat u om te socialiseren met anderen kunt communiceren onder stapvoets rijden.
- **Gepatenteerde Active-Trac®** vering zorgt voor **maximale stabiliteit** bij zowel verhoogde als niet-verhoogde posities.

Ontvanger van:



Het is **sociale** mobiliteit.™

Pride®
Mobility Products BV

Jazzy
air®

Specificaties

Maximale belasting	136 kg
Maximum snelheid ¹	Tot 6,44 km/h (niet-verhoogde positie) Tot 5,6 km/h (verhoogde positie)
Bodemvrijheid ²	6,15 cm op voetplaat 2,54 cm bij motorsteun
Hoge-Rug zitting-tot-vloer afstand	58,42 cm - 83,57 cm
Draaicirkel ²	48,3 cm
Overall Size ^{2,6}	Length: 110 cm Met voet plateau; 98 cm Zonder voet plateau Width: 59,5 cm Aan de wielen 65 cm met armleuningen
Beschikbare Elektronica	PG VR2
Aandrijfwielen	10" Vrij vlak
Zwenkwielen	6" Vrij vlak
Vering	Active-Trac® w/ Mid-Wheel 6® Technology
Bereik per lading ^{1,4}	Tot 24,6 km w/ U1 batterijen Tot 29,64 km w/ 40 Ah batterijen
Gewicht per eenheid ⁵	Basis: 82 kg (complete montage zonder batterijen) Batterijen: U1-11,1 kg 40 Ah-14,6 kg
Aandrijving	Twee-motoren, Mid-Wheel-6 drive
Rem Systeem	Remmen(elektronisch, elektromechanisch en regeneratief)
Batterijen ³	(2) 12 V, U1 (2) 40 Ah
Accu lader	3.5A, buitenboord
Maximaal toelaatbare Helling	6°
Maximale hoek Capaciteit	6°
Maximum Klimcapaciteit per Obstakel (Oplopend/Afl opend)	Onderste stand: 5,6 cm Verhoogde positie: 4,6 cm
Garantie	2-jaar

¹ De topsnelheid en actieradius met volle batterijen hangen af van het gewicht van de gebruiker, het begane terrein, de batterijgesteldheid en de bandendruk dit wijkt 5-10% af.

² Wegens voortdurende verbeteringen en ontwikkelingen kunnen deze specificaties worden bijgesteld met + of -3%. Genoemde afmetingen hebben alleen betrekking tot de power base. Totale afmetingen kunnen variëren gebaseerd op zittingen en accessoires.

³ AGM- of gelcetype vereist. Zie "Accu's en het laden".

⁴ Getest overeenkomstig ANSI/RESNA, WC Vol 2, Sectie 4 & ISO 7176-4 richtlijnen. De resultaten zijn afgeleid van een theoretische berekening gebaseerd op batterij specificaties en aandrijflijn prestatie. De testen zijn uitgevoerd onder maximum gewicht.

⁵ Batterij gewicht kan variëren per fabrikant.

⁶ De vermelde maten gelden uitsluitend voor het elektrische onderstel. De totale afmetingen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de gekozen zitting en toebehoren.

LET OP: Dit product voldoet aan alle geldende ANSI/RESNA, ISO 7176-serie, en EN12184 normen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

Pride[®]
Mobility Products BV

Pride Mobility Products Europe BV
De Zwaan 3
1601 MS Enkhuizen
Netherlands

Tel: +31 (0)85-0408630 • Fax: +31 (0)85-0430039 • pridemobility.eu




Kenmerken

- Het bereiken van 25,4 cm van elektrisch verstelbare zithoogte in 16 seconden
- Hogere of lagere zithoogte terwijl u onderweg bent met de toets "Air" of PG VR2 joystick controller
- Zitting en geïntegreerde voetplaat ontwerp zorgt voor maximaal comfort in Zowelverhoogde als niet verhoogde posities
- Hoek verstelbare voetplaat met drie verstelbare hoogtes
- Keuze van 41 x 41 cm, 46 x 46 cm en 51 x 51 cm voorgevormde hoge rug verstelbare sportstoel
- Hoek, in hoogte en diepte verstelbare armleuning
- Heldere LED-verlichting
- 152 cm heupgordel

Accessoires

- achtermand
- Weer cover
- Bekerhouder

Beschikbare kleuren

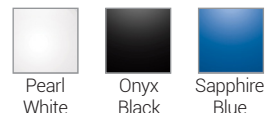

Opties

- Veiligheidsgordel: 127 cm, 178 cm, 203 cm, 229 cm
- PGGC programmeur

Bevoegde Pride leverancier

